


Össur Prosthetic Solutions

2025

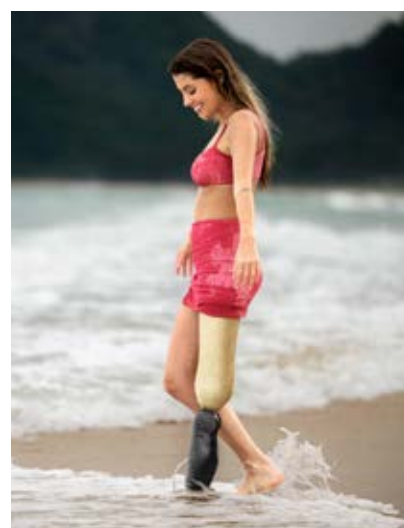

ÖSSUR® PROSTHETIC SOLUTIONS

HIGH QUALITY, HIGH PERFORMANCE PRODUCTS... FOR A LIFE WITHOUT LIMITATIONS



För Össur är *Life Without Limitations* mer än bara en slogan – det har varit vår passion i mer än femtio år. Många av våra produkter är utvecklade av amputerade för amputerade och vi fokuserar ständigt på ny innovation som hjälper protesanvändare att leva ett liv utan begränsningar.

BEPRÖVAD

Klassisk design är bestående men kan fortfarande förbättras. Vi jobbar kontinuerligt på att uppdatera och vässa våra befintliga proteslösningar. Össurs banbrytande proteslösningar förbättras och uppdateras ständigt för att garantera optimal prestanda, ett arv som vi fått att förvalta från våra uppfinnare och företagsgrundare Össur Kristinsson, Hans Mauch, Van Phillips och Finn Gramnäs.

PÅLITLIG

Beprövad teknik, evidensbaserad design och utmärkt funktion – med Össurs urval av produktlösningar för övre och undre extremiteter, får du alla tre. Samtliga enkla att prova ut och använda och som innebär en proteslösning du kan lita på.

SÄKER

Össurs produkter är testade, förbättrade och testade på nytt, om och om igen. Med våra väletablerade produktkombinationer får protesanvändarna en trygg och högpresterande lösning.

DU OCH ÖSSUR – ETT FRAMGÅNGSRIKT PARTNERSKAP

Du känner dina protesanvändare och vet vad de behöver. Vi varken *kan* eller *vill* försöka tala om för dig hur du ska sköta ditt jobb. Däremot tänker vi göra allt vi kan för att ge dig tillgång till rätt produkter och bra support.

Vi är knutna till sjukgymnaster som är specialiserade på gångträning med våra produkter och vår kliniska supportfunktion hjälper mer än gärna till för att vi tillsammans med er ska nå så framgångsrika resultat som möjligt.

IMPACT LEVELS

LÅG

Dagliga aktiviteter som omfattar lugn, jämn gång med gånghjälpmedel.
Exempel: Förflyttning i och runt hemmet.



MEDEL

Dagliga aktiviteter som omfattar normal gång med förmåga att variera gånghastighet eller gångmönster.
Exempel: Gå till affären, "självssäker" gång utomhus.



HÖG

Dagliga aktiviteter som omfattar snabb gång eller joggning.
Exempel: Tunga lyft, lättare kroppsarbete och motionsidrott.



EXTREM

Aktiviteter som omfattar löpning, friidrott, sprint och långdistanslöpning.



ÖSSUR® PROSTHETIC SOLUTIONS

ICEROSS® LINERS

Iceross står för **Icelandic Roll-On Silicone Socket**. Iceross-linern utvecklades av Össur Kristinsson, själv utbildad ortopedingenjör och protesanvändare, och linern togs fram som ett alternativ till andra, mer konventionella suspensionsmetoder. Iceross skyddar huden och ger förbättrad komfort genom att minska trycktopparna i proteshylsan och eliminera rörelse mellan proteshylsa och stump.

Utvecklingen av Iceross silikonliners har gått i en rasande fart med nya, unika suspensionsalternativ, material-sammansättningar och hudvårdande egenskaper. Det har möjliggjort att vi idag kan erbjuda lösningar som tillgodoser både ortopedingenjörers och protesanvändares individuella behov och önskemål.



Össur Kristinsson

VARFÖR ICEROSS?

KOMFORT

Våra Iceross-liners är uteslutande tillverkade i silikonmaterial med varierande hårdhetsgrad. Silikon har länge använts inom det medicinska området på grund av dess fördelaktiga egenskaper. Silikonmaterialet skyddar beniga och känsliga områden på stumpen, har hög elasticitet, vilket gör att materialet anpassar sig väl efter stumpens form, och har hög rivhållfasthet, vilket ökar hållbarheten.

SKYDD

Iceross har designats för att ge en funktion liknande den i en kompressionsstrumpa; den ska både förbättra blodcirkulationen och hålla svullnaden i schack. Iceross-linern skyddar också huden och områden med nybildad eller känslig ärrvävnad genom att minska potentiella, skadliga skjuvkrafter.

SUSPENSION

Med Iceross-liners kan du välja olika suspensionsmetoder; Iceross Seal-In, Iceross Seal-In X Locking, Cushion och Locking. Allt för att du ska hitta en liner som passar just dina patienters behov.

TOTAL KNEE®

Necessity is the mother of invention: Total Knee uppfanns av en svensk uppfinnare, Finn Gramnäs. Han var missnöjd med den tunga och otympliga protes som hans 6-åriga dotter erbjöds 1986 och bestämde sig helt enkelt för att, hemma i sitt egna garage, själv uppfinna en smartare proteslösning. Världens kanske yngsta FoU-specialist, Lisa Gramnäs, hjälpte sin pappa att finjustera tusentals prototyper för Total Knee genom åren.



Finn & Lisa Gramnäs

VARFÖR TOTAL KNEE?

Total Knee erbjuder stötdämpning, komfort och ett naturligt gångmönster. Den 7-axliga konstruktionen bidrar till god säkerhet genom ökad markfrigång och en stabil låsning vid hälisättning i full extension. Svingfaskontrollen (ett 3-stegs hydraulsystem med mekanisk flexionsbegränsare) möjliggör gång i olika hastigheter med bevarad symmetri. Dess polycentriska design imiterar det anatomiska knäets rörelse, och justerbara "stance-flex bumpers" fungerar som stötdämpare och simulerar den böjning som uppstår i ett anatomiskt knä när du går eller springer.

ÖSSUR® PROSTHETIC SOLUTIONS

MAUCH KNEE®

Hans Mauch var en tysk vetenskapsman och ingenjör med fascination för området rehabiliterande medicin som i slutet av 50-talet bestämde sig för att helhjärtat ägna sig åt protesutveckling. Utifrån de studier som då hade publicerats, studier sponsrade av America's Veterans Administration, samarbetade han med forskarkollegan Ulrich Henschke för att ta fram och designa ett hydrauliskt knäsystem - Mauch.



Hans Mauch

VARFÖR MAUCH KNEE?

Mauchs progressivt designade hydrauliska system ger amputerade ett mindre ansträngande och mer kontrollerat sätt att förflytta sig på i varierande terräng och i sportaktiviteter. Mauch Knee ger möjlighet till en följsam och naturlig gång och erbjuder hög flexibilitet för en mer aktiv livsstil. Protesknäleden möjliggör alltifrån löpning till gång steg över steg nedför trappor.

FLEX-FOOT®

Flex-Foot introducerades för första gången 1984 av Van Phillips, själv protesanvändare, forskande ortoped-ingenjör och uppfinnare. Två kritiska genombrott ledde till att Flex-Foot kom till att revolutionera andra amputerades vardag; användandet av den energilagring och energiåtergivning som är en inneboende funktion i Flex-Foots patenterade kolfiberdesign, och användandet av den vertikala stötdämpning som erhålls och som möjliggör en mer naturlig gång samt skyddar det icke-amputerade benet och resterande leder i den amputerade extremiteten från hårda stötar.



Van Phillips

VARFÖR FLEX-FOOT?

Flex-Foot innefattar ett brett sortiment av protesfötter, där olika funktioner erbjuds för att matcha dina patienters individuella behov. Vilken modell du än väljer, är vi trygga med att våra protesfötter erbjuder betydande fördelar jämfört med många andra konventionella protesfötter. Tjugo år av vetenskaplig materialforskning har lett till att vi idag kan presentera protesfötter med svårslagen design, något som gör Össurs protesfötter till det naturliga första-handsvalet om du söker hållbarhet, komfort och prestanda.

ÖSSUR ACADEMY ONLINE eLEARNING – ÖSSURS KUNSKAPSPORTAL

Som en del i Össurs arbete med att erbjuda utbildningsstöd och kurser för en djupare förståelse för våra produktlösningar, har vi satt upp en kunskapsportal:

Össur Academy Online eLearning.

Portalen ger dig tillgång till kostnadsfria, digitala kurser "24/7" så att du själv kan förkovra dig, när så passar, i våra ortos- och proteslösningar.

Portalen hittar du på www.ossur.se alternativt genom att läsa in QR-koden under bilden.

För ytterligare klinisk information eller handledning vid utprovning/tillpassning, se även vår **Össur Academy YouTube-kanal**. QR-kod under bilden.



Össur Academy
Online eLearning



Össur Academy
Channel on YouTube

ÖSSUR PROSTHETICS PRODUCT CATALOG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖSSUR LINERS	10
ICEROSS® TRANSTIBIAL LINERS BY ÖSSUR	14
ICEROSS SEAL-IN® X	16
ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING	18
ICEROSS SEAL-IN® V WAVE	20
ICEROSS SEAL-IN® X5 WAVE	21
ICEROSS SEAL-IN® X5	22
ICEROSS DERMO SEAL-IN®	23
ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING WAVE	24
ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING	25
ICEROSS DERMO® LOCKING WAVE	26
ICEROSS DERMO® LOCKING	28
ICEROSS DERMO® UNIFORM LOCKING	29
ICEROSS COMFORT® LOCKING WAVE	30
ICEROSS COMFORT® LOCKING	31
ICEROSS® ORIGINAL LOCKING	32
ICEROSS® SPORT LOCKING	33
RELAX™ LOCKING	34
ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION	35
ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION WAVE	36
ICEROSS DERMO® CUSHION	37
ICEROSS DERMO® CUSHION WAVE	38
ICEROSS DERMO® UNIFORM CUSHION	39
ICEROSS COMFORT® CUSHION	40
ICEROSS® ACTIVA CUSHION	41
RELAX™ CUSHION	42
ICEFORM® LOCKING & CUSHION	43
ICEROSS® SLEEVE	44
ICEFORM® SLEEVE	45
GENU SLEEVE	46
ICEROSS® TRANSFEMORAL LINERS BY ÖSSUR	47
ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING TF	49
ICEROSS SEAL-IN® X TF	51
ICEROSS SEAL-IN® X5 TF	53
AEROFIT SEAL-IN®	54
ICEROSS SEAL-IN® TRANSFEMORAL	55
4SEAL CLASSIC™	56
ICEROSS® TRANSFEMORAL LOCKING	58
AKOS™	59
RELAX™ TRANSFEMORAL	61
ICEROSS® UPPER-X LOCKING	63
TILLBEHÖR	64
ICEROSS® DISTAL CUP	64
ICEROSS® PADS	64

ÖSSUR PROSTHETICS PRODUCT CATALOG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SILICONE ADHESIVE	64
LUBRICANT SPRAY	65
LINER SPRAY PEN	65
WAVE SCISSORS	65
ICEROSS® CURVEMASTER	65
LINER DRYING STAND	65
PROSTHETIC BAGS	66
PROTESSTRUMPOR	67
ICEROSS SEAL-IN® SOCKS	67
ICEROSS® INTERFACE SHEATH	67
ICEROSS® SOCKS – 2- & 4-PLY	67
KNIT-RITE SOFT-SOCKS®	68
COMFORT SCS.....	69
RELAX NIGHT CARE.....	70
VOLUME COMPENSATION SOCK.....	71
MATERIAL	72
FLEX EVA.....	72
KOMPRESSIONSTRIKÅ	72
BOMULLSTRIKÅSLANG	72
PVA-FOLIE 100.....	72
ÖSSUR SOCKETS	73
DIRECT SOCKET	75
DIRECT SOCKET TT	77
ICEROSS® DIRECT CASTING LINER TT	79
DIRECT SOCKET TF	80
AEROFIT® SOCKET	82
AEROFIT® TOOL KIT	85
ICEROSS® DIRECT CASTING LINER TF	86
DIRECT SOCKET TOOL KIT	87
DIRECT SOCKET VERKTYG OCH RESERVDELAR.....	88
DIRECT SOCKET MATERIAL	89
CONNECT® TF	93
PRESSURE PADS.....	96
ÖSSUR KNEES	99
POWER KNEE™	102
NAVII®	105
RHEO KNEE®	110
RHEO KNEE® XC	114
MAUCH® KNEE.....	118
MAUCH® KNEE PLUS.....	119
TOTAL KNEE® 1900.....	121
TOTAL KNEE® 2000.....	124
TOTAL KNEE® 2100.....	127

ÖSSUR PROSTHETICS PRODUCT CATALOG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LOCKING KNEE	130
BALANCE™ KNEE OFM1	131
BALANCE™ KNEE OFM2	133
OHP3 KNEE™	135
OP4 KNEE™	137
OP5 KNEE™	138
PASO KNEE™	140
ÖSSUR FEET	143
UNITY® VACUUM SUSPENSION SYSTEM	145
BALANCE™ FOOT S	146
BALANCE™ FOOT S TORSION	150
FLEX-FOOT® BALANCE D/P FLEXION™	154
FLEX-FOOT® BALANCE	158
BALANCE™ FOOT J	163
FLEX-FOOT ASSURE®	168
PROPRIO FOOT®	174
PRO-FLEX® TERRA	179
PRO-FLEX® PIVOT	183
PRO-FLEX® XC	188
PRO-FLEX® XC TORSION	193
PRO-FLEX® ST	198
PRO-FLEX® MODULAR	203
PRO-FLEX® LP	206
PRO-FLEX® LP TORSION	211
PRO-FLEX® LP ALIGN	216
VARI-FLEX®	220
LP VARI-FLEX®	229
RE-FLEX ROTATE™	235
RE-FLEX SHOCK™	243
CHEETAH® XPLORE	252
FLEX-SYMES™	256
CHOPART	260
TILLBEHÖR – KOSMETIK	262
TILLBEHÖR – UNITY® RESERVDELAR	263
ÖSSUR SPORT SOLUTIONS	264
CHEETAH® KNEE	265
CHEETAH® XPANSE	267
CHEETAH® XCEL	270
CHEETAH® XCEED	275
FLEX-RUN™	278
FLEX-FOOT CHEETAH®	281
CHEETAH® XTREME	284
CHEETAH® XTEND	288

ÖSSUR PROSTHETICS PRODUCT CATALOG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖSSUR JUNIOR SOLUTIONS	292
ICEROSS STABILO® JUNIOR LOCKING WAVE	294
ICEROSS DERMO® JUNIOR LOCKING WAVE	295
VARI-FLEX® JUNIOR	296
FLEX-FOOT® JUNIOR	299
CHEETAH® JUNIOR	301
CHEETAH® XPLORE JUNIOR	303
FLEX-RUN™ JUNIOR	306
TOTAL KNEE® JUNIOR	308
JUNIOR ADAPTRAR – VIKTBEGRÄNSNING 45 KG	311
4-HÅLSADAPTRAR	311
S.A.C.H FOTADAPTER	311
RÖRADAPTRAR	311
JUNIOR ADAPTRAR – VIKTBEGRÄNSNING 60 KG	311
HYLSADAPTRAR	311
4-HÅLSADAPTRAR	312
RÖRADAPTER	312
ENKELADAPTRAR	312
PYRAMIDADAPTRAR	312
DUBBELADAPTRAR	312
ÖSSUR POST-OP SOLUTIONS	313
ÖSSUR RIGID DRESSING (ORD)	316
ICEROSS® POST-OP TT	317
ICEROSS® POST-OP TF	318
ÖSSUR ICELOCK® SERIES	319
ICELOCK® 100 SERIEN	321
ICELOCK® 200 SERIEN	322
ICELOCK® 300 SERIEN	326
ICELOCK® 400 SERIEN	327
ICELOCK® 500 SERIEN	329
VACU VALVE	329
ICELOCK® 544 SERIEN	330
ICELOCK® 562 HYBRID	333
ICELOCK® 600 SERIEN	334
ICELOCK® 700 SERIEN	338
ICELOCK® 850 HYBRID	340
ÖSSUR ADAPTERS	342
VIKTBEGRÄNSNING 100 KG	345
VIKTBEGRÄNSNING 125 KG	348
VIKTBEGRÄNSNING 136 KG	348
VIKTBEGRÄNSNING 166 KG	350
KNEE ROTATION ADAPTER	354
TORSION SHOCK ADAPTER	355

ÖSSUR PROSTHETICS PRODUCT CATALOG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖSSUR UPPER LIMB.....	356
NAKED PROSTHETICS®	357
MCPDRIVER®	357
THUMBDRIVER®	358
PIPDRIVER®	359
GRIPLOCK FINGER®	360
i-LIMB® – ÖVERSIKT	362
i-LIMB® QUANTUM	363
i-LIMB® ACCESS.....	365
i-LIMB®	367
ELEKTRODER	369
LADDARE & BATTERIER	371
RESERVDELAR.....	372
PROTESHANDSKAR	373
i-DIGITS® QUANTUM	378
i-DIGITS® ACCESS	379
i-DIGITS®	380
VIRTU-LIMB.....	382
DEMO-LIMB	383
LIVINGSKIN®	384
ÖSSUR SERVICES.....	386
FÖRETAGSINFORMATION	386
RETURER.....	386
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR.....	386
GARANTIER.....	387
NOTERINGAR	389

ÖSSUR LINERS

TRANSTIBIAL SOLUTIONS



SEAL-IN LINERS



SEAL-IN X LOCKING LINER



LOCKING LINERS



CUSHION LINERS



ÖSSUR LINERS

TRANSFEMORAL SOLUTIONS



ICEROSS SEAL-IN X TF

SEAL-IN LINERS

SEAL-IN X LOCKING LINER



ICEROSS SEAL-IN XS TF



4SEAL CLASSIC



ICEROSS SEAL-IN TRANSFEMORAL



AEROFIT SEAL-IN



ICEROSS SEAL-IN X LOCKING TF


LOCKING LINERS



ICEROSS TRANSFEMORAL
LOCKING



AKOS LINER

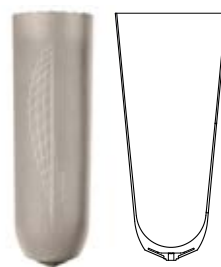

RELAX
TRANSFEMORAL

UPPER EXTREMITY SOLUTIONS



ICEROSS UPPER-X
LOCKING

ÖSSUR LINERS

SUSPENSIONSMETODER

SEAL-IN X5

Fullständig lufttätet med hjälp av fem inbyggda tätningar som följer formen hos stumpen och proteshylsans innervägg.

- Rotationskontroll
- Minimerar pumpprörelse
- Vakuumsuspension utan sleeve



SEAL-IN X5

SEAL-IN V

Volymanpassade blad (Volume Adaptive Blades), integrerade i tätningsringen, anpassar sig efter stumpens dagliga volym- och formförändringar. Seal-In V-linern ger en tillförlitlig och bekväm vakuumsuspension – utan behov av sleeve.

- Vakuumsuspension utan sleeve
- Rotationskontroll



SEAL-IN V

SEAL-IN

Hypobaric Sealing Membran HSM™ optimerar suspension och komfort, samtidigt som det förenklar användningen i vardagen.

- Vakuumsuspension utan sleeve
- Lätt att ta på och av
- Förbättrad rotationskontroll jämfört med en Locking Liner



SEAL-IN

SEAL-IN X LOCKING

En hybridsuspension som kombinerar fördelarna med Seal-In-vakuumsuspension och en locking-suspension – för utmanande situationer.



SEAL-IN X LOCKING

SEAL-IN X

Flyttbar tätningsring som kan placeras för bästa möjliga komfort och suspension för varje enskild brukare.

- Passar bra till brukare med unikt formade och/eller känsliga stumpar
- Lätt att ta av och på
- Mycket god rotationskontroll
- Vakuumsuspension utan sleeve



SEAL-IN X

LOCKING

Erbjuder en säker, stabiliserande och komfortabel suspension. Används tillsammans med antingen snabbkoppling eller linkoppling.



LOCKING

CUSHION

Ett mjukt, extra tjockt lager silikon distalt skyddar stumpändan och gör så att silikonlinern formar sig väl till olika stumpformer.



CUSHION

4SEAL

Lufttätet med hjälp av 4 inbyggda tätningar.

- Försedd med "Easy Glide" för enklare av- och påtagning. Ingen spray eller dylikt behövs vid påtagning.
- Vakuumsuspension utan sleeve.



4SEAL

ÖSSUR LINERS

EGENSKAPER

STABILISERANDE DISTAL ÄNDE (MATRIX)

En integrerad distal förstärkning (matrix) tillåter radiell stretchning och begränsar vertikal stretchning, vilket ger ökad stabilitet och bättre hudkomfort.



STABILIZING MATRIX

TYGÖVERDRAG

Ett yttre tygöverdrag ger extremt motstånd mot slitage, styrka och hållbarhet, samtidigt som det tillåter radiell stretchning och erbjuder behaglig elasticitet.



FABRIC COVER

AKTIV HUDVÅRD

Dermasil® silikon innehåller Vaseline® och Aloe Vera vilket ger en automatisk återfuktning av huden med minskad risk för hudproblem.



ACTIVE SKIN CARE

2-SKIKTSKONSTRUKTION

Två silikondurometrar samverkar: det inre silikonlagret ger komfort och skydd för huden, medan det yttre silikonlagret ger stötdämpning och stabilitet.



DOUBLE DUROMETER

WAVE

Minskar trycket över patella och förbättrar rörligheten vid knäflexion genom en "dragspelskonstruktion".



WAVE

SILKESLEN INSIDA

Yta utformad med mikroteknik, för ökad hudkomfort.



SILKEN INNER SURFACE

TIBIAGUARD

Ett mjukt extra, tjockt lager silikon med Wave anteriort ger stötdämpning och skydd över tibia medan ett tunnare silikonlager posteriort ger ökad kontroll och proprioception.



TIBIAGUARD

KONISK

Ger en mer komfortabel och tätare passform vid koniskt formade stumpar. Den koniska formen är designad för att minska trycket på stumpan och förhindra att de proximala kanterna rullar ner.



CONICAL

UMBRELLAN

Umbrellan-material för avskärmning mot elektromagnetisk påverkan.



UMBRELLAN

EASY GLIDE

Ytskikt försett med Easy Glide-teknologi som underlättar på- och avtagning. Ingen spray eller dylikt behövs vid påtagning. Gör det även enkelt att rengöra linern.



EASY GLIDE



Video: Iceross Liner Range
Introduction | Classroom
Catch-up | Össur
9 min 18 sec

ICEROSS® TRANSTIBIAL LINERS BY ÖSSUR

Noggrant val av Iceross-liner krävs om brukaren ska få ut så mycket som möjligt av sin liner.
Beakta följande för att välja lämplig transtibial Iceross-liner:

1. Stumpens storlek
2. Brukarens aktivitetsnivå/impact level
3. Behov av stumpformsmatchning
4. Profil – standardliner eller konisk liner




Video: Liner Selection (transtibial)
43 sec

1. STORLEK



Böj knäet lätt och låt mjukdelarna hänga ner.

Mät omkretsen på amputationsstumpen 4 cm från den distala änden och gör en markering på huden. Mät stumpens omkrets vid markeringen. Måttbandet skall vara lagom åtdraget.

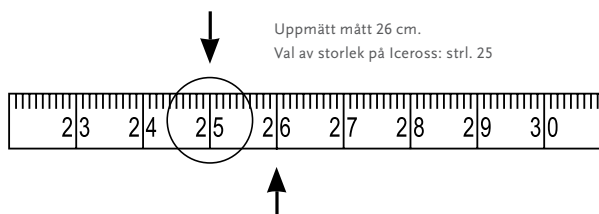

Omkretsmåttet som erhålls motsvarar storleken på Iceross-linern. Välj en liner av det uppmätta måttet. Om måttet hamnar *mellan* två storlekar, är den generella rekommendationen att välja storleken under. Välj inte en storlek större än uppmätt mått eller mer än *en* storlek under. T.ex. om det uppmätta måttet är 26 cm, välj Iceross stl 25.

ICEROSS LOCKING LINERS

Kombinationen av ett storleksanpassat paraply och en integrerad distal förstärkning i tyget (matrix) optimerar kraftfördelningen och minimerar pumpbrölsen. För att få ut bästa möjliga funktion av både paraply och matrix, är det viktigt att rätt storlek på linern väljs. Ett felaktigt val av linerstorlek kan orsaka obehag för brukaren med t.ex. svettning och minskad kontroll över protesen.

Vid storleksval av just Locking Liner, prova gärna både storleken under och över för att vara *riktigt* säker:

Rulla på linern och fäst en linkoppling distalt och dra sedan för att se vilken av de två storlekarna som stabiliserar bäst.

ICEROSS SEAL-IN LINERS

Vid användning av **Iceross Dermo Seal-In Liner**, är det viktigt att tättningsringen (Hypobaric Sealing Membran HSM™) ligger rätt spänd runt hela linern. När du valt liner enligt våra instruktioner, bedöm hur tättningsringen sitter, visuellt och manuellt, med hjälp av bilderna nedan. Dra fingret under kanten av tättningsringen runt hela linern för att bedöma spänningen och för att kontrollera att tättningsringen ligger uträdd. Bild 3 visar hur tättningsringen bör sitta för att ge optimal suspension.

I vissa fall kan en storlek mindre behöva väljas av Iceross Dermo Seal-In för att uppnå korrekt passform. Om inte optimal passform av Iceross Dermo Seal-In kan uppnås, rekommenderas Iceross Seal-In X med flyttbara tättningsringar.



1. FÖR LITEN STORLEK



2. FÖR STOR STORLEK



3. KORREKT STORLEK

Storleksrekommendationen ska ses som en vägledning. Det kan finnas tillfällen då andra alternativa storlekar kan behöva väljas.



Custom Made Seal-In Order form

ICEROSS® TRANSTIBIAL LINERS BY ÖSSUR

2. IMPACT LEVEL

Det är viktigt att beakta aktivitetsnivån vid val av liner. Impact level beskriver graden av belastning som linern utsätts för vid användning.

3. STUMPFORMSMATCHNING

Iceross-linern har en cylindrisk profil med en rundad distal ände, en design som passar väl ihop med de flesta stumpformer. Det finns dock tillfällen då stumpen har en så pass avvikande form att det inte är möjligt att erhålla en god passform/totalkontakt mellan hud och liner. **Iceross Pads** och **Iceross Distal Cup** är exempel på specifikt framtagna tillbehör som kan användas tillsammans med Iceross-linern för att modifiera profilen så att optimal passform erhålls. *Vid extrema fall; kontakta oss för vidare diskussion om en anpassad lösning.*

Bedömning av amputationsstumpens form:

- Om stumpens form är cylindrisk, behövs inga tillbehör.
- Om stumpens distala ände är kantig eller platt, bör Iceross Pad läggas in distalt för att säkerställa en god stumpformsmatchning mellan stump och Iceross-liner.


- Om stumpen har en konisk form, kan en Distal Cup användas tillsammans med Iceross-linern för att säkerställa en god stumpformsmatchning mellan stump och silikonliner. Distal Cup ser till så att stumpen får en mer cylindrisk form innan Iceross-linern rullas på. När Iceross-liner används tillsammans med Distal Cup, ska måttet för Iceross-linern tas med Distal Cup på.
- I vissa fall kan **Iceross Dermo Conical Locking Wave** vara ett alternativ, t.ex. för de låg- och medelaktiva transtibialt amputerade med konisk stumpform som prioriterar komfort och hudvård.
- Om stumpen har en päronformad distal ände (t.ex. som vid fotleds-exartikulation, Symes, Lisfranc, etc.), anses Iceross vara en kontraindikation. *Kontakta oss/ klinisk support för att hitta en lämplig lösning.*



4. VAL AV PROFIL: STANDARD LINER ELLER KONISK LINER

Mät stumpens omkrets ca 4 cm från distala änden och välj liner av rätt mått eller storleken under (y-axeln).

Mät stumpens omkrets ca 30 cm ovanför den distala änden och läs av angivet mått i tabellen nedan (x-axeln). Om skärningspunkten hamnar i ett mörkgrått fält, väljs en konisk liner. Om skärningspunkten hamnar i ett ljusgrått fält, väljs en standardliner.

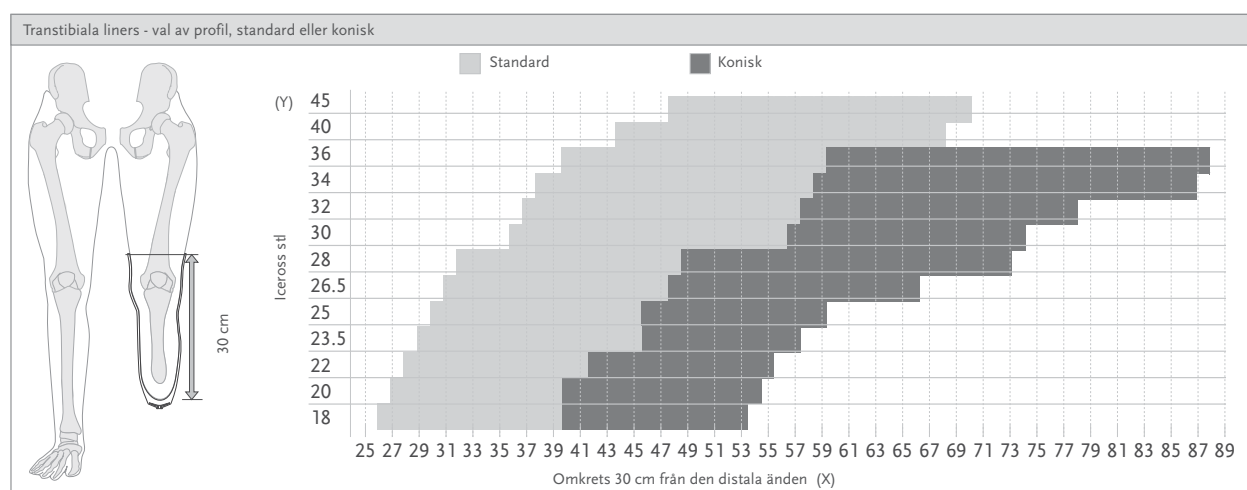

Obs! Guiden är bara en rekommendation och ska endast ses som ett stöd till ortopedingenjörens kliniska undersökning.

CUSTOM MATRIX - ANPASSAD ARMERING

Som standard har Iceross-linern en 10 cm lång armering (matrix). I vissa fall kan en annan längd på armeringen behövas för bästa funktion. En del Iceross-modeller kan specialbeställas med **armering (matrix) från 2 till 14 cm**: Mät avståndet från fibulahuvudet till distala änden på stumpen. Armeringen bör matcha detta mått. För väldigt korta stumprar bör armeringen vara kortare för att inte hindra knäflexion och för längre stumprar kan en längre armering krävas för att stabilisera mjukdelarna på bästa sätt. *Kontakta oss för råd!*



ICEROSS SEAL-IN® X



Rekommenderas för protesanvändare med unikt formade eller känsliga stumpar och/eller nedsatt handfunktion eller handstyrka.

Iceross Seal-In X-linern har en flyttbar tätningsring med en integrerad textildel för att underlätta på- och avtagning. Tätningsringen kan placeras för bästa möjliga komfort och suspension för varje enskild användare och kan även vid behov flyttas under dagens lopp för ökad komfort.

Tätningsringen finns i 3 olika utformanden:

- X-Classic
- X-Grip
- X-Volume

Tätningsring och liner beställs var för sig.

Iceross Seal-In X är lättare att vända ut och in och att ta på jämfört med andra Seal-In-liners. Dess sömlösa textil följer stumpens form väl och har god eftergivlighet över knäet vilket minimerar trycket över patella vid knäflexion.

Utan tätningsring kan linern användas som en vanlig Cushion liner och är då fullt utbytar - i en och samma proteshylsa - med andra Iceross 3 mm/6 mm Cushion liners.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:


- Icelock® Vakuumentil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumentil 544 #L-544621 för Seal-In eller #L-544611 för Unity.



Video: Iceross Seal-In Range Classroom Catch-up | Össur 7 min 42 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*.
Profil:	3 mm, 6 mm
Storlekar på tätningsring:	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65

*Stl 40 endast tillgänglig i 3 mm.

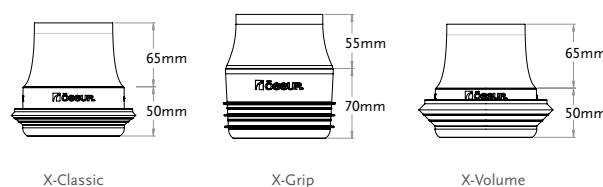

*Obs! Tätningsringarna är försedda med en antifrikionsyta, Easy Glide, som underlättar påtagning och avtagning av proteshylsan, **utan användning av glidspray.**

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



EASY GLIDE*

* Easy Glide gäller endast tätningsringarna

ICEROSS SEAL-IN X – LINER

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-4443XX	Iceross Seal-In X 3 mm	Liner. Tätningsring beställs separat.
I-4446XX	Iceross Seal-In X 6 mm	Liner. Tätningsring beställs separat.

XX = storlek

ICEROSS SEAL-IN® X

VAL AV STORLEK PÅ TÄTNINGSRING

En av följande metoder kan användas för att bestämma den korrekta storleken på tätningsringen:

Metod 1: Tätningsringskit

Den föredragna metoden för att bestämma rätt enhetsstorlek är genom att använda ett tätningsringskit. För art.nr. på valbara kit, se nedan.

1. Placera en tätningsring från kitet vid önskad plats **utanpå linern**. Ta med i beräkningen rekommenderat avstånd mellan hylsans lägsta kant och den översta tätningsläppen (se Fig. 1).
2. Kontrollera så att det inte uppstår någon deformation på enheten eller stumpen. Tätningsringen bör sitta säkert på plats utan att trycka för hårt.
3. Om tätningsringen inte sitter korrekt på önskad plats, välj en annan storlek eller flytta tätningsringen tills du uppnår önskat resultat.

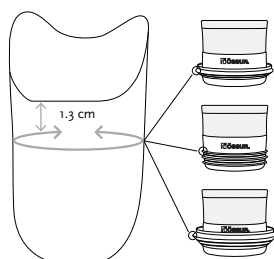


Fig. 1.

OBS! Säkerställ att avståndet mellan proteshylsans lägsta kant och tätningsringens översta silikonkant är minst 1,3 cm.

Metod 2: Omkretsmått direkt på huden

Mät omkretsen (i cm) på önskad plats **direkt på huden**.


Se diagrammet nedan för att uppskatta rätt storlek på tätningsringen.

Förklaring till diagrammet:

Y = Stumpens omkretsmått taget direkt på huden (cm)

X = Storlek på tätningsringen (cm)


A = Åtsittande passform. B = Lös passform.

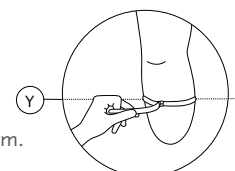

Exempel:

- Omkrets på 40 cm resulterar i tätningsringstorlek 44 eller 47.
- Omkrets på 26 cm resulterar i tätningsringstorlek 28 eller 30.

Diagrammet gäller för liner med 3 mm profil. Vid val av liner med 6 mm profil, bör möjligheten att gå upp ytterligare en storlek på tätningsringen beaktas.

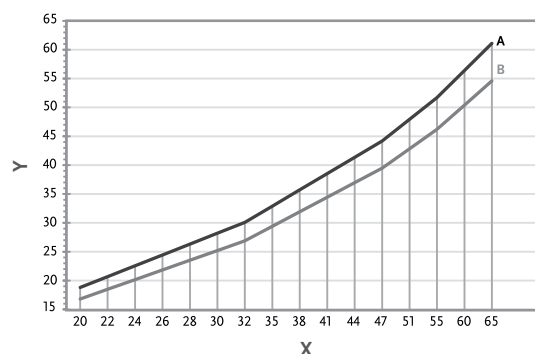

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlek	Minimilängd*
16-23,5	11 cm
25-30	12 cm
32-36	13 cm
40	14 cm

*Amputationsstumpens längd mäts från mitten på patellarsenan till den distala stumpändan.



IFU: Seal-In X Seals

ICEROSS SEAL-IN X - TÄTNINGSRINGAR

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-SXC0XX	Iceross Seal-In X-Classic	Seal-In X-Classic tätningsring
I-SXG0XX	Iceross Seal-In X-Grip	Seal-In X-Grip tätningsring
I-SXV0XX	Iceross Seal-In X-Volume	Seal-In X-Volume tätningsring
Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-RXC001	Seal-In X-Classic Kit 26-51	10 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXC004	Seal-In X-Classic Kit 20-65	16 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXG001	Seal-In X-Grip Kit 26-51	10 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXG004	Seal-In X-Grip Kit 20-65	16 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXV001	Seal-In X-Volume Kit 26-51	10 Seal-In X-Volume tätningsringar
I-RXV004	Seal-In X-Volume Kit 20-65	16 Seal-In X-Volume tätningsringar

OBS!

Tätningsringarna får **inte** användas av protesanvändare med drastiska volymförändringar inom en kort tidsperiod.

- **Grip:** Volymförändringar som överstiger 3 ply.
- **Classic:** Volymförändringar som överstiger 6 ply.
- **Volume:** Volymförändringar som överstiger 10 ply.

Tätningsringarna får endast användas i kombination med en lämplig liner från Iceross Seal-In X-familjen.

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING



Rekommenderas för låg- till högaktiva protesanvändare. Linern ger en överlägsen funktion genom att kombinera fördelarna med locking-suspension och fördelarna med Seal-In.

Egenskaper:

- Tillverkad i mjuk DermoGel® -silikon
- Funktionstyg utan sömmar för enklare knäflexion
- Stabiliserande matrix

Kompatibel med Össurs flyttbara Seal-In-tättningsringar:


- X-Classic
- X-Grip
- X-Volume

Tättningsring och liner beställs var för sig.

Liner används med en lufttät proteshylsa och Icelock 562 Hybrid

- Icelock 562 Hybrid till Unity #L-562000
- Icelock 562 Hybrid till passivt vakuum #L-562500
- Icelock 562 Hybrid till Direct Socket #562400
- Icelock 562 Hybrid passivt vakuum till Direct Socket #562410

Kombinera Seal-In-teknologin med Unity-vakuumsystemet för stabilisering av volymfluktuationer och bekväm passform av hylsan under hela dagen.

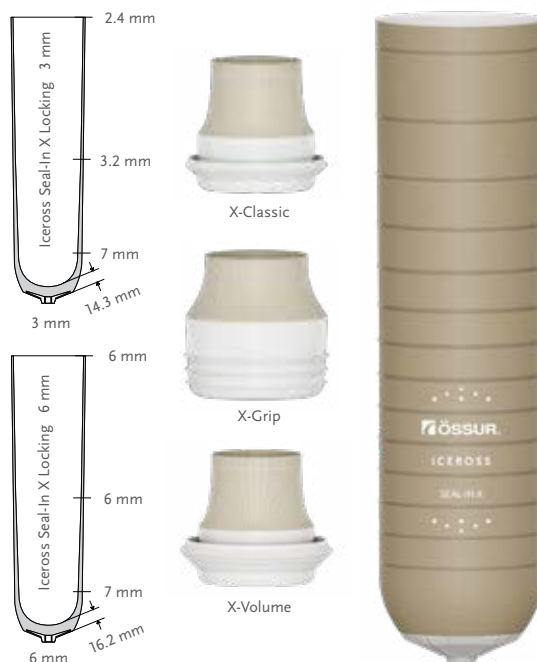


White paper:
Iceross Seal-In X Locking



Video: Iceross Seal-In Range
Classroom Catch-up | Ossur
7 min 42 sek.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45
Profil:	3 mm och 6 mm
Storlekar på tättningsring:	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65
Matrix	10 cm

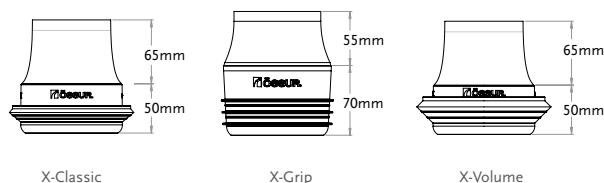

*Obs! Tättningsringarna är försedda med en antifriktionsyta, Easy Glide, som underlättar påtagning och avtagning av proteshylsan, utan användning av glidspray.

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X LOCKING

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



EASY GLIDE*



STABILIZING MATRIX

* Easy Glide gäller endast tättningsringarna

ICEROSS SEAL-IN X LOCKING – LINER

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-SXL3XX	Iceross Seal-In X Locking 3 mm	Liner. Tättningsring beställs separat.
I-SXL6XX	Iceross Seal-In X Locking 6 mm	Liner. Tättningsring beställs separat.

XX = storlek

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING

VAL AV STORLEK PÅ TÄTNINGSRING

En av följande metoder kan användas för att bestämma den korrekta storleken på tätningsringen:

Metod 1: Tätningsringskit

Den föredragna metoden för att bestämma rätt enhetsstorlek är genom att använda ett tätningsringskit. För art.nr. på valbara kit, se nedan.

1. Placera en tätningsring från kitet vid önskad plats **utanpå linern**. Ta med i beräkningen rekommenderat avstånd mellan hylsans lägsta kant och den översta tätningsläppen (se Fig. 1).
2. Kontrollera så att det inte uppstår någon deformation på enheten eller stumpen. Tätningsringen bör sitta säkert på plats utan att trycka för hårt.
3. Om tätningsringen inte sitter korrekt på önskad plats, välj en annan storlek eller flytta tätningsringen tills du uppnår önskat resultat.

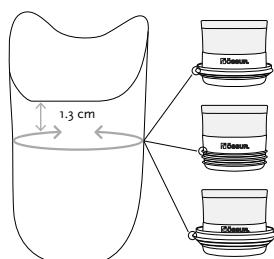


Fig. 1.

OBS! Säkerställ att avståndet mellan proteshylsans lägsta kant och tätningsringens översta silikonkant är minst 1,3 cm.

Metod 2: Omkretsmått direkt på huden

Mät omkretsen (i cm) på önskad plats **direkt på huden**.


Se diagrammet nedan för att uppskatta rätt storlek på tätningsringen.

Förklaring till diagrammet:

Y = Stumpens omkretsmått taget direkt på huden (cm)

X = Storlek på tätningsringen (cm)


A = Åtsittande passform. B = Lös passform.

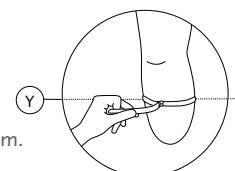

Exempel:

- Omkrets på 40 cm resulterar i tätningsringstorlek 44 eller 47.
- Omkrets på 26 cm resulterar i tätningsringstorlek 28 eller 30.

Diagrammet gäller för liner med 3 mm profil. Vid val av liner med 6 mm profil, bör möjligheten att gå upp ytterligare en storlek på tätningsringen beaktas.

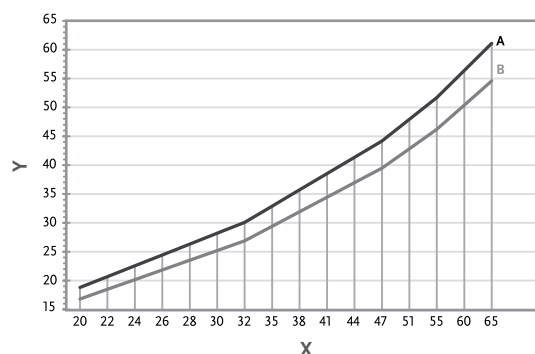

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlek	Minimilängd*
16-23,5	11 cm
25-30	12 cm
32-36	13 cm
40	14 cm

*Amputationsstumpens längd mäts från mitten på patellarsenan till den distala stumpändan.



IFU: Seal-In X Seals

ICEROSS SEAL-IN X LOCKING - TÄTNINGSRINGAR

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-SXC0XX	Iceross Seal-In X-Classic	Seal-In X-Classic tätningsring
I-SXG0XX	Iceross Seal-In X-Grip	Seal-In X-Grip tätningsring
I-SXV0XX	Iceross Seal-In X-Volume	Seal-In X-Volume tätningsring
Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-RXC001	Seal-In X-Classic Kit 26-51	10 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXC004	Seal-In X-Classic Kit 20-65	16 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXG001	Seal-In X-Grip Kit 26-51	10 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXG004	Seal-In X-Grip Kit 20-65	16 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXV001	Seal-In X-Volume Kit 26-51	10 Seal-In X-Volume tätningsringar
I-RXV004	Seal-In X-Volume Kit 20-65	16 Seal-In X-Volume tätningsringar

OBS!

Tätningsringarna får **inte** användas av protesanvändare med drastiska volymförändringar inom en kort tidsperiod.

- **Grip:** Volymförändringar som överstiger 3 ply.
- **Classic:** Volymförändringar som överstiger 6 ply.
- **Volume:** Volymförändringar som överstiger 10 ply.

Tätningsringarna får endast användas i kombination med en lämplig liner från Iceross Seal-In X-familjen.

ICEROSS SEAL-IN® V WAVE



Rekommenderas för protesanvändare som redan gått igenom den initiala volym- och formanpassningen. Kompenserar för volymförändringar på upp till 8 ply.

Vakuumsuspension utan sleeve som ger protesanvändaren mycket bra stabilitet, rotationskontroll och komfort.

Iceross Seal-In V finns i två modeller - Standard och High Profile. På Iceross Seal-In V HP (High Profile) sitter tätningsringen placerad ca 30 mm högre upp än på standardlinern för bättre stabilitet- och rotationskontroll åt protesanvändare med långa underbensstumpar.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544621 för Seal-In eller #L-544611 för Unity.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
Profil:	3 mm Wave



Video: Casting & Modification for Seal-In V & Unity Test Fitting Procedure - 7 min 28 sec

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN V

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE




WAVE

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlek	Minimilängd på amputationsstumpen*	
	Standard	High Profile
18-20	9 cm	13 cm
21-25	10 cm	14 cm
26-30	11 cm	15 cm
31-36	12 cm	15 cm

*Amputationsstumpens längd mäts från mitten på patellarsenan till den distala stumpändan. Stumpformer och trimlinjepreferenser varierar, minimilängden för stumpen i tabellen ovan är endast ungefärliga.

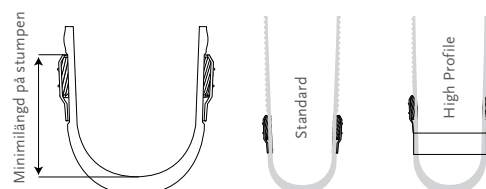

På Iceross Seal-In V HP sitter tätningsringen placerad ca 30 mm högre upp än på standardlinern

ICEROSS SEAL-IN V WAVE

Art.nr.	Profil	Beskrivning
I-4713XX	Wave 3 mm	Seal-In V
I-4723XX	Wave 3 mm	Seal-In V High Profile

XX = storlek



ICEROSS SEAL-IN® X5 WAVE




Rekommenderas för låg- till högaktiva protesanvändare med normala volymförändringar. Kompenserar för volymförändringar på upp till 3 ply.

För vakuumsuspension utan sleeve. Ger mycket bra stabilitet, rotationskontroll, rörelsefrihet och komfort. Fullständig lufttätethet genom 5 inbyggda tätningar som följer formen hos stumpen och proteshylsans innervägg. Wave-funktionen ger ökad komfort och funktion genom minskat tryck över patella och förbättrad rörlighet vid knäflexion.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544621 för Seal-In eller #L-544611 för Unity.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
Profil:	3 mm
Matrix:	10-13 cm

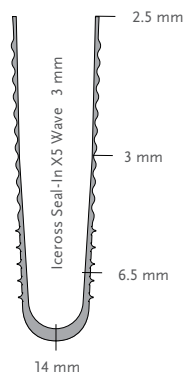

Video: Iceross Seal-In Range Classroom
Catch-up | Össur
7 min 42 sec

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X5

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE




WAVE

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlek	Minsta längd på amputationsstumpen*
18-23.5	11 cm
25-30	12.5 cm
32-36	13.5 cm

*Amputationsstumpens längd mäts från mitten på patellarsenan till den distala stumpändan.

Obs! Se till att linerförstärkningen (matrix) täcker minst 4 cm benstruktur. Låt inte förstärkningen (matrix) gå längre upp än till fibulahuvudet. Enheten får inte användas av patienter med extremt kort amputationsstump.

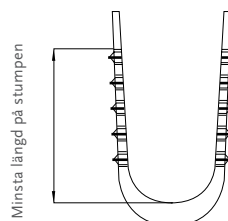

Längden på matrix varierar beroende på linerstorlek. Ju mindre linerstorlek, desto kortare matrix.

ICEROSS SEAL-IN X5 WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-3664XX	Wave 3 mm	Seal-In X5	10 - 13 cm

XX = storlek

ICEROSS SEAL-IN® X5




Rekommenderas för låg- till högaktiva protesanvändare med normala volymförändringar. Kompenserar för volymförändringar på upp till 3 ply.

För vakuumsuspension utan sleeve. Ger användaren mycket bra stabilitet, rotationskontroll och komfort. Fullständig lufttätet genom 5 inbyggda tätningar som följer formen hos stumpen och proteshylsans innervägg.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544621 för Seal-In eller #L-544611 för Unity.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
Profil:	3 mm
Matrix:	10-13 cm

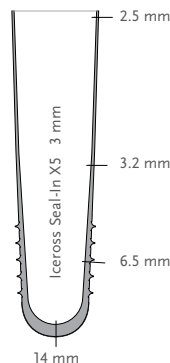

Video: Iceross Seal-In Range Classroom
Catch-up | Össur
7 min 42 sec

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X5

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE




SILKEN INNER
SURFACE

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlek	Minsta längd på amputationsstumpen*
18-23.5	11 cm
25-30	12.5 cm
32-36	13.5 cm

*Amputationsstumpens längd mäts från mitten på patellarsenan till den distala stumpändan.

Obs! Se till att linerförstärkningen (matrix) täcker minst 4 cm benstruktur. Låt inte förstärkningen gå längre upp än till fibulahuvudet. Enheten får inte användas av patienter med extremt kort amputationsstump.

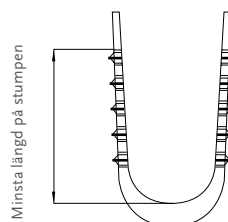

Längden på matrix varierar beroende på linerstorlek. Ju mindre linerstorlek, desto kortare matrix.

ICEROSS SEAL-IN X5

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-3663XX	3 mm	Seal-In X5	10 -13 cm

XX = storlek

ICEROSS DERMO SEAL-IN®




Vakuumsuspension utan sleeve för protesanvändare med små volymförändringar. Kompenserar för volymförändringar på upp till 6 ply.

Iceross Dermo Seal-In är tillverkad av mjuk DermoGel®-silikon med aktiva, hudvårdande ingredienser, vilket ger en mjuk och skonsam hudkontakt för patienter med kärlsjukdomar eller känslig hud. Det elastiska tygöverdraget i Supplex® ger god hållbarhet och en mycket nära passform.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544621 för Seal-In eller #L-544611 för Unity.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm

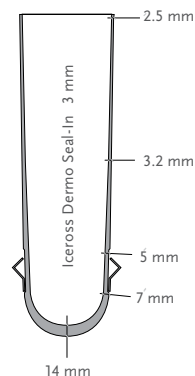

Video: Iceross Seal-In Range Classroom
Catch-up | Össur
7 min 42 sec

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE




SILKEN INNER
SURFACE

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlek	Minimilängd på amputationsstumpen*
18-23.5	11 cm
25-30	12 cm
32-36	13 cm

*Amputationsstumpens längd mäts från mitten på patellarsenan till den distala stumpändan.

Obs! Se till att linerförstärkningen (matrix) täcker minst 4 cm benstruktur. Låt inte förstärkningen gå längre upp än till fibulahuvudet. Enheten får inte användas av patienter med extremt kort amputationsstump.

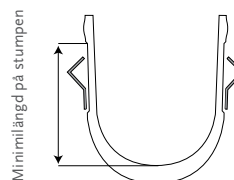

ICEROSS DERMO SEAL-IN

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-4613XX	3 mm	Seal-In	10 cm

XX = storlek.

ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING WAVE




Rekommenderas för medel- till högaktiva protesanvändare. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

En mångsidig locking liner i 2-skiktsskonstruktion som ger en unik kombination av komfort och stabilitet i en och samma silikonliner: Ett fast yttre silikonlager ger stabilisering och ett mjukare inre lager innehållande Aloe Vera och Vaseline® ger hudvård och komfort.

Wave-funktionen ger ökad komfort och funktion genom minskat tryck över patella och förbättrad rörlighet vid knäflexion.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

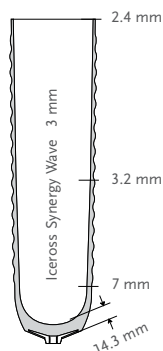

Video: Iceross Synergy Classroom
Catch-up | Ossur
1 min 54 sec

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Medel till extrem
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm eller anpassad matrix 2-14 cm

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



DOUBLE
DUROMETER



WAVE

ICEROSS SYNERGY LOCKING WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-6303XX	3 mm Wave	Locking	10 cm
I-6206XX	3 mm Wave	Locking	Anpassad 2-14 cm*

XX = storlek

*Specificera önskad längd på matrix. Avvikelse matrix kan vara +/- 1,5 cm:

ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING




Rekommenderas för medel- till högaktiva protesanvändare. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Iceross Synergy kombinerar stabilitet och komfort genom en patenterad 2-skiktsskonstruktion. Ett fast yttre silikonlager ger stabilisering och ett mjukare inre lager innehållande Aloe Vera och Vaseline® ger hudvård och komfort.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Medel till extrem
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm eller anpassad matrix 2-14 cm

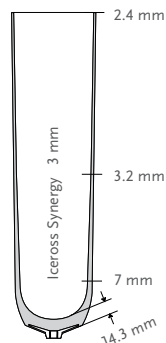

Video: Iceross Synergy Classroom
Catch-up | Ossur
1 min 54 sec

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



DOUBLE
DUROMETER

ICEROSS SYNERGY LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-6003XX	3 mm	Locking	10 cm
I-6203XX	3 mm	Locking	Anpassad 2-14 cm*

XX = storlek

*Specificera önskad längd på matrix. Avvikelse matrix kan vara +/- 1,5 cm

ICEROSS DERMO® LOCKING WAVE



Ett bra alternativ för låg- och medelaktiva protesanvändare där komfort och hudvård är av hög prioritet. Kan med fördel användas till de med kärlsjukdomar eller känslig hud. Iceross Dermo Locking och Iceross Dermo Conical Wave kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.



Iceross Dermo är försedd med Wave-funktion för att underlätta knäflexion. **Iceross Dermo Conical Locking Wave** har dessutom vertikala "waves" högst upp på linern för att minska trycket och hindra kanterna från att rulla ner.

Tillverkade i DermoGel® Silicone, ett supermjukt silikonmaterial med aktivt hudvårdande ingredienser, för mjuk och skonsam hudkontakt. Iceross Dermo ger god avlastning och tryckutjämning vid beniga prominenser och känsliga områden på stumpen.

DermoGel® -silikonet i kombination med det ultrastarka, elastiska tygöverdraget i Supplex® ger god hållbarhet och en mycket nära passform.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar Standard:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Storlekar Konisk:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm eller anpassad matrix 2-14 cm

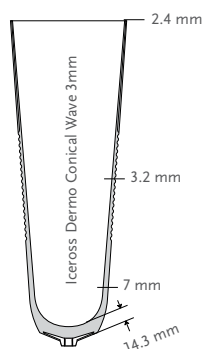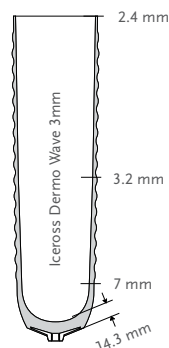

Video: Iceross Dermo | Classroom
Catch-up | Ossur
2 min 15 sec

SUSPENSIONSMETOD

EGENSKAPER



LOCKING



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



WAVE



CONICAL

ICEROSS DERMO LOCKING WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-4313XX	3 mm Wave	Locking	10 cm
I-4223XX	3 mm Wave	Locking	Anpassad (2-14 cm)*
I-4913XX	Conical 3 mm Wave	Locking	10 cm

XX = storlek. För val av profil - standard eller konisk - se tabell på nästa sida.

*Specificera önskad längd på matrix. Avvikelse matrix kan vara +/- 1,5 cm

ICEROSS DERMO® LOCKING WAVE



VAL AV PROFIL – STANDARD LINER ELLER KONISK LINER

Mät stumpens omkrets ca 4 cm från distala änden och välj liner av rätt mått eller storleken under (y-axeln).

Mät stumpens omkrets ca 30 cm ovanför den distala änden och läs av angivet mått i tabellen nedan (x-axeln).

Om skärningspunkten hamnar i ett mörkgrått fält, väljs en **konisk liner**.

Om skärningspunkten hamnar i ett ljusgrått fält, väljs en **standardliner**.

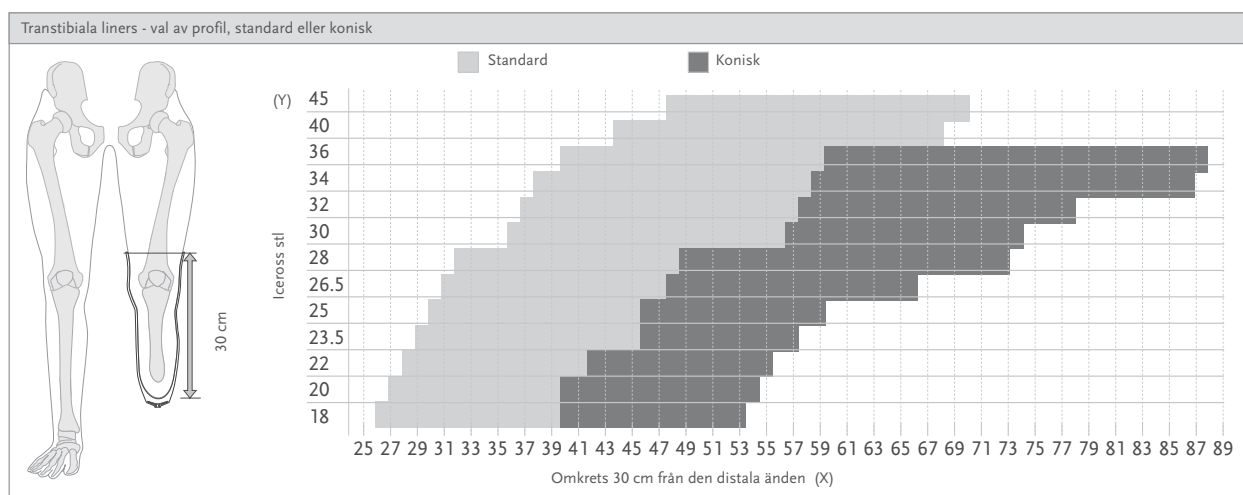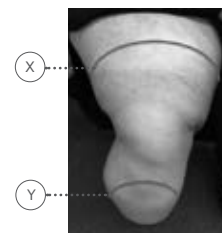

Obs! Guiden är bara en rekommendation och ska endast ses som ett stöd till ortopedingenjörens kliniska undersökning.

ICEROSS DERMO® LOCKING



Ett bra alternativ för låg- och medelaktiva protesanvändare där komfort och hudvård är av hög prioritet och önskad suspensionsmetod är lås-pinne eller linkoppling. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.



Iceross Dermo ger god avlastning och tryckutjämning vid beniga prominenser och känsliga områden på stumpen.

DermoGel® -silikonet i kombination med det ultrastarka, elastiska tygöverdraget i Supplex® ger god hållbarhet och en mycket nära passform.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45*.
Profil:	3 mm eller 6 mm
Matrix:	10 cm eller anpassad matrix 2-14 cm*

* Iceross Dermo 6 mm Custom Liner kan inte fås i stl. 16, 18, 34, 36, 40, 45.

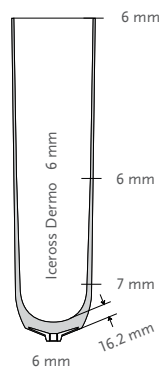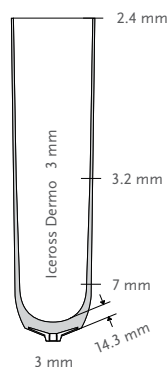

Video: Iceross Dermo | Classroom
Catch-up | Össur
2 min 15 sec

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE

ICEROSS DERMO LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-4013XX	3 mm	Locking	10 cm
I-4213XX	3 mm	Locking	Anpassad 2-14 cm*
I-4016XX	6 mm	Locking	10 cm
I-4216XX	6 mm	Locking	Anpassad 2-14 cm*

XX = storlek

*Specificera önskad längd på matrix. Avvikelse matrix kan vara +/- 1,5 cm


ICEROSS DERMO® UNIFORM LOCKING



För låg- och medelaktiva protesanvändare där komfort och hudvård är av hög prioritet. Passar bra för vaskulära patienter och patienter med känslig hud.

Enkelt att byta från gel till silikon med Iceross Dermo Uniform Liners. Uniform Profil gör dem fullt utbytbara mot liners med likformiga/enhetliga profiler utan att en ny proteshylsa behöver tillverkas.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	Medium, Medium+, Large, Large+, X-Large.
Profil:	6 mm anteriort, 3 mm posteriort
Matrix:	10 cm

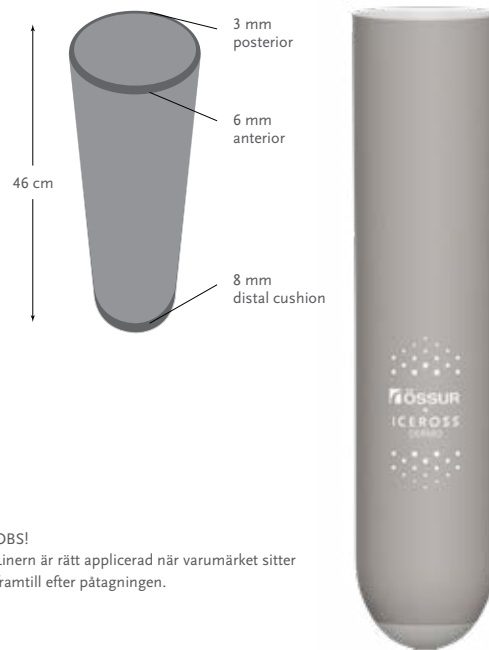

OBS!
Lineren är rätt applicerad när varumärket sitter framtill efter påtagningen.

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER




ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE

STORLEKSGUIDE

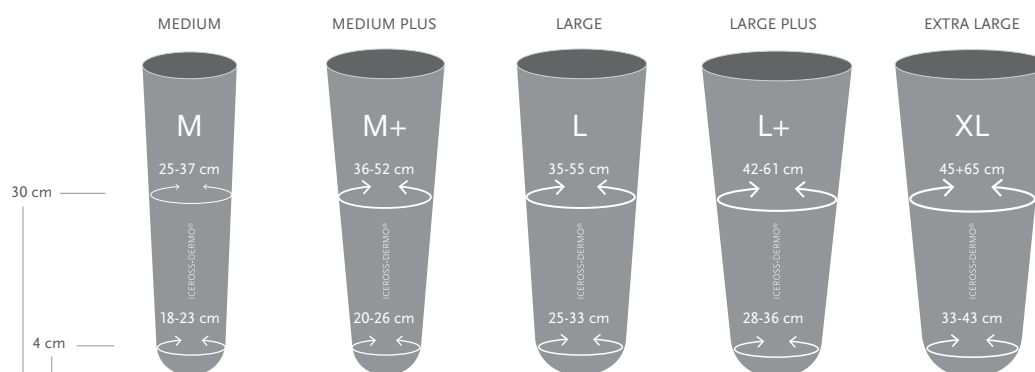

ICEROSS DERMO UNIFORM LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-410618	Dermo Uniform 6 mm Locking Medium	Locking	10 cm
I-410620	Dermo Uniform 6 mm Locking Medium +	Locking	10 cm
I-410625	Dermo Uniform 6 mm Locking Large	Locking	10 cm
I-410628	Dermo Uniform 6 mm Locking Large +	Locking	10 cm
I-410633	Dermo Uniform 6 mm Locking XLarge	Locking	10 cm

ICEROSS COMFORT® LOCKING WAVE




För låg- och medelaktiva protesanvändare som inte har några hudproblem. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Linern är tillverkad i mjuk Sensil® Silicone och ger god avlastning och tryckutjämning vid beniga prominenser och känsliga områden på stumpen.

Iceross Comfort Locking Wave levereras med silkeslen insida för bättre komfort och behaglig känsla mot huden och god vidhäftning.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

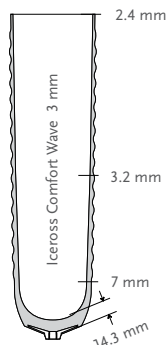

Video: Iceross Comfort | Classroom
Catch-up | Össur
3 min

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



SILKEN INNER
SURFACE



WAVE

ICEROSS COMFORT LOCKING WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-5303XX	3 mm Wave	Locking

XX = storlek

ICEROSS COMFORT® LOCKING





För låg- och medelaktiva protesanvändare som inte har några hudproblem. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Linern är tillverkad i mjuk Sensil® Silicone och ger god avlastning och tryckutjämning vid beniga prominenser och känsliga områden på stumpen.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Profil:	3 mm eller 6 mm
Matrix:	10 cm eller anpassad matrix 2-14 cm

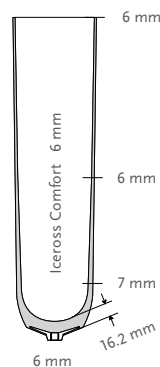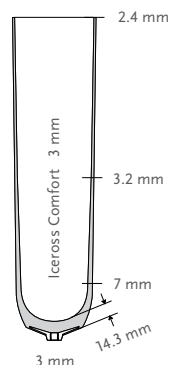

Video: Iceross Comfort | Classroom
Catch-up | Össur
3 min

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



SILKEN INNER
SURFACE

ICEROSS COMFORT LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-5406XX	3 mm	Locking	10 cm
I-5506XX	3 mm	Locking	Anpassad 2-14 cm*
I-5006XX	6 mm	Locking	10 cm
I-5106XX	6 mm	Locking	Anpassad 2-14 cm*

XX = storlek

*Specificera önskad längd på matrix. Avvikelse matrix kan vara +/- 1,5 cm

ICEROSS® ORIGINAL LOCKING




För protesanvändare som har mycket god mjukdelstäckning och problemfri hud där stabilitet är prioriterad. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Vid hylsbyte eller nyförsörjning rekommenderar vi att ni provar Synergy Locking Liner 3 mm som ger mycket god stabilitet men även komfort och hudvård.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45.
Profil:	2 mm
Matrix:	10 cm eller anpassad matrix 2-14 cm

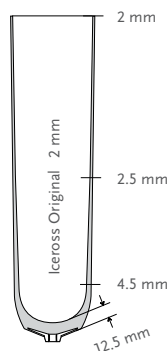

Video: Iceross Original | Classroom
Catch-up | Ossur
1 min, 42 sek

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER

EGENSKAPER


ICEROSS ORIGINAL LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-0124XX	2 mm	Locking	10 cm
I-2024XX	2 mm	Locking	Anpassad 2-14 cm*

XX = storlek

*Specificera önskad längd på matrix. Avvikelse matrix kan vara +/- 1,5 cm

ICEROSS® SPORT LOCKING

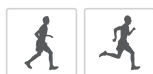


För aktiva protesanvändare som föredrar suspensionsmetod med lås-pinne eller linkoppling. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Iceross Sport är utvecklad för att ge maximal stabilisering och komfort till den aktive protesanvändaren. 2-skiktsskonstruktion; ett stöt-absorberande och maximalt stabiliserande ytterlager och ett mjukare hudvårdande och polstrande innerlager. Linern har ett "anti-rotations-system", ARC®, för ökad rotationsstabilitet i proteshylsan.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Hög till extrem
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm eller anpassad matrix 2-14 cm

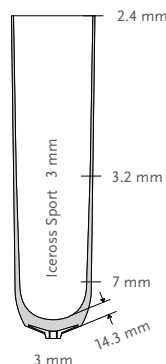

Video: Iceross Sport | Classroom
Catch-up | Ossur
1 min 52 sec

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



DOUBLE
DUROMETER

ICEROSS SPORT LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-1033XX	3 mm	Locking	10 cm
I-1233XX	3 mm	Locking	Anpassad 2-14 cm*

XX = storlek

*Specificera önskad längd på matrix. Avvikelse matrix kan vara +/- 1,5 cm

RELAX™ LOCKING






För låg- till högaktiva transtibialt amputerade protesanvändare som föredrar suspensionsmetod med låspinne eller linkoppling. Fördedd med ett s.k. Umbrellan-material för att lindra fantomsmärta.* Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

- God vidhäftning vid mjukdelarna minskar påfrestningen på stummen.
- Tillverkad i ett mycket hudvänligt silikonmaterial. Lätt att hålla ren.
- Slitstarkt textilöverdrag med låg friktion underlättar på- och avtagning.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 600-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45.
Profil:	3 mm eller 6 mm
Matrix:	10 cm

*Kern, U., Altkemper, B., Kohl, M. (2006). "Management of Phantom Pain med a Textile Electromagnetically-Acting Stump Liner". J Pain Symptom Manage. Oct;32(4):352-60.

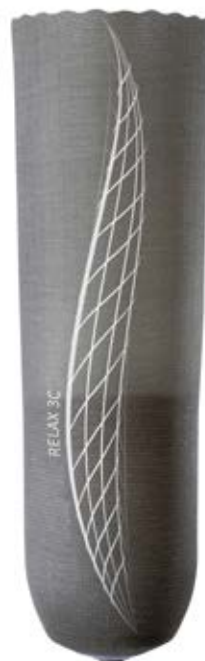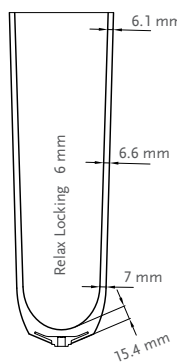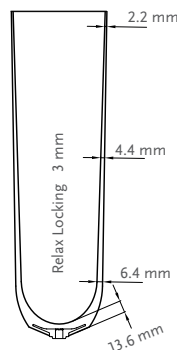

Video: Iceross Relax Liners Classroom Catch-up | Ossur
1 min 56 sec

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER



UMBRELLAN

RELAX LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
M8994XX	3 mm	Locking	10 cm
M8996XX	6 mm	Locking	10 cm

XX = storlek

ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION




Rekommenderas för medel- till högaktiva protesanvändare.
Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

En mångsidig cushion liner i 2-skiktsskonstruktion som ger en unik kombination av komfort och stabilitet i en och samma silikonliner: Ett fast yttre silikonlager ger stabilisering och ett mjukare inre lager innehållande Aloe Vera och Vaseline® ger hudvård och komfort.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544620 för Cushion/Sleeve och
- Iceross Sleeve

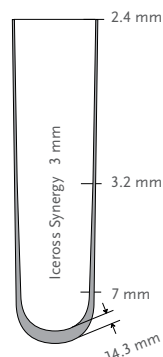

Video: Iceross Synergy Classroom
Catch-up | Össur
1 min 54 sec

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Medel till extrem
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40.
Profil:	3 mm

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



DOUBLE DUROMETER

ICEROSS SYNERGY CUSHION

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-CL63XX	3 mm	Cushion

XX = storlek

ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION WAVE




Rekommenderas för medel- till högaktiva protesanvändare.
Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

En mångsidig cushion-liner i 2-skiktsskonstruktion som ger en unik kombination av komfort och stabilitet i en och samma silikonliner:
Ett fast yttre silikonlager ger stabilisering och ett mjukare inre lager innehållande Aloe Vera och Vaseline® ger hudvård och komfort.

Wave-funktionen ger ökad komfort och funktion genom minskat tryck över patella och förbättrad rörlighet vid knäflexion.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544620 för Cushion/Sleeve och
- Iceross Sleeve

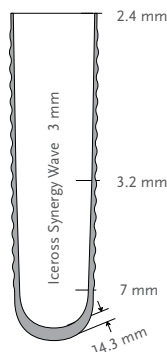

Video: Iceross Synergy Classroom
Catch-up | Össur
1 min 54 sec

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Medel till extrem
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40.
Profil:	3 mm

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



DOUBLE DUROMETER



WAVE

ICEROSS SYNERGY CUSHION WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-CW63XX	3 mm Wave	Cushion

XX = storlek

ICEROSS DERMO® CUSHION



Vakuumsuspension med sleeve för låg- till högaktiva protesanvändare där komfort och hudvård är av extra hög prioritet. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Ger god avlastning och tryckutjämning vid beniga prominenser och känsliga områden på stumpan.

Tillverkad i DermoGel® Silicone, ett supermjukt silikonmaterial med aktivt hudvårdande ingredienser, för mjuk och skonsam hudkontakt.


DermoGel® -silikonet i kombination med det ultrastarka, elastiska tygöverdraget i Supplex® ger god hållbarhet och en mycket nära passform.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544620 för Cushion/Sleeve och
- Iceross Sleeve

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*.
Profil:	3 mm eller 6 mm

*Storlek 40 finns endast i 3 mm.

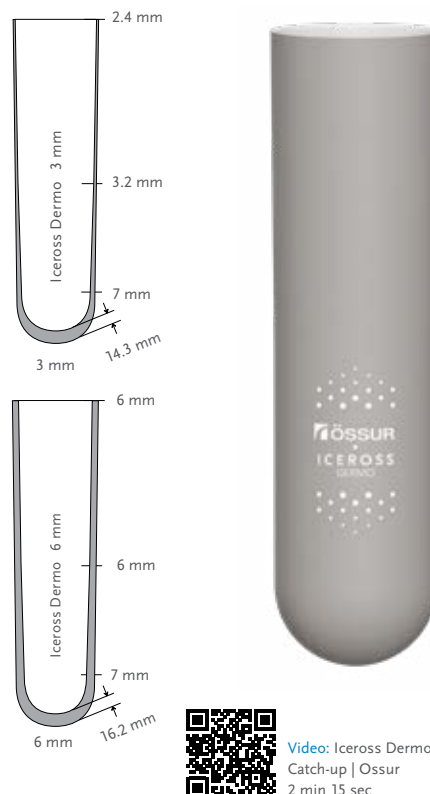

Video: Iceross Dermo | Classroom
Catch-up | Össur
2 min 15 sec

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE

ICEROSS DERMO CUSHION

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-CL43XX	3 mm	Cushion
I-CL46XX	6 mm	Cushion

XX = storlek

ICEROSS DERMO® CUSHION WAVE



Vakuumsuspension med sleeve för låg- till högaktiva protesanvändare där komfort och hudvård är av extra hög prioritet. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Ger god avlastning och tryckutjämning vid beniga prominenser och känsliga områden på stumpen.

Tillverkad i DermoGel® Silicone, ett supermjukt silikonmaterial med aktivt hudvårdande ingredienser, för mjuk och skonsam hudkontakt.

DermoGel® -silikonet i kombination med det ultrastarka, elastiska tygöverdraget i Supplex® ger god hållbarhet och en mycket nära passform.

Wave-funktionen ger ökad komfort och funktion genom minskat tryck över patella och förbättrad rörlighet vid knäflexion.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544620 för Cushion/Sleeve och
- Iceross Sleeve



Video: Iceross Dermo | Classroom
Catch-up | Össur
2 min 15 sec

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40.
Profil:	3 mm

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



WAVE

ICEROSS DERMO CUSHION WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-CW43XX	3 mm	Cushion

XX = storlek


ICEROSS DERMO® UNIFORM CUSHION



För låg- och medelaktiva protesanvändare där komfort och hudvård är av hög prioritet. Utmärkt liner för vaskulära patienter och patienter med känslig hud.

Enkelt att byta från gel till silikon med Iceross Dermo Uniform Liners. Uniform Profil gör dem fullt utbytbara mot liners med likformiga/enhetliga profiler utan att en ny proteshylsa behöver tillverkas.

Sömlös - sömmarna känns inte genom silikonpolstringen. Svetsade distala ändar.

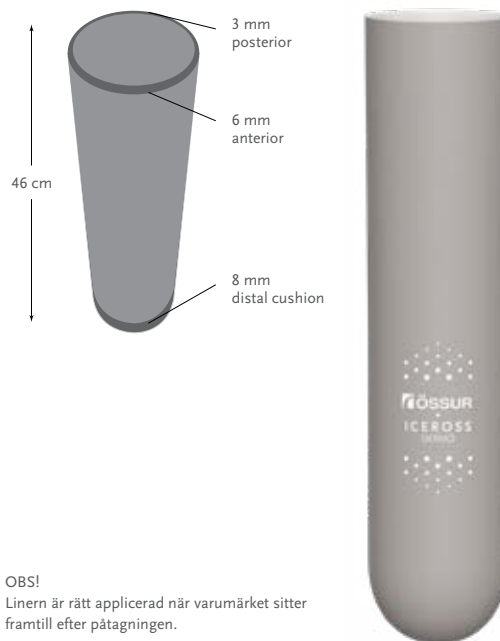

OBS!
Lineren är rätt applicerad när varumärket sitter framtill efter påtagningen.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	Small, Medium, Medium+, Large, Large+, X-Large.
Profil:	6 mm anteriort, 3 mm posteriort

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER




ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE

STORLEKSGUIDE

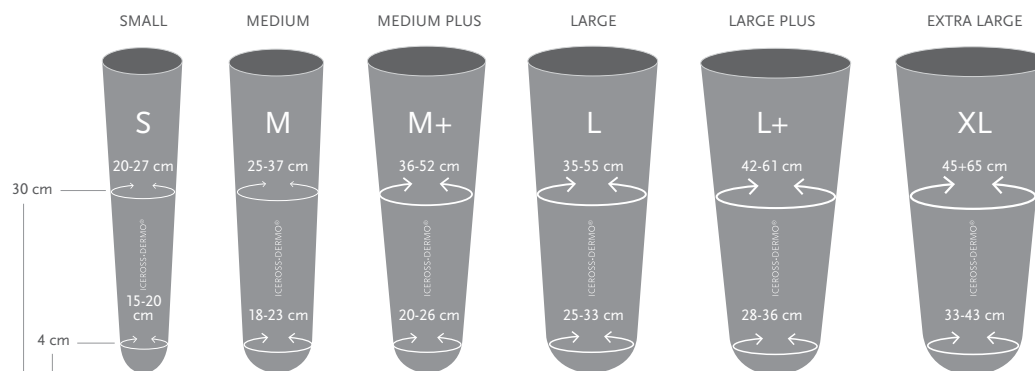

ICEROSS DERMO UNIFORM CUSHION

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-440615	Dermo Uniform 6 mm Cushion Small	Cushion
I-440618	Dermo Uniform 6 mm Cushion Medium	Cushion
I-440620	Dermo Uniform 6 mm Cushion Medium +	Cushion
I-440625	Dermo Uniform 6 mm Cushion Large	Cushion
I-440628	Dermo Uniform 6 mm Cushion Large +	Cushion
I-440633	Dermo Uniform 6 mm Cushion XLarge	Cushion

ICEROSS COMFORT® CUSHION



För låg- och medelaktiva protesanvändare som inte har några hudproblem och som föredrar vakuumsuspension med sleeve. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Ger god avlastning och tryckutjämning för de med koniska stumpar och/eller stumpar med beniga prominenser och känsliga områden på stumpan.


Tillverkad i mjuk Sensil® Silicone och med tygöverdrag i nylon.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544620 för Cushion/Sleeve och
- Iceross Sleeve

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*.
Profil:	3 mm eller 6 mm

*Storlek 40 finns endast i 3 mm.

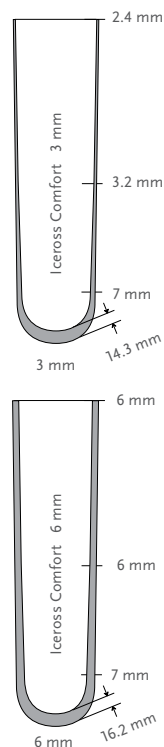

Video: Iceross Comfort | Classroom
Catch-up | Össur
3 min

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION

EGENSKAPER



FABRIC COVER



SILKEN INNER
SURFACE

ICEROSS COMFORT CUSHION

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-CL53XX	3 mm	Cushion
I-CL56XX	6 mm	Cushion

XX = storlek

ICEROSS® ACTIVA CUSHION




För aktiva transtibialt amputerade protesanvändare som föredrar vakuumsuspension. Kompenserar för volymförändringar på upp till 10 ply.

Iceross Activa Cushion ger en unik kombination av stötdämpning, rörlighet, stabilitet och kontroll. Extra stötdämpning och skydd över tibia med hjälp av TibiaGuard*. Stabilitet och kontroll med hjälp av ett tunt, fast silikonlager posteriort.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544620 för Cushion/Sleeve och
- Iceross Sleeve

*TibiaGuard = ett mjukt lager silikon som skyddar tibia och ger ökad stötdämpning.

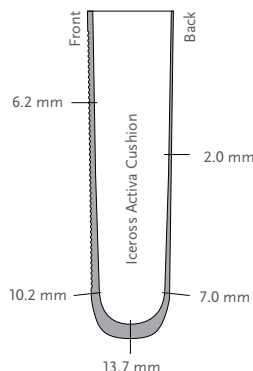

Video: Iceross Activa Liner Classroom Catch-up | Össur
1 min 43 sec

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Medel till extrem
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34.
Profil:	2 mm posteriort, 6 mm anteriort

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



DOUBLE DUROMETER



WAVE



TIBIAGUARD

ICEROSS ACTIVA CUSHION

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-CT62XX	2 mm / 6 mm	Cushion

XX = storlek



Se till att den tjockare delen (TibiaGuard), som ska skydda tibia, placeras mitt framför tibias framkant när linern rullas på.

RELAX™ CUSHION



För låg- till högaktiva transtibialt amputerade protesanvändare som föredrar vakuumsuspension med sleeve. Försedd med ett s.k. Umbrellan-material för att lindra fantomsmärta.*



- God vidhäftning vid mjukdelarna minskar påfrestningen på stummen.
- Tillverkad i ett mycket hudvänligt silikonmaterial. Lätt att hålla ren.
- Slitstarkt textilöverdrag med låg friktion underlättar på- och avtagning.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med

- Icelock® Vakuumventil 551 #L-551002 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544620 för Cushion/Sleeve och
- Iceross Sleeve

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45
Profil:	3 mm eller 6 mm
Matrix:	10 cm

*Kern, U., Altkemper, B., Kohl, M. (2006). "Management of Phantom Pain med a Textile Electromagnetically-Acting Stump Liner". J Pain Symptom Manage. Oct;32(4):352-60.

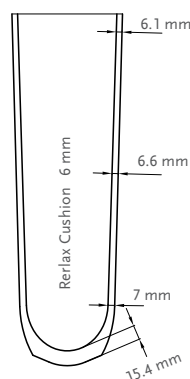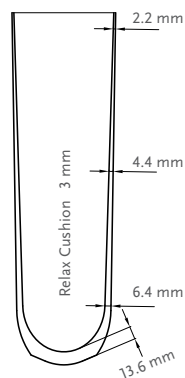

Video: Iceross Relax Liners
Classroom Catch-up | Ossur
1 min 56 sec

SUSPENSIONSMETOD



CUSHION



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



UMBRELLAN

RELAX CUSHION

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
M8997XX	3 mm	Cushion	10 cm
M8998XX	6 mm	Cushion	10 cm

XX = storlek

ICEFORM® LOCKING & CUSHION



Tillverkad i TPE-material och försedd med ett slitstarkt tygöverdrag. TPE-materialet gör det möjligt att forma linern efter protesanvändarens stumpform och dess oregelbundenheter för att ge god komfort till låg- till medelaktiva protesanvändare.

Össur rekommenderar att Iceform Cushion Liner används i kombination med Iceform Sleeve.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	Small (15), Medium (18), Medium+ (20), Large (25), Large+ (28), X-Large (33)
Profil:	Uniform 3, 6, och 9 mm anteriort, 3 mm posteriort



SUSPENSIONSMETOD



LOCKING


CUSHION

EGENSKAPER



FABRIC COVER

STORLEKSGUIDE

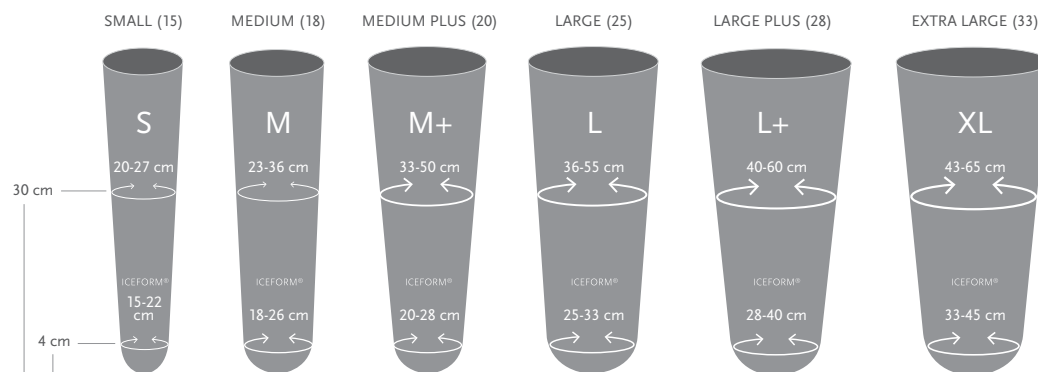

ICEFORM LOCKING & CUSHION

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
T-0103XX	Iceform Uniform 3 mm	Locking
T-0106XX	Iceform Uniform 6 mm	Locking
T-0109XX	Iceform Uniform 9 mm	Locking
T-CL03XX	Iceform Uniform 3 mm	Cushion
T-CL06XX	Iceform Uniform 6 mm	Cushion
T-CL09XX	Iceform Uniform 9 mm	Cushion

XX = storlek. Lägg till sifferkoden för respektive storlek, t.ex. T-010315 om en Iceform Uniform 3 mm Locking liner i storlek Small önskas.

15 = Small
18 = Medium
20 = Medium+
25 = Large
28 = Large+
33 = X-Large

ICEROSS® SLEEVE



Sleeve med Wave-funktion. Tillsammans med Iceross Cushion Liners ger Iceross Sleeve komfort, stabilitet och rörlighet till protesanvändare som föredrar vakuumsuspension med sleeve.

Wave-funktionen ger ökad komfort och funktion genom minskat tryck över patella och förbättrad rörlighet vid knäflexion.

Profilen på sleeveen är tjockare nedtill vid övergången till proteshysan och förstärkt på utvalda områden för att öka livslängden.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Alla
Produktinformation	
Storlek:	35 ,41, 49, 55, 62.
Längd:	35 cm

FEATURES




SILKEN INNER SURFACE

ICEROSS SLEEVE

Mät omkretsen 15 cm ovanför mitten av patella och välj korrekt storlek.

Art.nr.	Storlek	Omkretsmått
F-201135	35	35-41 cm
F-201141	41	41-49 cm
F-201149	49	49-55 cm
F-201155	55	55-62 cm
F-201162	62	62-76 cm

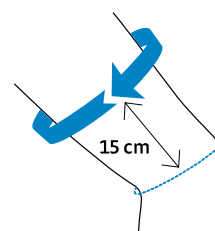

ICEFORM® SLEEVE




För låg- till medelaktiva protesanvändare.

Tillverkad i TPE-material och försedd med ett sömlöst, hållbart tygöverdrag. TPE-materialet gör det möjligt att forma sleeveven efter protesanvändarens stumpform.

TPE-materialets elasticitet och wave-design underlättar vid flexion av knät och ger en förbättrad användarkomfort och säker suspension.

Össur rekommenderar att Iceform Sleeve används tillsammans med Iceform Cushion Liners.

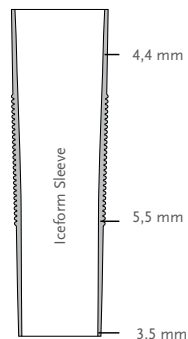


Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Produktinformation	
Storlekar:	35, 41, 49, 55, 62.

ICEFORM SLEEVE

Mät omkretsen 15 cm ovanför mitten av patella och välj korrekt storlek.

Art.nr.	Storlek	Omkretsmått
S-201135	35	35-41 cm
S-201141	41	41-49 cm
S-201149	49	49-55 cm
S-201155	55	55-62 cm
S-201162	62	62-76 cm

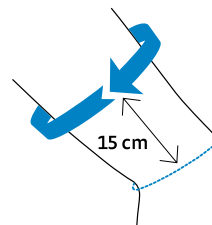

GENU SLEEVE



Genu Sleeve ger bra vacuum, hög säkerhet och god komfort.

Genu Sleeve är en TPE-sleeve avsedd för låg- till medelaktiva protes-användare som önskar bra komfort vid flexion.

Genu Sleeve Protector art.nr. M00020x, förlänger livslängden på sleeveen och dras över proteshylsan och linern innan Genu Sleeve används. **Protector ingår i Genu Sleeve-förpackningen men kan också beställas separat (se nedan)**


Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Längd:	Ca. 35 cm



GENU SLEEVE

Mät omkretsen 15 cm ovanför mitten av patella och välj korrekt storlek.

Art.nr.	Storlek	Omkretsmått	Längd
MK00202	S	30–40 cm	Ca. 35 cm
MK00203	M	38–50 cm	Ca. 35 cm
MK00204	L	48–64 cm	Ca. 35 cm

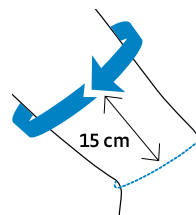

PROTECTOR

Förlänger livslängden på sleeveen. Dras över proteshylsan och linern innan Genu Sleeve eller någon annan sleeve används.

Ingår i Genu Sleeve-förpackningen men kan också beställas separat.

Mät omkretsen 15 cm ovanför mitten av patella och välj korrekt storlek.

Art.nr.	Storlek	Omkretsmått	Längd
M000202	S	30–40 cm	Ca. 35 cm
M000203	M	38–50 cm	Ca. 35 cm
M000204	L	48–64 cm	Ca. 35 cm



ICEROSS® TRANSFEMORAL LINERS BY ÖSSUR


För att få ett bra slutresultat vid en protestillpassning krävs att man tar hänsyn till de utmaningar som en transfemoral amputationsstump innebär. Dessa utmaningar skiljer sig något från en transtibial amputationsstump. Össur var först ut med att designa och introducera en Iceross Transfemoral liner specifikt utformad för att erbjuda transfemoralt amputerade komfort, skydd och suspension i sin protes. Följande bör beaktas vid val av liner för transfemoralt amputerade:

1. Stumpens storlek
2. Stumpens längd
3. Behov av stumpformsmatchning
4. Profil – riktlinjer för val av standardliner eller konisk liner




Video: Liner Selection (transfemoral)
45 sec

1. VAL AV STORLEK

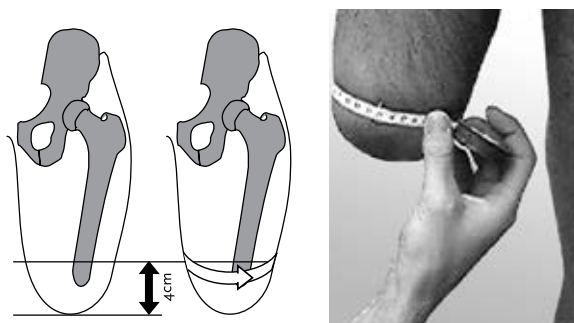

Med mjukdelarna hängande ner, mät 4 cm från den distala änden och gör en markering på huden. Mät stumpens omkrets vid markeringen. Måttbandet ska vara lagom åtdraget.

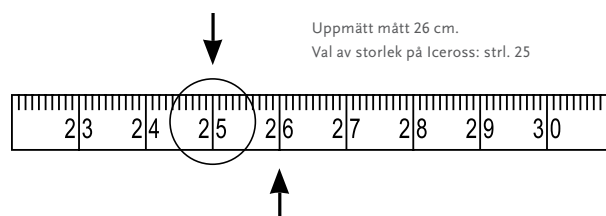

Omkretsmåttet som erhålls motsvarar storleken på Iceross-linern. Välj en liner av det uppmätta måttet. Om måttet hamnar *mellan* två storlekar, är den generella rekommendationen att välja storleken under. Välj inte en större storlek än uppmätt mått och inte mer än *en* storlek under. T.ex. om det uppmätta måttet är 26 cm, välj Iceross stl 25.

ICEROSS LOCKING LINERS

Kombinationen av ett integrerat storleksanpassat paraply och en full-längdsmatrix optimerar kraftfördelningen och minimerar pumprörelsen. För att få bästa möjliga funktion av både paraply och matrix, är det viktigt att rätt storlek på linern väljs. Ett oriktigt val av linerstorlek kan orsaka obehag för brukaren med t.ex. svettning och minskad förmåga att kontrollera protesens.

Vid storleksval av Locking Liner, prova gärna både storleken under och över för att vara riktigt säker:
Rulla på linern och fäst en linkoppling distalt och dra sedan för att se vilken av de två storlekarna som stabiliserar bäst.

ICEROSS SEAL-IN LINERS

Vid användning av **Iceross Seal-In Transfemoral Liner** är det viktigt att tätningsringen (Hypobaric Sealing Membran HSM™) ligger rätt spänd runt hela linern. När du valt liner enligt våra instruktioner, bedöm hur tätningsringen sitter, visuellt och manuellt, med hjälp av bilderna nedan. Dra fingret under kanten av tätningsringen runt hela linern för att bedöma spänningen och för att kontrollera att tätningsringen ligger uträdd. Bild 3 visar hur tätningsringen bör sitta för att ge optimal suspension.

I vissa fall kan en storlek mindre behöva väljas av Iceross Seal-In Transfemoral för att uppnå korrekt passform (gäller endast för Iceross Seal-In Transfemoral).

Om inte optimal passform av Iceross Seal-In Transfemoral kan uppnås, rekommenderas Iceross Seal-In X TF med flyttbara tätningsringar.



1. FÖR LITEN STORLEK



2. FÖR STOR STORLEK



3. KORREKT STORLEK

Storleksrekommendationen bör ses som en vägledning. Det kan finnas tillfällen då andra alternativa storlekar kan behöva väljas.

ICEROSS® TRANSFEMORAL LINERS BY ÖSSUR

2. STUMPENS LÄNGD

Jämför amputationsstumpens längd med **det kvarvarande benets lår**. Dela det kvarvarande benets lårlängd i tre delar för att bedöma stumpens längd:


- Kort stump - amputation på proximala tredjedelen av femur - se del A i översiktstabellen nedan.
- Mellanlång stump - amputation på mellersta tredjedelen av femur - se del B i översiktstabellen nedan.
- Lång stump - amputation på distala tredjedelen av femur - se del C i översiktstabellen nedan.

3. BEHOV AV STUMPFORMSMATCHNING

Samma principer gäller som vid stumpformsmatchning för transtibiala stumpar, se sidan 15. Om det föreligger djupa sår eller hålrum, fyll ut med Iceross Pad eller annan silikonutfyllnad.

4. PROFIL OCH RIKTLINJER FÖR VAL AV STANDARD LINER ELLER KONISK LINER

Mät stumpens omkrets ca 4 cm från distala änden och välj liner av rätt mått eller storleken under. Mät och notera stumpens omkretsmått i nivå med perineum - läs av måttet i tabellens horisontella axel. Om skärningspunkten för den horisontella och den vertikala axeln hamnar i ett mörkgrått fält, väljs en konisk liner. Om skärningspunkten hamnar i ett ljusgrått fält väljs en standardliner.

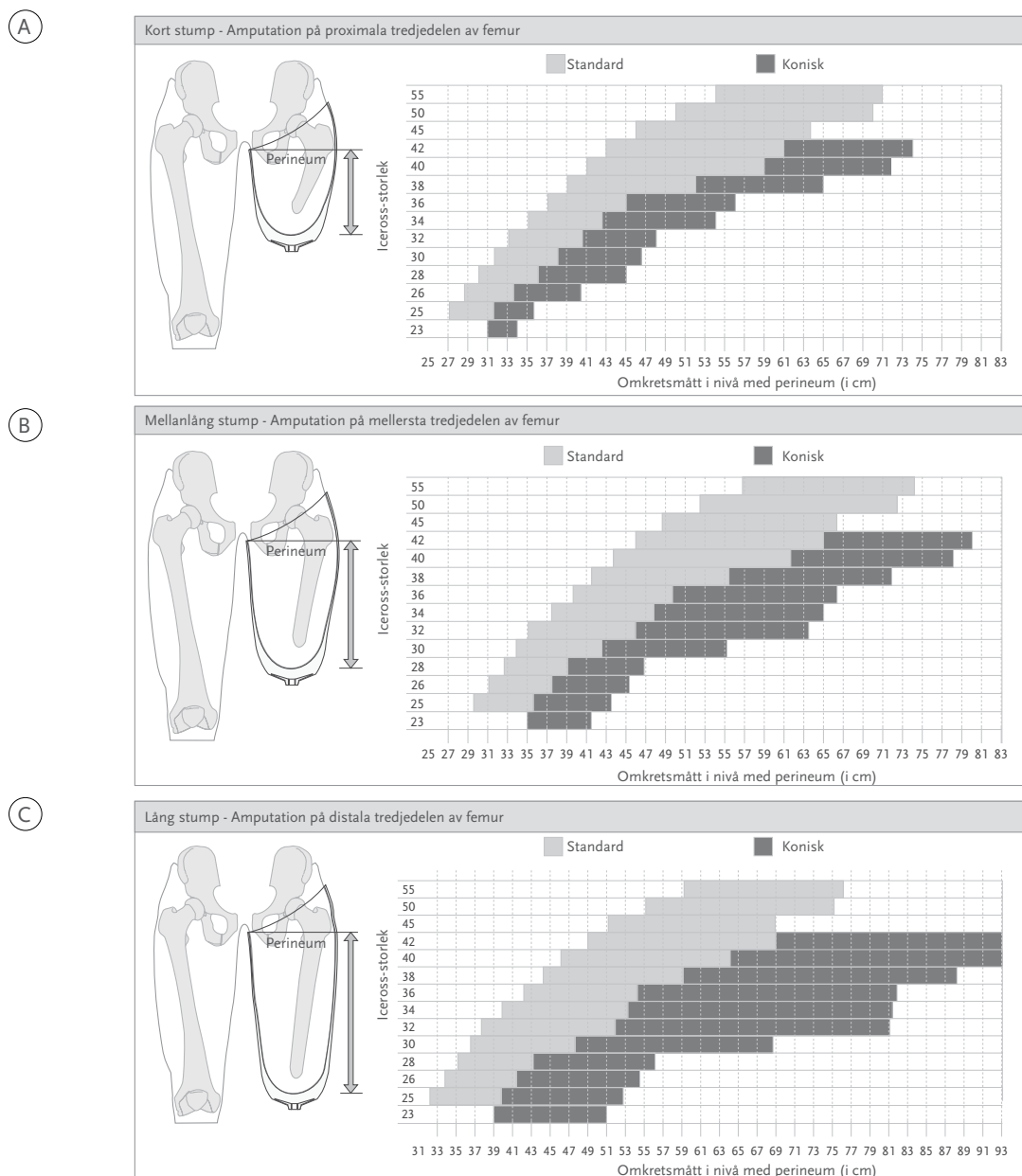

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING TF



Med Iceross Seal-In Locking TF-liner får användaren en kombination av locking-suspension och Seal-In, vilket innebär att man får fördelarna med båda.

Tillsammans med Icelock 850 Hybrid kan användare som föredrar den direkta, mekaniska anslutningen till hylsan som locking-liners ger nu uppleva de många fördelarna med Seal-In-vakuum och Unity-systemet för ökat vakuum från Össur. Denna kombination ger stabilisering av volymfluktuationer, ökad rotationskontroll och en passform som gör att hylsan sitter bekvämt hela dagen och hudvårdande silikon.

Iceross Seal-In X Locking TF-liner har samma flyttbara tätningsringar som kännetecknar alla Iceross Seal-In X-liners och minskar pumpprörelser och förbättrar rotationskontrollen jämfört med enbart locking-suspension.

Kompatibel med Össurs flyttbara Seal-In-tätningsringar:


- X-Classic - för daglig användning
- X-Grip - för god rotationskontroll
- X-Volume - för hantering av volymreduktion

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock 850 Hybrid för Direct Socket #L-850001
- Icelock 850 Hybrid för hylsor med 4-hålsfäste #L-850002
- Icelock 850 Hybrid för laminerade hylsor #L-850003



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar Standard:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55.
Storlekar Konisk:	23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
Profil:	2 mm standard, 3 mm konisk
Matrix:	Fulllängd
Storlekar på Tätningsringar	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65.

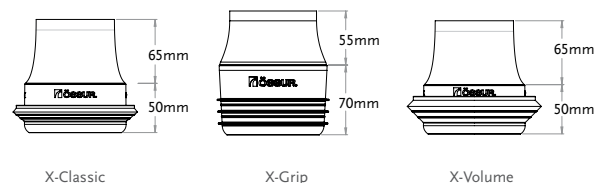

Obs! Tätningsringarna är försedda med en antifriktyonsyta, Easy Glide, som underlättar påtagning och avtagning av proteshylsan, utan användning av glidspray.

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



CONICAL



EASY GLIDE*

* Easy Glide gäller endast tätningsringarna

ICEROSS SEAL-IN X LOCKING TF – LINER

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-SXLSXX	Iceross Seal-In X Locking TF Standard 2 mm	Liner. Tätningsring beställs separat.
I-SXLCXX	Iceross Seal-In X Locking TF Konisk 3 mm	Liner. Tätningsring beställs separat.

XX = storlek

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING TF


VAL AV STORLEK PÅ TÄTNINGSRING

En av följande metoder kan användas för att bestämma den korrekta storleken på tätningsringen:

Metod 1: Tätningsringskit

Den föredragna metoden för att bestämma rätt enhetsstorlek är genom att använda ett tätningsringskit. För art.nr., se tabell nedan.

1. Placera en tätningsring från kitet vid önskad plats **utanpå linern**. Ta med i beräkningen rekommenderat avstånd mellan hylsans lägsta kant och den översta tätningsläppen (se Fig. 1).
2. Kontrollera så att det inte uppstår någon deformation på enheten eller stumpen. Tätningsringen bör sitta säkert på plats utan att trycka för hårt.
3. Om tätningsringen inte sitter korrekt på önskad plats, välj en annan storlek eller flytta tätningsringen tills du uppnår önskat resultat.

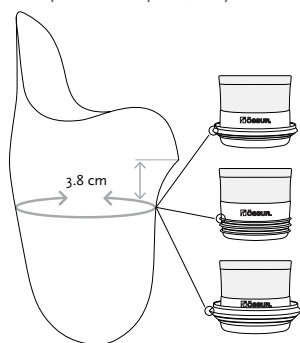

OBS! Säkerställ att avståndet mellan proteshylsans lägsta kant och tätningsringens översta silikonkant är minst 3,8 cm.

Fig. 1

Metod 2: Omkretsmått direkt på huden

Mät omkretsen (i cm) på önskad plats **direkt på huden**.


Se diagrammet nedan för att uppskatta rätt storlek på tätningsringen.

Förklaring till diagrammet:

Y = Stumpens omkretsmått taget direkt på huden (cm)


X = Storlek på tätningsringen (cm)

A = Åtsittande passform. B = Lös passform.

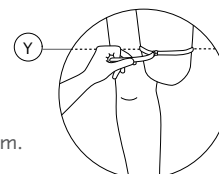

Exempel:

- Omkrets på 40 cm resulterar i tätningsringstorlek 44 eller 47.
- Omkrets på 26 cm resulterar i tätningsringstorlek 28 eller 30.

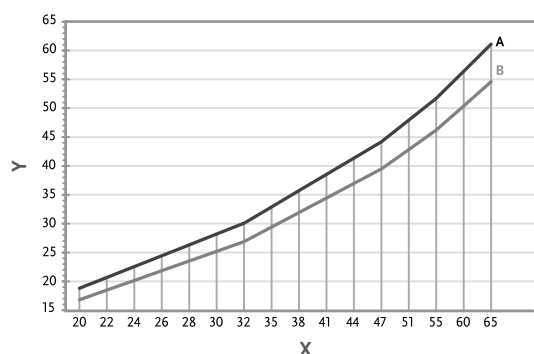

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ STUMPEN

Linerstorlek	Minimilängd*
23.5-28	14 cm
30-34	15 cm
36-42	16 cm
45	17 m
50-55	18 cm

*Med mjukdelarna hängande ned, mät stumpens längd från sittbensknölen till den distala änden. Kontrollera måttet i tabellen.



IFU: Seal-In X Seals

ICEROSS SEAL-IN X LOCKING TF - TÄTNINGSRINGAR

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-SXC0XX	Iceross Seal-In X-Classic	Seal-In X-Classic tätningsring
I-SXG0XX	Iceross Seal-In X-Grip	Seal-In X-Grip tätningsring
I-SXV0XX	Iceross Seal-In X-Volume	Seal-In X-Volume tätningsring
Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-RXC001	Seal-In X-Classic Kit 26-51	10 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXC004	Seal-In X-Classic Kit 20-65	16 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXG001	Seal-In X-Grip Kit 26-51	10 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXG004	Seal-In X-Grip Kit 20-65	16 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXV001	Seal-In X-Volume Kit 26-51	10 Seal-In X-Volume tätningsringar
I-RXV004	Seal-In X-Volume Kit 20-65	16 Seal-In X-Volume tätningsringar

OBS!

Tätningsringarna får **inte** användas av protesanvändare med drastiska volymförändringar inom en kort tidsperiod.

- **Grip:** Volymförändringar som överstiger 3 ply.
- **Classic:** Volymförändringar som överstiger 6 ply.
- **Volume:** Volymförändringar som överstiger 10 ply.

Tätningsringarna får endast användas i kombination med en lämplig liner från Iceross Seal-In X-familjen.

ICEROSS SEAL-IN® X TF



För transfemoralt amputerade protesanvändare som söker en bekväm suspensionslösning med vakuum.

Seal-In X TF har en flyttbar tätningsring som kan placeras för bästa möjliga komfort och suspension för varje enskild protesanvändare. Tålig textil som stabiliserar mjukdelarna och en distal ände med ny design för en tätare passform och bättre proprioception.

Kompatibel med Össurs flyttbara Seal-In-tätningsringar:


- X-Classic - för daglig användning
- X-Grip - för god rotationskontroll
- X-Volume - för hantering av volymreduktion

Liner och tätningsring beställs var för sig.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock® Vakuumventil 552 #L-552000 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544621 för Seal-In eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544611 för Unity

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55.
Storlekar Konisk:	23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Storlek på tätningsringarna:	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65.
Profil:	3 mm
Matrix:	Fulllängd

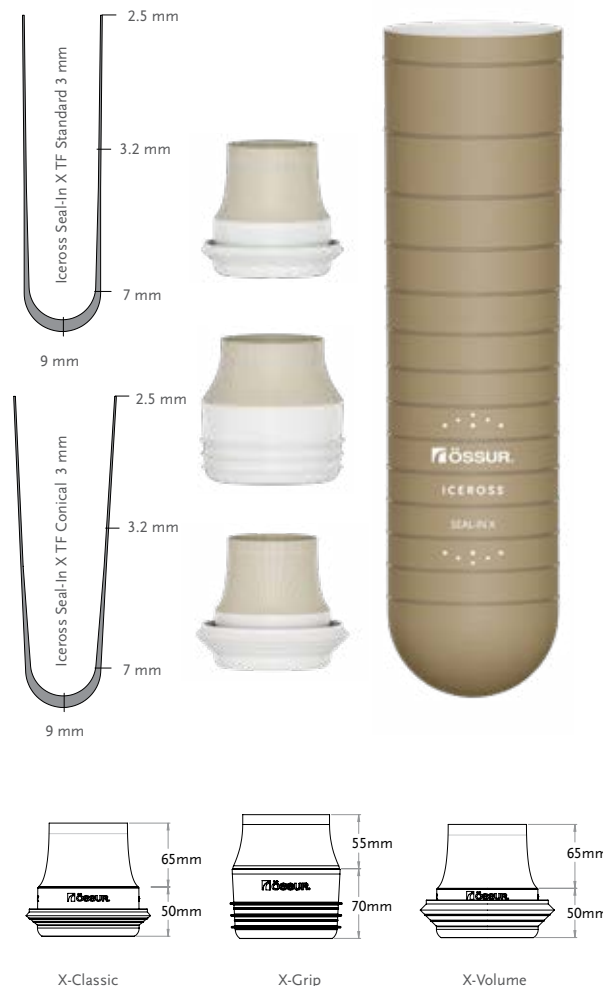

Obs! Tätningsringarna är försedda med en antifiktionsyta, Easy Glide, som underlättar påtagning och avtagning av proteshylsan, utan användning av glidspray.

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X

EGENSKAPER



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



CONICAL



EASY GLIDE®

* Easy Glide gäller endast tätningsringarna

ICEROSS SEAL-IN X TF – LINER

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-8532XX	Iceross Seal-In X TF Standard	Liner. Tätningsring beställs separat.
I-8632XX	Iceross Seal-In X TF Konisk	Liner. Tätningsring beställs separat.

XX = storlek

ICEROSS SEAL-IN® X TF

VAL AV STORLEK PÅ TÄTNINGSRING

En av följande metoder kan användas för att bestämma den korrekta storleken på tätningsringen:


Metod 1: Tätningsringskit

Den föredragna metoden för att bestämma rätt enhetsstorlek är genom att använda ett tätningsringskit. För art.nr., se tabell nedan.

1. Placera en tätningsring från kitet vid önskad plats **utanpå linern**. Ta med i beräkningen rekommenderat avstånd mellan hylsans lägsta kant och den översta tätningsläppen (se Fig. 1).
2. Kontrollera så att det inte uppstår någon deformation på enheten eller stumpen. Tätningsringen bör sitta säkert på plats utan att trycka för hårt.
3. Om tätningsringen inte sitter korrekt på önskad plats, välj en annan storlek eller flytta tätningsringen tills du uppnår önskat resultat.

OBS! Säkerställ att avståndet mellan proteshylsans lägsta kant och tätningsringens översta silikonkant är minst 3,8 cm.

Fig. 1

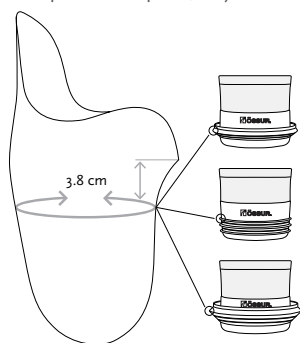

Metod 2: Omkretsmått direkt på huden


Mät omkretsen (i cm) på önskad plats direkt på huden. Se diagrammet nedan för att uppskatta rätt storlek på tätningsringen.

Förklaring till diagrammet:

Y = Stumpens omkretsmått taget direkt på huden (cm)


X = Storlek på tätningsringen (cm)

A = Åtsittande passform. B = Lös passform.

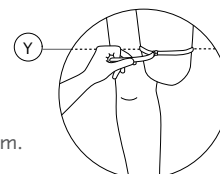

Exempel:

- Omkrets på 40 cm resulterar i tätningsringstorlek 44 eller 47.
- Omkrets på 26 cm resulterar i tätningsringstorlek 28 eller 30.

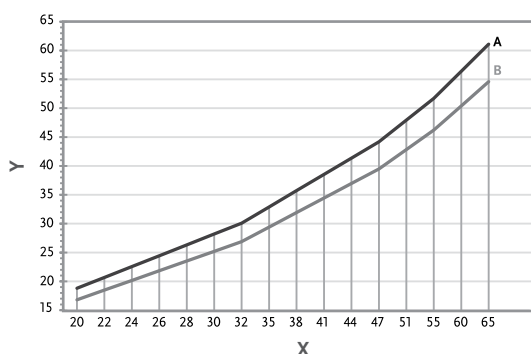

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ STUMPEN

Linerstorlek	Minimilängd*
23.5-28	16 cm
30-34	17 cm
36-40	18 cm
45	19 cm
50	20 cm
55	21 cm

*Med mjukdelarna hängande ned, mät stumpens längd från sittbensknölen till den distala änden. Kontrollera måttet i tabellen.



IFU: Seal-In X Seals

ICEROSS SEAL-IN X TF - TÄTNINGSRINGAR

Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-SXC0XX	Iceross Seal-In X-Classic	Seal-In X-Classic tätningsring
I-SXG0XX	Iceross Seal-In X-Grip	Seal-In X-Grip tätningsring
I-SXV0XX	Iceross Seal-In X-Volume	Seal-In X-Volume tätningsring
Art.nr.	Beskrivning	Innehåller
I-RXC001	Seal-In X-Classic Kit 26-51	10 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXC004	Seal-In X-Classic Kit 20-65	16 Seal-In X-Classic tätningsringar
I-RXG001	Seal-In X-Grip Kit 26-51	10 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXG004	Seal-In X-Grip Kit 20-65	16 Seal-In X-Grip tätningsringar
I-RXV001	Seal-In X-Volume Kit 26-51	10 Seal-In X-Volume tätningsringar
I-RXV004	Seal-In X-Volume Kit 20-65	16 Seal-In X-Volume tätningsringar

OBS!

Tätningsringarna får inte användas av protesanvändare med drastiska volymförändringar inom en kort tidsperiod.

- **Grip:** Volymförändringar som överstiger 3 ply.
- **Classic:** Volymförändringar som överstiger 6 ply.
- **Volume:** Volymförändringar som överstiger 10 ply.

Tätningsringarna får endast användas i kombination med en lämplig liner från Iceross Seal-In X-familjen.

ICEROSS SEAL-IN® X5 TF



Iceross Seal-In X5 TF är den första linern i sitt slag med 5 tättningsringar i silikon som ger optimal suspension och mycket god rotationskontroll. Iceross Seal-In X5 TF har även en armering som sträcker sig över hela linerns längd för att stabilisera mjukdelarna.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock® Vakuumventil 552 #L-552000 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544621 för Seal-In eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544611 för Unity

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55.
Storlekar Konisk:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
Profil:	3 mm
Matrix:	Fulllängd



Video: Iceross Seal-In Range Classroom
Catch-up | Össur
(Iceross Seal-In X5 = från 3:46)
7 min 42 sec

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X5

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



CONICAL

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlekar	Minimilängd på stumpen*
25-30	12.5 cm
32-40	13.5 cm
45-50	15.5 cm
55	16.5 cm

*Med mjukdelarna hängande ned, mät stumpens längd från sittbensknölen till den distala änden. Kontrollera måttet i tabellen.

ICEROSS SEAL-IN X5 TF

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-TF673XX	Standard 3 mm	Seal-In X5	Fulllängd
I-TF678XX	Konisk 3 mm	Seal-In X5	Fulllängd

XX = storlek

AEROFIT SEAL-IN®



AeroFit Seal-In är en 3D-printad liner med en andningsbar silikonstruktur, avsedd att användas tillsammans med Össurs ventilerande proteshylsa, AeroFit Socket. Silikonlinern ökar patientkomforten genom att minska fuktansamlingen i linern samtidigt som en säker Seal-In-vakuumsuspension bibehålls.



AeroFit-systemets unika design utnyttjar användarens egna rörelser för att ventilerar och driva ut luft ur hylsan, vilket främjar luftcirkulationen och ger en torrare känsla på huden. Användaren upplever en avsevärt förbättrad hud- och stumphälsa tack vare mikrohålsmönstret, den nätlignande silikonstrukturen och AeroFit Seal-In-linerns tyg, som transporterar bort fukt.

AeroFit Seal-In-linern finns i både standardprofil och konisk profil.

Seal-In-tättningsringen är belagda med Easy Glide-lågfriktionsbeläggning, vilket eliminerar behovet av alkoholspray eller andra smörjmedel vid påtagning.

AeroFit Seal-In är en av två komponenter i AeroFit-konceptet. För mer information om **AeroFit Socket**, se kapitlet "Össur Sockets".

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact Level:	Låg till hög
Linerinformation	
Storlekar Standard:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55.
Storlekar Konisk:	23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Profil:	3 mm
Matrix:	Fulllängd

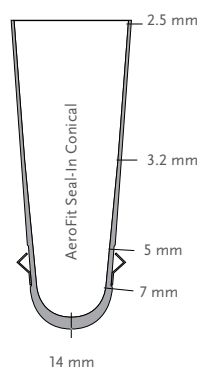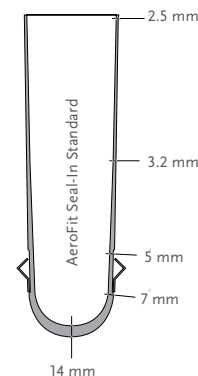

Video: AeroFit System
Classroom Catch-up | Össur
5 min 05 sec

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



CONICAL



BREATHABILITY



EASY GLIDE

AEROFIT SEAL-IN

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
AF-STFS0XX	Standard 3mm	Seal-In	Fulllängd
AF-STFC0XX	Conical 3mm	Seal-In	Fulllängd

ICEROSS SEAL-IN® TRANSFEMORAL





Iceorss Seal-In Transfemoral ger säkerhet och rörelsefrihet för lågt till extremt aktiva transfemoralt amputerade protesanvändare. Kompenserar för volymförändringar på upp till 6 ply.

Vakuumsuspension och rotationskontroll med enkel hantering för protesanvändaren.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med:

- Icelock® Vakuumventil 552 #L-552000 eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544621 för Seal-In eller
- Icelock® Vakuumventil 544 #L-544611 för Unity

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55.
Storlek Konisk:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
Profil:	3 mm
Matrix:	Fullängd

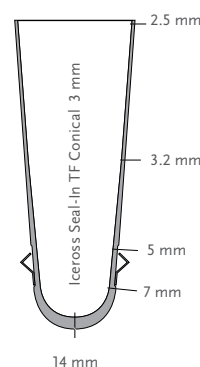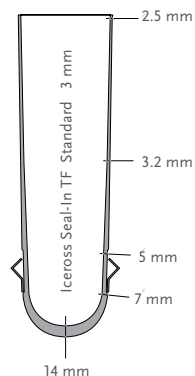

Video: Iceorss Seal-In Range Classroom Catch-up | Ossur
7 min 42 sec

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



CONICAL

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONSSTUMPEN

Linerstorlekar	Minimilängd på stumpen*
25-28	16 cm
30-34	17 cm
36-40	18 cm
45	19 cm
50	20 cm
55	21 cm

*Med mjukdelarna hängande ned, mät stumpens längd från sittbensknölen till den distala änden. Kontrollera måttet i tabellen.

ICEROSS SEAL-IN TRANSFEMORAL

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-7532XX	Standard 3 mm	Seal-In	Fullängd
I-7632XX	Konisk 3 mm	Seal-In	Fullängd

XX = storlek

4SEAL CLASSIC™




För transfemoralt amputerade protesanvändare.

Silikonet är hudvänligt och linern är enkel att rengöra. Försedd med ett s.k. Umbrellan-material för att lindra fantomsmärta. Fullängds-matrisen ger hög rivhållfasthet och förhindrar att kanten på linern rullar ner.

- Fyra tättningsringar ger säker suspension mellan stump och protes.
- Easy Glide för enkel på- och avtagning utan alkoholgel/spray samt enkel rengöring.
- Riktningsmarkeringar på in- och utsida gör det lättare att ta på linern rätt.
- Vattentålig - kan bäras under bad, simning och i dusch.
- Möjliggör gipsavgjutning utan isoleringsfolie

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50.
Storlekar Konisk:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Profil:	Standard eller konisk
Matrix:	Fullängd

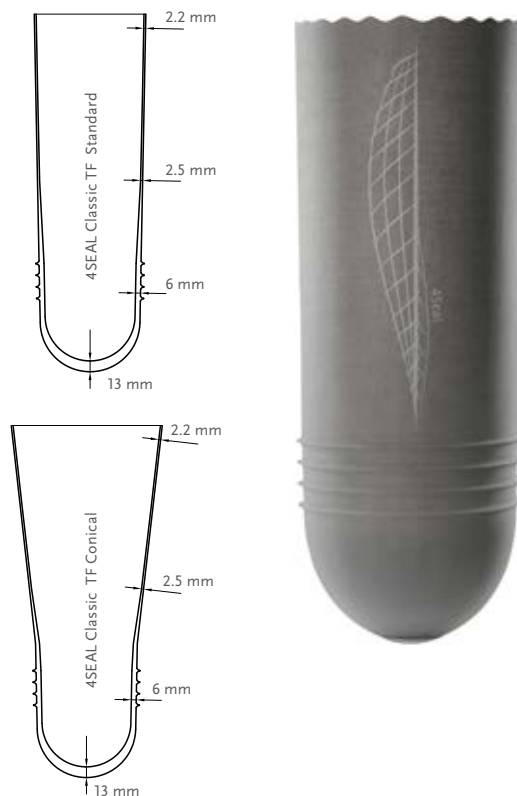

SUSPENSIONSMETOD



4SEAL

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



CONICAL



EASY GLIDE



UMBRELLAN

4SEAL CLASSIC

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
M8917XX	Standard	4 Seal	Fullängd
M8918XX	Konisk	4 Seal	Fullängd

XX = storlek

MINSTA REKOMMENDERADE LÄNGD PÅ AMPUTATIONS-STUMPEN


Linerstorlekar	Minimilängd på stumpen*
26.5-28	16 cm
30-34	17 cm
36-40	18 cm
45	19 cm
50	20 cm
55	21 cm

*Med mjukdelarna hängande ned, mät stumpens längd från sittbensknölen till den distala änden. Kontrollera måttet i tabellen.

4SEAL CLASSIC™

VAL AV STORLEK

1. Mät stumpens omkrets 4 cm från den distala änden (D).
Omkretsmåttet minus 0-1 cm = linerstorlek.
2. Mät stumpens längd (L) = från 4 cm upp på stumpens distala ände till perineum.
3. Mät stumpens omkrets i nivå med perineum(P).
4. **Val av profil: Standard eller Konisk**
Om omkretsmåttet i nivå med perineum (P) är **lägre** än standardvärdet i tabellen nedan, rekommenderas en standard liner (S).
Om omkretsmåttet i nivå med perineum (P) är **större** än standardvärdet, rekommenderas en konisk liner (K).

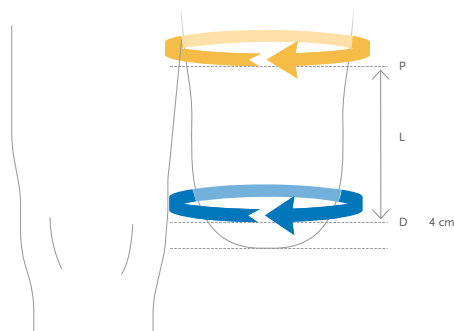

1. Omkretsmått 4 cm från distala änden (D)	1. Linerstorlek	2. Stumpens längd (L) 10-15	2. Stumpens längd (L) 15-20	2. Stumpens längd (L) 20-25	2. Stumpens längd (L) 25-30	2. Stumpens längd (L) 30-35
3. Omkretsmått i nivå med perineum (P)						
24 – 26,5	25	< 30 >	< 34 >	< 36 >	< 39 >	< 42 >
26,5 – 28	26,5	< 31 >	< 35 >	< 38 >	< 41 >	< 44 >
28 – 30	28	< 33 >	< 37 >	< 40 >	< 43 >	< 46 >
30 – 32	30	< 35 >	< 39 >	< 42 >	< 46 >	< 49 >
32 – 34	32	< 36 >	< 41 >	< 45 >	< 48 >	< 52 >
34 – 36	34	< 38 >	< 43 >	< 47 >	< 51 >	< 54 >
36 – 38	36	< 40 >	< 45 >	< 49 >	< 53 >	< 57 >
38 – 40	38	< 42 >	< 47 >	< 51 >	< 56 >	< 60 >
40 – 45	40	< 44 >	< 49 >	< 54 >	< 58 >	< 62 >
45 – 50	45	S	S	S	S	S
50 – 55	50	S	S	S	S	S
4. S=Standard, K=Konisk		S K	S K	S K	S K	S K

ICEROSS® TRANSFEMORAL LOCKING




Iceross Transfemoral Locking är den första suspensionslinern som exklusivt designades för att ge transfemoralt amputerade stabilitet och kontroll.

Bra stabilitet uppnås genom armeringen som sträcker sig över linerns hela längd. Detta i kombination med det storleksanpassade distala paraplyet gör att pumpningen minimeras.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 200-serien.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55.
Storlekar Konisk:	23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
Profil:	2 mm standard. 3 mm konisk.
Matrix:	Fulllängd

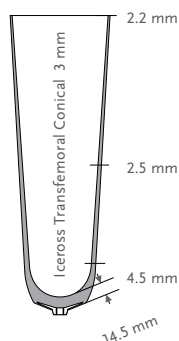

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



CONICAL

ICEROSS TRANSFEMORAL LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-7032XX	Standard 2 mm	Locking	Fulllängd
I-7132XX	Konisk 3 mm	Locking	Fulllängd

XX = storlek



AKOS™



För låg- till högaktiva transfemoralt amputerade protesanvändare som föredrar distal förankring med låspinne eller linkoppling. Avsedd för både temporära och definitiva proteser. Linern är transparent vilket underlättar inspektion av stumpen.

- Easy Glide för enkel på- och avtagning utan alkoholgel/spray och enkel rengöring.
- Riktningssmarkeringar på in- och utsida gör det lättare att ta på linern rätt
- God vidhäftning vid mjukdelarna minskar påfrestningen på stumpen.
- Vattentålig - kan bäras under bad, simning och i dusch.
- Möjliggör gipsavgjutning utan isoleringsfolie

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	27, 31, 35, 39, 43, 47, 52
Storlekar Konisk:	24, 27, 31, 35, 39
Profil:	Standard eller Konisk
Matrix:	Fulllängd

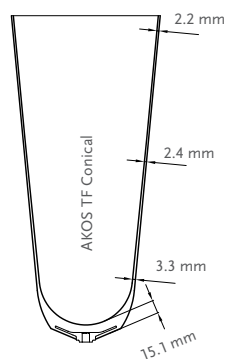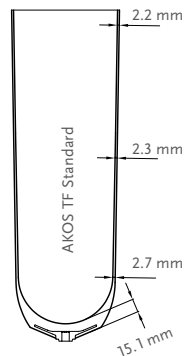

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



CONICAL



EASY GLIDE

AKOS


Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
M8955XX	Standard	Locking	Fulllängd
M8956XX	Konisk	Locking	Fulllängd

XX = storlek

AKOS™

VAL AV STORLEK

1. Mät stumpens omkrets 4 cm från den distala änden (D).
Omkretsmåttet minus 0-1 cm = linerstorlek.
2. Mät stumpens längd (L) = från 4 cm upp på stumpens distala ände till perineum.
3. Mät stumpens omkrets i nivå med perineum (P).
4. **Val av profil: Standard eller Konisk**
Om omkretsmåttet i nivå med perineum (P) är **lägre** än standardvärdet i tabellen nedan, rekommenderas en standard liner (S).
Om omkretsmåttet i i nivå med perineum (P) är **större** än standardvärdet, rekommenderas en konisk liner (K).

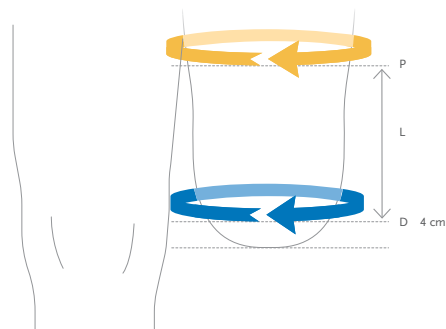

1. Omkretsmått 4 cm från distala änden (D)	1. Linerstorlek	2. Stumpens längd (L) 10-15	2. Stumpens längd (L) 15-20	2. Stumpens längd (L) 20-25	2. Stumpens längd (L) 25-30	2. Stumpens längd (L) 30-35	2. Stumpens längd (L) 35-40
3. Omkretsmått i nivå med perineum (P)							
24-27	24	-28 >	-30 >	-33 >	-35 >	-37 >	-40 >
27-31	27	< 31 >	< 34 >	< 37 >	< 39 >	< 42 >	< 44 >
31-35	31	< 34 >	< 37 >	< 40 >	< 43 >	< 46 >	< 49 >
35-39	35	< 39 >	< 42 >	< 45 >	< 48 >	< 52 >	< 55 >
39-43	39	< 43 >	< 46 >	< 50 >	< 54 >	< 57 >	< 60 >
43-47	43	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >
47-52	47	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >
52-57	52	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >
4. S=Standard, K=Konisk		S K	S K	S K	S K	S K	S K



RELAX™ TRANSFEMORAL



För låg- till högaktiva transfemoralt amputerade protesanvändare som föredrar distal förankring med låspinne eller linkoppling. Försedd med ett s.k. Umbrellan-material för att lindra fantomsmärta.*

- Silikonet är hudvänligt och enkelt att rengöra.
- Easy Glide för enkel på- och avtagning utan alkoholgel/spray och enkel rengöring
- Riktningssmarkeringar på in- och utsida gör det lättare att ta på linern rätt
- God vidhäftning vid mjukdelarna minskar påfrestningen på stumpen
- Fullängdsmatrisen förhindrar att kanten på linern rullar ner.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	27, 31, 35, 39, 43, 47, 52
Storlekar Konisk:	24, 27, 31, 35, 39
Profil:	Standard eller Konisk
Matrix:	Fullängd

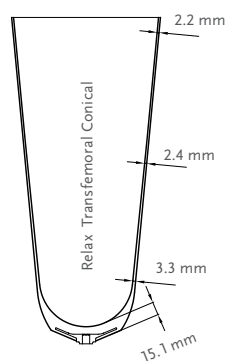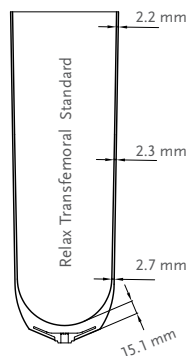

*Kern, U., Altkemper, B., Kohl, M. (2006). "Management of Phantom Pain med a Textile Electromagnetically-Acting Stump Liner". J Pain Symptom Manage. Oct;32(4):352-60.

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



CONICAL



EASY GLIDE



UMBRELLAN

RELAX TRANSFEMORAL


Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
M8957XX	Standard	Locking	Fullängd
M8958XX	Konisk	Locking	Fullängd

XX = storlek

RELAX™ TRANSFEMORAL

VAL AV STORLEK

1. Mät stumpens omkrets 4 cm från den distala änden (D).
Omkretsmåttet minus 0-1 cm = linerstorlek.
2. Mät stumpens längd (L) = från 4 cm upp på stumpens distala ände till perineum.
3. Mät stumpens omkrets i nivå med perineum (P).
4. **Val av profil: Standard eller Konisk**
Om omkretsmåttet i nivå med perineum (P) är **lägre** än standardvärdet i tabellen nedan, rekommenderas en standard liner (S).
Om omkretsmåttet i i nivå med perineum (P) är **större** än standardvärdet, rekommenderas en konisk liner (K).

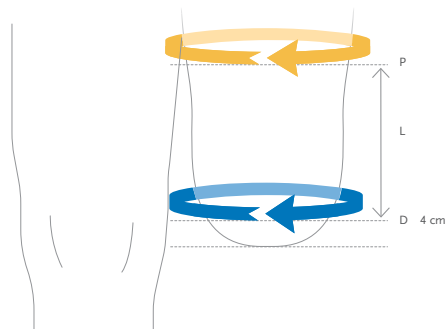

1. Omkretsmått 4 cm från distala änden (D)	1. Linerstorlek	2. Stumpens längd (L) 10-15	2. Stumpens längd (L) 15-20	2. Stumpens längd (L) 20 – 25	2. Stumpens längd (L) 25-30	2. Stumpens längd (L) 30-35	2. Stumpens längd (L) 35-40
3. Omkretsmått i nivå med perineum (P)							
24-27	24	< 28 >	< 30 >	< 33 >	< 35 >	< 37 >	< 40 >
27-31	27	< 31 >	< 34 >	< 37 >	< 39 >	< 42 >	< 44 >
31-35	31	< 34 >	< 37 >	< 40 >	< 43 >	< 46 >	< 49 >
35-39	35	< 39 >	< 42 >	< 45 >	< 48 >	< 52 >	< 55 >
39-43	39	< 43 >	< 46 >	< 50 >	< 54 >	< 57 >	< 60 >
43-47	43	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >
47-52	47	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >
52-57	52	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >	< S >
4. S=Standard, K=Konisk		S K	S K	S K	S K	S K	S K

ICEROSS® UPPER-X LOCKING




Avsedd för de med förlust av övre extremiteter p.g.a. amputation eller deformitet.

Utformad för att ge optimal protesfunktion och komfort för över- och underarmsamputerade. Den tunna profilen (1 mm), ger god passform. Maximal suspension erhålls då armeringen sträcker sig över hela linerens längd.

Aktiv Hudvård - tillverkad i ett silikonmaterial som innehåller Aloe Vera och Vaseline®.

Tygklädd utsida för enklare på- och avtagning.

Össur rekommenderar att linern används tillsammans med Icelock® 700 -serien.

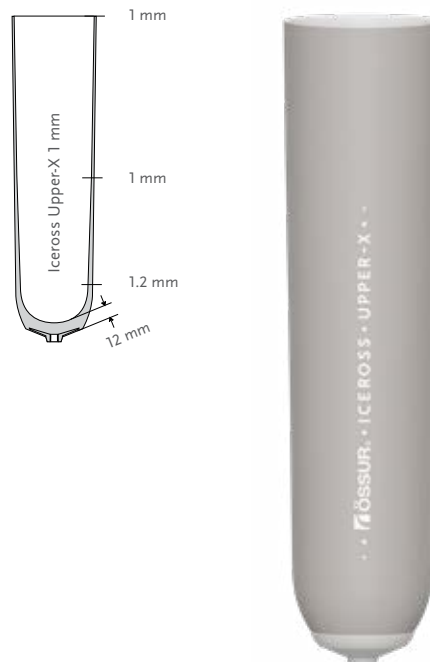

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transradial och Transhumeral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar:	12, 14, 16, 18, 20, 22.
Profil:	1 mm

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE

ICEROSS UPPER-X LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-8131XX	1 mm	Locking	Fulllängd

XX = storlek



För val av storlek, mät stumpens omkrets ca 4 cm från distala änden och välj liner av rätt mått eller storleken under.

TILLBEHÖR

ICEROSS® DISTAL CUP

Används till spetsiga amputationsstumpar som komplement till Iceross silikonliner. Används under silikonlinern. Distal Cup fyller ut och skyddar vid otillräcklig mjukdelsvävnad. Tillverkad i hudvårdande DermoGel (Aktiv Hudvård).

Produktinformation	
Storlekar:	06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26.

För att välja rätt storlek på Distal Cup, mät omkretsen ca 4 cm ovanför stumpens distala ände. Välj en Distal Cup som är en eller två storlekar mindre än uppmätt mått och rulla på.

När Iceross-liner används tillsammans med Distal Cup, ska måttet för Iceross-linern tas med Distal Cup på. För att välja rätt Iceross-storlek, mät omkretsen cirka 4 cm ovanför den distala änden med Distal Cup-linern pårullad. Välj Iceross-storlek av uppmätt mått eller storleken närmast under.

Art.nr.	Beskrivning
I-3000XX	Distal Cup



ICEROSS® PADS

Tillverkade i en mjuk silikongel som säkerställer dämpning och tryckavlastning i högt belastade områden på stumpen. Iceross Pads kan även användas som utfyllnad i djupa veck eller för volymkontroll av proteshylsan. De placeras direkt på önskat ställe på stumpen och deras starka vidhäftning mot huden gör att de sitter kvar på plats. Rulla därefter på silikonlinern som vanligt.

Tjocklek på Iceross Pads: 10 mm i mitten för att sedan gradvis tunna ut.

Finns i 7 storlekar som följer storleken på distala adaptern i Iceross-linern.



Produktinformation		
Art.nr.	Storlek	Passar Iceross storlek:
I-610338	37 mm	12-20
I-610348	45 mm	22-23.5
I-610358	54 mm	25-28
I-610368	62 mm	30-32

Produktinformation		
Art.nr.	Storlek	Passar Iceross storlek:
I-610378	70 mm	34-36
I-610388	77 mm	38-42
I-610398	86 mm	45

SILICONE ADHESIVE

Avsett för akuta reparationer av silikonprodukter såsom Iceross eller sleeves samt för försegling av tygkanten på Iceross-linern efter trimning.

Art.nr.	Beskrivning
I-400310	Silikonlim 10 ml



MSDS: Silicone Adhesive



TILLBEHÖR

LUBRICANT SPRAY

Iceross Clean & Simple Lubricant Spray underlättar på- och avtagningen av liners utan tyg och Iceross Seal-In Liners utan Easy Glide-försedda tättningsringar.

Art.nr.	Beskrivning
S-610250	Iceross Clean & Simple Lubricant Spray 250 ml



LINER SPRAY PEN

Kan fyllas med glidspray för att underlätta påtagningen av Iceross Seal-In-liners utan Easy Glide-försedda tättningsringar.

Art.nr.	Beskrivning
I-990100	Liner Spray Pen



WAVE SCISSORS

- Trimningsverktyg för liners.
- Ger en vågformad kant vilket minskar det cirkulära trycket på stumpen.

Art.nr.	Beskrivning
1950006	Wave Scissors



ICEROSS® CURVEMASTER

Ger möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt trimma kanterna på silikonliners. CurveMaster är utformad för att ge silikonlinern en mjuk, väl avrundad kant för optimal patientkomfort.

Art.nr.	Beskrivning
K-220000	Iceross CurveMaster
K-200150	Ersättningsknivar till CurveMaster (2 stk/fp)

Innehåller:

- övre skärhjul (K-200126)
- nedre skärhjul (K-200127)
- friktionsring (K-200118)



LINER DRYING STAND

Linerhållare för liners. Kan användas för förvaring av linern över natten eller som torkställning efter det att linern har tvättats.

Art.nr.	Beskrivning
P-940001	Liner Drying Stand



TILLBEHÖR

PROSTHETIC BAGS

Protesväska i kraftigt bomullstyg med handtag, ställbar axelrem och utvändig ficka. Finns för underbens- och överbensproteser.

Färg: Blå.

Art.nr.	Beskrivning
P-960110	Protesväska för underben - 84 cm x 41 cm
P-960120	Protesväska för överben - 118 cm x 46 cm



PROTESSTRUMPOR

ICEROSS SEAL-IN® SOCKS

Används tillsammans med Iceross Seal-In liners för att förbättra passformen vid volymreduktion.
Kan tvättas i maskin 40°. Får ej torktumlas.

OBS! Vid användning med Iceross Dermo Seal-In & Iceross Seal-In V:
Strumpan är endast avsedd för bruk proximalt om tättningsringen (se fig. 1 & 2). Strumpan hålls på plats av tättningsringens kant. Om strumpan läggs ovanpå tättningsringen, förloras suspensionen.

OBS! Vid användning med Iceross Seal-In X5 & 4Seal Classic:
Förlust av suspension kan uppstå om strumpan placeras över tätningen. Dra strumpan över linern tills den distala änden är i jämnhöjd med den proximala kanten på den översta tätningen (se fig. 3).

Iceross Seal-In Socks kan användas i kombination med tättningsringarna **Seal-In X-Classic** och **Seal-In X-Volume**. Strumpan ska placeras under tätningssläppen. Strumpan får **aldrig** placeras mellan linern och tätningen (se fig. 4).

Art.nr.	Storlek	Iceross-storlek	Längd	Ply
K-531110	10	16-25	35 cm	1
K-531113	13	26.5-34	35 cm	1
K-531116	16	36-45	35 cm	1
K-531120	20	50-55	35 cm	1
K-531310	10	16-25	35 cm	3
K-531313	13	26.5-34	35 cm	3
K-531316	16	36-45	35 cm	3
K-531320	20	50-55	35 cm	3



Fig.1. Iceross Dermo Seal-In

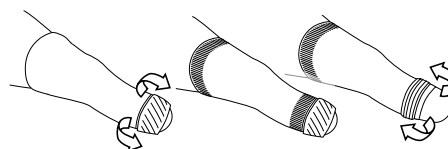


Fig. 2. Iceross Seal-In V

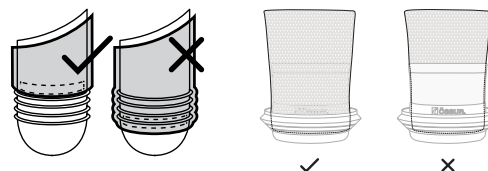


Fig. 3. Iceross Seal-In X5 & 4Seal Classic Fig.4. Seal-In X-Classic/Seal-In X-Volume

ICEROSS® INTERFACE SHEATH

Tunn stumpstrumpa i nylon för användning med Iceross. Minimal friktion mellan nylon och proteshylsa gör det lätt att komma i proteshylsan på ett korrekt sätt. Strumporna har en tunn, fint stickad avslutning i distala änden för att inte stjäla plats i botten av hylsan.
Kan tvättas i maskin 40°. Får ej torktumlas.

Art.nr.	Beskrivning	Längd
K-190200	Interface Sheath	28 cm



ICEROSS® SOCKS – 2- & 4-PLY

Formbeständiga, slitstarka stumpstrumpor tillverkade i nylon spandex med hål i botten för användning i kombination med Iceross silikonliner. Strumporna har en tunn, fint sticka avslutning i distala änden för att inte stjäla plats i botten av hylsan.
Kan tvättas i maskin 40°. Får ej torktumlas.

Art.nr.	Beskrivning	Längd
K-520002	Iceross Sock 2-Ply – 2 st/fp	32 cm
K-520004	Iceross Sock 4-Ply – 2 st/fp	33 cm



PROTESSTRUMPOR

KNIT-RITE SOFT-SOCKS®

Knit-Rite Soft-Socks® är designade för att kompensera för stumpens volymförändringar. Finns med respektive utan stickat hål distalt för användning tillsammans med Locking respektive Cushion Liners. Sömlös stickning med rundad yta distalt. Mjuk och bekväm. Kan användas med eller utan liner.

Försedd med s.k. "non-roll" upptill för att förhindra att strumpan korvar sig och rullar ner. Instickat, förstärkt hål distalt för att inte stjäla plats i botten av hylsan samt för minimal stretch.

Finns i 2 tjocklekar; 3-ply och 5-ply. 3 stk/fp.



Knit-Rite Soft-Socks utan hål (3-pack) – Svart. Polyester/Lycra®							
Lightweight	3-Ply	5-Ply	Storlek	Längd	Strumpans vidd proximalt	Strumpans vidd distalt*	Passar liner-storlek
1SB1NASH3	1SB3NASH3	1SB5NASH3	Narrow Short	25–35 cm	15 cm	10 cm	18, 20, 22
1SB1NAMD3	1SB3NAMD3	1SB5NAMD3	Narrow Medium	40–50 cm	15 cm	10 cm	18, 20, 22
1SB1NALG3	1SB3NALG3	1SB5NALG3	Narrow Long	55–70 cm	15 cm	10 cm	18, 20, 22
1SB1RGXS3	1SB3RGXS3	1SB5RGXS3	Regular X-Short	20–30 cm	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1SB1RGSH3	1SB3RGSH3	1SB5RGSH3	Regular Short	25–35 cm	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1SB1RGMD3	1SB3RGMD3	1SB5RGMD3	Regular Medium	40–50 cm	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1SB1RGLG3	1SB3RGLG3	1SB5RGLG3	Regular Long	55–70 cm	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1SB1WDSH3	1SB3WDSH3	1SB5WDSH3	Wide Short	25–35 cm	23 cm	15 cm	28, 30, 32, 34
1SB1WDMD3	1SB3WDMD3	1SB5WDMD3	Wide Medium	40–50 cm	23 cm	15 cm	28, 30, 32, 34
1SB1XWSH3	1SB3XWSH3	1SB5XWSH3	X-Wide Short	25–35 cm	25 cm	17.5 cm	34, 36, 38, 40
1SB1XWMD3	1SB3XWMD3	1SB5XWMD3	X-Wide Medium	40–50 cm	25–30 cm	17.5–20 cm	36, 38, 40, 42, 45

*Mättet anger vidden 5 cm från strumpans distala ände

Knit-Rite Soft-Socks med hål (3-pack) – Svart. Polyester/Lycra®							
Lightweight	3-Ply	5-Ply	Storlek	Längd	Strumpans vidd proximalt	Strumpans vidd distalt*	Passar liner-storlek
1SBSNASH3	1SB3SNASH3	1SB5SNASH3	Narrow Short	25–35 cm	15 cm	10 cm	18, 20, 22
1SBSNAMD3	1SB3SNAMD3	1SB5SNAMD3	Narrow Medium	40–50 cm	15 cm	10 cm	18, 20, 22
1SBSRGXS3	1SB3SRXS3	1SB5SRXS3	Regular X-Short	20–30 cm)	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1SBSRGSH3	1SB3SRSH3	1SB5SRSH3	Regular Short	25–35 cm	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1SBSRGMD3	1SB3SRMD3	1SB5SRMD3	Regular Medium	40–50 cm	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1SBSRGLG3	1SB3SRLG3	1SB5SRLG3	Regular Long	55–70 cm	17.5–20 cm	10–12.5 cm	23.5, 25, 26.5, 28
1BSWDSH3	1SB3SWSH3	1SB5SWSH3	Wide Short	25–35 cm	23 cm	15 cm	28, 30, 32, 34
1BSWDMD3	1SB3SWMD3	1SB5SWMD3	Wide Medium	40–50 cm	23 cm	15 cm	28, 30, 32, 34

*Mättet anger vidden 5 cm från strumpans distala ände

PROTESSTRUMPOR

COMFORT SCS

För kompressionsbehandling efter benamputation.


- Antibakteriella egenskaper minimerar lukt
- Slät söm distalt och mjuka övergångar
- Silikon i TT-strumpans översta del förhindrar nedrullning
- Anpassningsbar positionering av höftfästet på TF-strumpan för precis placering av förslutningen

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral / Transtibial amputation, knäexartikulation




Storleksinformation, Transfemoral						
Stl.	Omkrets		Art.nr.			
	cF ²	cG ¹	Short 18–22 cm	Medium 23–27 cm	Long 28–32 cm	X-Long 33–37 cm
1	30–32 cm	42–45 cm	AK_S0W1	AK_M0W1	AK_L0W1	AK_X0W1
2	32–34 cm	45–49 cm	AK_S0W2	AK_M0W2	AK_L0W2	AK_X0W2
3	35–38 cm	49–53 cm	AK_S0W3	AK_M0W3	AK_L0W3	AK_X0W3
4	38–41 cm	53–57 cm	AK_S0W4	AK_M0W4	AK_L0W4	AK_X0W4
5	41–44 cm	57–61 cm	AK_S0W5	AK_M0W5	AK_L0W5	AK_X0W5
6	44–47 cm	61–65 cm	AK_S0W6	AK_M0W6	AK_L0W6	AK_X0W6

För komplett art.nr., ersätt _ med önskad kompressionsgrad: 1=20–30 mmHg 2=30–40 mmHg

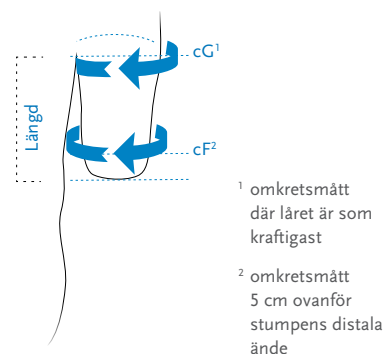

Storleksinformation, Transtibial						
Stl.	Omkrets		Art.nr.			
	cC ⁵	cE ⁴	cF ³	Short 28–34cm	Medium 35–41cm	Long 42–48cm
0	26–28 cm	28–30 cm	38–40 cm	BK_S0N0	BK_M0N0	BK_L0N0
1	28–30 cm	30–32 cm	40–42 cm	BK_S0N1	BK_M0N1	BK_L0N1
2	30–33 cm	32–35 cm	42–45 cm	BK_S0N2	BK_M0N2	BK_L0N2
3	33–36 cm	35–38 cm	45–48 cm	BK_S0N3	BK_M0N3	BK_L0N3
4	36–39 cm	38–41 cm	48–51 cm	BK_S0N4	BK_M0N4	BK_L0N4
5	39–42 cm	41–44 cm	51–54 cm	BK_S0N5	BK_M0N5	BK_L0N5
6	42–45 cm	44–47 cm	54–57 cm	BK_S0N6	BK_M0N6	BK_L0N6

För komplett art.nr., ersätt _ med önskad kompressionsgrad: 1=20–30 mmHg 2=30–40 mmHg

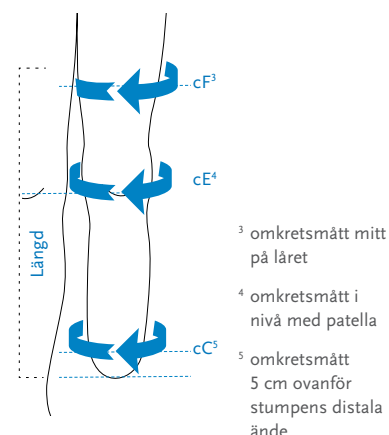

PROTESSTRUMPOR

RELAX NIGHT CARE

Relax Night Care-strumpan är designad för att hjälpa till att minska fantomsmärta. Tyget är hudvänligt och behagligt att bära.

- För känsliga stumpar med särskilt behov av skydd
- Möjliggör maximal minskning av fantomsmärta
- Kan med fördel användas på natten när protesen inte bärs
- Stumpstrumpans övre stickning säkerställer att den sitter kvar på sin plats


Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial och knäexartikulation

Produktinformation			
Art.nr.	Storlek	Omkretsmått	Längd
188000S	S	20–26 cm	35 cm
188000M	M	26–33 cm	35 cm
188000L	L	33–42 cm	35 cm
18800XL	XL	42–52 cm	35 cm
1880XXL	XXL	52–62 cm	35 cm

EGENSKAPER



UMBRELLAN

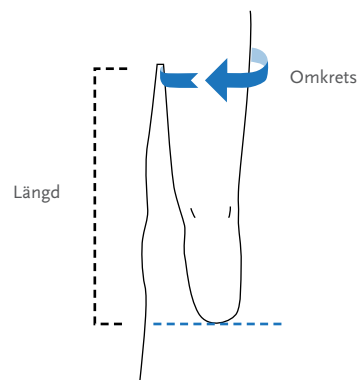


PROTESSTRUMPOR

VOLUME COMPENSATION SOCK

Volymkompenserande stumpstrumpa med integrerat antiglidband i strumpans övre del. Stumpstrumpan kan lätt förkortas genom smart EASY CUT-teknologi.

Stumpstrumpan kompenserar för volymförändringar och kan lätt förkortas till fem olika längder utan att den övre kanten behöver sys om eller förstärkas. Integrerad grepppremsa säkerställer att stumpstrumpan sitter på plats mot linern och förhindrar nedhasning.

- Kan användas tillsammans med följande liners:
Iceross Seal-In X5, Iceross Seal-In X5 TF, 4Seal Classic.
- Grepppremsan på stumpstrumpans insida kan fixeras proximalt om tätningsringarna. Ingen fixering under tätningsringen behövs.

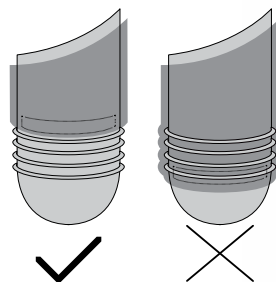

Stumpstrumpa med Easy Cut-teknologi.

Storlekstabell				
Art.nr.	Storlek	Standardliner, stl.	Konisk liner, stl.	Längd
1880009	XS	18–23,5	–	24 cm
1880010	S	26,5–32	25–28	24 cm
1880011	M	34–40	30–34	24 cm
1880012	L	45–50	36–40	24 cm

MATERIAL

FLEX EVA

Material för tillverkning av en flexibel innerhylsa. Passar bra vid tillverkning av traditionell sughylsa eller tillsammans med 4Seal, Seal-In liners och Iceross Cushion liners.

Processtemperatur (ugnstemperatur): 150-160°.

Hårdhet (Shore D): 39.

Art.nr.	Färg	Storlek
1820610	Vit	400x400x10 mm
1820612	Vit	400x400x12 mm
1820615	Vit	400x400x15 mm



KOMPRESSIONSTRIKÅ

Kompressionstrikå för avgjutning av exempelvis stäskal, lårbensprotet, korsett etc.

Art.nr.	Bredd	Längd
6041012	30 cm	10 m



BOMULLSTRIKÅSLANG

Trikåslang av 100% bomull med god elasticitet. Kraftig och behaglig kvalitet gör trikåslangen behaglig att bära under olika ortoser såsom rigida ryggortoser, fraktur-ortoser etc.

Art.nr.	Bredd	Längd
604003	3" 7,5 cm	22,5 m
604004	4" 10,0 cm	22,5 m
604005	5" 12,5 cm	22,5 m
604006	6" 15,0 cm	22,5 m

Art.nr.	Bredd	Längd
604008	8" 20,0 cm	22,5 m
6040010	10" 25,0 cm	22,5 m
6040012	12" 30,0 cm*	22,5 m

*Beställningsvara



PVA-FOLIE 100

Maskinsvetsade strutar av hög kvalitet, förpackade om 20 st per förpackning. För att undvika uttorkning av folien ligger rullarna i plastpåse som i sin tur ligger i kartong. Strutlängd 100 cm.

Art.nr.	Bredd	Längd
601004	4" (100 mm)	100 cm
601006	6" (150 mm)	100 cm
601008	8" (200 mm)	100 cm

Art.nr.	Bredd	Längd
6010010	10" (250 mm)	100 cm
6010012	12" (300 mm)	100 cm
6010014	14" (350 mm)	100 cm



ÖSSUR SOCKETS

ÖSSUR TRANSFEMORAL SOLUTIONS



DIRECT SOCKET TF



AEROFIT®



CONNECT TF

ÖSSUR TRANSTIBIAL SOLUTIONS



DIRECT SOCKET TT

ÖSSUR SOCKETS

EGENSKAPER

VENTILERANDE FÖRMÅGA

Ett ventilerande gränssnitt i proteshylsan som effektivt minskar fuktansamling i linern.



BREATHABILITY

DIRECT SOCKET SYSTEM

Direct Socket erbjuder ett mobilt proteshylsetillverkningssystem och endast ett besök krävs för att tillverka en protesylsa. Avlastningar för tryckpunkter görs före avgjutningen vilket eliminerar behovet av efterjusteringar.



DIRECT SOCKET SYSTEM

WEATHERPROOF

En väderbeständig enhet tillåter användning i våt och/eller fuktig miljö. Den tillåter *inte* nedsänkning i vatten. Enheten klarar stänk av färskvatten men ska torkas av noggrant efteråt. Färskvatten inkluderar kranvatten (sötvatten), exkluderar saltvatten och klorerat vatten. OBS! För att en protes skall anses som väderbeständig, måste övriga proteskomponenter också vara väderbeständiga.



WEATHERPROOF

WATERPROOF

Oavsett om komponenten utsätts för sötvatten, saltvatten eller klorerat vatten, ger Össurs vattentäta komponenter det skydd som behövs. Användning av förstklassigt tillverkningsmaterial ger ett permanent skydd mot skadligt intrång av vatten, även efter nedsänkning, och komponentdelarna fortsätter att ge den funktion som kan förväntas.



WATERPROOF

DIRECT SOCKET

INTRODUKTION

Direct Socket är en standardiserad, användarfokuserad hylslösning för både transfemoralt och transtibialt amputerade på alla aktivitetsnivåer som gör det möjligt att tillverka och prova ut en högkvalitativ, specialanpassad proteshylsa med god passform för att, vid ett och samma besökstillfälle, kunna leverera en komplett benprotes.

Proteshylsan tillverkas på samma sätt varje gång och processen och hylslösningen är framtagen för att ge brukaren en så god upplevelse som möjligt. Ortopedingenjören kan använda besökstiden mer effektivt och protesanvändaren behöver inte göra så många resor till kliniken.

Direct Socket-komponenter:

- Casting liners
- Material med alla förbrukningsartiklar som behövs för att tillverka en proteshylsa, inklusive fiberfläta och resin
- Direct Socket Tool kit inklusive Icecast-blåsa/pump och EVA Relief Pads

Icecast, som ingår i Direct Socket Tool kit, är ett tryckavgjutningssystem med en kammare som har utformats för att distribuera ett jämnt tryck för att forma mjukdelarna under avgjutning. Det ger kontroll över mjukdelarna under avgjutningsprocessen vilket minskar den totala produktionstiden och säkerställer ett repeterbart, korrekt resultat. Med EVA Relief Pads kan justeringar för tryckpunkter göras före avgjutningen så att inga efterjusteringar behövs.

Direct Socket-konceptet:

- Innehåller alla verktyg och allt material som behövs för att tillverka en slutlig proteshylsa
- Tillverkning och leverans vid en enda session
- Standardiserad process – konsekventa resultat
- Ren tillverkningsprocess tack vare slutet resinsystem
- Hylsan har en adapter med 4 hål vilket gör att den kan användas med olika lås- eller suspensionsvarianter
- CE-märkt, testad enligt ISO 10328



DIRECT SOCKET – KOMPATIBLA LINERS



OBS: Nedanstående liners lämpar sig för användning med Direct Socket. Användning av andra liners med Direct Socket rekommenderas *inte*. Det kan leda till att en ny Direct Socket-hylsa måste tillverkas på grund av dålig passform, och/eller leda till skador på användaren. Storleken på den liner som väljs ska matcha storleken på den Iceross Direct Casting Liner som används under hylstillverkningen. **Observera att endast Iceross TT-liners med 3 mm:s profil kan användas, ej 6 mm.**

SEAL-IN – TRANSTIBIAL				HYBRID – TRANSTIBIAL
ICEROSS SEAL-IN® X	ICEROSS SEAL-IN® V WAVE Standard & High Profile	ICEROSS SEAL-IN® X5 Med & utan Wave	ICEROSS DERMO SEAL-IN® (HSM)	ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING HYBRID Används tillsammans med Icelock 562

LOCKING – TRANSTIBIAL				CUSHION – TRANSTIBIAL		
ICEROSS DERMO® LOCKING Med & utan Wave	ICEROSS COMFORT® LOCKING Med & utan Wave	ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING Med & utan Wave	ICEROSS® SPORT LOCKING	ICEROSS DERMO® CUSHION Med & utan Wave	ICEROSS COMFORT® CUSHION	ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION Med & utan Wave

SEAL-IN – TRANSFEMORAL		LOCKING – TRANSFEMORAL	HYBRID – TRANSFEMORAL
ICEROSS SEAL-IN® X5 TF Standard & Konisk	ICEROSS SEAL-IN® TRANSFEMORAL Standard & Konisk	ICEROSS® TRANSFEMORAL LOCKING Standard & Konisk	ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING TF HYBRID Används tillsammans med Icelock 850

DIRECT SOCKET TT



Direct Socket TT är en proteshylselösning för transtibialt amputerade på alla aktivitetsnivåer.

Genom att använda Direct Socket-material och -verktyg erhålls en standardiserad tillverkningsprocess. Materialet levereras i kit med alla de förbrukningsartiklar som krävs för att tillverka en proteshylsa.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	100 kg - för 4" flätor 166 kg - för 5" & 7" flätor



DIRECT SOCKET
SYSTEM



WEATHERPROOF



Video: Direct Socket TT -
Summary. 4 min 55 sec.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

MATERIAL-KIT

Art.nr.	Beskrivning
M-500104	Direct Socket, 4" Glasfiberfläta med distal adapter (S), neutralt resin
M-500105	Direct Socket, 5" Glasfiberfläta med distal adapter (M), neutralt resin
M-500107	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (M), neutralt resin
M-501107	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (L), neutralt resin
M-500114	Direct Socket, 4" Glasfiberfläta med distal adapter (S), svart resin
M-500115	Direct Socket, 5" Glasfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-500117	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-501117	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (L), svart resin
M-500205	Direct Socket, 5" Kolfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-500207	Direct Socket, 7" Kolfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-500314	Direct Socket, 4" Basaltfiberfläta med distal adapter (S), svart resin
M-500315	Direct Socket, 5" Basaltfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-500317	Direct Socket, 7" Basaltfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-501317	Direct Socket, 7" Basaltfiberfläta med distal adapter (L), svart resin



Distala adapterar:



Small (S)*



Medium (M)



Large (L)

*OBS! Modifierad design för Small (S) distala adaptern;
"spår" för Icelock 600-tryckknapp.

Innehåller:

- Glasfiberfläta (4", 5" eller 7"), Kolfiberfläta (5" eller 7") eller Basaltfiberfläta (4", 5" eller 7")
- Resinpatron (200 ml eller 400 ml, neutral eller svart färg)
- Silikonfolie 2 ark. Längd: 60 cm
- 1 Distal silikonkopp
- Trimlinjeband
- Skyddsplast (2 stk)

DIRECT SOCKET TT

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

VAL AV FIBERFLÄTA

Nedanstående tabell är en vägledning för hur du väljer rätt storlek på fiberflätan.

Linerstorlek	Storlek på flätan
16 – 22	4"
23.5 – 30	5"
32 – 34	7"




[Videos: Direct Socket TT - Step by step](#)

ICEROSS® DIRECT CASTING LINER TT

Vid direktlaminering på stump med Direct Socket System används en speciell avgjutningslinier – Iceross Direct Casting Liner.

Avgjutningsliniern gör att en bra passform erhålls på proteshylsan när en Iceross-TT-liner med 3 mm standardprofil används.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Linerinformation	
Storlekar, standard:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34.

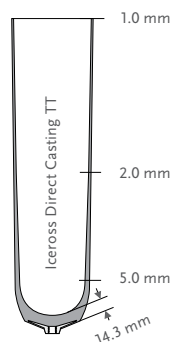

Video: Liner Selection TT
43 sec



SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

ICEROSS DIRECT CASTING LINER TT

Art.nr.	Suspensionsmetod
I-09DCXX	Locking

DIRECT CASTING LINER WALL MOUNT

Direct Socket Wall Mount är en väggställning specifikt framtagen för att kunna ha Iceross Direct Casting Liners, Icecast-pumpen och Icecast-blåsan nära till hands i Direct Socket-tillverkningsrummet. Väggställningen tillverkas endast på beställning.

Art.nr.	Beskrivning
ODC10000	Direct Socket Wall Mount



DIRECT SOCKET TF



Direct Socket TF är en hylslösning för transfemoralt amputerade patienter på alla aktivitetsnivåer. Tillverkningsprocessen är standardiserad tack vare Direct Socket-material och -verktyg samt flexibla Össur Brim. Materialen tillhandahålls i materialkit där varje kit innehåller allt förbrukningsmaterial som behövs för att tillverka en hylsa.

Össur Brim är en flexibel proximal silikonbrim som finns i femton storlekar. Den ingår ej i Direct Socket TF Kit utan beställs separat. **OBS! Össur Brim är endast testad och avsedd för användning tillsammans med Direct Socket proteshylsor.**

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



DIRECT SOCKET SYSTEM



WEATHERPROOF



Video: Direct Socket TF - Summary. 4 min 08 sec.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

MATERIAL-KIT

Art.nr.	Beskrivning
M-501105	Direct Socket, 5" Glasfiberfläta med distal adapter (M), neutralt resin
M-500107	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (M), neutralt resin
M-501107	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (L), neutralt resin
M-501109	Direct Socket, 9" Glasfiberfläta med distal adapter (L), neutralt resin
M-501115	Direct Socket, 5" Glasfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-500117	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-501117	Direct Socket, 7" Glasfiberfläta med distal adapter (L), svart resin
M-501119	Direct Socket, 9" Glasfiberfläta med distal adapter (L), svart resin
M-501315	Direct Socket, 5" Basaltfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-500317	Direct Socket, 7" Basaltfiberfläta med distal adapter (M), svart resin
M-501317	Direct Socket, 7" Basaltfiberfläta med distal adapter (L), svart resin
M-501319	Direct Socket, 9" Basaltfiberfläta med distal adapter (L), svart resin

Innehåller:

- Glasfiberfläta (5", 7" eller 9") eller Basaltfiberfläta (5", 7" eller 9")
- Resinpatron (400 ml neutral eller svart färg)
- Silikonfolie 2 ark. Längd: 60 cm
- 1 Distal silikonkopp
- Trimlinjeband
- Skyddsplast (2 stk)



Distal adapter: Medium (M) och Large (L).

DIRECT SOCKET TF

BESTÄLLNINGSPERIOD

VAL AV FIBERFLÄTA

Tabellen nedan är en rekommendation för att välja rätt storlek på fiberflätan.

Linerstorlek	Storlek på fiberfläta
23.5 - 28	5"
30 - 32	5" eller 7" med distal adapter (STD)
34 - 42	7"*
45 - 55	9"

*Överväg att välja en 7"-fläta med en distal adapter i storlek Large under bedömningen av stumpens storlek och längd och mängden mjukvårdnad



Videos: Direct Socket TF - Step by step

ÖSSUR BRIM

Art.nr.	Beskrivning	Omkrets
M-FBS360	Össur Brim TF size 36	35 - 37 cm
M-FBS380	Össur Brim TF size 38	37 - 39 cm
M-FBS400	Össur Brim TF size 40	39 - 41 cm
M-FBS420	Össur Brim TF size 42	41 - 43 cm
M-FBS440	Össur Brim TF size 44	43 - 45 cm
M-FBS460	Össur Brim TF size 46	45 - 47.5 cm
M-FBS485	Össur Brim TF size 48.5	47.5 - 50 cm
M-FBS510	Össur Brim TF size 51	50 - 52.5 cm

Art.nr.	Beskrivning	Omkrets
M-FBS535	Össur Brim TF size 53.5	52.5 - 55 cm
M-FBS560	Össur Brim TF size 56	55 - 57.5 cm
M-FBS585	Össur Brim TF size 58.5	57.5 - 60 cm
M-FBS610	Össur Brim TF size 61	60 - 63 cm
M-FBS640	Össur Brim TF size 64	63 - 66 cm
M-FBS670	Össur Brim TF size 67	66 - 69 cm
M-FBS700	Össur Brim TF size 70	69 - 72 cm

ÖSSUR BRIM – VAL AV STORLEK

- Mät omkretsen 1-2 cm under perineumnivån (se fig. 1)
- Välj rätt Össur Brim-storlek från tabellen ovan.

OBS! Om omkretsen ligger mellan två storlekar, välj den större storleken. Om du väljer att lägga Össur Brim högt på den laterala sidan, tänk på att välja en storlek större.

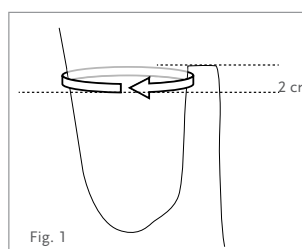


Fig. 1



REKOMMENDERADE KOMBINATIONER

För att säkerställa bästa möjliga resultat rekommenderar vi att något av nedanstående alternativ används. Kombinera också med en 4-hålsadapter, hane eller hona, för att ansluta till en pylön och/eller ett knä, beroende på vilken nivå och/eller funktion som krävs.

För Seal-In-förankring/suspension med **Iceross Seal-In Transfemoral** eller **Iceross Seal-In X5 TF liners**:

Passivt vakuum:

- Icelock 552 Expulsion Valve #L-552000 och Vakuumpugg för Direct Socket #M-400206
- Icelock 544 Plate Expulsion #L-544521 och Icelock 544 Direct Socket adapter #L-544050

Aktivt vakuum:

- Icelock 544 Plate Unity #L-544511 och Icelock 544 Direct Socket adapter #L-544050

För hybrid suspension med **Iceross Seal-In X Locking TF**:

- Icelock 850 Hybrid för Direct Socket #L-850001
- Icelock 552 Expulsion Valve #L-552000

För locking-suspension med **Iceross Transfemoral Locking liner**:

- Icelock Lanyard 631 Adaption Kit #L-631100 och 600 Modular Distansadapter #L-661000
- Icelock Ratchet 621 Adaption Kit #L-621100 och 600 Modular Distansadapter #L-661000
- Icelock Smooth 651 Adaption Kit #L-651100 och 600 Modular Distansadapter #L-661000
- Icelock Clutch 4H 214 #L-214100

AEROFIT® SOCKET



AeroFit Socket är en av två komponenter i AeroFit-konceptet. Tillsammans med AeroFit Seal-In Liner omvandlar AeroFit Socket en TF-hylsa till en ventilerande proteshylsa, där strategiskt placerade ventiler installeras för att samverka med linern. Syftet är att släppa ut fukt från hylsan, öka luftflödet och minska uppbyggnaden av fukt och svett. Ventilerna installeras med hjälp av AeroFit Tool Kit, och detaljerade installationsanvisningar medföljer.

När AeroFit används tillsammans med Direct Socket TF kan den ventilerande proteshylsan AeroFit Socket tillverkas vid ett enda klinikbesök. Tillverkningsprocessen är standardiserad, och Direct Socket-material, Tool Kit och Össur Brim används vid tillverkningen.

Se kapitlet "Össur Liners" för mer information om AeroFit Seal-In.

OBS! AeroFit Tool Kit ingår ej i materialkiten. Beställs separat.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



BREATHABILITY



DIRECT SOCKET SYSTEM



WEATHERPROOF



Video: AeroFit System
Classroom Catch-up | Össur
5 min 05 sec

BESTÄLLNINGSPERMANENTINFORMATION

AEROFIT MATERIAL-KIT

Art.nr.	Beskrivning
AFS51xy5z	5" fiberfläta
AFS50xy7z	7" fiberfläta med distal adapter (M)
AFS51xy7z	7" fiberfläta med distal adapter (L)
AFS51xy9z	9" fiberfläta

x: typ av fiberfläta: 1=glasfiber, 3=basalt

y: färg på resinet; 0=neutral, 1=svart

z: antalet ventiler som behövs baserat på linerstorlek, linerprofil och stumplängd.

Se urvalstabellerna för att välja rätt artikelnummer (baserat på antal ventiler)

AeroFit Tool Kit beställs separat.

AEROFIT® SOCKET

VAL AV MATERIALKIT

LINER MED STANDARDPROFIL

		Liner med standardprofil											
Hylshöjd i cm (a)	48	AFS51xy54 (5" fläta) 4 rader med 4 ventiler	AFS51xy54 (5" fläta) AFS50xy74 (7" fläta) 4 rader med 4 ventiler	AFS51xy74 (7" fläta*) AFS50xy74 (7" fläta**) 4 rader med 4 ventiler	AFS51xy78 (7" fläta*) AFS50xy78 (7" fläta**) 4 rader med 6 ventiler								AFS51xy94 (9" fläta) 4 rader med 6 ventiler
	47												
	46												
	45												
	44												
	43												
	42												
	41												
	40												
	39												
	38												
	37												
	36												
	35												
	34												
	33												
32													
31													
30													
29													
28													
27													
26													
25													
24													
23													
22													
		25	26.5	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55
Linerstorlek													

OBS! Stumplängder kortare än 22 cm kommer inte att kunna använda Aerofit Socket.

* 7" fläta med distal adapter (L)
** 7" fläta med distal adapter (M)

A = hylshöjd. B = område där vakuum skapas.



Hålen kan borras i två delar av hylsan: Område C och D.

C = 1 rad med 4 eller 6 hål kan borras beroende på hylshöjd och linerstorlek.

D = 0, 1, 2, eller 3 rader med 4 eller 6 hål kan borras beroende på hylshöjd och linerstorlek.

OBS! Borra **aldrig** i område E där formen är ojämn p.g.a. brimmsens distala kant. Om hålen placeras i område E, kan ventilerna lossna.

x: typ av fiberfläta: 1=glasfiber, 3=basalt
y: färg på resinet; 0=neutralt, 1=svart

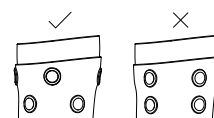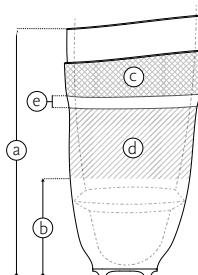

AEROFIT® TOOL KIT

AeroFit Tool Kit innehåller de verktyg och instruktioner som ortopedingenjören behöver för en säker och konsekvent installation av ventilerna i AeroFit-hylsan.

AEROFIT TOOL KIT

Art.nr.	Beskrivning
AFS00110	AeroFit Tool Kit

Innehåller:

- Silikonskärverktyg
- Hålguide
- Borr
- Slipverktyg
- Markeringspenna



TOOL KIT RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
AFS00111	Skärverktyg, reservdelskit
AFS00112	Hålguide, reservdelskit
AFS00113	Borr, reservdelskit
AFS00114	Slipverktyg, reservdelskit

ICEROSS® DIRECT CASTING LINER TF

Vid direktlaminering på stump med Direct Socket System används en speciell avgjutningslinier – Iceross Direct Casting Liner TF.

Avgjutningsliniern gör att en bra passform erhålls på proteshylsan när en Iceross TF-liner med 2 mm standardprofil / 3 mm konisk profil används.

Brukarinformation	
Amputation Level:	Transfemoral
Linerinformation	
Storlekar standard	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55.
Storlekar konisk	23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.



SUSPENSIONSMETOD



LOCKING



Video: Liner Selection TF
45 sec


ICEROSS DIRECT CASTING LINER TF

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-09FLXX	Standard 2 mm	Locking	Fullängd
I-09FLCXX	Conical 3 mm	Locking	Fullängd

DIRECT CASTING LINER WALL MOUNT

Direct Socket Wall Mount är en väggställning specifikt framtagen för att kunna ha Iceross Direct Casting Liners, Icecast-pumpen och Icecast-blåsan nära till hands i Direct Socket-tillverkningsrummet. Väggställningen tillverkas endast på beställning.

Art.nr.	Beskrivning
ODC10000	Direct Socket Wall Mount

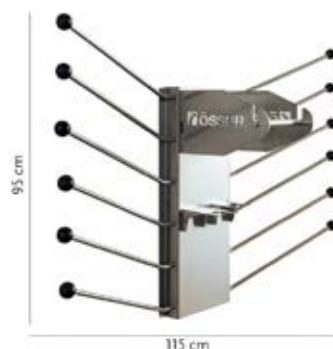

DIRECT SOCKET TOOL KIT



Icecast, som ingår i Direct Socket Tool Kit, gör det möjligt att på ett konsekvent sätt tillverka en pålitlig Direct Socket-proteshylsa. I verktygssatsen ingår en Icecast-blåsa och en Icecast-pump.

Icecast är ett tryckavgjutningssystem med *en* kammare som har utformats för att distribuera ett jämnt tryck för att forma mjukdelarna under avgjutning. Det ger kontroll över mjukdelarna under avgjutningsprocessen vilket minskar den totala produktionstiden och säkerställer ett repeterbart, korrekt resultat. Avlastningar för tryckpunkter kan göras före avgjutningen så att inga efterjusteringar behövs. Kammaren har förstärkts med en matris för hållbarhet och för att kontrollera förlängningen.

Icecast-blåsan är primärt avsedd för TT-amputerade.

Art.nr.	Beskrivning
M-500300	Direct Socket Tool Kit


Innehåller:

- Icecast-pump
- Icecast-blåsa
- Icecast-väska
- Injektionsverktyg för resin (200 ml och 400 ml)
- Distal förankringsadapter
- Tejpringkit (Standard och Large)
- Linkopplingslina
- Relief Pads EVA
- Silikonfolie-stroppar
- Brim-tejp



DIRECT SOCKET VERKTYG OCH RESERVDELAR

	Art.nr.	Beskrivning
1.	D-040510	Icecast-pump
2.	D-040520	Icecast-blåsa
3.	M-400201	Injektionsverktyg för resin, 200 ml
3.	1950504	Injektionsverktyg för resin, 400 ml
4.	D-040532	Distal förankringsadapter - Direct Socket
5.	D-040534	Distal förankringsadapter - gipsavgjutning
6.	D-040552	Tejpringskit - Standard
7.	D-040553	Tejpringskit - Large
8.	M-100001	Relief Pads EVA
9.	M-500330	Dragkärra till Icecast-väska
10.	M-110011	Silikonfolie-stroppar
11.	M-100120	Brim-tejp
	M-100013	Trim Line Tape – svart
12.	ODC20011	Påtagningsring, liten
13.	ODC20012	Påtagningsring, stor

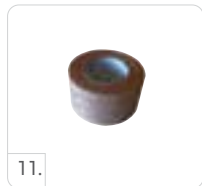

DIRECT SOCKET MATERIAL

FIBERFLÄTOR

Art.nr.	Beskrivning
M-100605	4" Basaltfiberfläta med distal adapter (S)
M-100650	4" Basaltfiberfläta med distal adapter (S) 10 st
M-100601	5" Basaltfiberfläta med distal adapter (M)
M-100610	5" Basaltfiberfläta med distal adapter (M) 10 st
M-100602	7" Basaltfiberfläta med distal adapter (M)
M-100620	7" Basaltfiberfläta med distal adapter (M) 10 st
M-100603	7" Basaltfiberfläta med distal adapter (L)
M-100630	7" Basaltfiberfläta med distal adapter (L) 10 st
M-100604	9" Basaltfiberfläta med distal adapter (L)
M-100640	9" Basaltfiberfläta med distal adapter (L) 10 st
M-100101	5" Glasfiberfläta med distal adapter (M)
M-100301	4" Glasfiberfläta med distal adapter (S)
M-100310	4" Glasfiberfläta med distal adapter (S) 10 st
M-100110	5" Glasfiberfläta med distal adapter (M) 10 st
M-100201	7" Glasfiberfläta med distal adapter (M)
M-100210	7" Glasfiberfläta med distal adapter (M) 10 st
M-100302	7" Glasfiberfläta med distal adapter (L)
M-100320	7" Glasfiberfläta med distal adapter (L) 10 st
M-100303	9" Glasfiberfläta med distal adapter (L)
M-100330	9" Glasfiberfläta med distal adapter (L) 10 st
M-100401	5" Kolfiberfläta med distal adapter (M)
M-100410	5" Kolfiberfläta med distal adapter (M) 10 st
M-100501	7" Kolfiberfläta med distal adapter (M)
M-100510	7" Kolfiberfläta med distal adapter (M) 10 st
M-100301L	4" Glasfiberfläta med distal adapter (S) - 70 cm*
M-100101L	5" Glasfiberfläta med distal adapter (M) - 70 cm*
M-100201L	7" Glasfiberfläta med distal adapter (M) - 70 cm*
M-100302L	7" Glasfiberfläta med distal adapter (L) - 70 cm*
M-100303L	9" Glasfiberfläta med distal adapter (L) - 70 cm*
M-100605L	4" Basaltfiberfläta med distal adapter (S) - 70 cm*
M-100601L	5" Basaltfiberfläta med distal adapter (M) - 70 cm*
M-100602L	7" Basaltfiberfläta med distal adapter (M) - 70 cm *
M-100603L	7" Basaltfiberfläta med distal adapter (L) - 70 cm *
M-100604L	9" Basaltfiberfläta med distal adapter (L) - 70 cm *

*ej lagervara, tillverkas på beställning



DIRECT SOCKET MATERIAL

ÖVRIGT MATERIAL

	Art.nr.	Beskrivning
1.	M-300201	Resinpatron, 200 ml, neutral
1.	M-300211	Resinpatron (10 st), 200 ml, neutral
1.	M-300202	Resinpatron, 200 ml, svart
1.	M-300212	Resinpatron (10 st), 200 ml, svart
1.	M-300401	Resinpatron 400 ml, neutral
1.	M-300411	Resinpatron (10 st), 400 ml, neutral
1.	M-300402	Resinpatron 400 ml, svart
1.	M-300412	Resinpatron (10 st), 400 ml, svart
2.	M-400100	Silikonfolie på rulle, liten, 30 m
2.	M-400101	Silikonfolie på rulle, 30 m
2.	M-400103	Silicone på rulle, stor, 30 m
3.	M-400206	Bottenplugg Direct Socket
4.	M-400300	Silikonfolie, 2 ark. Längd: 60 cm. Bredd: Small.
4.	M-400301	Silikonfolie, 2 ark. Längd: 60 cm. Bredd: STD (för 5" och 7" -satserna)
4.	M-400303	Silikonfolie, 2 ark. Längd 60 cm. Bredd: Large (för 9" -satserna)
5.	M-200161	Distal silikonkopp, STD
5.	M-400102	Distal silikonkopp, 10 st
5.	M-200162	Distal silikonkopp, large
5.	M-400112	Distal silikonkopp, large, 10 st
6.	M-100120	Brim-tejp
	M-110004	Rulle med skyddsplast
	M-100013	Trim Line Tape – svart



DIRECT SOCKET MATERIAL

KOMPONENTER

Össur rekommenderar att följande komponenter används tillsammans med Direct Socket System.

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-661000	600 Modular Distansadapter för Icelock 600 Serien*
2.	L-621100	Icelock Stegad Snabbkoppling 621 Adaptation Kit
3.	L-631100	Icelock Linkoppling 631 Adaptation Kit
4.	L-651100	Icelock Steglös Snabbkoppling 651 Adaptation Kit

*Måste användas tillsammans med Icelock® 600 Serien.

	Art.nr.	Beskrivning
5.	L-551002	Icelock Vakuumventil 551*
6.	L-552000	Icelock Expulsion Valve 552
7.	L-544050	Icelock 544 Direct Socket Adapter Plate**
8.	L-544521	Icelock 544 Plate Expulsion**
8.	L-544511	Icelock 544 Plate Unity**

*För användning med Cushion liners; **För användning med Seal-In liners


	Art.nr.	Beskrivning
9.	A-242500	Honpyramidadapter, 4-håls, med 20/20 Offset
10.	A-242510	Honpyramidadapter, 4-håls, med 20/20 Offset 10° höger
11.	A-242520	Honpyramidadapter, 4-håls, med 20/20 Offset 10° vänster

	Art.nr.	Beskrivning
12.	L-214100	Icelock Clutch 4H 214 till Direct Socket System
13.	L-562400	Icelock 562 Unity till Direct Socket*
14.	L-562410	Icelock 562 Passivt vakuum till Direct Socket**



*För användning med Iceross Seal-In X Locking liner

**Sötvattentät

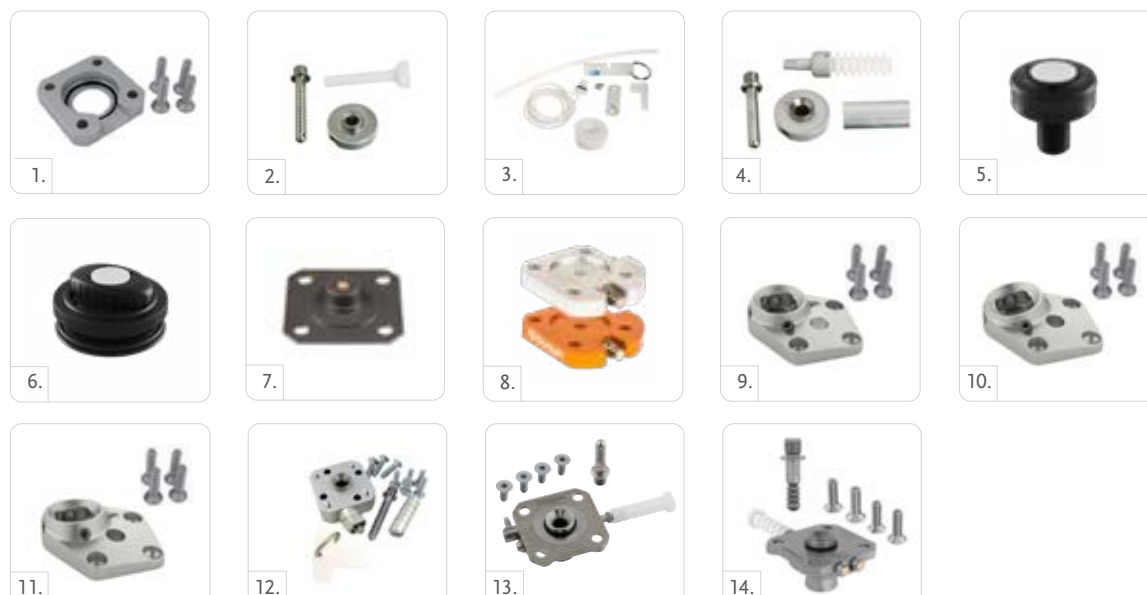


DIRECT SOCKET MATERIAL

KOMPONENTER

FLEXION PLATES

	Art.nr.	Beskrivning	Material	Åtdragningsmoment		
				Monterings-skravar	Klämbult	
1.	A-282440	Flexion Plate - 4-håls med 20° rotation (+/-10°) och 36 mm gänga. 45 mm offset / 10° flexion. Skruvar ingår.	Aluminium	10Nm	10Nm	
2.	A-282460	Flexion Plate - 4-håls med 20° rotation (+/-10°) och 36 mm gänga. 60 mm offset / 10° flexion. Skruvar ingår.	Aluminium	10Nm	10Nm	
3.	A-282470	Flexion Plate - 4-håls med 20° rotation (+/-10°) och 36 mm gänga. 75 mm offset / 15° flexion. Skruvar ingår.	Aluminium	10Nm	10Nm	

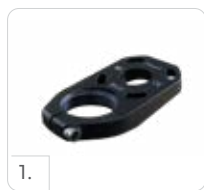

SKRUVAR TILL FLEXION PLATES

Art.nr.	Beskrivning
A-964410	Skruvar till Flexion Plates för användning med Direct Socket och Icelock 600
A-964420	Skruvar till Flexion Plates för användning med Direct Socket och Icelock 850

CONNECT® TF



Connect® TF är en justerbar hylsa avsedd för lågaktiva, transfemoralt amputerade patienter. Den öppna hylspåtagningsfunktionen är konstruerad i spännhandtaget och underlättar enkel och snabb av- och påtagning när användaren är i sittande läge. Connect TF ska anpassas av en legitimerad ortopedingenjör och kan höjd-, vinkel- och omkretsjusteras under hylsans hela livslängd.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	125 kg
Produktinformation	
Storlek:	Medium Short, Medium Standard, Large Short, Large Standard*
Vikt:	1.5 kg
Val av liner:	Connect TF måste användas tillsammans med Iceross Transfemoral Locking #I-7032XX Standard eller #I-7132XX Konisk
Garanti:	24 månader

*För val av korrekt storlek på Connect TF, se "Riktlinjer för val av storlek" på omstående sida.

EGENSKAPER



WEATHERPROOF



Videos: Connect TF Playlist

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Art.nr.	Beskrivning
CTF0202L	Medium Short, vänster sida
CTF0203L	Medium Standard, vänster sida
CTF0204L	Large Short, vänster sida
CTF0205L	Large Standard, vänster sida
CTF0202R	Medium Short, höger sida
CTF0203R	Medium Standard, höger sida
CTF0204R	Large Short, höger sida
CTF0205R	Large Standard, höger sida

OBS! Låsplanne **ingår**. Momentdragare #CTF10009 **ingår ej** i Connect TF-kiten.



CONNECT® TF

Connect TF används tillsammans med:

- Össurs komponenter och adaptrar
- Iceross Transfemoral Locking liner

ICEROSS TRANSFEMORAL LOCKING LINER

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-7032XX	Standard 2 mm	Locking	Fullängd
I-7132XX	Conical 3 mm	Locking	Fullängd

*XX=Storlek. Standard: 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Konisk: 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.




ICEROSS TRANSFEMORAL LOCKING

RIKTLINJER FÖR VAL AV STORLEK – CONNECT TF

1. Be användaren sitta ner.
2. Mät amputationsstumpens omkrets 4 cm från den distala änden. (A)
OBS! Det är viktigt att ta detta mått med användaren sittande.
3. Mät amputationsstumpens längd från den distala änden till perineum. (B)
4. Välj korrekt storlek med hjälp av riktlinjerna (C) eller storlekstabellen nedan.

RIKTLINJER FÖR VAL AV STORLEK

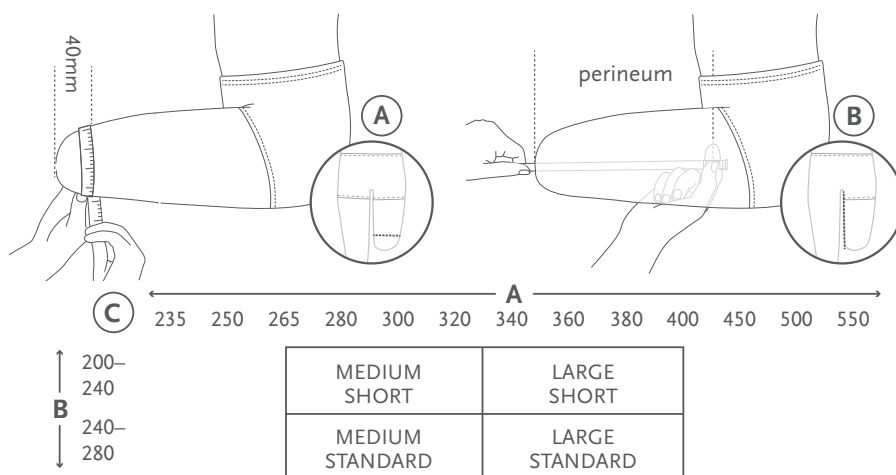

STORLEKSTABELL FÖR CONNECT TF

Storlek på Connect TF	Linerstorlek (omkrets 4 cm från den distala änden)	Stumpens längd
Medium Short	26.5 – 32 (265-320 mm)	200-240 mm
Medium Standard	26.5 – 32 (265-320 mm)	240-280 mm
Large Short	34 – 40 (340-400 mm)	200-240 mm
Large Standard	34 – 40 (340-400 mm)	240-280 mm

CONNECT® TF

RESERVDLAR

	Art.nr.	Beskrivning
1.	CTF12001	Medium Distal End Kit* (används till storlek Medium-Short och Medium-Standard)
2.	CTF12002	Large Distal End Kit* (används till storlek Large-Short och Large-Standard)

*OBS! Kitet för den distala änden finns i två storlekar, Medium och Large. Används för att ändra Connect TF-storleken från Medium till Large eller tvärtom.


	Art.nr.	Beskrivning
3.	CTF10008	Connect TF Locking Knee Lanyard Kit – innehåller alla delar som behövs för att fästa frigöringsmekanismen till Connect TF-hylsan när ett låsknä används
	Art.nr.	Beskrivning
4.	CTF12012	Connect TF handtag – vänster
5.	CTF12013	Connect TF handtag – höger
	Art.nr.	Beskrivning
6.	CTF12009	Reservdelar
7.	CTF12010	Distal Elevation Kit (för kortare stumpar, längre låspinne ingår)

VERKTYG

	Art.nr.	Beskrivning
8.	CTF10009	Momentdragare för justering av omkrets på Connect TF (ingår ej i Connect TF-kitet)**

** Nödvändiga verktyg för utprovning av Connect TF:

- En 6 mm insexnyckel
- En momentdragare med:
 - i. 0.1 Nm-steg
 - ii. en 4 mm insexnyckel

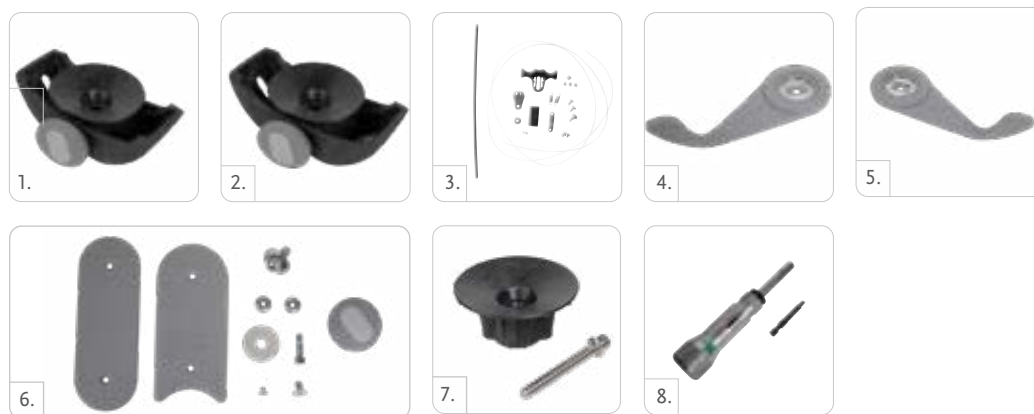

PRESSURE PADS

Självhäftande tryckavlastningskuddar tillverkade i en icke-komprimerbar silikon avsedda för att avlasta/omfördela tryck på benprominenser och andra känsliga områden på stumpen. Kuddarna kan användas till alla typer av proteshylsor och amputationsnivåer för ökad komfort.

KIT

	Art.nr.	Beskrivning
1.	K-190100	Tryckavlastningskuddar, set 1, bestående av 5 olikformade kuddar
2.	K-190101	Tryckavlastningskuddar, runda 6 st, i 3 olika storlekar (S, M, L)
3.	K-190102	Tryckavlastningskuddar, skedformade
4.	K-190104	Tryckavlastningskuddar, cylindriska
5.	K-190110	Tryckavlastningskuddar, set 2, bestående av 8 olikformade kuddar
6.	K-190115	Tryckavlastningskuddar, ovala, 8 st, i 2 olika storlekar
7.	K-190150	Tryckavlastningskuddar, Ergo



ÖSSUR ACADEMY ONLINE eLEARNING COURSES

ÖSSUR ACADEMY ONLINE eLEARNING – ÖSSURS KUNSKAPSPORTAL

Som en del i Össurs arbete med att erbjuda utbildningsstöd och kurser för en djupare förståelse för våra produktlösningar, har vi satt upp en kunskapsportal:

Össur Academy Online eLearning.

Portalen ger dig tillgång till kostnadsfria, digitala kurser "24/7" så att du själv kan förkovra dig, när så passar, i våra ortos- och proteslösningar.

Portalen hittar du på www.ossur.se alternativt genom att läsa in QR-koden under bilden.

För ytterligare klinisk information eller handledning vid utprovning/tillpassning, se även vår **Össur Academy YouTube-kanal**.

QR-koder under bilden.



Össur Academy
Online eLearning



Össur Academy
Channel on YouTube

ÖSSUR KNEES



	LOCKING KNEE	BALANCE™ KNEE OFM2	BALANCE™ KNEE OFM1	TOTAL KNEE® 1900	TOTAL KNEE® 2000	OP4 KNEE™	OP5 KNEE™	OHP3 KNEE™
IMPACT LEVEL								
MAX. PATIENT WEIGHT	125 kg	125 kg	136 kg	100 kg	100 kg	100 kg	125 kg	125 kg
BUILD HEIGHT	Proximal build height 26 mm (knee center to top)	Proximal build height 23 mm (knee center to top)	107 mm-122 mm (depending on adapter choice)	174 mm	174 mm	146 mm	160 mm-175 mm (depending on adapter choice)	158 mm-174 mm (depending on adapter choice)
WEIGHT OF KNEE	248 g	495 g	640 g - 770 g	690 g	710 g	680 g	770 g - 900 g	1025 g - 1155 g
KNEE FLEXION	140°	145°	150°	150°	150°	145°	145°	150°
AXIS	Monocentric	Monocentric	Polycentric	Polycentric	Polycentric	Monocentric	Polycentric	Polycentric
SWING CONTROL	-	-	Friction	Friction	Hydraulic	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
SWING CONTROL ADJUSTABILITY	-	-	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
STANCE CONTROL	Mechanical Lock	Weight activated stance brake/ Removable mechanical lock	Geometric/ Removable mechanical Lock	Geometric	Geometric	Weight activated brake	Geometric Lock	Geometric Lock, adjustable geometry
STANCE FLEXION CONTROL	-	-	When using IKF Adapter	Bumper Controlled	Bumper Controlled	Yes	When using IKF Adapter	When using IKF Adapter
PROXIMAL ATTACHMENT	Male Pyramid	Male Pyramid	4 Options	Threaded Top	Threaded Top	Male Pyramid	4 Options	4 Options
DISTAL ATTACHMENT	Tube Clamp	Tube Clamp	Tube Clamp	Tube Clamp	Tube Clamp	Tube Clamp	Tube Clamp	Tube Clamp
WARRANTY	12 months	24 months	24 months	24 months	24 months	24 months	24 months	24 months



							SPORT SOLUTIONS	JUNIOR SOLUTIONS
POWER KNEE™	RHEO KNEE®	NAVII®	PASO KNEE™	TOTAL KNEE® 2100	MAUCH® KNEE	MAUCH® KNEE PLUS	CHEETAH® KNEE	TOTAL KNEE® JUNIOR
116 kg	136 kg	136 kg (110 kg for high impact)	136 kg	125 kg	136 kg	166 kg	100 kg	45 kg
276 mm	236 mm	236 mm	158 mm-174 mm (depending on adapter choice)	175 mm	220 mm	210.5 mm	108 mm	156 mm
2.6 kg	1.6 kg	2.0 kg (w/ protective cover)	1050 g - 1180 g	900 g	1140 g	1210 g	620 g	395 g
120°	120°	-2 to 120°	150°	150°	115°	125°	110°	160°
Monocentric	Monocentric	Monocentric	Polycentric	Polycentric	Monocentric	Monocentric	Polycentric	Polycentric
Motor Controlled	Magneto-rheological	Magneto-rheological	Pneumatic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Friction
Sensor controlled	Sensor controlled	Sensor controlled	-	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Micro-processor Controlled DC Motor	Micro-processor Controlled MR Actuator	Micro-processor Controlled MR Actuator	Geometric Lock, adjustable geometry	Geometric	Hydraulic	Hydraulic	Geometric	Geometric
Motor Controlled	Magneto-rheological	Magneto-rheological	IKF Adapter	Bumper Controlled	Hydraulic	Hydraulic	-	Bumper Controlled
Male Pyramid	Male Pyramid	Male Pyramid	4 Options	Threaded Top	Male Pyramid	4-Hole	Threaded Top	Threaded Top
Male Pyramid	Male Pyramid	Male Pyramid	Tube Clamp	Tube Clamp	Male Pyramid	4-Hole	Male Pyramid	Tube Clamp
3 or 6 years	3 or 6 years	3 or 6 years	24 months	24 months	24 months	24 months	18 months	24 months

ÖSSUR KNEES

EGENSKAPER

EXTRA MARKFRIGÅNG

Extra markfrigång under svingfasen tack vare polycentrisk design.



INCREASED
GROUND
CLEARANCE

JUSTERBAR AXELGEOMETRI

Möjlighet att ändra axelgeometrin för att optimera övergången mellan stöd- och svingfas för brukaren.



ADJUSTABLE
AXIS GEOMETRY

FULL STANCE FLEXION

Tillåter knäleden att flektera fullt under ett justerbart motstånd. Möjliggör trappgång nedför, steg över steg.



FULL STANCE
FLEXION

JUSTERBAR STANCE FLEXION

Tillåter knäleden att flektera under ett definierat motstånd och under ett begränsat flektionsintervall (ca 5-10°). Stötdämpning.



ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION

VIKTAKTIVERAT LÅS

Protesknäleden låser sig när den belastas med hjälp av viktaktiverad broms.



WEIGHT
ACTIVATED LOCK

PNEUMATISK

Pneumatisk svingfaskontroll



PNEUMATIC

HYDRAULISK

Hydraulisk svingfas- eller stödfaskontroll



HYDRAULIC

AUTOMATISK JUSTERING AV GÅNGHASTIGHETEN

Knäleden justerar automatiskt svingfas-motståndet för att anpassa sig till olika gånghastigheter. Inget behov för ortopedingenjören att ställa in detta.



AUTOMATIC
SPEED
ADJUSTMENT

MULTIAXIELL

Protesknäleden har 4 eller fler axlar.



MULTI AXIS

ENKELLEDAD

Protesknäleden har en axel.



SINGLE AXIS

FRAMKASTARFJÄDER

Extenderar knäleden och säkerställer full extension vid slutet av svingfasen.



EXTENSION
ASSIST

ÖSSUR KNEES

EGENSKAPER

MIKROPROCESSOR-KONTROLLERAD

Motståndet i sving- och stödfas kontrolleras med hjälp av en mikroprocessor



MIKROPROCESSOR
CONTROL

MANUELLT LÅS

Protesknäleden kan låsas i fullt utsträckt läge. Protesanvändaren har möjlighet att frigöra låset om så behövs.



MANUAL LOCK

GEOMETRISK LÅSNING

Geometrisk låsning vid hälisättning. När knäet väl är helt utsträckt i slutet av svingfasen, förhindrar det geometriska låset att knäet böjer sig innan hälisättningen.



GEOMETRIC LOCK

PROXIMALT ADAPTERVAL

Flera olika proximala anpassningsmöjligheter finns (väljs av ortopedingenjören).



SOCKET CONNECTOR
ADAPTATION

MEKANISK KONTROLL

Mekanisk kontroll av svingfas och/eller stödfas.



MECHANICAL
CONTROL

MULTI SPEED

Protesknäleden hanterar mer än en gånghastighet.



MULTI SPEED

SINGLE SPEED

Protesknäleden tillåter endast gång i en gånghastighet



SINGLE SPEED

POWER KNEE™

UNITY
COMPATIBLE

INTRODUKTION

Power Knee är världens första motordrivna mikroprocessorknä. Aktiv hjälp ger flexion och extension för att efterlikna koncentrisk och excentrisk muskelaktivitet. Avancerade sensorer registrerar användarens rörelser och informerar mikroprocessorn där toppmodern artificiell intelligens gör att knät svarar på användarens signaler.

En kraftfull motor ger en konsekvent stödfas men även fri svingfas. Power Knee kan ge både aktiv sträckning när användaren reser sig, kontrollerat motstånd när användaren sätter sig, aktiv flexion och extension vid gång samt stödfasflexion med energiåtergivning för en symmetrisk viktfordelning och naturlig gång.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Automatisk anpassning av stödfas och svingkontroll i realtid
- Stödfasflexion med energiåtergivning
- Aktiv hjälp vid gång på plan mark, vid gång uppför trappa steg-över-steg och när användaren ställer sig upp
- Intuitiv knäslåsning när användaren står upp, vilket underlättar en jämn viktfordelning
- Cirka 25 timmars användning med ett batteri
- Utbytbar batteri. Batteriet kan laddas i knät eller separat.
- Tillhörande Össur Logic-app för iOS-enheter med enkel inställning och justering för ortopedingenjörer



KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED:



Seal-In® X TF liner



Pro-Flex® Pivot



Pro-Flex® LP
Torsion



Pro-Flex® XC
Torsion



Video: Össur|Power Knee
Classroom Catch-up
3 min 41 sek.


POWER KNEE™



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral och knäexartikulation
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt	116 kg

Produktinformation	
Vikt inkl. batteri:	2.6 kg
Bygghöjd:	276 mm
Knäflexion:	120°

BYGGHÖJD

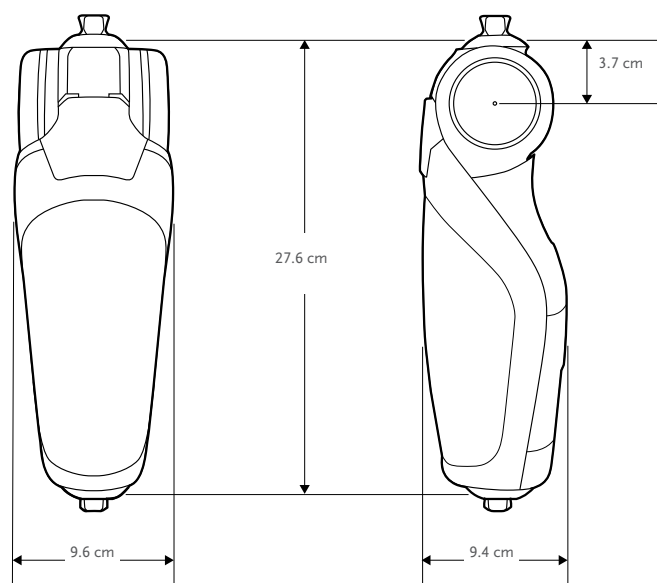

KIT

POWER KNEE KIT

Art.nr.	Beskrivning
PKA10001	Power Knee inkl. 2 års garanti*

Innehåller:

- POWER KNEE
- Lithium Ion batteripaket
- Nätaggregat
- Bruksanvisning

Art.nr.	Beskrivning
PKA01GE1Y	Ger 1 års tilläggsgaranti
PKA01GE4Y	Ger 4 års tilläggsgaranti



*FÖR 3 ÅRS GARANTI: Lägg till PKA01GE1Y till art.nr. PKA10001

**FÖR 6 ÅRS GARANTI: Lägg till PKA01GE4Y till art.nr. PKA10001

POWER KNEE™

UNITY

UNITY KITS

Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
UTF0001	Unity TF Valve Kit	Alla



KOMPONENTER

BATTERI TILL POWER KNEE

Art.nr.	Beskrivning
PKA10002	Batteri till Power Knee

POWER SUPPLY

Art.nr.	Beskrivning
CME50110	Nätaggregat med EU-kontakt



NAVII®

UNITY
COMPATIBLE

INTRODUKTION

Navii är ett tåligt, vattentätt mikroprocessorknä (MPK) med oöverträffad rörelsefrihet. Navii ger trygghet i varje steg, oavsett terräng. Navii skyddshölje finns i fem naturinspirerade färger och kan enkelt bytas ut med en magnetisk snäppfunktion för att passa alla tillfällen.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kraftfull aktuator med innovativ kontrollteknik och följsam svingfas-dynamik.
- Vattentät design (IP68, pool, hav, strand och sand).
- Avtagbart skyddshölje som patient kan byta, finns i 3 olika storlekar. Storlekarna Medium och Long kan enkelt anpassas till olika längder. Standardstorlekarna är tillgängliga i 5 olika färger.
- Mekaniskt lås med variabel position som kan låsas vid 0°, 10° och 20°
- Fungerar ihop med Össur Logic App som är styrcentral för alla Össurs bionic-enheter.
- Enkel programmering och anpassning med hjälp av installations-guiden och den smidiga autojusteringen.
- Övningar steg-för-steg för funktionell träning både på kliniken och i hemmet via Össur Logic App.
- Framstegsuppföljning med hjälp av utskrivbara aktivitetsrapporter.
- Funktioner för hög belastning (gång uppför trappor steg-för-steg, automatisk cykeligenkänning, sömlös övergång till löpning).



KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED:



Seal-In® X TF liner



Pro-Flex® Terra



Proprio Foot®



Pro-Flex® LP



Pro-Flex® XC



Video: Navii
Classroom Catch-up
3 min 41 sek.



Video: Navii
Fitting Instructions
4 min 37 sek.



Video: Navii
Highlights
1 min 11 sek.

NAVII®




Brukarinformation		
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation, höftledsexartikulation	
Osseointegration:	Ja	
Bilateral:	Ja	
Impact:	Låg till medel	Hög
Max. patientvikt:	136 kg	110 kg


Produktinformation	
Nettovikt:	1.8 kg exkl. protective cover 2.0 kg inkl. protective cover
Bygghöjd:	236 mm
Knäflexion:	-2 to 120°
Waterproof:	IP68 - Tål kontakt med saltvatten, klorerat vatten, svett, urin och milda tvålar samt enstaka exponering för sand, damm och smuts.

BYGGHÖJD

MÅTT – EXKL. PROTECTIVE COVER

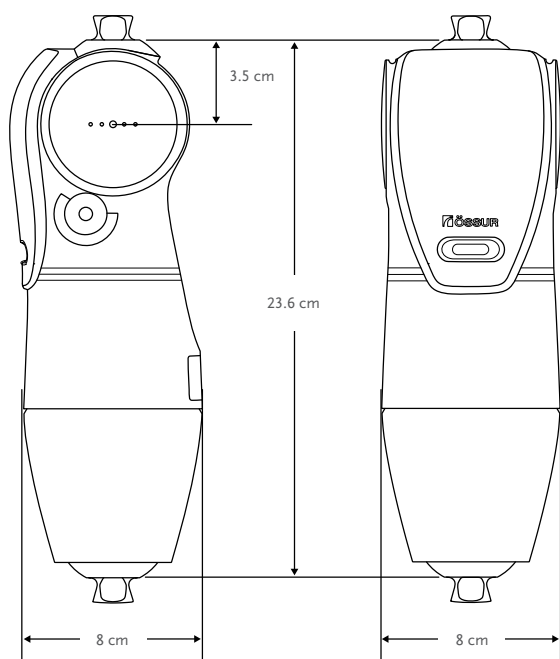

MÅTT – INKL. PROTECTIVE COVER

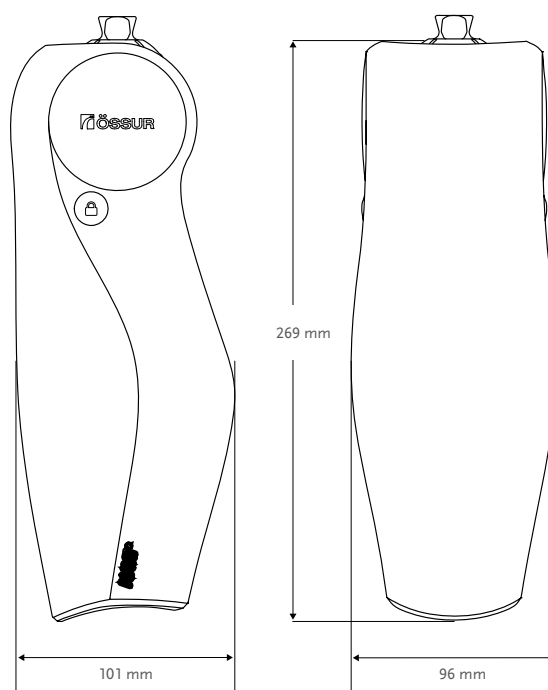

NAVII®

KIT

NAVII KIT

Art.nr.	Beskrivning
NAV01003	Navii 3 års garanti
NAV01006	Navii 6 års garanti, inkl. 40 mån service check

Innehåller:

- Navii inkl. standard protective cover i svart
- Navii nätaggregat
- Bruksanvisning



NAVII KIT MED PROXIMAL GÄNGANSLUTNING

Pyramidhona med utvändig gänga (låg bygghöjd) för långa TF-stumpar och till de som genomgått en knäexartikulation.

För beställning av Navii med proximal gänganslutning, lägg till art.nr. A-145310 till din NAVII-knäled.

Art.nr.	Beskrivning	Höjd	Vikt
A-145310	Pyramidhona med utvändig gänga	9 mm	33 g



NAVII KIT MED DUBBELADAPTER FÖR FLEKTION OCH FÖRSKJUTNING

Navii med dubbeladapter med integrerad flektion och förskjutning ger en 8 mm förskjutning samt 10° inbyggd flektion för de fall där de integrerade justerskruvarna i en standardadapter inte räcker till.

Art.nr.	Beskrivning	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-554700	Dubbel han-/honpyramidadapter	Rostfritt stål – 166 kg	40 mm	24 mm	153 g



NAVII®

TILLBEHÖR

NAVII PROTECTIVE COVER


Part#	Description
NAV01PC01S-BLK	Navii Protective Cover, Standard, Svart
NAV01PC01S-GRY	Navii Protective Cover, Standard, Grå
NAV01PC01S-BLU	Navii Protective Cover, Standard, Blå
NAV01PC01S-GRN	Navii Protective Cover, Standard, Grön
NAV01PC01S-RED	Navii Protective Cover, Standard, Röd
NAV01PC01M-BLK	Navii Protective Cover, Medium, Svart
NAV01PC01L-BLK	Navii Protective Cover, Long, Svart

Navii Protective Cover levereras med 6 månaders garanti



NAVII PROTECTIVE COVER – MÅTT

Storlek "Medium" och "Long" kan anpassas i längd/beskäras.

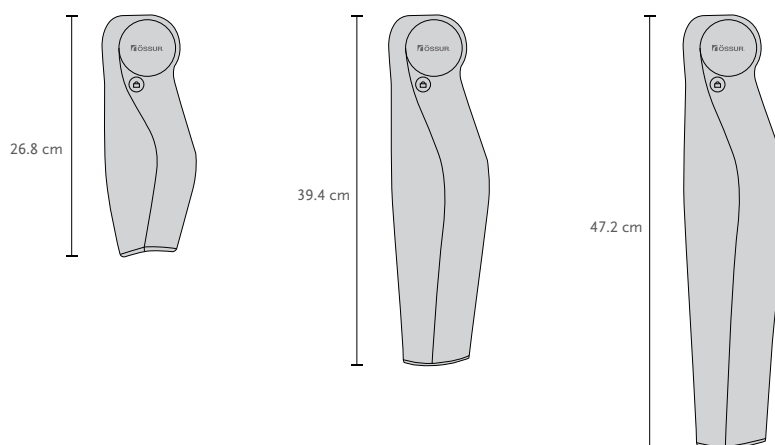

NAVII®

UNITY

UNITY KITS

Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
UTF0001	Unity TF Valve Kit	Alla



KOMPONENTER

POWER SUPPLY

Art.nr.	Beskrivning
CME50110	Laddare med EU-kontakt




DUAL CHARGER KIT

Dual Charger Kit är en dubbelladdare och ett valfritt tillbehör som möjliggör simultan laddning av Navii, Rheo Knee eller Rheo Knee XC och Proprio Foot.

Art.nr.	Beskrivning
CME10110	Dual Charger Kit* - Laddningsenhet och laddningskablar



*Dual Charger Kit kan *inte* användas till Power Knee.

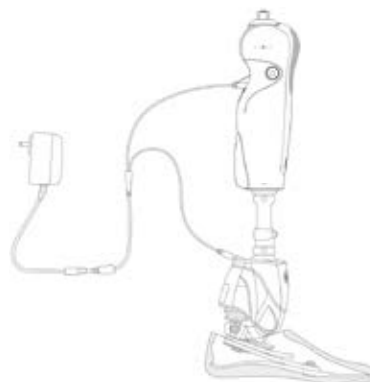

RHEO KNEE®

UNITY
COMPATIBLE

INTRODUKTION

RHEO KNEE är en mikroprocessorkontrollerad protesknäled designat för att främja stabilitet och säkerhet. Protesknäleden möjliggör naturlig och energisnål gång – även i svår terräng. RHEO KNEE är lätt att anpassa och ger pålitliga användarresultat.

EGENSKAPER

- Automatiskt anpassad och intuitiv kontroll av stöd- och svingfasen.
- Initiering av svingfasen är enkel och förutsägbar oavsett underlag.
- Automatisk snubbelkontroll reducerar risken att protesanvändaren snubblar och faller.
- Manuellt extensionslås - låser knäleden i full extension för ökad säkerhet och komfort.
- "Weatherproof design" - tål stänk av färskvatten.
- Styrts med ÖSSUR LOGIC app för iOS-enheter. Finns i Expert Mode (CPO) och User Mode (protesbrukare)
- Ortopedingenjören kan enkelt ställa in och justera parametrar för knät. Brukarens aktivitetsrapport kan exporteras i PDF-format och skrivas ut.
- Ger brukaren tillgång till övningar för funktionell träning
- Brukaren kan övervaka grundläggande knäparametrar som till exempel batteristatus och stegräkning.



KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED:



Seal-In® X TF liner



Pro-Flex® Pivot*



Pro-Flex® LP



Pro-Flex® XC



Pro-Flex® XC
Torsion

*OBS! Pro-Flex Pivot är inte avsedd för s.k. high impact-aktiviteter



Video: RHEO KNEE & RHEO
KNEE XC - Fitting Sequence
2 min 49 sek.




RHEO KNEE®




Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt:	136 kg
Produktinformation	
Vikt:	Ca. 1.6 kg
Bygghöjd:	236 mm
Knäflexion:	120°
Aluminium-chassi	
Weatherproof: Tål stänk av färskvatten (IP34)	

BYGGHÖJD

RHEO KNEE

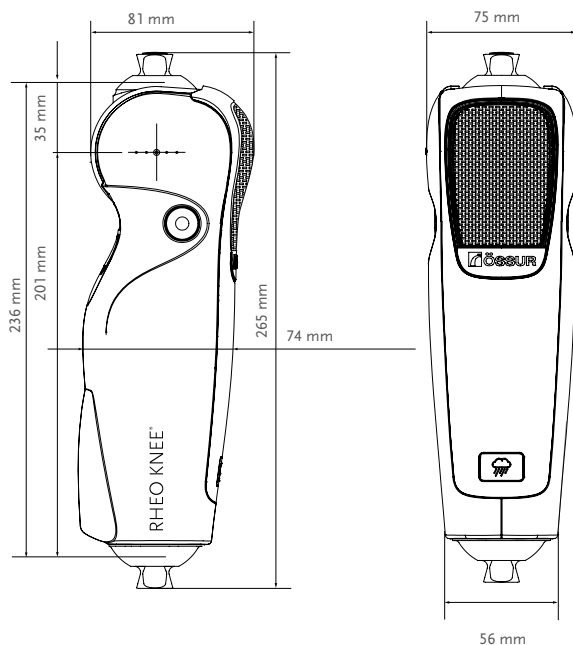

RHEO KNEE – PYRAMIDHONA M. UTV GÅNGA (A-145310)

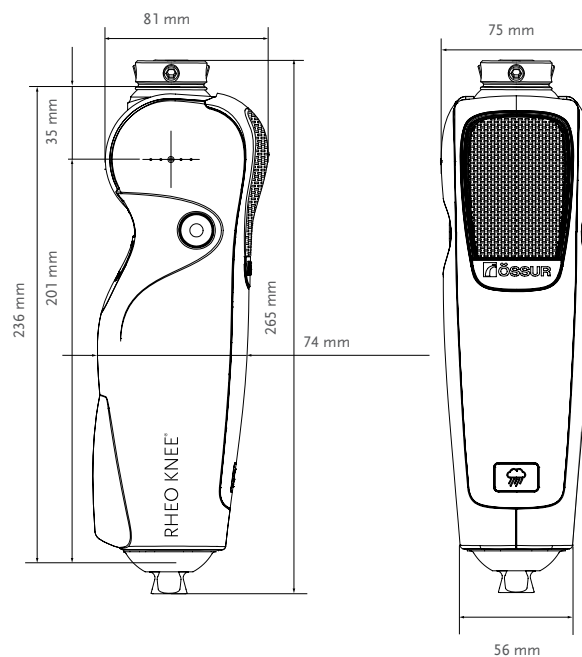

RHEO KNEE®

KIT

RHEO KNEE KIT

Art.nr.	Beskrivning
RKN130003	RHEO KNEE 3 års garanti, exkl. service check
RKN13006A	RHEO KNEE 6 års garanti, inkl. 40 mån service check

Bionic Protector beställs separat

Innehåller:

- RHEO KNEE
- RHEO KNEE laddare för nät drift
- Garantisedel
- Brukarmanual



RHEO KNEE MED PROXIMAL GÄNGANSLUTNING

Pyramidhona med utvändig gänga (låg bygghöjd) för långa TF-stumpar och till de som genomgått en knäexartikulation.

För beställning av RHEO KNEE med proximal gänganslutning, lägg till art.nr. A-145310 till ditt RHEO KNEE.

Art.nr.	Beskrivning	Höjd	Vikt
A-145310	Pyramidhona med utvändig gänga	9 mm	33 g



RHEO KNEE TILLBEHÖR

Art.nr.	Beskrivning
N/A	ÖSSUR LOGIC till iOS enheter - finns på App Store



RHEO KNEE PROTECTOR

Art.nr.	Beskrivning
BIC00110	Bionic Protector till RHEO KNEE



RHEO KNEE®

UNITY

UNITY KITS

Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
UTF0001	Unity TF Valve Kit	Alla



KOMPONENTER

POWER SUPPLY

Art.nr.	Beskrivning
CME50110	Laddare med EU-kontakt




DUAL CHARGER KIT

Dubbelladdaren möjliggör simultan laddning av Rheo Knee, Rheo Knee XC eller Navii och Proprio Foot, detta genom laddningsenheten på 24V-40W och laddningskabel-paketet.

Art.nr.	Beskrivning
CME10110	Dual Charger Kit*- Laddningsenhet och laddningskablar



*Dual Charger Kit kan *inte* användas till Power Knee.

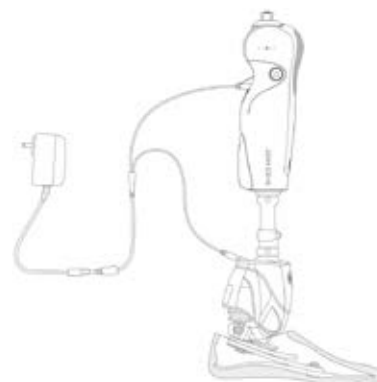

RHEO KNEE® XC

UNITY
COMPATIBLE

INTRODUKTION

RHEO KNEE XC är en mikroprocessorstyrd protesknäled designad för att stödja brukaren från den tidiga rehabiliteringsfasen ända fram till full återhämtning med sin enkla, intuitiva och stabila funktionalitet. Den bygger på tillförlitlig och kliniskt beprövad teknik vilket ger enastående användarresultat.

EGENSKAPER

- Stödjer rehabiliteringsprocessen och möjliggör aktiviteter såsom cykling, jogging och gång uppför trappor, steg-över-steg.
- Automatiskt anpassad och intuitiv kontroll av stöd- och svingfasen.
- Initiering av svingfasen är enkel och förutsägbar oavsett underlag.
- Automatisk snubbelkontroll reducerar risken att protesanvändaren snubblar och faller.
- Manuellt extensionslås - låser knäleden i full extension för ökad säkerhet och komfort.
- "Weatherproof design" - tål stänk av färskvatten.
- Styrts med ÖSSUR LOGIC app för iOS-enheter. Finns i Expert Mode (CPO) och User Mode (protesbrukare)
 - Ortopedingenjören kan enkelt ställa in och justera parametrar för knät. Brukarens aktivitetsrapport kan exporteras i PDF-format och skrivas ut.
 - Ger brukaren tillgång till övningar för funktionell träning
 - Brukaren kan övervaka grundläggande knäparametrar som till exempel batteristatus och stegräkning.



KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED:



Seal-In® X TF liner



Pro-Flex® Pivot*



Re-Flex® Shock



Pro-Flex® XC
Torsion



Pro-Flex® XC



Video: RHEO KNEE & RHEO KNEE XC - Fitting Sequence
2 min 49 sek.

*OBS! Pro-Flex Pivot är inte avsedd för s.k. high impact-aktiviteter



RHEO KNEE® XC




Brukarinformation		
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation	
Impact:	Låg till medel	Hög
Max. patientvikt	136 kg	110 kg


Produktinformation	
Vikt:	Ca. 1.6 kg
Bygghöjd:	236 mm
Knäflexion:	120°
Aluminium-chassi	
Weatherproof	

BYGGHÖJD

RHEO KNEE XC

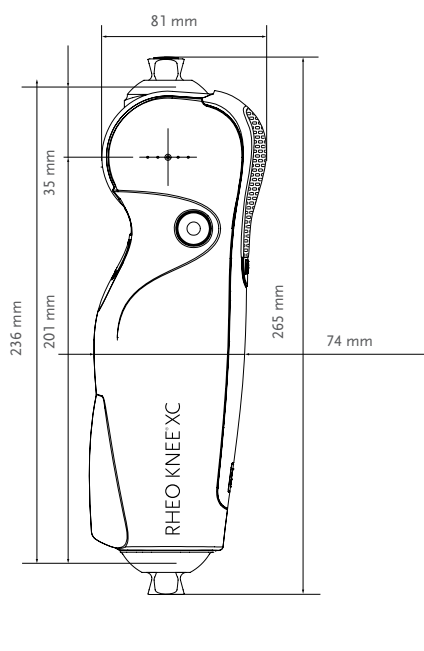

RHEO KNEE – PYRAMIDHONA M. UTV GÄNGA (A-145310)

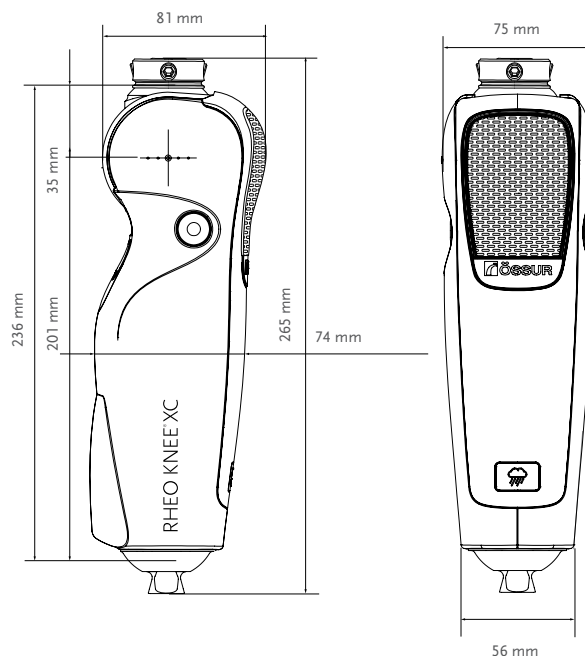

RHEO KNEE® XC

KIT

RHEO KNEE XC KIT

Art.nr.	Beskrivning
RKNXC0003	RHEO KNEE XC 3 års garanti, exkl. service check
RKNXC006A	RHEO KNEE XC 6 års garanti, inkl. 40 mån service check

*Bionic Protector beställs separat

Innehåller:

- RHEO KNEE XC
- RHEO KNEE laddare för nät drift
- Garantisedel
- Brukarmanual



RHEO KNEE XC MED PROXIMAL GÄNGANSLUTNING

Pyramidhona med utvändig gänga (låg bygghöjd) för långa TF-stumpar och till de som genomgått en knäexartikulation.

För beställning av RHEO KNEE XC med proximal gänganslutning, lägg till art.nr. A-145310 till ditt RHEO KNEE XC.

Art.nr.	Beskrivning	Höjd	Vikt
A-145310	Pyramidhona med utvändig gänga	9 mm	33 g



RHEO KNEE XC TILLBEHÖR

Art.nr.	Beskrivning
N/A	ÖSSUR LOGIC till iOS enheter - finns på App Store



RHEO KNEE XC PROTECTOR

Art.nr.	Beskrivning
BIC00110	Bionic Protector till RHEO KNEE/RHEO KNEE XC



RHEO KNEE® XC

UNITY

UNITY KITS

Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
UTF0001	Unity TF Valve Kit	Alla



KOMPONENTER

POWER SUPPLY

Art.nr.	Beskrivning
CME50110	Laddare med EU-kontakt




DUAL CHARGER KIT

Dubbelladdaren möjliggör simultan laddning av Rheo Knee, Rheo Knee XC eller Navii och Proprio Foot, detta genom laddningsenheten på 24V-40W och laddningskabel-paketet.

Art.nr.	Beskrivning
CME10110	Dual Charger Kit* - Laddningsenhet och laddningskablar



*Dual Charger Kit kan *inte* användas till Power Knee.

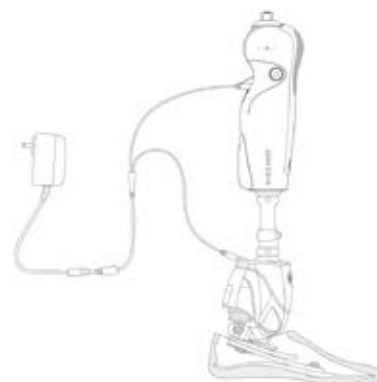

MAUCH® KNEE



UNITY
COMPATIBLE

För medel till höga aktiva protesanvändare.

Ett högpresterande centrumledat knä med väl beprövad och avancerad hydraulik som ger protesanvändaren flexibilitet och säkerhet i olika miljöer och situationer.

Separat inställning av flexions- och extensionsmotstånd innebär en flexibilitet som ger protesanvändaren möjligheten att uppleva en bekväm och stabil gång i olika hastigheter på plant underlag, i nedförslut, i trappor och i ojämn terräng.

- Enkelledad, hydraulisk protesknäled med sving- och stödfas-kontroll (SNS®). Tillåter gång i olika hastigheter.
- Robust aluminiumram
- Steglös stödfas-kontroll.
- Protesanvändaren kan själv ställa in knät från helt frisvingande (vid t.ex. cykling) till helt låst (t.ex. klättra upp för en stege).



Video: Mauch Knee & Mauch Knee Plus - Clinician Fitting Tutorial
2 min 50 sek.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Medel till extrem
Max. patientvikt:	136 kg

Produktinformation	
Bygghöjd:	220 mm
Vikt inkl. cylinder:	1.14 kg
Flexion:	Stopp vid 115°



SINGLE AXIS



MANUAL
LOCK



HYDRAULIC
CONTROL



MULTI SPEED



ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION




FULL STANCE
FLEXION



EXTENSION
ASSIST

BYGGHÖJD

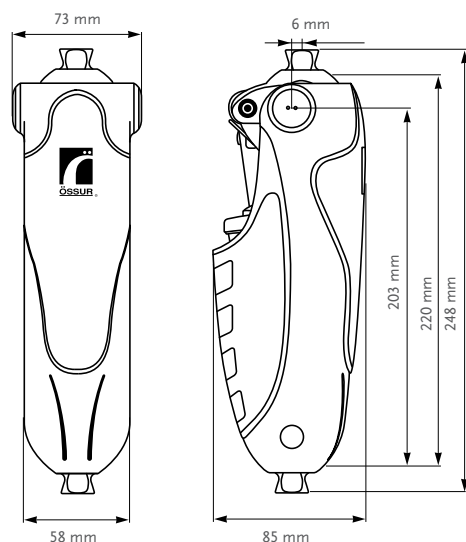

KIT

Art.nr.	Beskrivning
MKN01360	Mauch Knee Kit SNS

RESERVDLAR

Art.nr.	Beskrivning
MKA01362	Skydd, främre
MKA01363	Skydd, bakre
MKA01364	Sidoplugg

MAUCH® KNEE PLUS



UNITY
COMPATIBLE

För medel till högaktiva protesanvändare.

Mauch Knee Plus är en s.k. heavy duty version av Mauch Knee. Plus-versionen bygger på samma avancerade teknologi men tål högre last vid maximal aktivitetsnivå.

Separat inställning av flexion- och extensionsmotstånd innebär en flexibilitet som ger protesanvändaren möjligheten att uppleva en bekväm och stabil gång i olika hastigheter på plant underlag, i nedförslut, i trappor och i ojämn terräng.

- Enkelledad, hydraulisk protesknäled med sving- och stödfas-kontroll (SNS®). Tillåter gång i olika hastigheter.
- Robust aluminiumram
- Steglös stödfaskontroll
- Protesanvändaren kan själv ställa in knät från helt frisvingande (vid t.ex. cykling) till helt låst (t.ex. klättra upp för en stege).
- Proximal 4-hålsinfästning vilket möjliggör olika adapteralternativ.



Video: Mauch Knee & Mauch Knee
Plus - Clinician Fitting Tutorial
2 min 50 sek.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Medel till extrem
Max. patientvikt:	166 kg

Produktinformation	
Bygghöjd:	210.5 mm
Vikt inkl. cylinder:	1.21 kg
Flexion:	Stopp vid 125°



SINGLE AXIS



MANUAL
LOCK



HYDRAULIC
CONTROL



MULTI SPEED



ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



FULL STANCE
FLEXION




SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION



EXTENSION
ASSIST

BYGGHÖJD

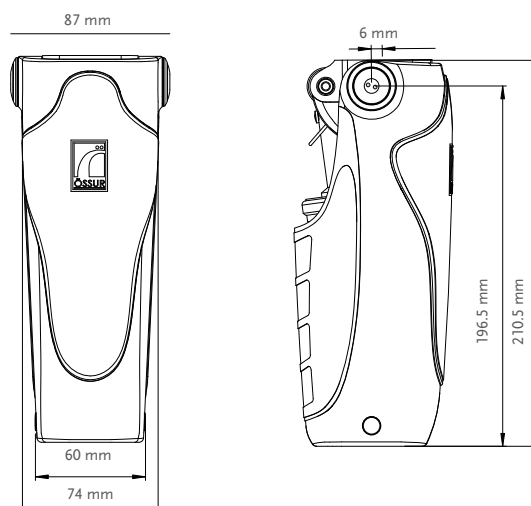

MAUCH® KNEE PLUS

KIT

Art.nr.	Beskrivning
MKN01660	Mauch Knee Kit SNS
MKN01663*	Mauch Knee Plus Kit SNS - Through Hole

*Beställningsvara

KOMPONENTER

Rekommenderas för att få ökad knäflexion vid direktanslutning av hylsan

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
A-125100	4-håls hylsadapter - Titan	18.5 mm	12 g



RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
MKA01661*	Knee Ball, Screw, Btn Head*
MKA01662*	Skydd, främre
MKA01663*	Skydd, bakre
MKA01664*	Sidoplugg

*Beställningsvara

TOTAL KNEE® 1900



UNITY
COMPATIBLE

Ett bra val främst för lågaktiva protesanvändare som har en definierad gång men oftast går i en hastighet.

- Polycentrisk, 7-axlad protesknäled med ett geometriskt låssystem. Detta ger säkerhet genom ökad markfrigång och att knäleden låser helt vid hälsättning med knäet i full extension. Över midstance låser sedan knäet upp med minimal kraft från protesanvändaren.
- Total Knee 1900 erbjuder säkerhet och en bra kosmetisk lösning samtidigt som den ger goda förutsättningar för ett symmetriskt gångmönster.
- Total Knee är en mycket säker och energisnål konstruktion.
- Den inbyggda stanceflexfunktionen ger en naturlig stötdämpning och rörelse som ger en bekväm gång och främjar ett naturligt gångmönster.
- Låg bygghöjd, kan med fördel användas till de med lång transfemoral stump eller de som genomgått en knäexartikulation



Video: Total Knee 1900 -
Clinician Fitting Tutorial
4 min 19 sek.

Brukarinformation

Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	100 kg

Produktinformation

Bygghöjd:	174 mm
Vikt:	0.69 kg
Flexion:	Stopp vid 150°



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



GEOMETRIC
LOCK



MECHANICAL
CONTROL



SINGLE SPEED



EXTENSION
ASSIST





ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

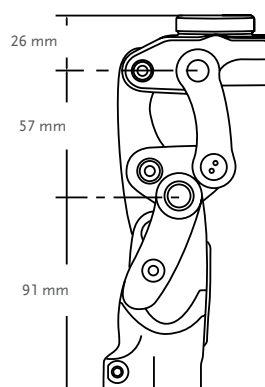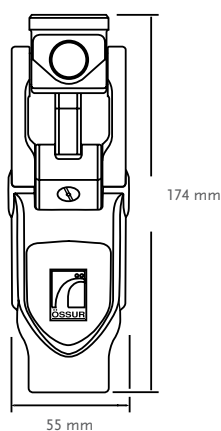

KIT

Art.nr.	Beskrivning
1900	Total Knee 1900*

*Röd stötdämpare (avsedd för patientvikt 70-90 kg) sitter monterad i knäleden vid leverans.

TOTAL KNEE® 1900

KOSMETIK

	Art.nr.	Beskrivning
1	2047	Kosmetikkåpa för delad kosmetik (svart)
2	2052	Liten knäkåpa (svart) för användning med hel slangkosmetik
2	2052N	Liten knäkåpa (svart) för användning med hel slangkosmetik*
3	2053	Stor knäkåpa för delad kosmetik (beige)
3	2053N	Stor knäkåpa för delad kosmetik (beige)*

*2052N och 2053N passar Total Knee med serienummer MXB045502 och uppåt.



KOMPONENTER

STÖTDÄMPARE - KIT

Art.nr.	Beskrivning
2000-Kit	Ett komplett set med stötdämpare och shims

Innehåller:

- 1 stötdämpare av varje hårdhet
- 1 Shim 0.38 mm
- 1 Shim 0.76 mm




TÄCKBRICKA

Art.nr.	Beskrivning
2059	Täckbricka för Total Knee 1900 och 2000



EXTENSIONSFÖRSTÄRKARE

Art.nr.	Beskrivning
1905	Begränsar hälluppkast och hjälper knäet att gå i fullt utsträckt läge

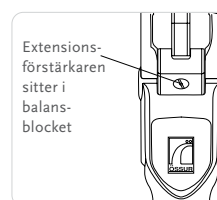

EXTENSIONSFJÄDER

Art.nr.	Beskrivning
2070S	Komplett kit för extensionsfjäder med mediumfjäder (gul)

Extra säkerhet vid träning och tillvänjning. I vissa fall kan en extensionsfjäder vara till hjälp under träning och tillvänjningsfasen för extra trygghet. Extensionsfjädern fungerar som framkastare och monteras enkelt. Fjädern kan sedan tas bort när protesanvändaren känner sig bekväm med sitt nya knä. Hård fjäder (blå) och extra hård fjäder (röd) bifogas.




TOTAL KNEE® 1900

KOMPONENTER

BAKRE LÄNK

Art.nr.	Beskrivning
1900ssb	Extra förstärkt bakre länk för Total Knee 1900


Obs! Kan ej eftermonteras. Kan levereras mot en extra kostnad.

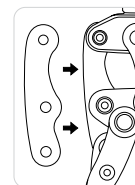

TOTAL KNEE ADAPTRAR

	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt	
1.	A-114040	Hylsadapter, 4-armad, gängad	Rostfritt stål	166 kg	8 mm	158 g	
2.	A-122300	Adapter 4-håls. Skruvas direkt på gängan på knäleden.	Aluminium	125 kg	11 mm	70 g	
3.	A-834300	Hanpyramidadapter	Rostfritt stål	100 kg	18 mm*	111 g	
3.	A-835300	Hanpyramidadapter	Titan	166 kg	18 mm*	80 g	
4.	A-845300	Honpyramidadapter	Titan	166 kg	26 mm	85 g	

*18 mm = när adaptern är fullt iskruvad i gängorna

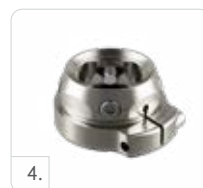


KOSMETIK TILL TOTAL KNEE

FÖRFORMAD KOSMETIKVAD

Art.nr.	Beskrivning
2075R	Förformad kosmetikvad i EVA - Regular
2075L	Förformad kosmetikvad i EVA - Large

- Beigefärgade
- Passa till Total Knee® 1900 och 2000.
- Passar till både vänster och höger sida
- Förformade på insidan för att passa knäkäpa #2053, kosmetikkåpa och ø 30 mm rör

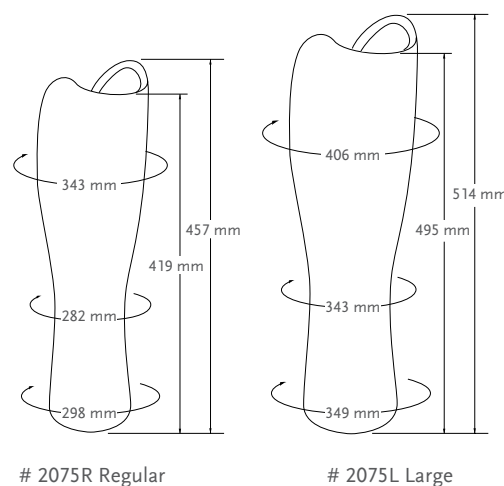

TOTAL KNEE® 2000



UNITY
COMPATIBLE

Total Knee 2000 ger stötdämpning, komfort och en naturlig gång.

- Polycentrisk, 7-axlad protesknäled med ett geometriskt låssystem. Detta ger säkerhet genom ökad markfrigång och att knäleden låser helt vid hälsättning med knäet i full extension. Över midstance låser sedan knäet upp med minimal kraft från protesanvändaren.
- Inbyggd stanceflexfunktion och stötdämpning ger protesanvändaren en naturlig rörelse som möjliggör en symmetrisk gång vilket minskar slitage på höft och rygg.
- Svingfaskontrollen möjliggör gång i olika hastigheter med bevarad symmetri.
- Låg bygghöjd, kan med fördel användas till de med lång transfemoralt stump eller de som genomgått en knäexartikulation.



Video: Total Knee 2000 & Total Knee 2100 -
Clinician Fitting Tutorial
4 min 11 sek.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoralt, knäexartikulation
Impact:	Medel till hög
Max. patientvikt:	100 kg

Produktinformation	
Bygghöjd:	174 mm
Vikt:	0.71 kg
Flexion:	Stopp vid 150°
Stabilisering:	Geometriskt låsningssystem med stanceflexfunktion
Svingfaskontroll:	3-stegs hydraulsystem med mekanisk flexionsbegränsare



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



GEOMETRIC
LOCK



HYDRAULIC
CONTROL



MULTI SPEED



EXTENSION
ASSIST





ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

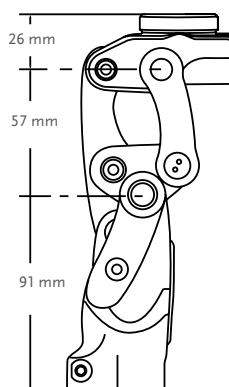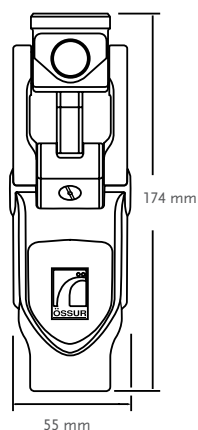

KIT

Art.nr.	Beskrivning
2000	Total Knee 2000*

*Röd stötdämpare (avsedd för patientvikt 70-90 kg) sitter monterad i knäleden vid leverans.

TOTAL KNEE® 2000

KOSMETIK

	Art.nr.	Beskrivning
1	2047	Kosmetikkåpa för delad kosmetik (svart)
2	2052	Liten knäkåpa (svart) för användning med hel slangkosmetik
2	2052N	Liten knäkåpa (svart) för användning med hel slangkosmetik*
3	2053	Stor knäkåpa för delad kosmetik (beige)
3	2053N	Stor knäkåpa för delad kosmetik (beige)*

*2052N och 2053N passar Total Knee med serienummer MXC103615 och uppåt.



KOMPONENTER

STÖTDÄMPARE - KIT

Art.nr.	Beskrivning
2000-Kit	Ett komplett set med stötdämpare och shims

Innehåller:

- 1 stötdämpare av varje hårdhet
- 1 Shim 0.38 mm
- 1 Shim 0.76 mm




TÄCKBRICKA

Art.nr.	Beskrivning
2059	Täckbricka för Total Knee 1900 och 2000



EXTENSIONSFÖRSTÄRKARE

Art.nr.	Beskrivning
1905	Begränsar hälluppkast och hjälper knäet att gå i fullt utsträckt läge

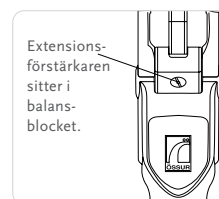

EXTENSIONSFJÄDER

Art.nr.	Beskrivning
2070S	Komplett kit för extensionsfjäder med mediumfjäder (gul)

Extra säkerhet vid träning och tillvänjning. I vissa fall kan en extensionsfjäder vara till hjälp under träning och tillvänjningsfasen för extra trygghet. Extensionsfjädern fungerar som framkastare och monteras enkelt. Fjädern kan sedan tas bort när protesanvändaren känner sig bekväm med sitt nya knä. Hård fjäder (blå) och extra hård fjäder (röd) bifogas.




TOTAL KNEE® 2000

KOMPONENTER

BAKRE LÄNK

Art.nr.	Beskrivning
2000ssb	Extra förstärkt bakre länk för Total Knee 2000



Obs! Kan ej eftermonteras. Kan levereras mot en extra kostnad.

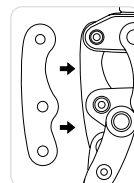

TOTAL KNEE ADAPTRAR

	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt	
1.	A-114040	Hylsadapter, 4-armad, gängad	Rostfritt stål	166 kg	8 mm	158 g	
2.	A-122300	Adapter 4-håls. Skruvas direkt på gängan på knäleden.	Aluminium	125 kg	11 mm	70 g	
3.	A-834300	Hanpyramidadapter	Rostfritt stål	100 kg	18 mm*	111 g	
3.	A-835300	Hanpyramidadapter	Titan	166 kg	18 mm*	80 g	
4.	A-845300	Honpyramidadapter	Titan	166 kg	26 mm	85 g	

*18 mm = när adaptern är fullt iskruvad i gängorna

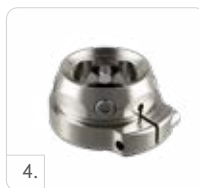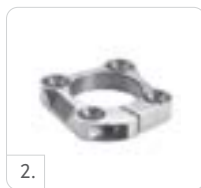


KOSMETIK TILL TOTAL KNEE

FÖRFORMAD KOSMETIKVAD

Art.nr.	Beskrivning
2075R	Förformad kosmetikvad i EVA - Regular
2075L	Förformad kosmetikvad i EVA - Large

- Beigefärgade
- Passa till Total Knee® 1900 och 2000.
- Passar till både vänster och höger sida
- Förformade på insidan för att passa knäkäpa #2053, kosmetikkåpa och ø 30 mm rör

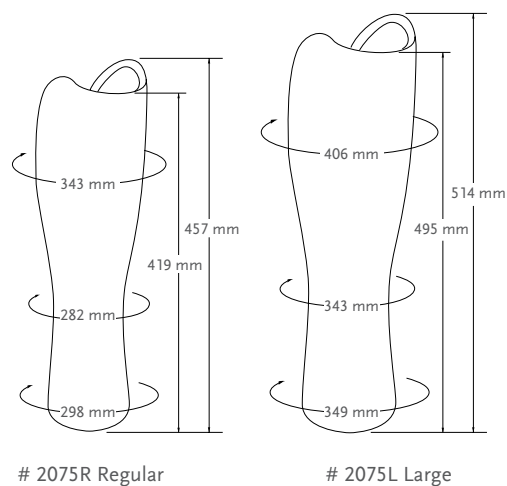

TOTAL KNEE® 2100



UNITY
COMPATIBLE

Alternativet för något tyngre eller högaktiva protesanvändare med definierad gång som prioriterar säkerhet kombinerat med optimala förutsättningar för ett naturligt gångmönster.

- Polycentrisk, 7-axlad protesknäled med ett geometriskt låssystem. Detta ger säkerhet genom ökad markfrigång och att knäleden låser helt vid hälsättning med knäet i full extension. Över midstance låser sedan knäet upp med minimal kraft från protesanvändaren. Knäleden är en mycket säker och energisnål konstruktion.
- Inbyggd stanceflexfunktion och stötdämpning ger protesanvändaren ett naturligt gångmönster vilket minskar risken för belastningsskador.
- Svingfaskontrollen möjliggör gång i olika hastigheter med bevarad symmetri.
- Låg bygghöjd, kan med fördel användas till de med lång transfemoral stump eller de som genomgått en knäexartikulation.



Video: Total Knee 2000 & Total Knee 2100 - Clinician Fitting Tutorial
4 min 11 sek.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Medel till extrem
Max. patientvikt:	125 kg

Produktinformation	
Bygghöjd:	175 mm
Vikt:	0.9 kg
Flexion:	Stopp vid 150°
Stabilisering:	Geometriskt låsningssystem med stanceflexfunktion
Svingfaskontroll:	3-steps hydraulsystem med mekanisk flexionsbegränsare



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



GEOMETRIC
LOCK



HYDRAULIC
CONTROL



MULTI SPEED



EXTENSION
ASSIST





ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

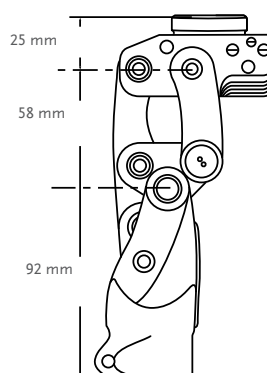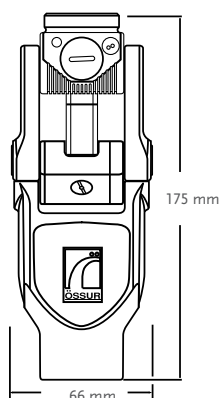

KIT


Art.nr.	Beskrivning
2100	Total Knee 2100*

*Gul stötdämpare (avsedd för patientvikt 90-110 kg) sitter monterad i knäleden vid leverans.

TOTAL KNEE® 2100

KOSMETIK

	Art.nr.	Beskrivning
1.	2145	Kosmetikkåpa för delad kosmetik (svart)
2.	2150	Liten knäkåpa (svart) för användning med hel slangkosmetik
3.	2151	Stor knäkåpa för delad kosmetik (beige)

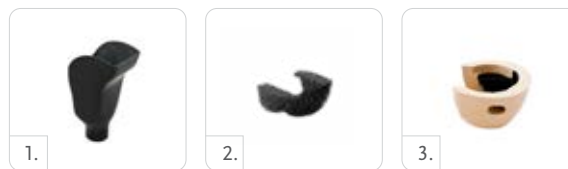

KOMPONENTER

BUMPER KIT

Art.nr.	Beskrivning
2100-Kit	Ett komplett set med stötdämpare och shims

Innehåller:

- 1 stötdämpare av varje hårdhet
- 1 Shim 0.38 mm
- 1 Shim 0.76 mm




TÄCKBRICKA

Art.nr.	Beskrivning
2100-717	Täckbricka for Total Knee 2100



EXTENSIONSFÖRSTÄRKARE

Art.nr.	Beskrivning
1905	Begränsar hæluppkast och hjälper knäet att gå i fullt utsträckt läge

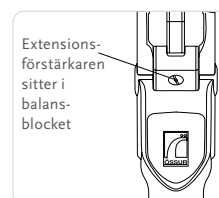

EXTENSIONSFJÄDER

Art.nr.	Beskrivning
2070S	Komplett kit för extensionsfjäder med mediumfjäder (gul)

Extra säkerhet vid träning och tillvänjning. I vissa fall kan en extensionsfjäder vara till hjälp under träning och tillvänjningsfasen för extra trygghet. Extensionsfjädern fungerar som framkastare och monteras enkelt. Fjädern kan sedan tas bort när protesanvändaren känner sig bekväm med sitt nya knä. Hård fjäder (blå) och extra hård fjäder (röd) bifogas.



TOTAL KNEE® 2100

KOMPONENTER

SMÖRJSPRUTA TILL TOTAL KNEE 2100 HIGH ACTIVITY


Art.nr.	Beskrivning
2105	Smörjspruta - används vid smörjning av nållagren vid de sju axlarna



TOTAL KNEE ADAPTRAR

	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt	
1.	A-114040	Hylsadapter, 4-armad, gängad	Rostfritt stål	166 kg	8 mm	158 g	
2.	A-122300	Adapter 4-håls. Skruvas direkt på gängan på knäleden.	Aluminium	125 kg	11 mm	70 g	
3.	A-834300	Hanpyramidadapter	Rostfritt stål	100 kg	18 mm*	111 g	
3.	A-835300	Hanpyramidadapter	Titan	166 kg	18 mm*	80 g	
4.	A-845300	Honpyramidadapter	Titan	166 kg	26 mm	85 g	

*18 mm = när adaptern är fullt iskruvad i gängorna

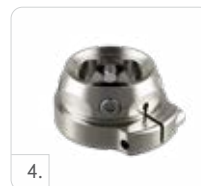


KOSMETIK TILL TOTAL KNEE 2100

FÖRFORMAD KOSMETIKVAD I EVA

Art.nr.	Beskrivning
2175L	Förformad kosmetikvad i EVA - High Activity Large

- Beigefärgad
- Passar Total Knee 2100
- Passar till både vänster och höger sida
- Förformad på insidan för att passa knäkäpa #2145/#2151 och ø 30 mm rör.

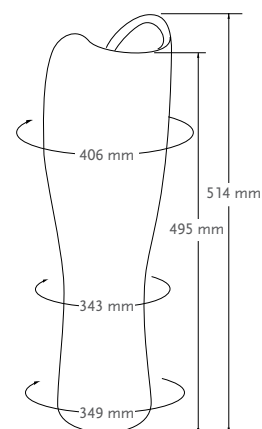

LOCKING KNEE



Locking Knee har tagits fram med tanke på amputerade med begränsad gångförmåga, dvs. protesanvändare på en mycket låg aktivitetsnivå. Lämplig att användas i en temporär protes. Tillverkad i legering av stål och aluminium.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	125 kg

Produktinformation	
Proximal bygghöjd från knäledsaxeln:	26 mm
Vikt:	0.248 kg
Flexion:	Stopp vid 140°



SINGLE AXIS



MANUAL LOCK



MECHANICAL CONTROL





SINGLE SPEED



Video: Locking Knee - Clinician Fitting Tutorial
2 min 32 sek.



BYGGHÖJD

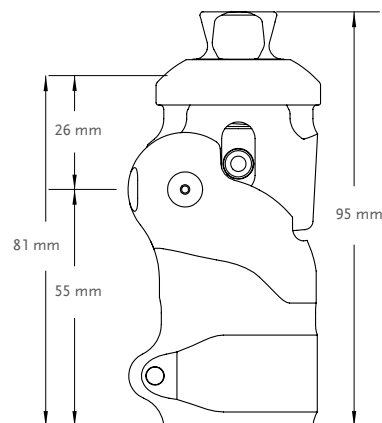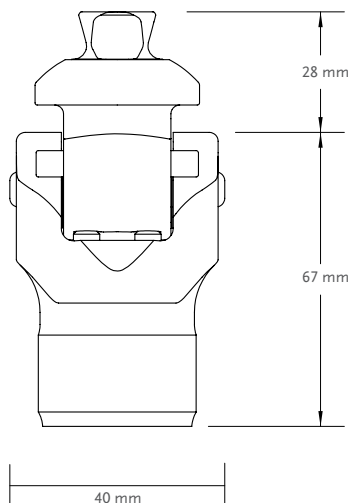

KIT

Art.nr.	Beskrivning
LKN12500	Locking Knee inkl. upplåsningsskit med lina

Art.nr.	Beskrivning
LKN12590	Upplåsningsskit med lina för Locking Knee



BALANCE™ KNEE OFM1



En mekanisk, polycentrisk protesknäled som är lämplig för protesanvändare med höga säkerhetskrav. Knäleden kan låsas (t.ex. vid stående) och lämpar sig särskilt väl för nyamputerade och mindre rörliga användare.

- Låsfunktion för hög grad av säkerhet: idealiskt vid de första stå- och gå-övningarna och vid de tillfällen protesanvändaren vill stå längre stunder.
- Flexions- och extensionsmotstånd kan anpassas och justeras allteftersom protesanvändaren blir en bättre gångare.
- Extra markfrigång gör det lättare och säkrare att gå för protesanvändaren.
- Integrerad framkastare.
- Proteshylsans adapter har inbyggda justeringsmöjligheter för optimering av inriktning



Brukarinformation

Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt:	136 kg



Video: Balance Knee OFM 1 - Clinician Fitting Tutorial
6 min 24 sek.

Produktinformation

	Med pyramidadapter	Med IKF-adapter	Med Loop adapter
Bygghöjd (1):	159 mm	174 mm	151 mm
Bygghöjd (2):	107 mm	122 mm	116 mm
Bygghöjd (3):	18 mm	33 mm	27 mm
Vikt:	ca. 640 g	ca. 770 g	ca. 650 g
Flexion:	Stopp vid 150°	Stopp vid 150°	Stopp vid 150°



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



MANUAL
LOCK



MECHANICAL
CONTROL



SINGLE
SPEED



EXTENSION
ASSIST




ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

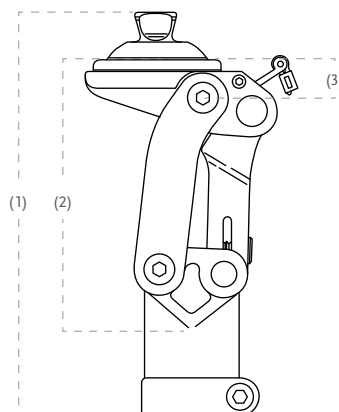

BALANCE™ KNEE OFM1

KIT

Art.nr.	Beskrivning
1721126	Balance Knee OFM1 med Pyramid
1721127	Balance Knee OFM1 med IKF adapter
1721128	Balance Knee KFM1 med Loop adapter




KOMPONENTER

	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Vikt	Bygghöjd
1.	1970863	Pyramid Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	86 g	
2.	M631100	IKF Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	220 g	
3.	1970862	Loop Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	99 g	
4.	1633121	36 mm Thread Adapter*	Aluminium	136 kg	64 g	3 mm
5.	A-114030	3-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166 kg	124 g	8 mm
6.	A-114040	4-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166 kg	154 g	8 mm




Adaptrarna passar Balance Knee OFM 1, OP5 Knee, OHP3 Knee och Paso Knee.

*Används tillsammans med #A-114030 eller #A-114040

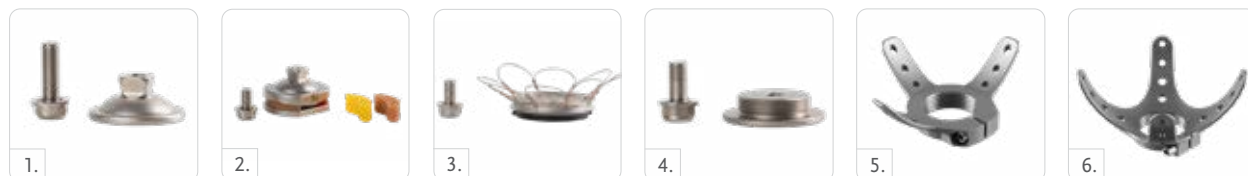


DUAL FUNCTION LEVER

Art.nr.	Beskrivning
M721222	Dual Function Lever - gör det möjligt för brukaren att enkelt byta från ett låst knä till ett frisvängande knä och tillbaka igen.

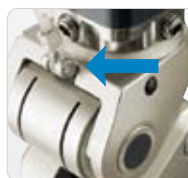

Enkelt att optimera inriktningen av protesen tack vare AP/ML-förskjutning på 5 mm och rotation utan begränsning - gäller för samtliga adaptrar förutom IKF-adaptern.

Loop-adaptern kan användas tillsammans med särskilda justeringsbrickor för att vinkla hylsan upp till 10° i valfri riktning (t.ex. vid protesförsörjning efter genomförd knäexartikulation). Detta innebär att inriktningen enkelt kan optimeras även efter testfasen.

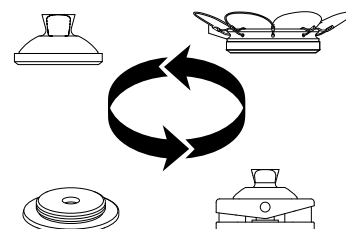

Enkel anpassning till hylsanslutningen. Välj hylsadapter efter önskemål och behov; pyramid-adaptern, 3- eller 4-armsadapter, IKF-adaptern (Initial Knee Flexion) eller loop-adaptern. En IKF-adaptern kan med fördel användas för att få en mjukare övergång mellan stöd- och svingfas.

BALANCE™ KNEE OFM2



En lätt, enkelledad protesknäled med manuellt lås och viktaktiverad friktionsbroms.

- Manuellt lås - kan initialt användas som låsknäled i rehabiliteringsfasen för hög grad av säkerhet under de första stå- och gåövningarna. Allt eftersom användaren blir mer rörlig kan ortopedingenjören aktivera flexions- och extensionsfunktionerna.
- Integrerad framkastare.



Video: Balance Knee OFM 2 -
Clinician Fitting Tutorial
3 min 07 sek.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt:	125 kg

Produktinformation	
Proximal bygghöjd från knäledsaxeln	23 mm
Vikt:	0,495 kg
Flexion:	145°



SINGLE AXIS



MANUAL
LOCK



WEIGHT
ACTIVATED
LOCK



MECHANICAL
CONTROL



SINGLE
SPEED




EXTENSION
ASSIST



ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION

BYGGHÖJD

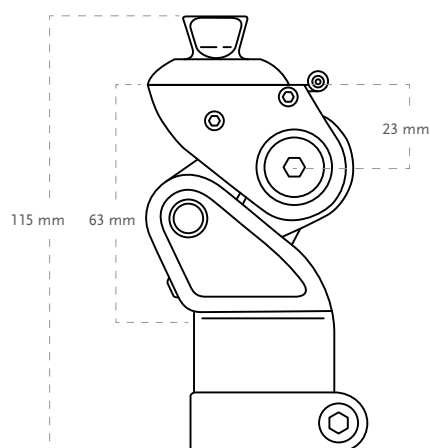

BALANCE™ KNEE OFM2


KIT

Art.nr.	Beskrivning
1721120	Balance Knee OFM2

KOMPONENTER

DUAL FUNCTION LEVER

Art.nr.	Beskrivning
M721222	Dual Function Lever - gör det möjligt för brukaren att enkelt byta från ett låst knä till ett frivängande knä med broms och tillbaka igen.

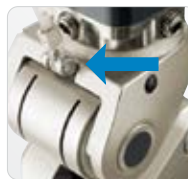


OHP3 KNEE™



En polycentrisk, pneumatisk protesknäled avsedd för medel- till hög-aktiva protesanvändare.

- Extension/flexion kan justeras oberoende av varandra - för jämn och smidig gång.
- Lodlinjen kan enkelt och snabbt förskjutas med hjälp av en 5 mm insexskruv för att få en mer dynamisk/mer säker karaktär.
- Enkel anpassning till hylsanslutningen. Flera olika adapteralternativ är möjliga.
- Knäkäpan ger skydd för protesknäled och kläder.

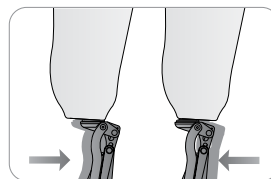

Video: OHP3 Knee -
Clinician Fitting Tutorial
4 min 23 sek.

Brukarinformation

Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Medel till hög
Max. patientvikt:	125 kg

Produktinformation

	Med pyramidadapter	Med IKF-adapter	Med Loop adapter
Bygghöjd (1):	215 mm	230 mm	207 mm
Bygghöjd (2):	158 mm	174 mm	168 mm
Bygghöjd (3):	18 mm	33 mm	27 mm
Vikt:	1025 g	1155 g	1040 g
Flexion:	150°	150°	150°



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



ADJUSTABLE
AXIS
GEOMETRY



GEOMETRIC
LOCK



PNEUMATIC
CONTROL



MULTI SPEED



EXTENSION
ASSIST




ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

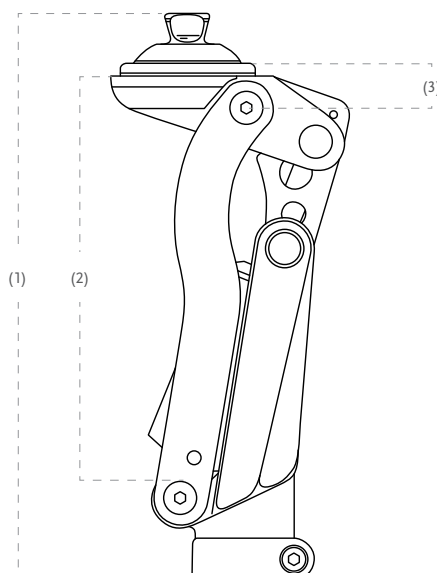

OHP3 KNEE™

KIT

Art.nr.	Beskrivning
1. 1728160	OHP3 Knee med pyramidadapter
2. 1728161	OHP3 Knee med IKF-adapter
3. 1728162	KHP3 Knee med Loop adapter




KOMPONENTER

	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Vikt	Bygghöjd
1.	1970863	Pyramid Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	86 g	
2.	M631100	IKF Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	220 g	
3.	1970862	Loop Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	99 g	
4.	1633121	36 mm Thread Adapter*	Aluminium	136 kg	64 g	3 mm
5.	A-114030	3-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166 kg	124 g	8 mm
6.	A-114040	4-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166 kg	154 g	8 mm




Adaptrarna passar Balance Knee OFM 1, OP5 Knee, OHP3 Knee och Paso Knee.

*Används tillsammans med #A-114030 eller #A-114040

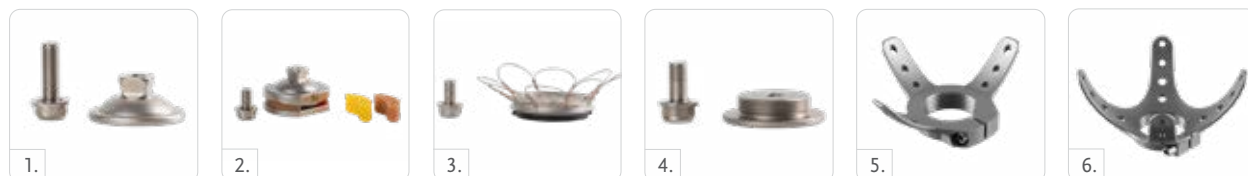

Enkelt att optimera inriktningen av protesen tack vare AP/ML-förskjutning på 5 mm och rotation utan begränsning - gäller för samtliga adaptrar förutom IKF-adaptern.

Loop-adaptern kan användas tillsammans med särskilda justeringsbrickor för att vinkla hylsan upp till 10° i valfri riktning (t.ex. vid protesförsörjning efter genomförd knäexartikulation). Detta innebär att inriktningen enkelt kan optimeras även efter testfasen.

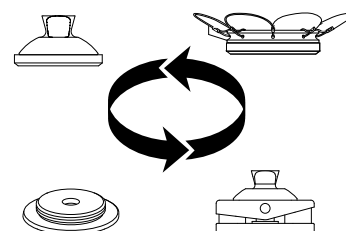

Enkel anpassning till hylsanslutningen. Välj hylsadapter efter önskemål och behov; pyramidadapter, 3- eller 4-armsadapter, IKF-adapter (Initial Knee Flexion) eller loop-adapter. En IKF-adapter kan med fördel användas för att få en mjukare övergång mellan stöd- och svingfas.

OP4 KNEE™



En pneumatisk, enkelledad protesknäled med viktaktiverad bromsfunktion avsedd för medel- till högaktiva protesanvändare.

- Bromsfunktionen kan finjusteras och anpassas efter varje protesanvändares specifika säkerhetsbehov.
- Extension/flexion kan justeras oberoende av varandra - för jämn och smidig gång.
- Knäkläppen ger skydd för protesknäled och kläder.



Video: OP4 Knee -
Clinician Fitting Tutorial
1 min 46 sek.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Medel till hög
Max. patientvikt:	100 kg

Produktinformation	
Bygghöjd:	146 mm
Vikt:	0,680 kg
Flexion:	145°



SINGLE AXIS



WEIGHT
ACTIVATED
LOCK



PNEUMATIC
CONTROL



MULTI SPEED




EXTENSION
ASSIST



ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION

BYGGHÖJD

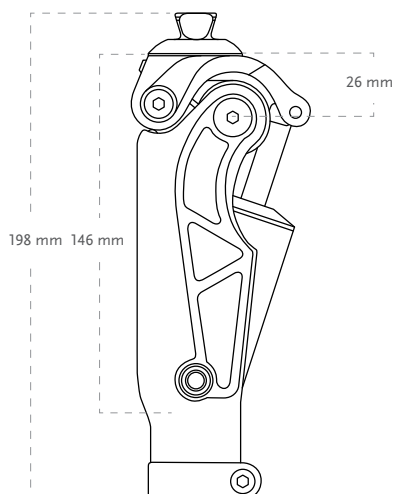

KIT

Art.nr.	Beskrivning
1720185	OP4 Knee

OP5 KNEE™



OP5 är en pneumatisk, polycentrisk knäled med individuellt justerbar svingfas. Flera olika adapteralternativ är möjliga beroende på amputationsnivå.

- Justerbar pneumatisk svingfaskontroll
- Justerbar stance flexion med IKF-adaptorn (för mjukare övergång mellan stöd- och svingfas)
- Låg bygghöjd, kan med fördel användas till de med lång transfemoral stump eller de som genomgått en knäexartikulation
- Passar ø 30 mm rör
- Hög knäflexionsvinkel (upp till 145°)

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Medel till hög
Max. patientvikt:	125 kg



Video: OP5 Knee -
Clinician Fitting Tutorial
4 min 27 sek.



Produktinformation			
	Med pyramidadapter	Med IKF-adapter	Med Loop adapter
Bygghöjd (1):	195 mm	210 mm	200 mm
Bygghöjd (2):	160 mm	175 mm	165 mm
Bygghöjd (3):	18 mm	33 mm	23 mm
Vikt:	770 g	900 g	785 g
Flexion:	ca. 145°	ca. 145°	ca. 145°



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



PNEUMATIC
CONTROL



MULTI SPEED



EXTENSION
ASSIST




ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

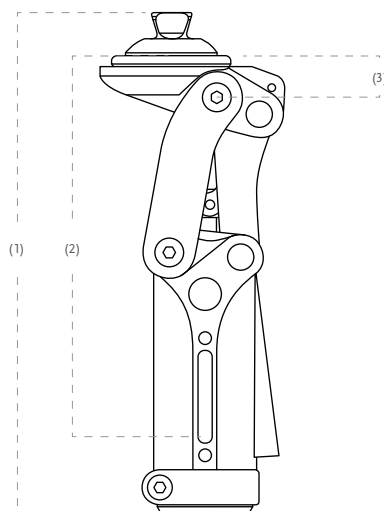

OP5 KNEE™

KIT

Art.nr.	Beskrivning
1. 1720180	OP5 Knee med pyramidadapter
1720182	OP5 Knee med IKF-adapter
1720181	KP5 Knee med Loop adapter





KOMPONENTER

Picture	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Vikt	Bygghöjd
1.	1970863	Pyramid Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	86 g	
2.	M631100	IKF Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	220 g	
3.	1970862	Loop Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	99 g	
4.	1633121	36 mm Thread Adapter*	Aluminium	136 kg	64 g	3 mm
5.	A-114030	3-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166 kg	124 g	8 mm
6.	A-114040	4-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166 kg	154 g	8 mm




Adaptrarna passar Balance Knee OFM 1, OP5 Knee, OHP3 Knee och Paso Knee.

*Används tillsammans med #A-114030 eller #A-114040

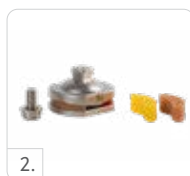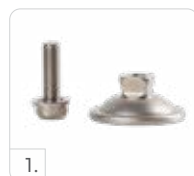

Enkelt att optimera inriktningen av protesen tack vare AP/ML-förskjutning på 5 mm och rotation utan begränsning - gäller för samtliga adaptrar förutom IKF-adaptren.

Loop-adaptren kan användas tillsammans med särskilda justeringsbrickor för att vinkla hylsan upp till 10° i valfri riktning (t.ex. vid protesförsörjning efter genomförd knäexartikulation). Detta innebär att inriktningen enkelt kan optimeras även efter testfasen.

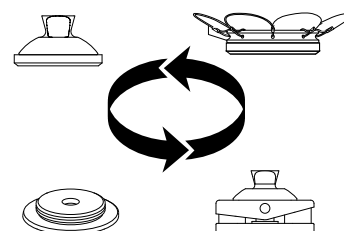

Enkel anpassning till hylsanslutningen. Välj hylsadapter efter önskemål och behov; pyramidadapter, 3- eller 4-armsadapter, IKF-adapter (Initial Knee Flexion) eller loop-adapter. En IKF-adapter kan med fördel användas för att få en mjukare övergång mellan stöd- och svingfas.

PASO KNEE™



Pneumatisk, polycentrisk protesknädd avsedd för låg- till högaktiva protesanvändare.

- Svingfaskontroll med pneumatiskt system som anpassar sig automatiskt efter användarens gånghastighet
- Enkel anpassning till hylsanslutningen. Flera olika adapter-alternativ är möjliga.
- Klar att användas "out-of-the-box".
- Stöd för olika gånghastigheter upp till 7 km/h.
- Lodlinjen kan enkelt och snabbt förskjutas med hjälp av en kil för att få en mer dynamisk/mer säker karaktär.



Video: Paso Knee -
Clinician Fitting Tutorial
4 min 01 sek.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	136 kg

Produktinformation			
	Med pyramidadapter	Med IKF-adapter	Med Loop adapter
Bygghöjd (1):	215 mm	230 mm	207 mm
Bygghöjd (2):	158 mm	174 mm	168 mm
Bygghöjd (3):	18 mm	33 mm	27 mm
Vikt:	1050 g	1180 g	1065 g
Flexion:	ca. 150°	ca. 150°	ca. 150°



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



ADJUSTABLE
AXIS
GEOMETRY



GEOMETRIC
LOCK



PNEUMATIC
CONTROL



MULTI SPEED



AUTOMATIC
SPEED
ADJUSTMENT



EXTENSION
ASSIST




ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION


BYGGHÖJD

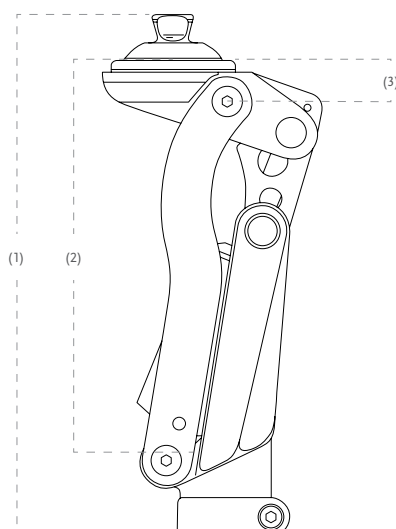

PASO KNEE™

KIT

Art.nr.	Beskrivning
1. 1728180	Paso Knee med pyramidadapter
2. 1728181	Paso Knee med IKF-adapter
3. 1728182	Paso Knee med Loop adapter

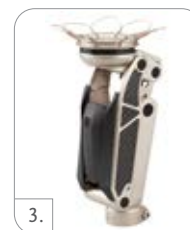



KOMPONENTER

Picture	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Vikt	Bygghöjd
1.	1970863	Pyramid Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	86 g	
2.	M631100	IKF Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	220 g	
3.	1970862	Loop Adapter	Aluminium/Stål	136 kg	99 g	
4.	1633121	36 mm Thread Adapter*	Aluminium	136 kg	64 g	3 mm
5.	A-114030	3-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166kg	124 g	8 mm
6.	A-114040	4-armad hylsadapter	Rostfritt stål	166 kg	154 g	8 mm




Adaptrarna passar Balance Knee OFM 1, OP5 Knee, OHP3 Knee och Paso Knee.

*Används tillsammans med #A-114030 eller #A-114040

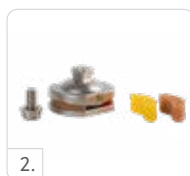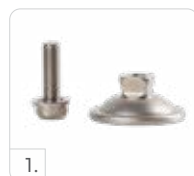

Enkelt att optimera inriktningen av protesen tack vare AP/ML-förskjutning på 5 mm och rotation utan begränsning - gäller för samtliga adaptrar förutom IKF-adaptern.

Loop-adaptern kan användas tillsammans med särskilda justeringsbrickor för att vinkla hylsan upp till 10° i valfri riktning (t.ex. vid protesförsörjning efter genomförd knäexartikulation). Detta innebär att inriktningen enkelt kan optimeras även efter testfasen.

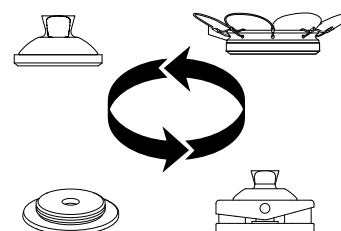

Enkel anpassning till hylsanslutningen. Välj hylsadapter efter önskemål och behov; pyramidadapter, 3- eller 4-armsadapter, IKF-adapter (Initial Knee Flexion) eller loop-adapter. En IKF-adapter kan med fördel användas för att få en mjukare övergång mellan stöd- och svingfas.

ÖSSUR ACADEMY ONLINE eLEARNING COURSES

ÖSSUR ACADEMY ONLINE eLEARNING – ÖSSURS KUNSKAPSPORTAL

Som en del i Össurs arbete med att erbjuda utbildningsstöd och kurser för en djupare förståelse för våra produktlösningar, har vi satt upp en kunskapsportal:

Össur Academy Online eLearning.

Portalen ger dig tillgång till kostnadsfria, digitala kurser "24/7" så att du själv kan förkovra dig, när så passar, i våra ortos- och proteslösningar.

Portalen hittar du på www.ossur.se alternativt genom att läsa in QR-koden under bilden.

För ytterligare klinisk information eller handledning vid utprovning/tillpassning, se även vår **Össur Academy YouTube-kanal**.

QR-koder under bilden.



Össur Academy
Online eLearning



Össur Academy
Channel on YouTube

ÖSSUR FEET



BALANCE™ FOOT S



BALANCE™ FOOT S TORSION



PROPRIO FOOT®



FLEX-FOOT® BALANCE
D/P FLEXION™



FLEX-FOOT® BALANCE



PRO-FLEX® TERRA



PRO-FLEX® PIVOT



BALANCE™ FOOT J



FLEX-FOOT® ASSURE®



PRO-FLEX® ST



PRO-FLEX® MODULAR



PRO-FLEX® XC



PRO-FLEX® XC TORSION

SPECIAL SOLUTIONS



VARI-FLEX®



LP VARI-FLEX®



PRO-FLEX® LP



PRO-FLEX® LP TORSION



FLEX-SYMES™



CHOPART



RE-FLEX ROTATE™



RE-FLEX SHOCK™



PRO-FLEX® LP ALIGN



CHEETAH® XPLORE

ÖSSUR FEET

EGENSKAPER

FULL LENGTH TOE LEVER

Fullängdsfoten matchar längden på den icke-amputerade foten, vilket ger en jämnare, mer symmetrisk gång.



FULL LENGTH TOE LEVER

ACTIVE TIBIAL PROGRESSION

Vertikala krafter genererade vid hälkontakt absorberas och omvandlas till en framåtdrivande kraft som beskrivs som Active Tibial Progression.



ACTIVE TIBIAL PROGRESSION

VERTICAL SHOCK PYLON

Stötdämpning: Stötdämpare skonar stumpan, lederna och korsryggen vid vardagliga aktiviteter.



VERTICAL SHOCK PYLON

ROTATION

Protesfotens förmåga att absorbera rotationskrafter tillåter protesanvändaren att gå utan ökad påfrestning på stumpan på grund av ökade skjuvkrafter i proteshylan.



ROTATION

JUSTERBAR HÄLHÖJD

Hälhöjden kan anpassas efter olika typer av skor.



HEEL HEIGHT ADJUSTABILITY

MULTI-AXIAL GROUND COMPLIANCE

Multi-axiell anpassningsförmåga till underlaget. Möjliggör god markkontakt även vid gång på ojämna underlag.



MULTI-AXIAL GROUND COMPLIANCE

ANKLE POWER

Genereras av fotdeformationen och bladens energilagrings- och återgivningsförmåga när foten övergår från midstance till latestance fram till terminal stance och toe-off.



ANKLE POWER

PIVOT TECHNOLOGY

Pivot-teknologin efterliknar den anatomiska ankelleden genom att sammanbinda fotbladen med den fysiologiska rotationspunkten.



PIVOT TECHNOLOGY

ANATOMICAL FOOT

Full, effektiv fotlängd i kombination med stortå/sandaltå matchar den anatomiska fotens längd och form. En lätt, anatomiskt utformad fotkosmetik garanterar bra passform i skon. En stabil greppsula ger ett bättre grepp vid barfotagång. Sandaltåutförandet gör det möjligt att använda en rad olika skor inklusive flipflops.



ANATOMICAL FOOT

SPLIT TOE

Split-tån tillåter foten att anpassa sig till underlaget och möjliggör naturlig gång även på ojämnt underlag.



SPLIT TOE

ÖSSUR FEET

EGENSKAPER

AVTAGBAR FOTKOSMETIK

En lättanvänd tryckknappsfunktion gör det enkelt för protesanvändaren att snabbt ta bort fotkosmetiken för rengöring. Kosmetikens insida möjliggör dränering av vatten genom en öppning på baksidan. Sulan har en räfflad yta för extra grepp på våta underlag.



USER REMOVABLE
FOOT COVER

PRE-LOAD TECHNOLOGY

Protesfotens övre fotblad komprimeras vid montering, vilket ger en förkomprimering motsvarande drygt 30 % av användarens vikt. Förkompressionen i kombination med dess rörliga kontaktpunkt ger en enastående prestanda i varierande gånghastigheter.



PRE-LOAD
TECHNOLOGY

SANDAL TOE

Protesfot med sandaltå och en smal, mer kosmetiskt tilltalande fotkosmetik. Gör det möjligt för protesanvändaren att använda sandaler.



SANDAL TOE

WEATHERPROOF

En väderbeständig enhet tillåter användning i våt och/eller fuktig miljö. Den tillåter *inte* nedsänkning i vatten. Enheten klarar stänk av färskvatten men ska torkas av noggrant efteråt. Färskvatten inkluderar kranvatten (sötvatten), exkluderar saltvatten och klorerat vatten. OBS! För att en protes skall anses som väderbeständig, måste övriga proteskomponenter också vara väderbeständiga.



WEATHERPROOF

WATERPROOF

Oavsett om komponenten utsätts för sötvatten, saltvatten eller klorerat vatten ger Össurs vattentäta produkter det skydd som behövs. Användningen av förstklassiga tillverkningsmaterial ger ett permanent skydd mot skadligt intrång av vatten, även efter nedsänkning, och komponentdelarna fortsätter att ge den funktion som kan förväntas. OBS: Exponering för klorerat vatten rekommenderas inte för Proprio Foot, eftersom det kan påverka smörjmedlet i aktuatoren och därmed fotens funktion. Den strukturella integriteten påverkas dock inte.



WATERPROOF

HYDRAULIC DORSIFLEXION

Hydraulisk dorsiflexion och plantarflexion ger användaren markfrigång i svingfasen och minskar risken för att tån stöter i.



HYDRAULIC
FLEXION

UNITY® VACUUM SUSPENSION SYSTEM

INTRODUKTION

Unity Vacuum Suspension System tillsammans med Seal-In-teknologin skapar en aktiv vakuumsuspension utan sleeve. Unity är designat för att användas med beprövad Seal-In- och Flex-Foot-/Pro-Flex-teknologi. Vakuumpumpen i Unity är helt mekanisk och samarbetar med protesfoten utan att påverka fotmodulen.

Vakuumsuspensionen i Unity är enkel att hantera och lossas snabbt och lätt med en knapptryckning.

Med Unity får protesanvändaren ett större rörelseomfång i knäleden eftersom vakuumet skapas på den distala delen av stumpen och därmed behövs ingen sleeve. Risken för att vakuumet släpper p.g.a. att sleeveen går sönder och/eller inte håller tätt, minimeras också.

FÖRDELAR

Stumpens volym förändras oftast under dagen. För att upprätthålla kontinuerligt god suspension och protesfunktion är det viktigt för protesanvändaren att kunna kontrollera dessa volymförändringar. Genom att kombinera Unity Vacuum Suspension System med Össurs Seal-In-teknologi, får protesanvändaren goda möjligheter att kontrollera stumpens dagliga volym- och formförändringar.

- Ingen sleeve behövs: Ger ökad rörlighet och användaracceptans
- Aktivt distalt vakuum: Ger effektiv volymstabilisering och volymkontroll
- Enkel design: Det går snabbt och lätt att skapa/lossa vakuum
- Pump: Pumpen påverkar inte fotens funktion

UNITY – FÖR VEM?

Unity finns som tillval för de flesta av Össurs protesfötter och kan därmed erbjudas till ett brett spektrum av protesanvändare. Unity är utformat för att passa både transtibialt och transfemoralt amputerade. Iceross-liners med Seal-In-teknologi kan med fördel användas i kombination med Unity.



Video: Unity Socket Fabrication
4 min 11 sek

BALANCE™ FOOT S



UNITY
COMPATIBLE

En vattentät, lätt protesfot specifikt designad för att möta de behov som lågaktiva protesgångare har.

Genom att kombinera en mjuk, stötuppfångande häl som blir progressivt styvare, med en unik C-form och ett brett fotblad med split-tå, får de lågaktiva protesgångarna den stabilitet, säkerhet och trygghet som de behöver.

Den har en lätt och anatomiskt utformad fotkosmetik med stabil greppsula för bättre grepp vid barfotagång. Sandaltåutförandet gör det möjligt att använda en rad olika skor.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Balance Foot S Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshysan under hela dagen.



Video: Balance Foot S
Classroom Catch-up
2 min 38 sek



Video: Low Impact Solution by
Össur w/ Balance Foot S
7 min 09 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	147 kg

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	24inHg (609 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	130 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats

Produktinformation	
Kategori:	1-8
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27, kat. 5)	622 g inkl. fotkosmetik och Spectra Sock
Bygghöjd: (Stl. 27)	126 mm inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter



FULL LENGTH
TOE LEVER



MULTI-AXIAL
GROUND
COMPLIANCE



SPLIT TOE




SANDAL TOE



WATERPROOF

BESTÄLLNINGSGRUPP – BALANCE FOOT S


FÖR BESTÄLLNING AV
KOMPLETT FOT

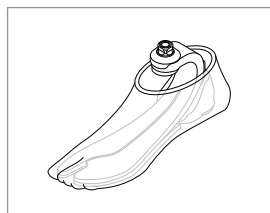

BALANCE™ FOOT S

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG – BALANCE FOOT S UNITY

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

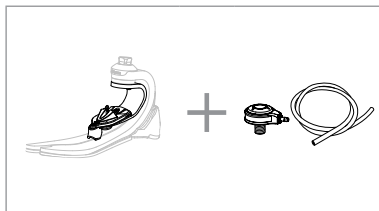

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:


*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Balance Foot S. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg									
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8

BYGGHÖJD

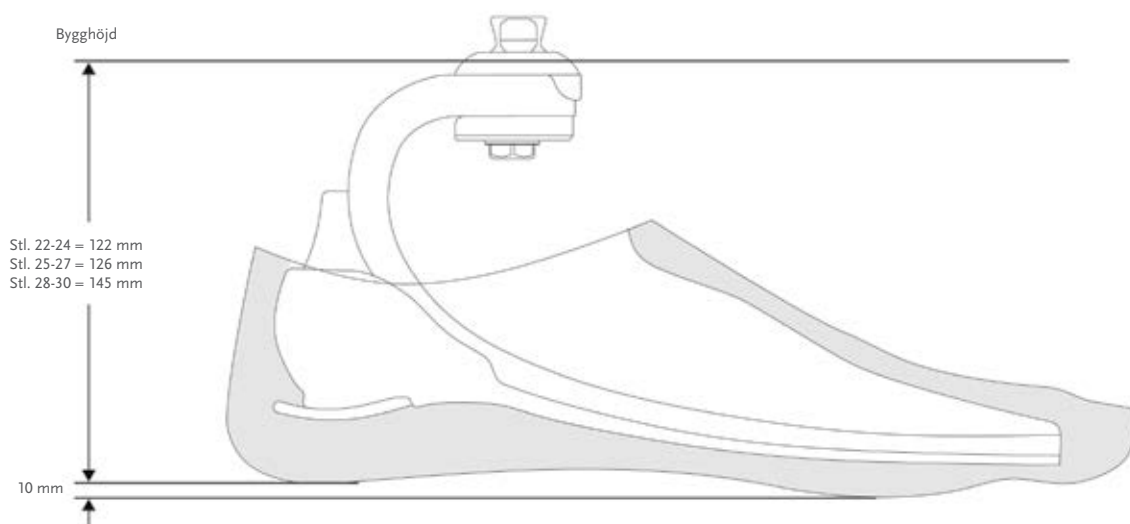


BALANCE™ FOOT S

KIT

BALANCE FOOT S

ART.NR.

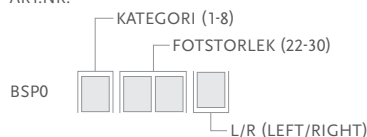

Innehåller:


- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



BALANCE FOOT S UNITY

ART.NR.

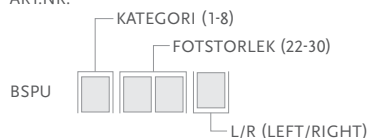


Innehåller:

- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul




Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventsats ingår ej, beställs separat.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

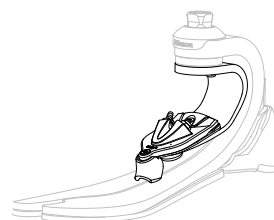

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UBS0024	Unity pumpmodul S22-24	Balance Foot S & Balance Foot S Torsion, stl. 22-24
1.	UBS0027	Unity pumpmodul S25-27	Balance Foot S & Balance Foot S Torsion, stl. 25-27
1.	UBS0030	Unity pumpmodul S28-30	Balance Foot S & Balance Foot S Torsion, stl. 28-30
2.	UTT0001	Unity TT hylsventsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Unity Kit	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

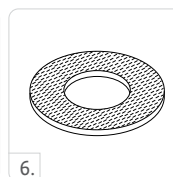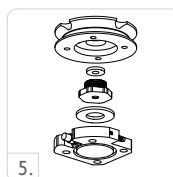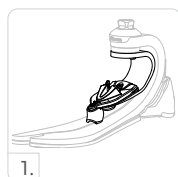

BALANCE™ FOOT S

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UBS00021	Unity BS Komponenter 22-30


Innehåller:

- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Slang
- Slangklämma
- Loctite

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

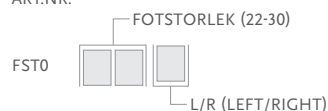

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



BALANCE™ FOOT S TORSION



En vattentät, lätt protesfot som är specifikt designad för att möta de behov som lågaktiva protesgångare har. Genom att kombinera en mjuk, stötuppfångande häl som blir progressivt styvare, med en unik C-form och ett brett fotblad med split-tå, får de lågaktiva protesgångarna den stabilitet, säkerhet och trygghet som de behöver.

Torsions- och stötdämparenheten hjälper till att återställa förlorad rotationsförmåga, minska skjuvkrafterna och absorbera vertikala stötar.

Den har en lätt, anatomiskt utformad fotkosmetik med stabil greppsula för bättre grepp vid barfotagång. Sandaltåutförandet gör det möjligt att använda en rad olika skor inklusive flipflops.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Balance Foot S Torsion Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylan under hela dagen.

UNITY
COMPATIBLE



Video: Balance Foot S/Balance Foot S Torsion
Classroom Catch-up
2 min 38 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	147 kg

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	24inHg (609 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	130 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats

Produktinformation	
Kategori:	1-8
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27, kat. 5)	996 g inkl. fotkosmetik och Spectra Sock
Bygghöjd: (Stl. 27)	204 mm inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter



FULL
LENGTH
TOE LEVER



MULTI-AXIAL
GROUND
COMPLIANCE



SPLIT TOE



SANDAL TOE



VERTICAL
SHOCK
PYLON



ROTATION



WATERPROOF


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg									
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8


BALANCE™ FOOT S TORSION

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

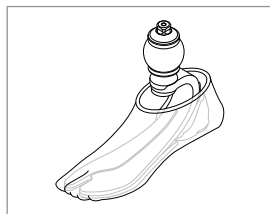

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

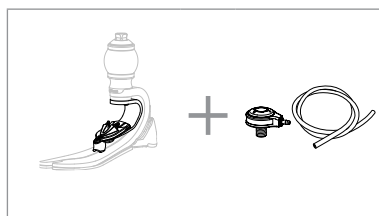


Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • Unity TT hylsventilsats | #UTT0001 |
| • Unity TF hylsventilsats | #UTF0001 |
| Övriga valbara kit: | |
| • Icelock 544 för Unity kit | #L-544611 |
| • Icelock 562 Hybrid för Unity kit | #L-562000* |
| • Icelock 562 Hybrid Unity för DS | #L-562400* |

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Balance Foot S Torsion. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

BYGGHÖJD

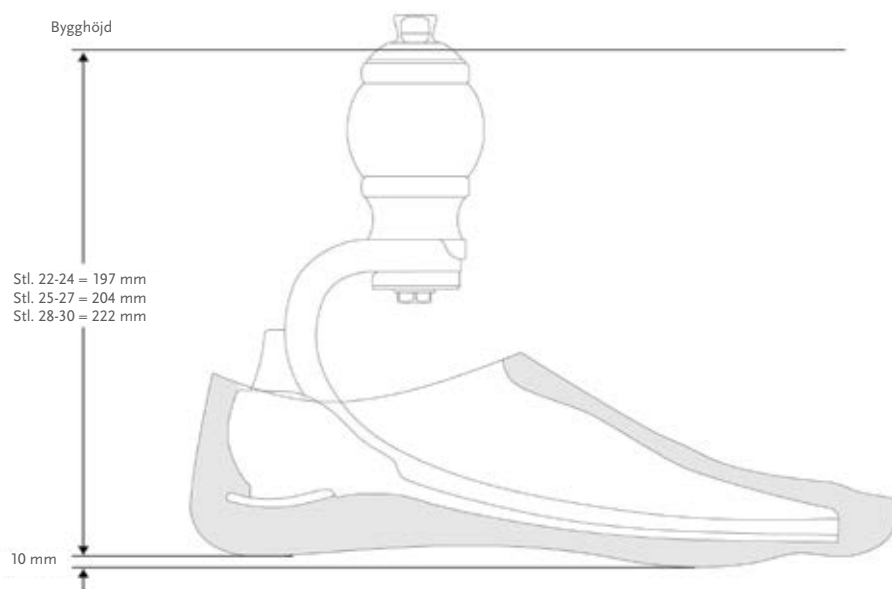


BALANCE™ FOOT S TORSION

KIT

BALANCE FOOT S TORSION


ART.NR.

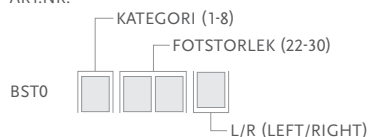

Innehåller:


- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

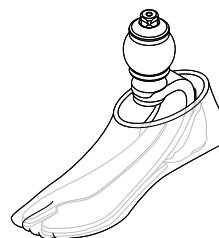

BALANCE FOOT S TORSION UNITY

ART.NR.

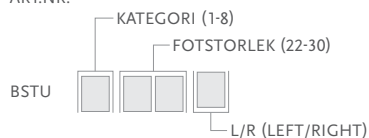


Innehåller:

- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul


Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventsats ingår ej, beställs separat.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

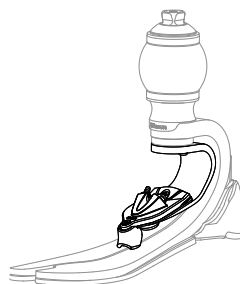

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UBS0024	Unity pumpmodul S22-24	Balance Foot S & Balance Foot S Torsion, storlek 22-24
1.	UBS0027	Unity pumpmodul S25-27	Balance Foot S & Balance Foot S Torsion, storlek 25-27
1.	UBS0030	Unity pumpmodul S28-30	Balance Foot S & Balance Foot S Torsion, storlek 28-30
2.	UTT0001	Unity TT hylsventsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Unity Kit	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventilfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

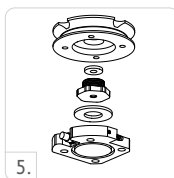

BALANCE™ FOOT S TORSION

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UBS00021	Unity BFS Komponenter 22-30


Innehåller:

- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Slang
- Slangklämma
- Loctite

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

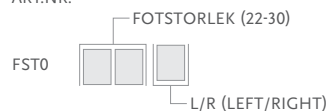

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



FLEX-FOOT® BALANCE D/P FLEXION™



UNITY
COMPATIBLE

Passar de minst aktiva protesanvändarna som förflyttar sig kortare sträckor inomhus med gånghjälpmedel. Fullängdskonstruktionen och dess multiaxiella funktion ger protesanvändaren en bra balans och säker förflyttning.

D/P Flexion™ är en hydraulisk ankelmodul som ger upp till 8° dorsal- och plantarflexion vilket minskar risken att snubbla och falla. Med D/P Flexion erhålls en bättre stabilitet vid gång i ramper och när protesanvändaren ska ta sig upp från sittande till stående. Dorsal- och plantarflexionen ställs in var för sig. Flexionsmotståndet kan därmed optimeras för bästa möjliga individuella stabilitet.

Observera att D/P Flexion endast är avsedd för lågaktiva protesanvändare.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Flex-Foot Balance D/P Flexion Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar inte protesfotens mekaniska egenskaper.

Tillsammans med Iceross Seal-In skapar Flex-Foot Balance D/P Flexion Unity en aktiv vakuumsuspension i proteshylsan vid rörelse/gång utan att sleeve behöver användas.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	136 kg



FULL LENGTH
TOE LEVER



MULTI-AXIAL
GROUND
COMPLIANCE



HYDRAULIC
FLEXION




SANDAL TOE

Produktinformation	
Kategori:	0-5
Storlekar:	21-28
Vikt: (Stl. 27)	932 g inkl. pyramid och kosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	138 mm inkl. pyramid och kosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter

Unity systeminformation	
Unity-storlekar:	23-28
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-16inHg till -20inHg
Ökad systemvikt:	100 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats

BYGGHÖJD

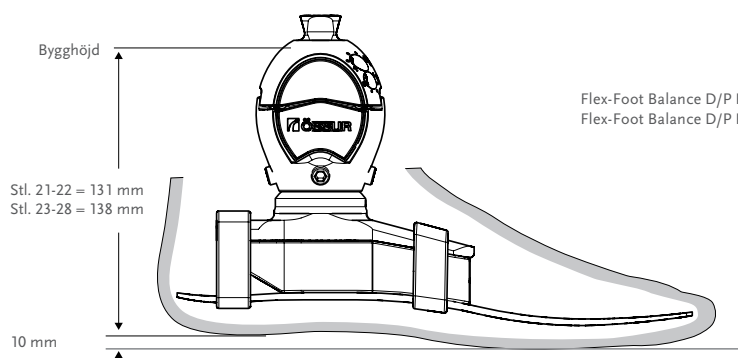


Flex-Foot Balance D/P Flexion Unity har samma bygghöjd som Flex-Foot Balance D/P Flexion.

FLEX-FOOT® BALANCE D/P FLEXION™

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

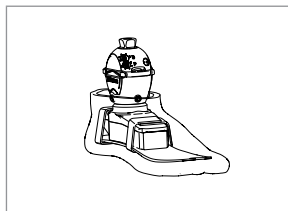

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY



Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
 - Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Övriga valbara kit:
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
 - Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
 - Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*
- *Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Flex-Foot Balance D/P Flexion. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI


Vikt, kg	36-44	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
21	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A
22	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A
23	0	1	2	N/A	N/A	N/A
24	0	1	2	N/A	N/A	N/A
25	N/A	1	2	3	4	5
26	N/A	1	2	3	4	5
27	N/A	N/A	2	3	4	5
28	N/A	N/A	2	3	4	5

Kategorierna ovan gäller för både Flex-Foot Balance D/P Flexion och Flex-Foot Balance D/P Flexion Unity. Observera att Flex-Foot Balance D/P Flexion Unity endast finns i stl. 23-28.

FLEX-FOOT® BALANCE D/P FLEXION™

KIT


FLEX-FOOT BALANCE D/P FLEXION

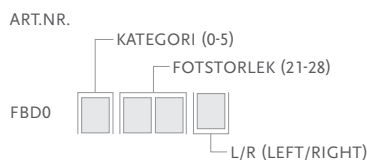

Innehåller:


- Fotmodul med D/P Flexion
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

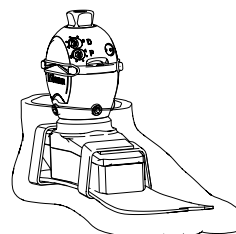

KIT – UNITY

FLEX-FOOT BALANCE D/P FLEXION UNITY

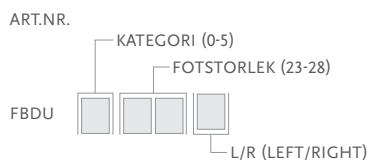

Innehåller:

- Fotmodul med D/P Flexion
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul




Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UKB0026	Unity pumpmodul K2P-FBP 23-26	Flex-Foot Balance D/P Flexion stl. 23-26
1.	UKB0028	Unity pumpmodul K2P-FBP 27-28	Flex-Foot Balance D/P Flexion stl. 27-28
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

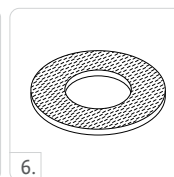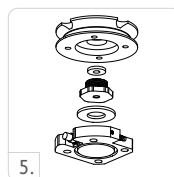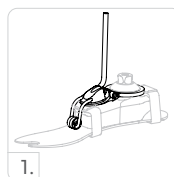

FLEX-FOOT® BALANCE D/P FLEXION™

UNITY - RESERVDELAR


Art.nr.	Beskrivning
UKB00021	Unity Komponenter, 23-28

Innehåller:

- Membran
- Slang
- Kontrollventiler
- Slangklämma
- Täckhuv

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

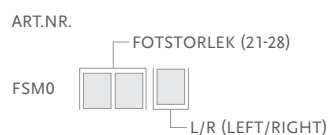

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



FLEX-FOOT® BALANCE

UNITY
COMPATIBLE



Flex-Foot Balance passar de minst aktiva brukarna som förflyttar sig kortare sträckor inomhus med gånghjälpmedel. Protesfotens full-längdskonstruktion och dess multiaxiella funktion ger protesanvändaren en bra balans och säker förflyttning.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Flex-Foot Balance Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar inte protesfotens mekaniska egenskaper. Unity kan eftermonteras på redan befintlig Flex-Foot Balance.

Tillsammans med Iceross Seal-In skapar Flex-Foot Balance Unity en aktiv vakuumsuspension i proteshylsan vid rörelse/gång utan att sleeve behöver användas.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	136 kg



FULL LENGTH
TOE LEVER



MULTI-AXIAL
GROUND
COMPLIANCE



SANDAL TOE


Produktinformation	
Kategori:	0-5
Storlekar:	21-28
Vikt: (Stl. 27)	594 g inkl. pyramid och kosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	62 mm inkl. pyramid och kosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter

Unity systeminformation	
Unity-storlekar:	23-28
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-16inHg till -20inHg
Ökad systemvikt:	100 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


FLEX-FOOT® BALANCE

BESTÄLLNINGSGRUPP

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

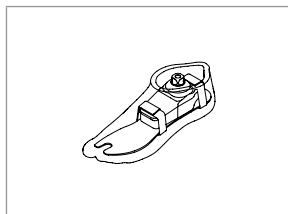

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

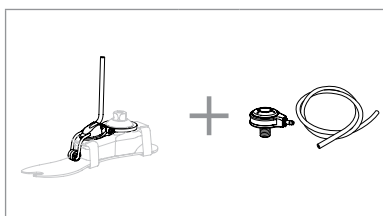

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001

Övriga valbara kit:

- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Flex-Foot Balance. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.


VAL AV KATEGORI – FLEX-FOOT BALANCE

Vikt, kg	36-44	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
21	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A
22	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A
23	0	1	2	N/A	N/A	N/A
24	0	1	2	N/A	N/A	N/A
25	N/A	1	2	3	4	5
26	N/A	1	2	3	4	5
27	N/A	N/A	2	3	4	5
28	N/A	N/A	2	3	4	5

Kategorierna ovan gäller för Flex-Foot Balance.

FLEX-FOOT® BALANCE


BYGGHÖJD

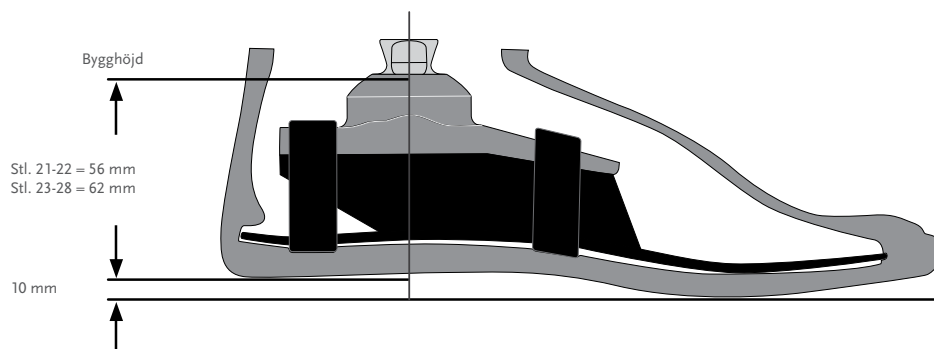

Flex-Foot Balance Unity har samma bygghöjd som Flex-Foot Balance.

KIT


FLEX-FOOT BALANCE

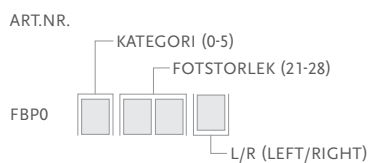

Innehåller:


- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

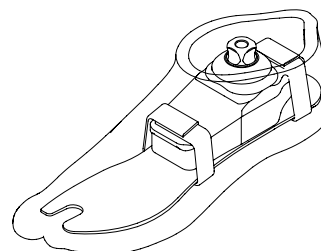

KIT – UNITY

FLEX-FOOT BALANCE UNITY

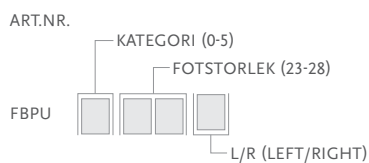


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventsats ingår ej, beställs separat.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

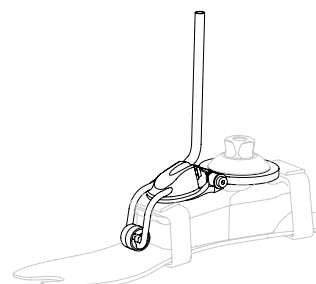

FLEX-FOOT® BALANCE

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UKB0026	Unity pumpmodul K2P-FBP 23-26	Flex-Foot Balance storlek 23-26
1.	UKB0028	Unity pumpmodul K2P-FBP 27-28	Flex-Foot Balance storlek 27-28
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.



UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UKB00021	Unity Komponenter, 23-28

Innehåller:

- Membran
- Slang
- Kontrollventiler
- Slangklämma
- Täckhuv

VAL AV KATEGORI – FLEX-FOOT BALANCE UNITY

Vikt, kg	36-44	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
23	0	1	2	N/A	N/A	N/A
24	0	1	2	N/A	N/A	N/A
25	N/A	1	2	3	4	5
26	N/A	1	2	3	4	5
27	N/A	N/A	2	3	4	5
28	N/A	N/A	2	3	4	5


Kategorierna ovan gäller för Flex-Foot Balance Unity.

FLEX-FOOT® BALANCE

KOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

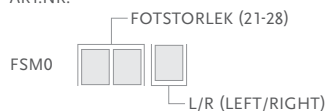

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



BALANCE™ FOOT J



UNITY
COMPATIBLE

Balance Foot J passar bra till lågaktiva protesanvändare som önskar en stabil och säker lättviktsfot.

Fotens hälparti ger dämpning och en kontrollerad plantarflexion. Detta i kombination med fotbladets konstruktion och kolfiberlängd gör Balance Foot J till en stabil och säker fot.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Balance Foot J Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar inte protesfotens mekaniska egenskaper.

Tillsammans med Iceross Seal-In skapar Balance Foot J Unity en aktiv vakuumsuspension i proteshylsan vid rörelse/gång utan att sleeve behöver användas.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	136 kg



FULL LENGTH TOE
LEVER



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



WEATHERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-5
Storlekar:	22-30
Vikt: (Stl. 27, Kat. 2)	502 g inkl. hanpyramid och fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	125 mm inkl. hanpyramid och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter


Unity systeminformation	
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -18inHg
Ökad systemvikt:	104 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats




BALANCE™ FOOT J

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

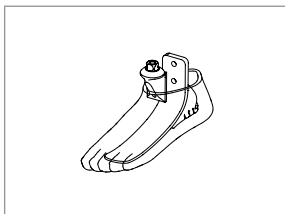

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

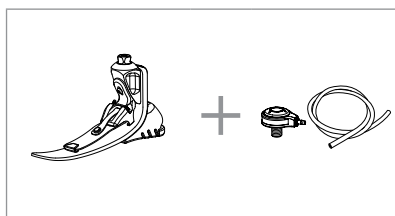

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Balance Foot J. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
22	1	2	N/A	N/A	N/A
23	1	2	3	4	N/A
24	1	2	3	4	N/A
25	1	2	3	4	5
26	1	2	3	4	5
27	1	2	3	4	5
28	N/A	2	3	4	5
29	N/A	N/A	3	4	5
30	N/A	N/A	N/A	4	5

BALANCE™ FOOT J

BYGGHÖJD

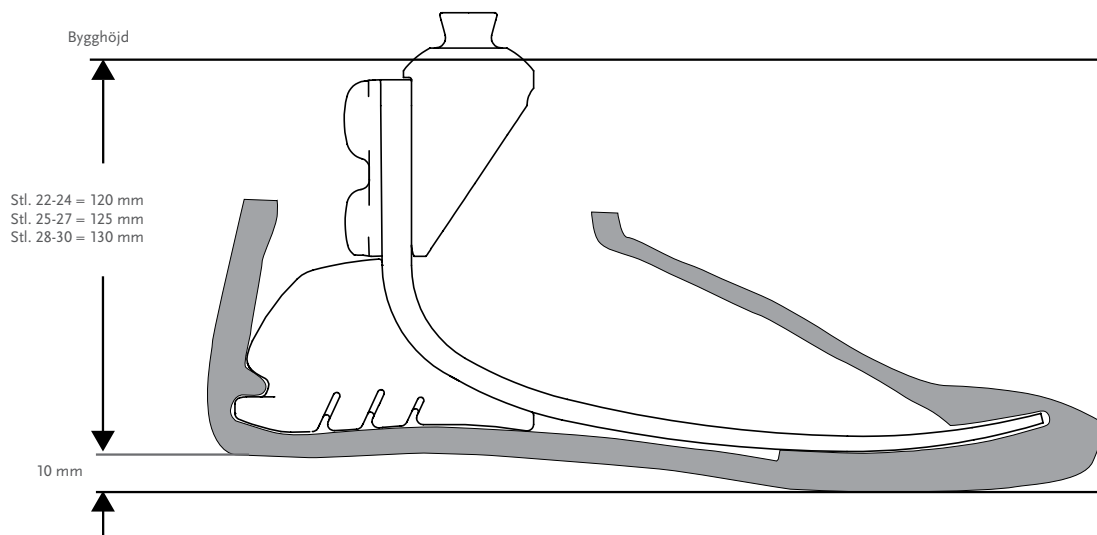


Balance Foot J Unity har samma bygghöjd som Balance Foot J.

KIT

BALANCE FOOT J


ART.NR.

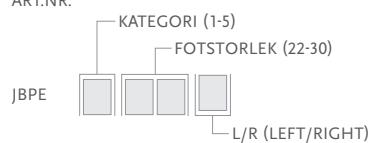

Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

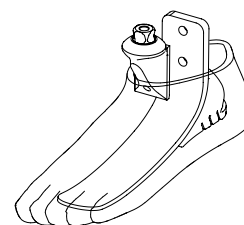


BALANCE™ FOOT J

KIT – UNITY

BALANCE FOOT J UNITY

ART.NR.

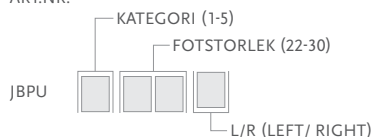


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.





*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

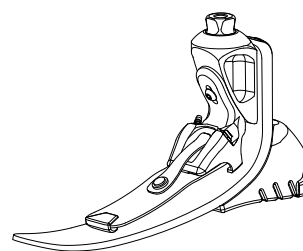

UNITY

UNITY KIT


	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UFA0024	FAP-JBP Unity pumpmodul S22-24	Balance Foot J storlek 22-24
1.	UFA0027	FAP-JBP Unity pumpmodul S25-27	Balance Foot J storlek 25-27
1.	UFA0030	FAP-JBP Unity pumpmodul S28-30	Balance Foot J storlek 28-30
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

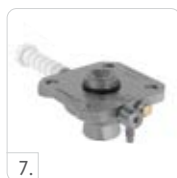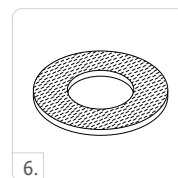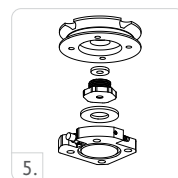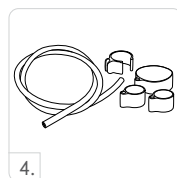

BALANCE™ FOOT J

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UFA00021	Unity FAP-JBP Komponenter 22-24
UFA00022	Unity FAP-JBP Komponenter 25-27
UFA00023	Unity FAP-JBP Komponenter 28-30

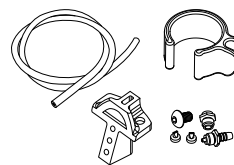


Innehåller:

- Pumpblad
- Membran
- Täckhuv
- Kontrollventiler
- Fästskruv
- Slang
- Loctite
- Slangfäste

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

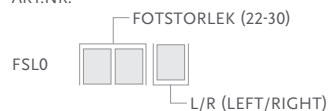

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



FLEX-FOOT ASSURE®



UNITY
COMPATIBLE

Flex-Foot Assure är idealisk som första protesfot, eller som ett permanent alternativ till mindre aktiva protesanvändare och ger en följsam gång från hälsättning till toe off, med minimal ansträngning.

Stötdämpning vid hälsättning genom den aktiva hälen. Kontrollerad plantarflexion för stabilitet vid midstance. J-form och fotplatta som lagrar och återger energi för minskad kraftansträngning.

Naturlig gång genom fullängdskonstruktionen som möjliggör lika lång belastning på protesbenet som på det kvarvarande benet. Detta skonar den kvarvarande sidan och övriga kroppen från skadlig belastning och minskar behovet av kompensatoriska rörelser.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Flex-Foot Assure Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar inte protesfotens mekaniska egenskaper.

Tillsammans med Iceross Seal-In skapar Flex-Foot Assure Unity en aktiv vakuumsuspension i proteshylsan vid rörelse/gång utan att sleeve behöver användas.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg
Max. patientvikt:	136 kg



FULL LENGTH
TOE LEVER



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



WATERPROOF*



WEATHERPROOF**

* Flex-Foot Assure med glasfiberrör

** Flex-Foot Assure med pyramid


Produktinformation	
Kategori:	1-5
Storlekar:	19-30
Vikt: (Stl. 27)	544 g inkl. pyramid och fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	125 mm inkl. pyramid och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter eller glasfiberrör

Unity systeminformation	
Foot Storlekar:	22-30
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -18inHg
Ökad systemvikt:	104 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


FLEX-FOOT ASSURE®

BESTÄLLNINGSGRUPP


FÖR BESTÄLLNING AV
KOMPLETT FOT

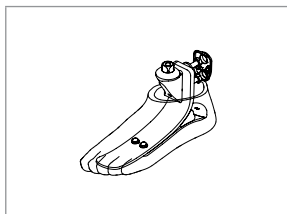

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
MED GLASFIBERRÖR

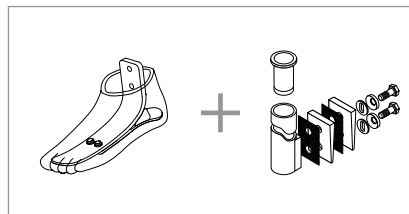

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
MED UNITY

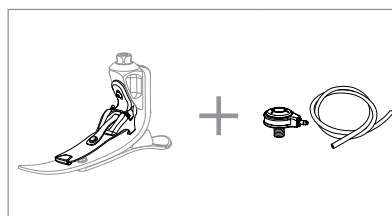

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Flex-Foot Assure. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
19-20	1	2	N/A	N/A	N/A
21-22	1	2	N/A	N/A	N/A
23-24	1	2	3	4	N/A
25-26	1	2	3	4	5
27-28	1	2	3	4	5
29-30	N/A	2	3	4	5

Kategorierna ovan gäller för Flex-Foot Assure, både med och utan Unity. **OBS! Flex-Foot Assure Unity kan endast fås i stl. 22-30.**

FLEX-FOOT ASSURE®

BYGGHÖJD

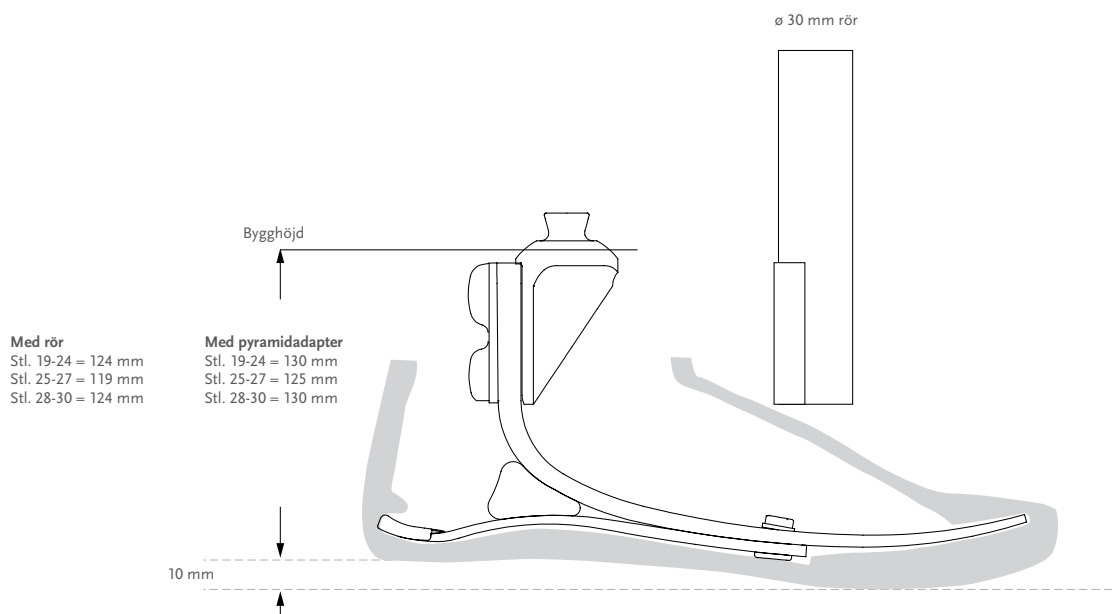

Bygghöjden gäller för Flex-Foot Assure, både med och utan Unity.

KIT


FLEX-FOOT ASSURE INKL. ADAPTER



Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

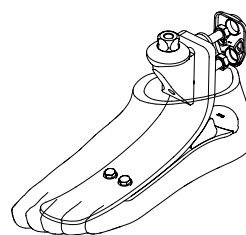

FLEX-FOOT ASSURE EXKL. ADAPTER




Innehåller:

- Fotmodul exkl. adapter/rör*
- Avtagbar fotkosmetik** inkl. svart Spectra Sock

*Obs! För Flex-Foot Assure med glasfiberrör, lägg till #SFX0000x.

**För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

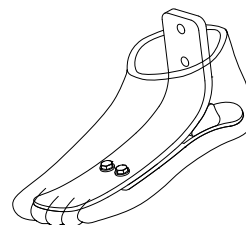


FLEX-FOOT ASSURE®

KOMPONENTER

GLASFIBERRÖR Ø 30 MM

Art.nr.	Färg	Kategori	Tjocklek	Längd	Vikt
SFX00001	Röd	1-3	3 mm	279 mm	292 g
SFX00002	Röd	1-3	3 mm	381 mm	333 g
SFX00003	Grön	4-5	4 mm	279 mm	331 g
SFX00004	Grön	4-5	4 mm	381 mm	401 g

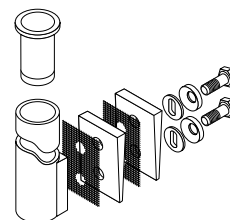

Innehåller:

- Stödhylsa (Kategori 4-5)
- Fästskruv (5/16" UNF)
- Sfäriska brickor
- Friktionsbrickor
- Loctite 410
- Inriktningsskilar

KIT – UNITY

FLEX-FOOT ASSURE UNITY



Innehåller:


- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.
 *För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT ASSURE®


UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UFA0024	FAP-JBP Unity pumpmodul S22-24	Flex-Foot Assure storlek 22-24
1.	UFA0027	FAP-JBP Unity pumpmodul S25-27	Flex-Foot Assure storlek 25-27
1.	UFA0030	FAP-JBP Unity pumpmodul S28-30	Flex-Foot Assure storlek 28-30
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

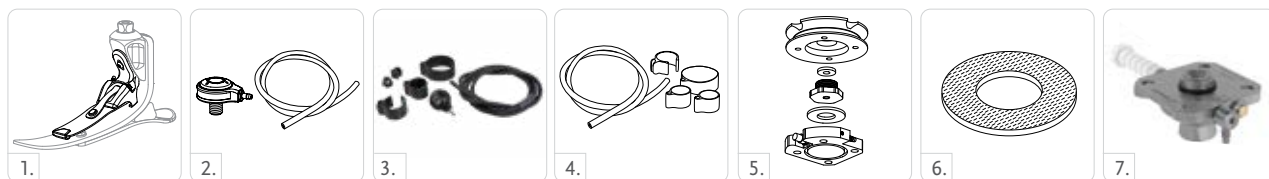

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UFA00021	Unity FAP-JBP Komponenter 22-24
UFA00022	Unity FAP-JBP Komponenter 25-27
UFA00023	Unity FAP-JBP Komponenter 28-30

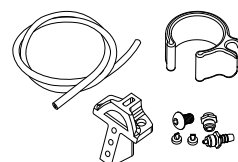


Innehåller:

- Pumpblad
- Membran
- Täckhuv
- Kontrollventiler
- Fästskruv
- Slang
- Loctite
- Slangklämma

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

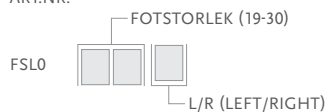

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock



*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT ASSURE®

TILLBEHÖR


SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	19-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



DIAGRAM

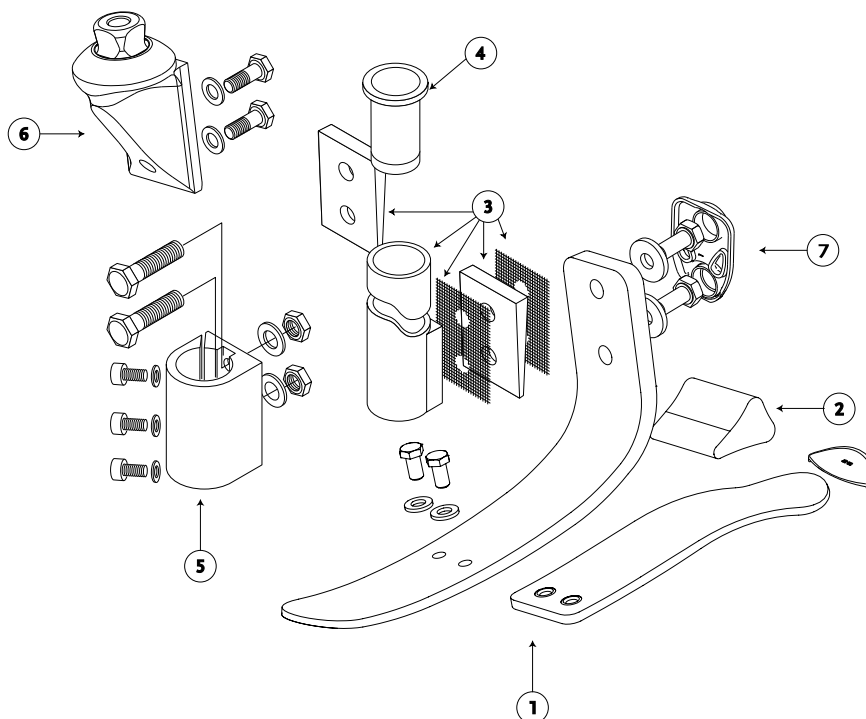

	Beskrivning
1.	Fotmodul
2.	Kil
3.	30 mm glasfiberör/kit
4.	Stödhylsa (Tube insert) för kat. 4-5
5.	30 mm inriktningsverktyg
6.	Hanpyramidadapter
7.	Fästsruvar

PROPRIO FOOT®



UNITY
COMPATIBLE

Proprio Foot är en adaptiv, mikroprocessorstyrd ankel för låg- till medelaktiva transfemoralt och transtibialt amputerade. Den är utformad för att förbättra säkerheten genom ökad markfrigång i svingfasen och sin anpassning till olika underlag. Proprio Foot är helt vattentät i både salt- och sötvatten (undantaget klorerat vatten). Med Proprio Foot får protesbrukaren friheten att röra sig naturligt på ett säkert och stabilt sätt – och den sätter en helt ny nivå på vad du kan förvänta dig av en mikroprocessorstyrd ankel. Ge dina patienter möjligheten att uppleva en helt ny nivå av rörlighet.

EGENSKAPER

- Ökad markfrigång under svingfasen minskar risken för att snubbla och falla.
- Automatisk anpassning till terrängen ger stabilitet och komfort vid gång i ojämn terräng, sluttningar och trappor.
- Dynamiskt kolfiberfotblad med exceptionella rollover-egenskaper.
- "Relax mode" gör det bekvämt att sitta och "Chair Exit mode" gör det lättare att resa sig upp från sittande till stående.
- Inbyggt batteri.
- Vattentät i både saltvatten och sötvatten (inte godkänd för användning i klorerat vatten)
- ÖSSUR LOGIC -appen för iOS-enheter (medföljer) erbjuder:
 - Enkel inställning och justering av protesfoten för ortopedingenjören och tillgång till utskriftsbara aktivitetsrapporter.
 - Protesanvändaren kan själv justera höjden vid barfotagång eller byte av skor utan att inriktning eller funktion blir lidande.
 - Urval av användarinställningar och övervakning av stegantal och batteriladdningsnivå.



Video: Proprio Foot Classroom
Catch-up 2 min 51 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt:	125 kg



SANDAL TOE



HEEL HEIGHT
ADJUSTABILITY



SPLIT TOE



ANATOMICAL
FOOT



WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-8
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27, kat. 5)	1.5 kg inkl. fotkosmetik
Justerbar höjd:	Upp till 50 mm
Bygghöjd: (Stl. 27, kat. 5)	180 mm

Unity systeminformation	
Unity Storlek:	25-30
Max. vakuum:	24inHg (610 mmHg)
Normalt arbetsstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	Ca 88 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats

PROPRIO FOOT®

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
Impact: Låg	1	1	2	3	4	5	6	7
Impact: Medel	1	2	3	4	5	6	7	8


TILLGÄNGLIGA PRODUKTVARIANTER

Kategori	1	2	3	4	5	6	7	8			
Storlek 22	FSF Fotkosmetik Unity ej möjligt					N/A					
Storlek 23											
Storlek 24											
Storlek 25	FST Fotkosmetik Unity är möjligt										
Storlek 26											
Storlek 27											
Storlek 28											
Storlek 29											
Storlek 30	N/A										

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

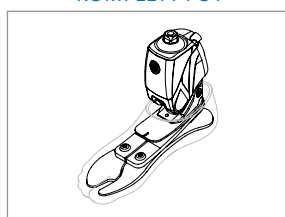

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

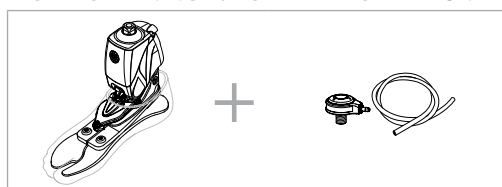

Proprio Foot Unity kan beställas i storlek 25 och över.

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*


Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Proprio Foot. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

PROPRIO FOOT®


BYGGHÖJD

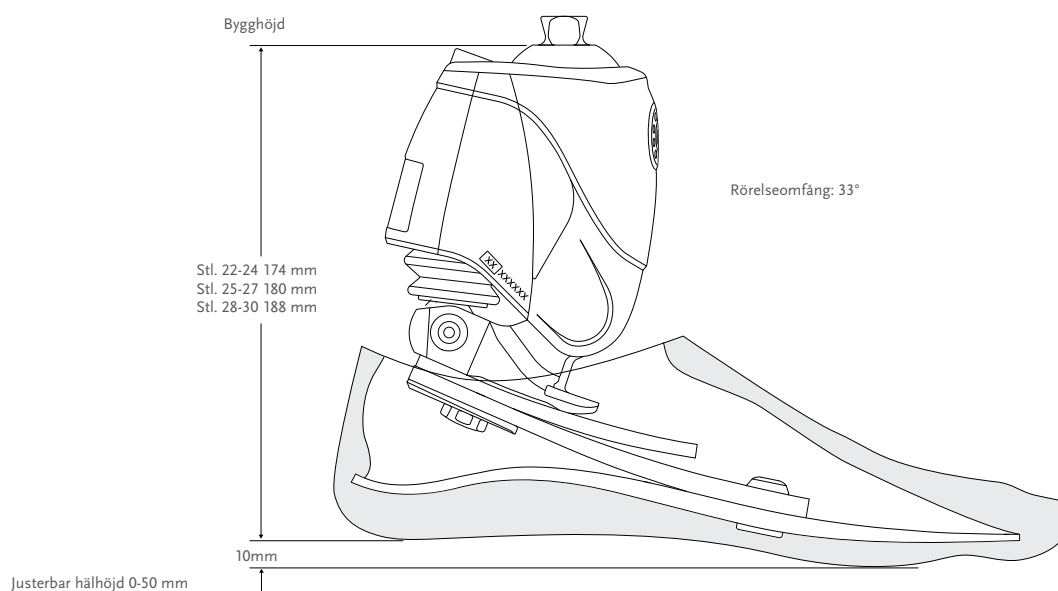

KIT

PROPRIO FOOT


ART.NR.

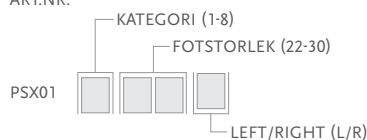

Innehåller:

- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Laddare
- 3 års garanti**


*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

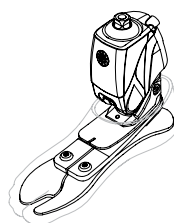

KIT – UNITY

PROPRIO FOOT UNITY

ART.NR.

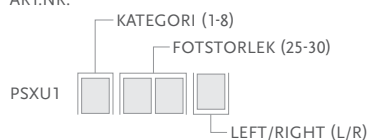


Innehåller:

- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul
- Laddare
- 3 års garanti**

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.




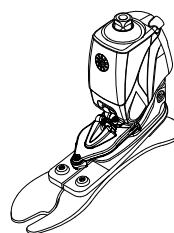


För 6 års garanti, lägg till **art.nr. PSXGE3Y i din beställning. Service check efter 40 mån ingår i 6-årsgarantin. Den maximala garantitiden är 6 år och måste köpas inom ett år från det ursprungliga inköpsdatumet.

PROPRIO FOOT®

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UPS0530	Unity for PROPRIO FOOT Small	Storlek 25-27 / Kategori 1-5
1.	UPS0630	Unity for PROPRIO FOOT Large	Storlek 25-27 / Kategori 6-8. Storlek 28-30 / Kategori 1-8
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

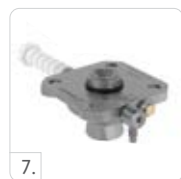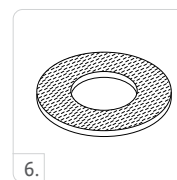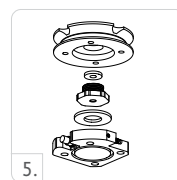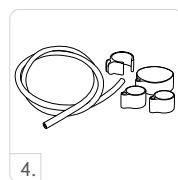

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UPS00024	Unity PSX Komponenter för alla storlekar

Innehåller:


- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity Slang
- Unity Slangklämma
- Loctite 243

PROPRIO FOOT®

FOTKOSMETIK

Se översikten för "Tillgängliga produktvarianter" vid val av fotkosmetik

FSF - FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

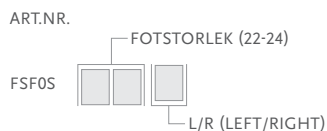

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



FST - FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN



Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX64022	Spectra Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX64026	Spectra Sock Large 1 st	26-30	Svart



KOMPONENTER


DUAL CHARGER KIT

Dubbelladdaren möjliggör simultan laddning av Navii, Rheo Knee eller Rheo Knee XC och Proprio Foot, detta genom laddningsenheten på 24V-40W och laddningskabel-paketet.

	Art.nr.	Beskrivning
1.	CME10110	Dual Charger kit

POWER SUPPLY

	Art.nr.	Beskrivning
2.	CME50110	Laddare

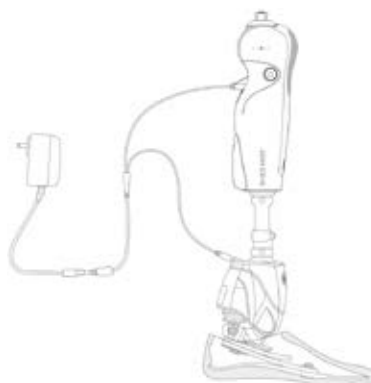

PRO-FLEX® TERRA



Pro-Flex Terra är en flerbladig protesfot med ett innovativt förkomprimerat övre blad. Det är en helt unik kombination av mjukhet och flexibilitet som förknippas med fötter för låg aktivitet och kraftfull energiåtergivning som förknippas med fötter för hög aktivitet.

Pro-Flex Terras funktioner gör det möjligt för användarna att ha full kontroll – oavsett hastighet. Med en mjuk häl och snabb anpassning till ojämna underlag och sluttningar kombinerar dess design och stora rörelseomfång mjukhet och kraft, vilket gör att användarna kan tänka längre än att ta nästa steg.


Med en ny nivå av mångsidighet är Pro-Flex Terra en pålitlig partner för kontoret, aktiviteter med barnen och vandring med vännerna. Den passar till alla kläder, från tränings- och badkläder till kostymer och klänningar.

Lättanvänd fotkosmetik med snäppfunktion gör det möjligt att snabbt ta bort skyddet för rengöring, oavsett om det är efter en dag på stranden, arbete i trädgården eller en promenad bland höstlöven. Det finns ett SandalFix-tillbehör som gör det möjligt att på ett säkert sätt bära skor med öppen häl, t.ex. sandaler, genom att fästa fotkosmetikens häl på sandalen.



Video: Pro-Flex Terra
Classroom Catch-up
6 min 26sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg

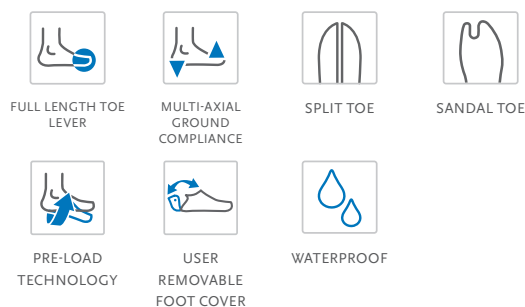


Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	870 g inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	179 mm inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter

PRO-FLEX® TERRA

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg										
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel										
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög										
Storlek 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A


BYGGHÖJD

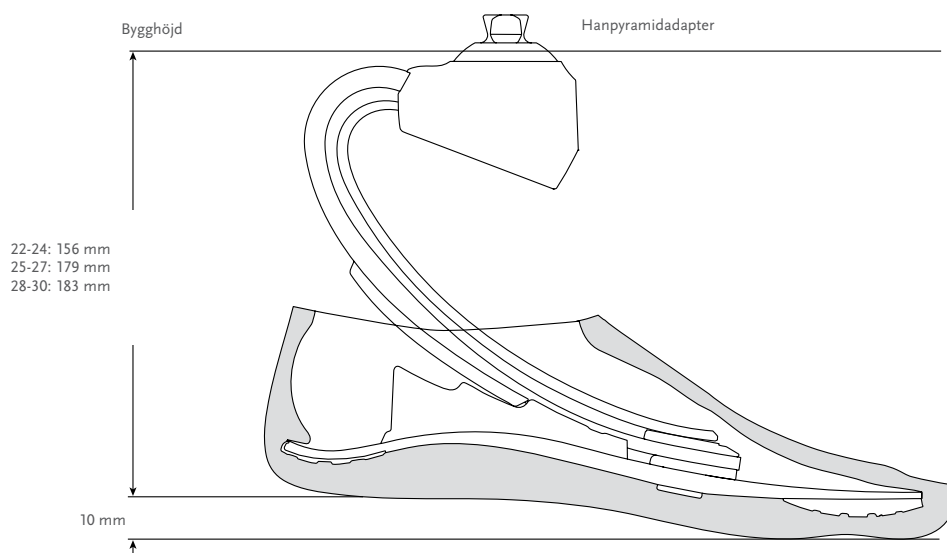

PRO-FLEX® TERRA

KIT

PRO-FLEX TERRA

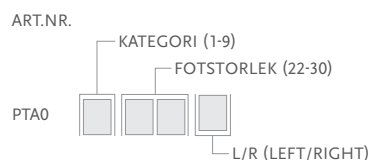


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik*
- Spectra Sock - tunn
- Hälkilar - kit
- Sandalfix


*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret. För svart fotkosmetik, lägg till "BL" efter artikelnumret.

Protesanvändaren kan själv ta på och av fotkosmetiken för rengöring.

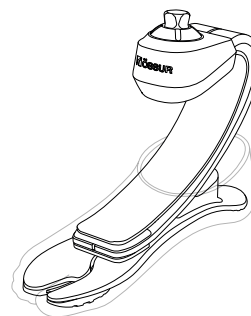

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK – BEIGE, BRUN OCH SVART

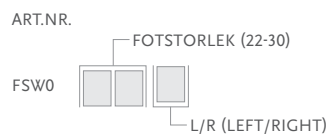

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Svart Spectra Sock - tunn

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret. För svart fotkosmetik, lägg till "BL" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK - TUNN

Dras över fotmodulen innan kosmetiken sätts på för att skydda foten/kosmetiken och för att undvika oljud.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX65022	Spectra Sock Tunn - Small	22-25	Svart
FCX65026	Spectra Sock Tunn - Large	26-30	Svart
FCX65022-15	Spectra Sock Tunn - Small 15 stk	22-25	Svart
FCX65026-15	Spectra Sock Tunn - Large 15 stk	26-30	Svart



PRO-FLEX® TERRA

PRO-FLEX TERRA – HÄLKILAR

För justering av hälstyvheten.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
PTA50051	Hälkilar - kit	22-24	Svart
PTA50052	Hälkilar - kit	25-27	Svart
PTA50053	Hälkilar - kit	28-30	Svart

Kitet innehåller:

- Mjuk hälkil (+)
- Medium hälkil (++)
- Fast hälkil (+++)



SANDALFIX

För säker fastsättningen av fotkosmetiken i öppna skodon (typ sandaler, flipflops).

Art.nr.	Beskrivning
FSW50011	SandalFix
FSW50013	SandalFix 3 stk
FSW50015	SandalFix 10 stk



PRO-FLEX® PIVOT



UNITY
COMPATIBLE

Ger låg- till medelaktiva protesanvändare en exceptionell energigåtergivning, en imponerande ankelrörlighet (27°) och större kraft och flexibilitet i ankeln än vad många andra konventionella kolfiberfötter kan erbjuda.

Pro-Flex imiterar den friska fotens biomekanik och har specifikt utvecklats för att minska slitaget på den icke-amputerade sidan. Pro-Flex är den första protesfoten som i kliniska test kunnat påvisa en minskad belastningen på den icke-amputerade sidan med 11 %, något som är högst önskvärt för amputerade med diabetes och/eller cirkulationsstörningar.*

- 27° ankelrörlighet
- Minskad belastningen på den icke-amputerade sidan med 11 %
- Innovativ pivotmekanism
- Estetiskt tilltalande och anatomiskt utformad fotkosmetik

Unity-kompatibel. Vid beställning av Pro-Flex Pivot Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.



Video: Pro-Flex by Össur
1 min 19 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt:	125 kg

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	24inHg (610 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	75 g (Unity pumpmodul och hylsventilsats)

Produktinformation	
Kategori:	1-7
Storlekar:	22-30
Vikt: (Stl. 27, Kat. 5)	920 g inkl. fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	155 mm
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter



WEATHERPROOF



ANATOMICAL
FOOT



SANDAL TOE



PIVOT
TECHNOLOGY



SPLIT TOE



ANKLE POWER


*Heitzmann DW, Salami F, De Asha AR, Block J, Putz C, Wolf SI, Alimusaj M. Benefits of an increased prosthetic ankle range of motion for individuals or users with transfemoral and transtibial amputation walking with a new prosthetic foot. Gait & posture. 2018 Jul 1;64:174-80




PRO-FLEX® PIVOT

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

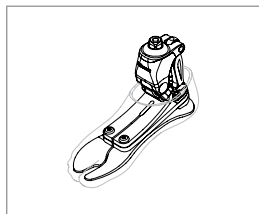

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

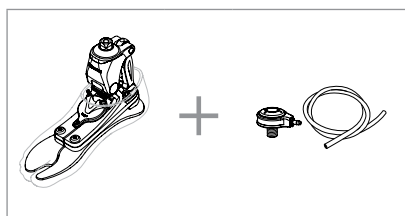

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex Pivot. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
Impact: Låg								
Storlek 22	1	1	2	3	4	N/A	N/A	N/A
Storlek 23-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A
Storlek 25-26	2	2	2	3	4	5	6	7
Storlek 27-28	N/A	N/A	N/A	3	4	5	6	7
Storlek 29-30	N/A	N/A	N/A	N/A	4	5	6	7
Impact: Medel								
Storlek 22	1	2	3	4	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 23-24	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-26	2	2	3	4	5	6	7	N/A
Storlek 27-28	N/A	N/A	3	4	5	6	7	N/A
Storlek 29-30	N/A	N/A	N/A	4	5	6	7	N/A

PRO-FLEX® PIVOT



BYGGHÖJD

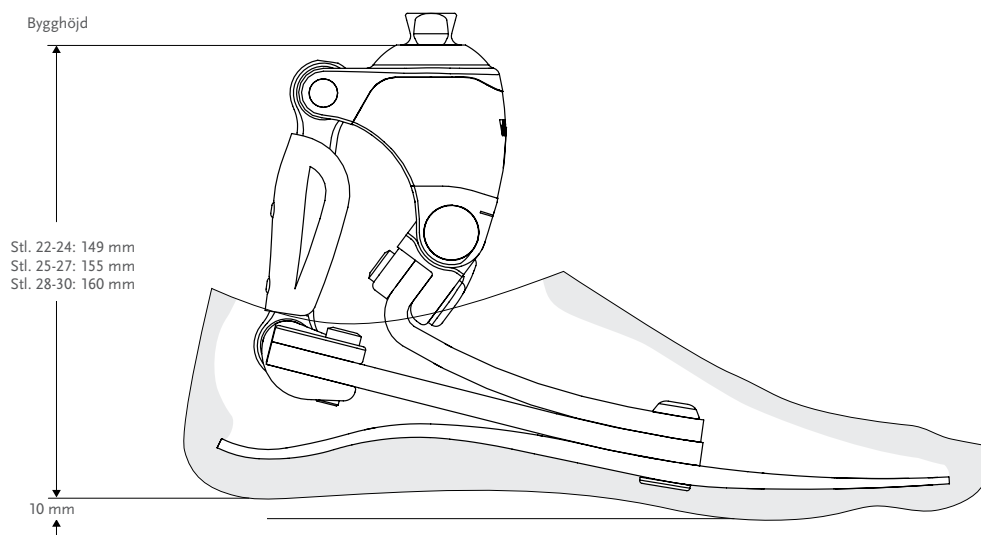

Pro-Flex Pivot Unity har samma bygghöjd som Pro-Flex Pivot.

KIT

PRO-FLEX PIVOT

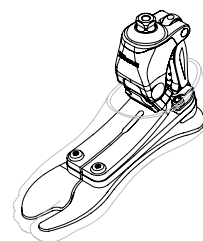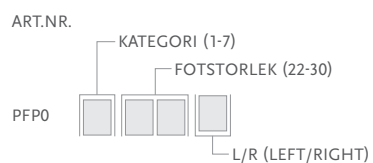

Innehåller:


- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

PRO-FLEX® PIVOT

KIT – UNITY

PRO-FLEX PIVOT UNITY

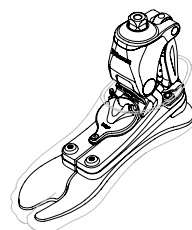

Innehåller:





- Fotmodul inkl. adapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UPF0001	PFP Unity pumpmodul S22-30	Pro-Flex Pivot Storlek 22-30
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

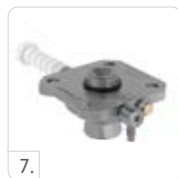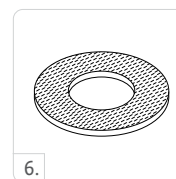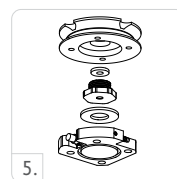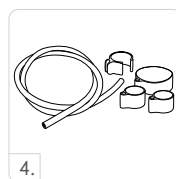

UNITY – RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UPF00011	Unity PFP Komponenter 22-30

Innehåller:


- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity Slang
- Unity Slangklämma
- Loctite 243

PRO-FLEX® PIVOT

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

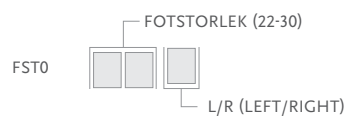

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



PRO-FLEX® XC



UNITY
COMPATIBLE

Pro-Flex XC är avsedd för aktiva användare som tycker om att vandra och jogga samt promenera på plant underlag. Levereras med en estetiskt tilltalande, anatomisk fotkosmetik och integrerad hanpyramid.

Den är helt vattentät och kan sänkas ned i både klorerat vatten och saltvatten.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Pro-Flex XC Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper. Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex XC.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.



Video: Pro-Flex XC Classroom
Catch-up
2 min 3 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



SPLIT TOE



SANDAL TOE



ANATOMICAL
FOOT



WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	772 g inkl. fotkosmetik och socka
Bygghöjd: (Stl. 27)	155 mm inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	24inHg (610 mmHg)
Normalt arbetsstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	97 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


PRO-FLEX® XC

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT



FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

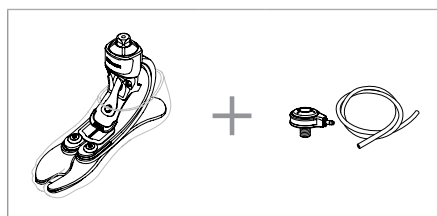

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex XC. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg										
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel										
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög										
Storlek 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

PRO-FLEX® XC

BYGGHÖJD

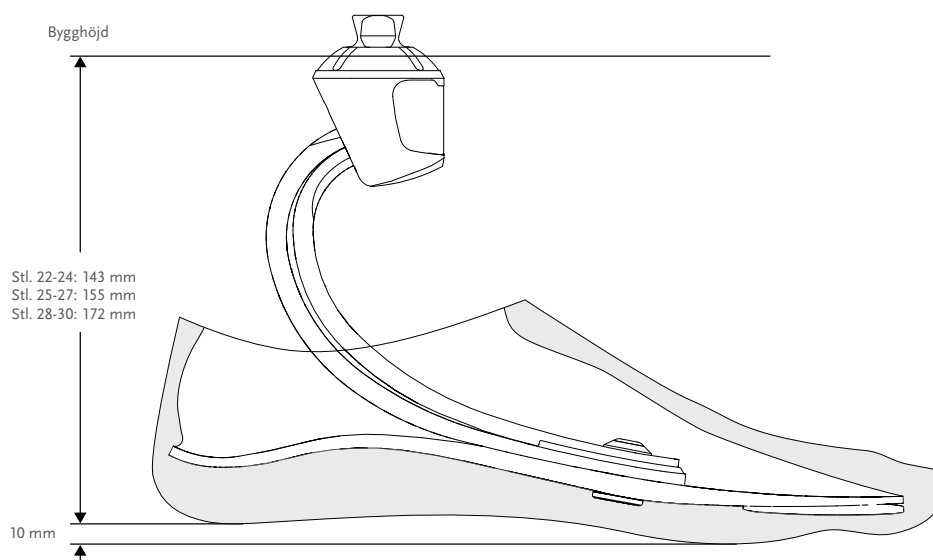


Pro-Flex XC Unity har samma bygghöjd som Pro-Flex XC.

KIT

PRO-FLEX XC


ART.NR.

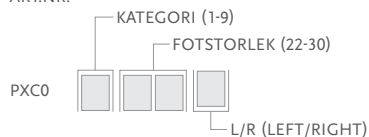

Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock


*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

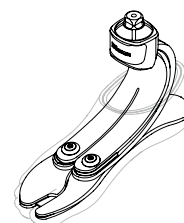

KIT – UNITY

PRO-FLEX XC UNITY

ART.NR.

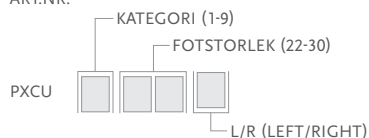


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.




*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

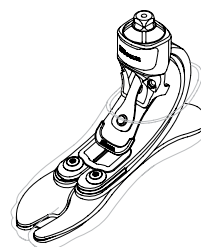

PRO-FLEX® XC

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UPC0024	PXC Unity pumpmodul S22-24	Pro-Flex XC, storlek 22-24
1.	UPC0027	PXC Unity pumpmodul S25-27	Pro-Flex XC, storlek 25-27
1.	UPC0030	PXC Unity pumpmodul S28-30	Pro-Flex XC, storlek 28-30
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

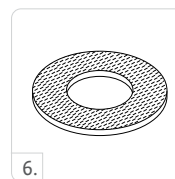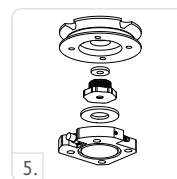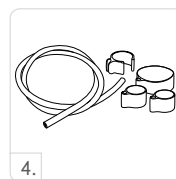

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UPC00021	Unity PXC Komponenter för alla storlekar

Innehåller:


- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity Slang
- Unity Slangklämma
- Loctite 243

PRO-FLEX® XC

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

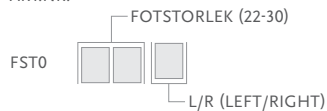

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



PRO-FLEX® XC TORSION



Pro-Flex XC Torsion är avsedd för aktiva användare som gillar att vandra och jogga samt promenera på plant underlag. Ger en suverän dynamik, stötdämpning och komfort vid en mängd olika aktiviteter. En perfekt all-round-fot som fungerar lika bra i kuperad terräng som på plan mark.

Integrerad torsions- och stötdämparmodul: Förutom stötdämpning i varje steg, ges även möjlighet till rotation vilket är en naturlig del i det fysiologiska gångmönstret. Risken för skadliga skjuvkrafter i hylsan minskar och belastningen på kroppens övriga delar reduceras. Ju högre amputationsnivå, desto mindre förmåga till egen rotation. Därför drar oftast transfemoralt amputerade större fördel av en protesfot med torsionsadapter.

Funktionell och mer tilltalande kosmetik för bättre passform i skor och ett säkrare grepp vid barfotagång.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Pro-Flex XC Torsion Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper. Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex XC Torsion.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.

UNITY
COMPATIBLE



Video: Pro-Flex XC Torsion
Technology
1 min 26 sek

Brukarinformation

Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	147 kg



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



VERTICAL SHOCK
PYLON



ROTATION



SPLIT TOE



SANDAL TOE



WEATHERPROOF



ANATOMICAL
FOOT

Produktinformation

Kategori:	1-8
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27, kat. 5)	1035 g inkl. fotkosmetik och socka
Bygghöjd: (Stl. 27)	222 mm inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter


Unity systeminformation

Max. vakuum:	24inHg (610 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	91 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


PRO-FLEX® XC TORSION

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

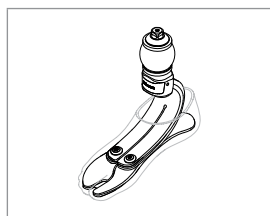

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

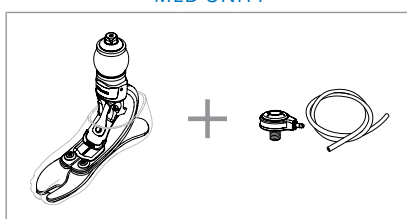

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

• Unity TT hylsventilsats #UTT0001

• Unity TF hylsventilsats #UTF0001

Övriga valbara kit:

• Icelock 544 för Unity kit #L-544611

• Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*

• Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex XC Torsion. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg									
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8
Impact: Medel									
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	N/A
Impact: Hög									
Storlek 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A

PRO-FLEX® XC TORSION


BYGGHÖJD

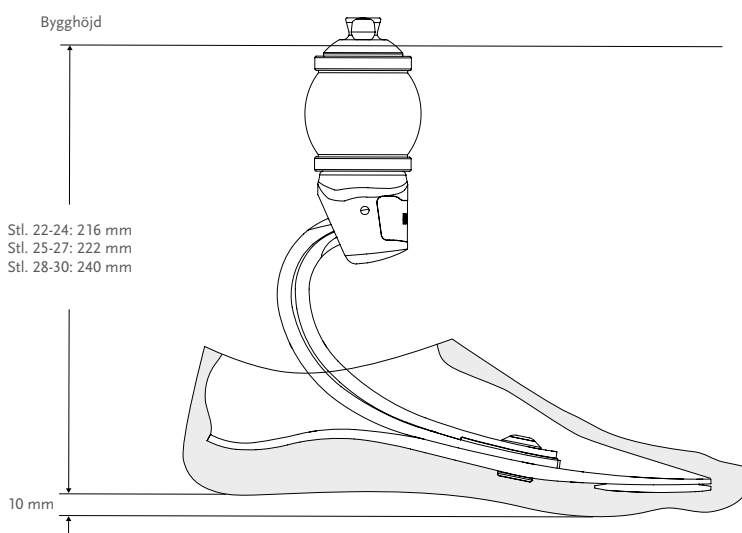

Pro-Flex XC Torsion Unity har samma bygghöjd som Pro-Flex XC Torsion.

KIT


PRO-FLEX XC TORSION

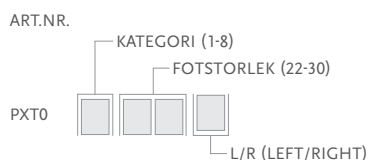

Innehåller:


- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

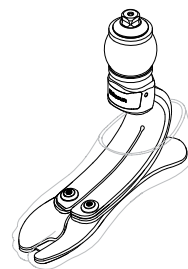

KIT – UNITY

PRO-FLEX XC TORSION UNITY

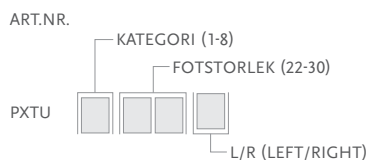


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.




*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

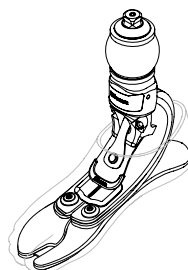

PRO-FLEX® XC TORSION

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UPC0024	PXC Unity pumpmodul S22-24	Pro-flex XC/ XC Torsion 22-24
1.	UPC0027	PXC Unity pumpmodul S25-27	Pro-flex XC/ XC Torsion 25-27
1.	UPC0030	PXC Unity pumpmodul S28-30	Pro-flex XC/ XC Torsion 28-30
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangatsats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

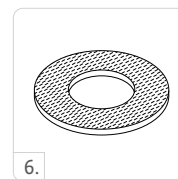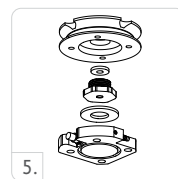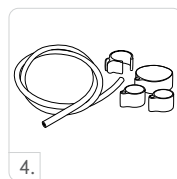

UNITY - RESERVDLAR

Art.nr.	Beskrivning
UPC00021	Unity PXC Komponenter för alla storlekar

Innehåller:


- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity Slang
- Unity Slangklämma
- Loctite 243

PRO-FLEX® XC TORSION

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

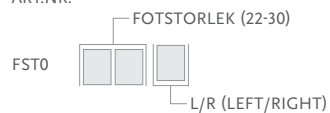

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knyts fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



PRO-FLEX® ST



UNITY
COMPATIBLE

Pro-Flex ST är avsedd för låg- till högaktiva användare som vill ha den flexibilitet och den tillit de behöver för att kunna utföra vardagsaktiviteter. Denna mångsidiga protesfötter ger en mjuk "rollover" och kontrollerad stegavveckling.

Pro-Flex ST gör det enkelt att gå på olika underlag och i olika terränger tack vare sin multifunktionella design som kombinerar dynamik och följsamhet mot underlaget. Som alla Pro-Flex protesfötter har den vår egenutvecklade 3-bladsdesign med fullängdstå och anatomiskt delad framföt.

Pro-Flex ST möjliggör en jämn och mer naturlig rörelse från hälsättning till "toe off" jämfört med andra konventionella energiåtergivande fötter. Den har en nätt profil och levereras med en estetiskt tilltalande, anatomiskt utformad fotkosmetik och en integrerad hanpyramid. Pro-Flex ST är klassad som vattentät, vilket innebär att den är helt motståndskraftig vid nedsänkning i klor- och saltvatten.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Pro-Flex ST Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfötens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.



Pro-Flex ST and
Pro-Flex Modular Introduction
Video: 3 min 4 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



SPLIT TOE



SANDAL TOE



ANATOMICAL
FOOT



WATERPROOF


Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	756 g inkl. pyramid och fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	160 mm inkl. pyramid och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	24inHg (610 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	145 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


PRO-FLEX® ST

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

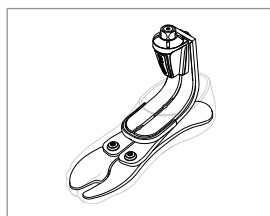

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

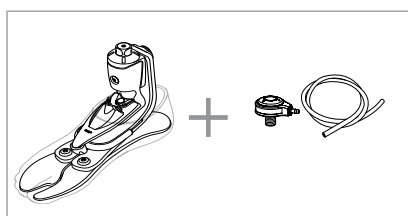

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex ST. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Weight kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg										
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel										
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög										
Storlek 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A


PRO-FLEX® ST

BYGGHÖJD

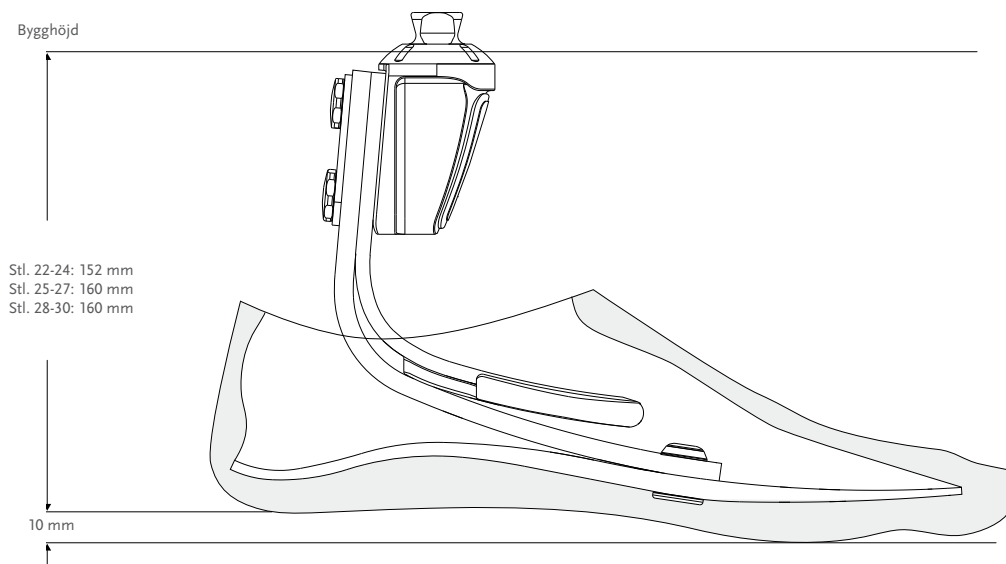

KIT


PRO-FLEX ST

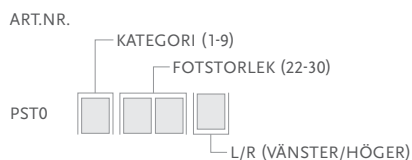

Innehåller:


- Fotmodul inkl. hanpyramid
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

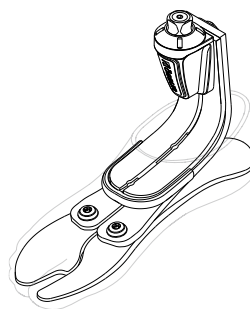

KIT – UNITY

PRO-FLEX ST UNITY

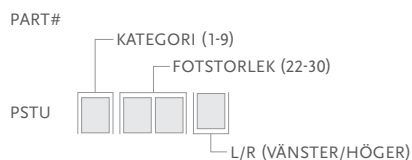


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramid
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock.
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventsats ingår ej, beställs separat.

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



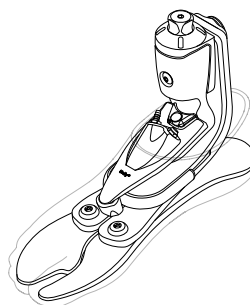


PRO-FLEX® ST

UNITY

UNITY KITS

Picture	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1	UPT0124	PST Unity Pump S22-24 / Cat 1	Pro-Flex ST S22-24, Cat 1
1	UPT0024	PST Unity Pump S22-24 / Cat 2-6	Pro-Flex ST S22-24, Cat 2-6
1	UPT0427	PST Unity Pump S25-27 / Cat 1-4	Pro-Flex ST S25-27, Cat 1-4
1	UPT0027	PST Unity Pump S25-27 / Cat 5-9	Pro-Flex ST S25-27, Cat 5-9
1	UPT0030	PST Unity Pump S28-30	Pro-Flex ST S28-30
2	UTT0001	Unity TT Valve Kit	Alla
3	UTF0001	Unity TF Valve Kit	Alla
4	UTF0006	Unity TF Tube Kit	Alla
5	L-5446XX	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

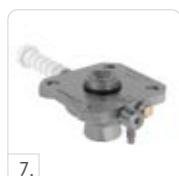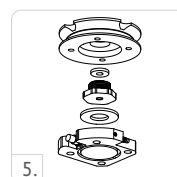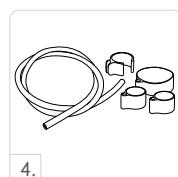

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UPT00021	Unity PST Komponenter för alla storlekar

Innehåller:

- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity Slang
- Unity Slangklämma
- Loctite 243

PRO-FLEX® ST

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN*

ART.NR.



Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 stk	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 stk	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 stk	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 stk	26-30	Svart



PRO-FLEX® MODULAR



Pro-Flex Modular är en lätt, vadhöjdshög protesfot som kan höjdanpassas och därigenom minimera behovet av ytterligare komponenter mellan proteshylsan och foten. Den är avsedd för låg- till högaktiva användare som vill ha den flexibilitet och den tillit de behöver för att kunna utföra vardagsaktiviteter.

Denna mångsidiga J-formade protesfot ger en mjuk "rollover" och kontrollerad stegavveckling. Pro-Flex Modular gör det enkelt att gå på olika underlag och i olika terränger tack vare sin multifunktionella design som kombinerar dynamik och följsamhet mot underlaget.

Som alla Pro-Flex-protesfötter har den vår egenutvecklade 3-blads-design med fullängdstå och anatomiskt delad framfot. Pro-Flex Modular möjliggör en jämn och mer naturlig rörelse, från hälisättning till "toe off". Den har en nätt profil och levereras med en estetiskt tilltalande, anatomiskt utformad fotkosmetik och en separat hanpyramid.

Pro-Flex Modular är klassad som vattentät, vilket innebär att den tål att utsättas och nersänkas i sötvatten, saltvatten eller klorerat vatten.

En modular inriktningsadapter finns tillgänglig för enkel installation.



Pro-Flex ST and
Pro-Flex Modular Introduction
Video: 3 min 4 sek



Pro-Flex Modular -
How to set the height
Video: 3 min 4 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



SPLIT TOE



SANDAL TOE



ANATOMICAL
FOOT



WATERPROOF


Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	910 g inkl. pyramid och fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	168 mm till 327 mm inkl. pyramid och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter

PRO-FLEX® MODULAR

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg										
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel										
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög										
Storlek 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A


BYGGHÖJD

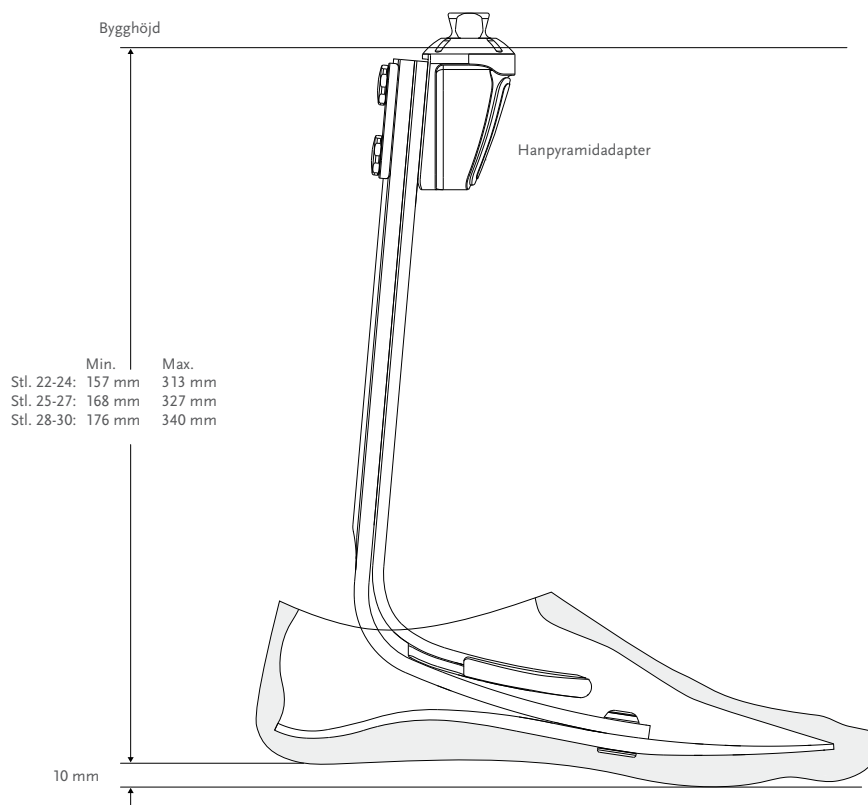

PRO-FLEX® MODULAR

KIT


PRO-FLEX MODULAR INKL. HANPYRAMID

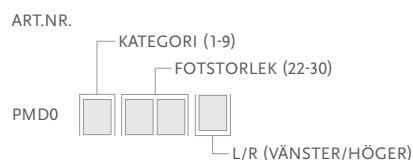

Innehåller:

- Fotmodul
- Hanpyramid
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

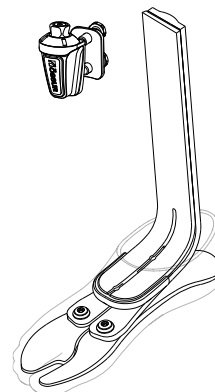


ADAPTER

PRO-FLEX MODULAR INRIKTNINGSADAPTER

Förenklar montering av pyramidadapter genom simultan inriktning och positionering av borrhål.

Art.nr.	Vikt
PMD50002	396 g

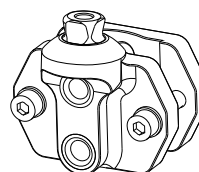

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN*



Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 stk	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 stk	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 stk	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 stk	26-30	Svart



PRO-FLEX® LP



UNITY
COMPATIBLE

Passar för låg- till högaktiva protesanvändare. En lågprofilsfot med en dynamik liknande den i en standardfot/fullhöjdsfot.

3-bladsdesign med fullängdstå. De tre bladen samspelar från hälisättning till toe off för att, oavsett gånghastighet, ge brukaren god stötdämpning, kontrollerad plantarflexion, stabilitet vid late stance och en dynamisk toe-off.

Delad fotplatta i ett stycke för god multiaxiell rörelse.

Anatomiskt utformad fotkosmetik av låg vikt och med stabil greppsula för bättre grepp vid barfotagång. Sandaltåutförandet gör det möjligt att använda en rad olika skor inklusive flipflops.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Pro-Flex LP Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.



Pro-Flex LP |
Classroom Catch-up
Video: 2 min 25 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



ANATOMICAL
FOOT



SPLIT TOE



SANDAL TOE



WATERPROOF


Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	690 g inkl. fotkosmetik och socka
Bygghöjd: (Stl. 27)	73 mm inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	24 inHg (610 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	82 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


PRO-FLEX® LP

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

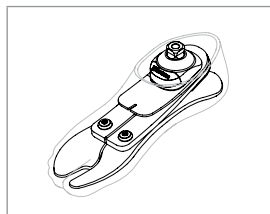

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

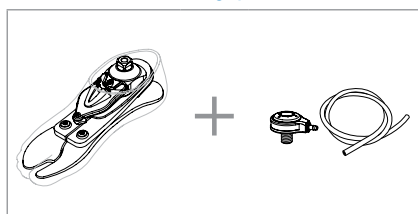

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex LP. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg										
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel										
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög										
Storlek 22-24	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

PRO-FLEX® LP

BYGGHÖJD

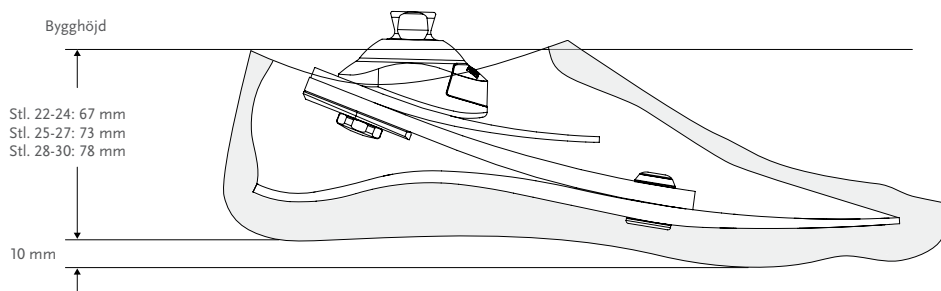


Pro-Flex LP Unity har samma bygghöjd som Pro-Flex LP.

KIT

PRO-FLEX LP


ART.NR.

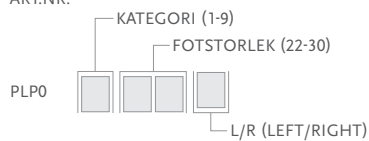

Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock


*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

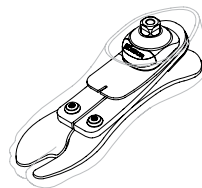

KIT – UNITY

PRO-FLEX LP UNITY

ART.NR.

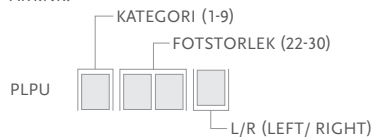


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventsats ingår ej, beställs separat.



*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

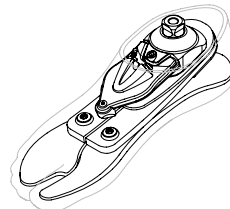

PRO-FLEX® LP

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UPL0024	PLP Unity pumpmodul S22-24	Pro-Flex LP stl. 22-24
1.	UPL0030	PLP Unity pumpmodul S25-27 kat. 1-5	Pro-Flex LP stl. 25-27 kat. 1-5
1.	UPL0930	PLP Unity pumpmodul S25-27 kat. 6-9. S28-30 alla kategorier	Pro-Flex LP stl. 25-27 kat. 6-9. Stl. 28-30 alla kategorier
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

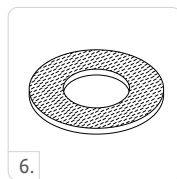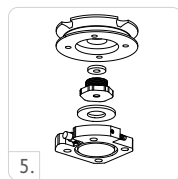

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UPL00021	Unity PLP Komponenter för alla storlekar

Innehåller:


- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity Slang
- Unity Slangklämma
- Loctite 243

PRO-FLEX® LP

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

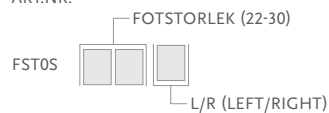

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX64022	Spectra Sock Small 1 stk	22-25	Svart
FCX64026	Spectra Sock Large 1 stk	26-30	Svart



PRO-FLEX® LP TORSION



Passar för låg- till högaktiva protesanvändare. En lågprofilsfot med en dynamik liknande den i en standardfot/fullhöjdsfot.

Integrerad torsions- och stötdämparmodul: Ger protesanvändaren, förutom stötdämpning i varje steg, möjlighet till rotation vilket är en naturlig del i det fysiologiska gångmönstret. Risken för skadliga skjuvkrafter i hylsan minskar och belastningen på kroppens övriga delar reduceras. Ju högre amputationsnivå, desto mindre förmåga till egen rotation. Därför drar oftast transfemoralt amputerade större fördel av en protesfot med torsionsadapter.

3-bladsdesign med fullängdstå. De tre bladen samspelar från hälsättning till toe off för att, oavsett gånghastighet, ge brukaren en god stötdämpning, kontrollerad plantarflexion, stabilitet vid late stance och en dynamisk toe-off.

Splittrad fotplatta i ett stycke för god multiaxiell rörelse.

Anatomiskt utformad fotkosmetik av låg vikt och med stabil grepsula för bättre grepp vid barfotagång. Sandaltåutförandet gör det möjligt att använda en rad olika skor inklusive flipflops.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Pro-Flex LP Torsion Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.

UNITY
COMPATIBLE



Pro-Flex LP |
Classroom Catch-up
Video: 2 min 25 sek



Video: Pro-Flex LP Torsion
Technology
1 min 24 sek

Brukarinformation

Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	147 kg



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



VERTICAL SHOCK
PYLON



ROTATION



SPLIT TOE



ANATOMICAL FOOT



SANDAL TOE



WEATHERPROOF

Produktinformation

Kategori:	1-8
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	960 g inkl. fotkosmetik och socka
Bygghöjd: (Stl. 27)	147 mm inkl. hanpyramidadapter och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter


Unity systeminformation

Max. vakuum:	24inHg (610 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	75 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


PRO-FLEX® LP TORSION

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

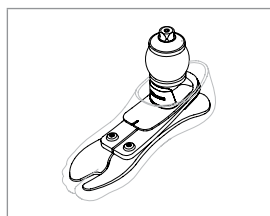

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

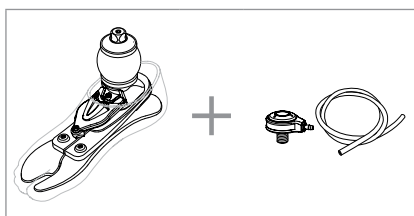

Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

• Unity TT hylsventilsats #UTT0001

• Unity TF hylsventilsats #UTF0001

Övriga valbara kit:

• Icelock 544 för Unity kit #L-544611

• Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*

• Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Pro-Flex LP Torsion. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg									
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8
Impact: Medel									
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	N/A
Impact: Hög									
Storlek 22-24	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A

PRO-FLEX® LP TORSION

BYGGHÖJD

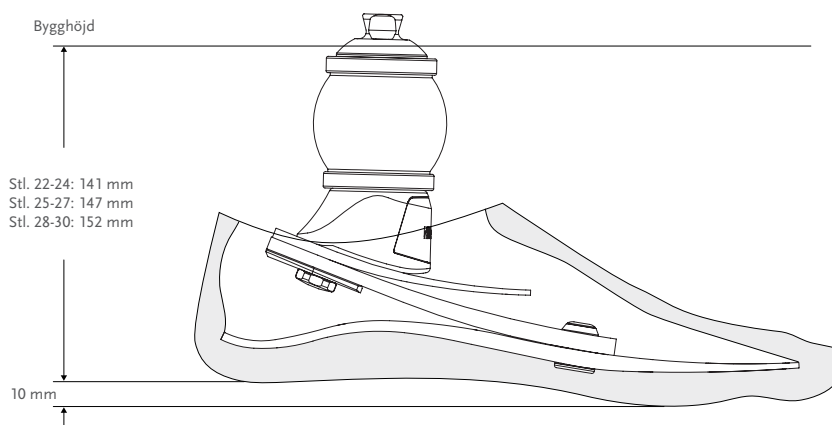


Pro-Flex LP Torsion Unity har samma bygghöjd som Pro-Flex LP Torsion.

KIT

PRO-FLEX LP TORSION


ART.NR.

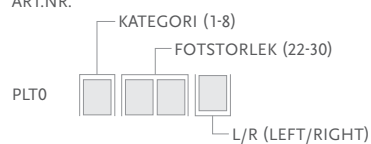

Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock


*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

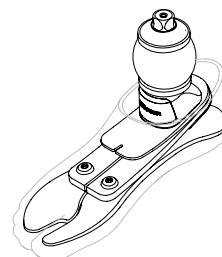

KIT – UNITY

PRO-FLEX LP TORSION UNITY

ART.NR.

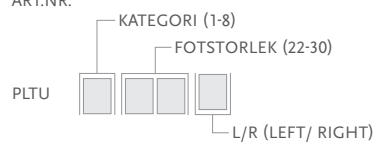


Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.



*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

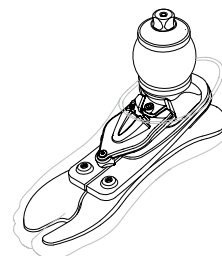

PRO-FLEX® LP TORSION

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UPL0024	PLP Unity Pump S22-24	Pro-Flex LP Torsion stl. 22-24
1.	UPL0030	PLP Unity Pump S25-27 kat. 1-5	Pro-Flex LP Torsion stl. 25-27 kat. 1-5
1.	UPL0930	PLP Unity Pump S25-27 kat 6-9. S28-30 alla kategorier.	Pro-Flex LP Torsion stl. 25-27 kat 6-9. Stl. 28-30 alla kategorier.
2.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
3.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
4.	UTF0006	Unity TF slangats	Alla
5.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
7.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
8.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

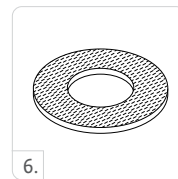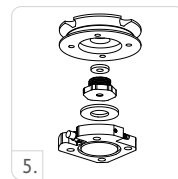

UNITY - RESERVDLAR

Art.nr.	Beskrivning
UPL00021	Unity PLP Komponenter för alla storlekar

Innehåller:


- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity Slang
- Unity Slangklämma
- Loctite 243

PRO-FLEX® LP TORSION

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

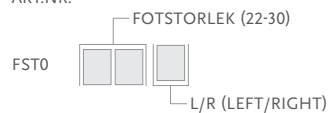

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knyts fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



PRO-FLEX® LP ALIGN



Pro-Flex LP Align kombinerar funktion och komfort med estetisk design. Protesanvändaren kan enkelt och snabbt själv justera protesfotens höjd. Detta ger protesanvändaren frihet att använda skor efter aktivitet utan att inriktning, hållning, dynamik eller funktion äventyras.

Fotkosmetiken har låg vikt och en sula som ger ett bättre grepp vid barfotagång. Sandaltå-utförandet gör det möjligt för protesanvändaren att använda sandaler och flip-flops.

Ej Unity-kompatibel.



Video: Pro-Flex LP Align Classroom Catch-up
2 min 45 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt:	116 kg (Impact: Låg) 100 kg (Impact: Medel)



SANDAL TOE



HEEL HEIGHT
ADJUSTABILITY



ANATOMICAL
FOOT



SPLIT TOE



WEATHERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-6
Storlek:	22-28
Vikt: (Stl. 24/27)	703 g/866 g inkl. fotkosmetik och Spectra Sock
Bygghöjd: (Stl. 24/27)	116 mm/121 mm inkl. fotkosmetik och Spectra Sock
Hälhöjd:	Upp till 7 cm
Adapter:	Hanpyramidadapter

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

ÖVERSIKT - TILLGÄNGLIGA PRODUKTVARIANTER


Kategori	1	2	3	4	5	6
Storlek 22	FSF Fotkosmetik Vadkosmetik					N/A
Storlek 23						N/A
Storlek 24						N/A
Storlek 25						
Storlek 26						
Storlek 27	FST Fotkosmetik Ingen vadkosmetik.					
Storlek 28						

PRO-FLEX® LP ALIGN

VAL AV KATEGORI


Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116
Impact: Låg							
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6
Storlek 28	3	3	3	3	4	5	6
Impact: Medel							
Storlek 22-24	1	2	3	4	5	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	N/A
Storlek 28	3	3	3	4	5	6	N/A

BYGGHÖJD

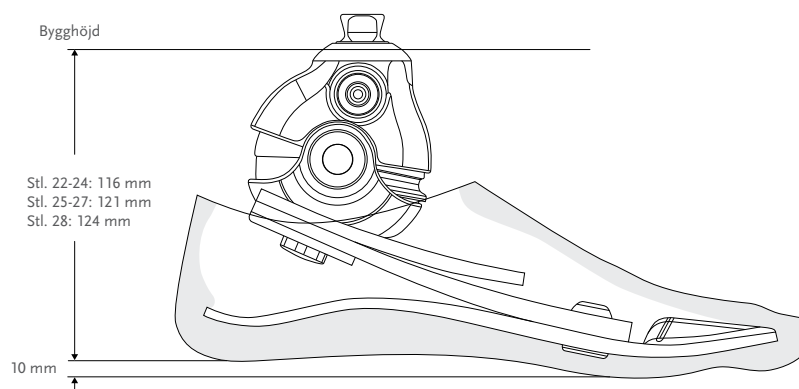

KIT


PRO-FLEX LP ALIGN

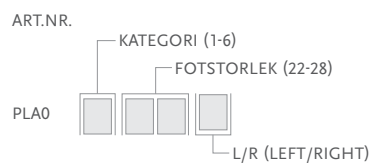

Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Avtagbar fotkosmetik* inkl. svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

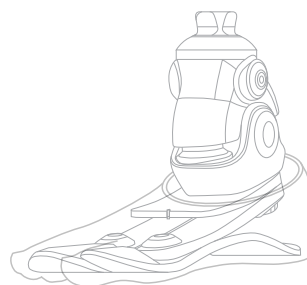


PRO-FLEX® LP ALIGN

KOSMETIK

Se översikten för “tillgängliga produktvarianter” vid val av fotkosmetik

FSF - FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

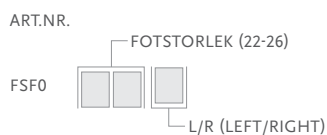


Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Svart Spectra Sock

*För brun kosmetik, lägg till “BR” efter artikelnumret.

FST - FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

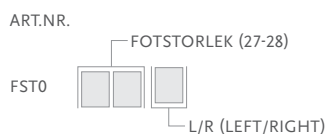

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

*För brun kosmetik, lägg till “BR” efter artikelnumret.

SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knyts fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



PRO-FLEX® LP ALIGN

VAL AV VADKOSMETIK

Kategori	1	2	3	4	5	6
Storlek 22	Vadkosmetik Kombineras med FSF - Fotkosmetik					N/A
Storlek 23						N/A
Storlek 24						N/A
Storlek 25						
Storlek 26						
Storlek 27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VADKOSMETIK

Art.nr.	Storlek
LSF024Nz	22-24 z=L/R
LSF026Nz	25-26 z=L/R

För brun vadkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



TILLBEHÖR

SPACER KIT

Art.nr.	Storlek	Kategori
PLA50005	22-24	1-5
PLA50007	25-27	1-6
	28	3-6

Innehåller:

- Främre bricka
- Kil för främre bricka
- Bakre bricka
- Kil - verktyg som används för att underlätta byte av bricka



VARI-FLEX®



UNITY
COMPATIBLE

Vari-Flex erbjuder låg- till högaktiva protesanvändare en exklusiv kombination av komfort och dynamik.

Protesfoten har låg vikt, är enkel att montera samt har en smäcker profil vilket underlättar när proteserna ska förses med kosmetik.

En aktiv häl fjäder ger stötdämpning och energilagring för en komfortabel och energisnål gång. J-formen återger den lagrade energin och driver underbenet framåt och reducerar patientens kraftansträngning samtidigt som en symmetrisk gång understöds.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Vari-Flex Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar inte protesfotens mekaniska egenskaper.

Förutom en ultralätt protesfot med ypperlig fotdynamik, får protesanvändaren genom Unity och Iceross Seal-In en säker vakuumsuspension med goda möjligheter att kontrollera stumpens volym- och formförändringar.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



FULL LENGTH TOE
LEVER



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



SPLIT TOE



WEATHERPROOF*



WATERPROOF*

* *Waterproof om den används med rör. Weatherproof om den används med pyramid.

Produktinformation	
Kategori:	Storlek 22-24; Kategori 1-6 Storlek 25-30; Kategori 1-9
Storlekar:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	594 g inkl. pyramid och fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	170 mm inkl. pyramid och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm eller 19 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter eller kolfiberrör

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-16inHg till -20inHg
Ökad systemvikt:	130 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


VARI-FLEX®

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG


FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED HANPYRAMIDADAPTER



FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED KOLFIBERRÖR

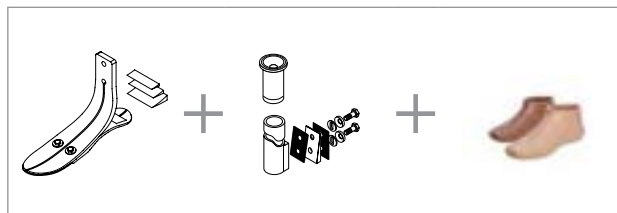

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

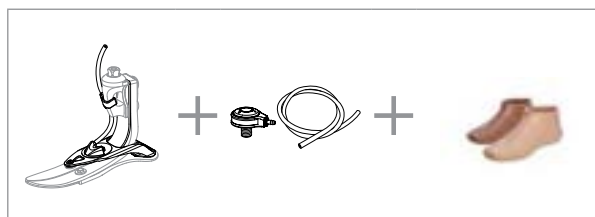

Unity kan beställas tillsammans med Vari-Flex när pyramidadapter används. Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner


EFTERMONTERING: Unity kan eftermonteras på befintlig Vari-Flex. Beställ lämplig Unity pumpmodul och Unity hylsventil och följ instruktionerna i IFU:n för produkten.

VAL AV KATEGORI


Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

VARI-FLEX®

BYGGHÖJD – VARI-FLEX

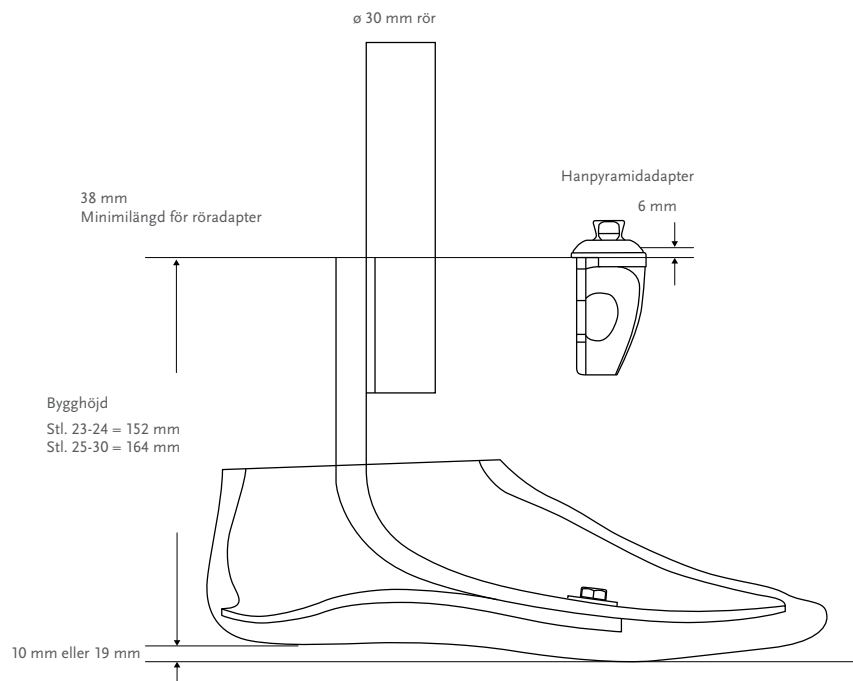




BYGGHÖJD – VARI-FLEX UNITY

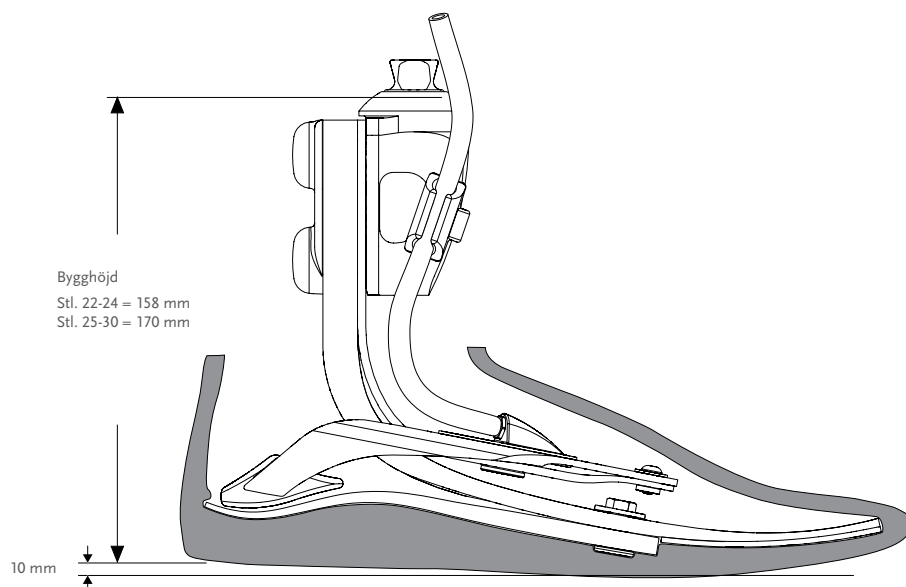

VARI-FLEX®

KIT




VARI-FLEX INKL. ADAPTER

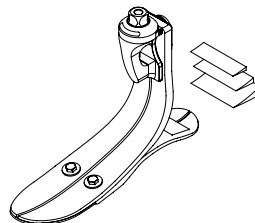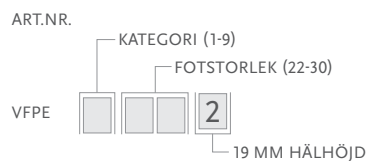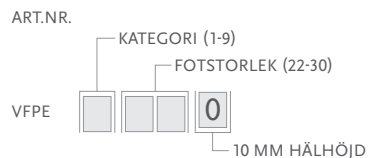

OBS!

- 19 mm hälhöjd = specialbeställning.
- Vari-Flex kan fås med solid tå i 10 mm och 19 mm hälhöjd = specialbeställning. Kontakta Kundsupport!

VARI-FLEX EXKL. ADAPTER

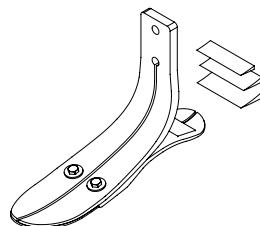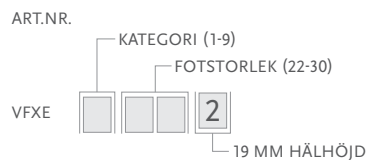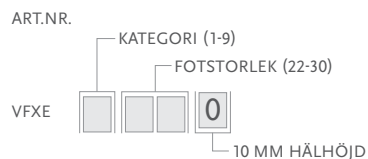

OBS!

- 19 mm hälhöjd = specialbeställning.
- Vari-Flex kan fås med solid tå i 10 mm och 19 mm hälhöjd = specialbeställning. Kontakta Kundsupport!

KOMPONENTER


HANPYRAMIDADAPTER

Väljs efter kategori.

Art.nr.	Kategori	Vikt
FFC2210001	1-6	175 g
FFC2210002	7-9	205 g

Innehåller:

- Pyramid
- Skruvar (M8 eller M10)
- Skyddsproppar i plast
- Loctite

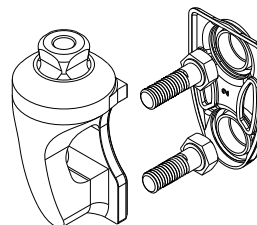

FÄSTSKRUVAR TILL PYRAMIDADAPTER

Art.nr.	Kategori	Storlek	Längd
CM130234	1-6	M8	35 mm
CM130223	7-8	M10	35 mm

VARI-FLEX®

KOMPONENTER


Ø 30 MM KOLFIBERRÖR

Väljs efter fotmodulens storlek och kategori.

Art.nr.	Kategori	Storlek	Längd	Hole Spacing	Vikt
VFX00003	1-6	22-30	229 mm	38 mm	216 g
VFX00004	7-9	22-30	229 mm	38 mm	275 g
VFX00006	1-6	22-30	381 mm	38 mm	293 g
VFX00007	7-9	22-30	381 mm	38 mm	369 g

Innehåller:


- Inriktningsskilar
- Kolfiberrör
- Sfäriska brickor
- Fästskruvar/skruvar (5/16" UNF)
- Friktionsbrickor
- Stödhylsa (Kategori 7-9)

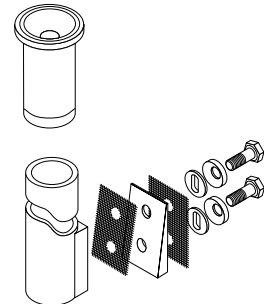

STÖDHYLSA, KATEGORI 7-9, Ø 30 MM

Krävs när kolfiberrör av högre kategori används.

Art.nr.	Diameter	Vikt
A-718009	30 mm	18 g

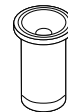


INRIKTNINGSKILAR (2° OCH 4°)

Placeras mellan röret och fotmodulen, inriktningsskilarna möjliggör plantar- eller dorsalflexion av foten utan att använda modulära komponenter med justerskruvar.

Art.nr.	Kategori
CM150041	1-6
CM150042	7-9

Innehåller:

- Kilar
- Friktionsbricka
- Loctite

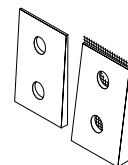

FÄSTSKRUVAR TILL Ø 30 MM KOLFIBERRÖR

Art.nr.	Kategori	Storlek	Längd
CM130219	1-6	5/16" x 24	1 3/4"
CM130213	7-9	3/8" x 24	1 3/4"

VARI-FLEX®

KOMPONENTER


HÄLKILAR – KIT

För justering av hårdheten på hälen och fotens rollover-egenskaper.

Art.nr.	Storlek
CM150006	22-27
CM150009	28-30

Innehåller:


- 3 kilar
- Lim

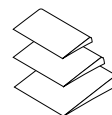

HÄLDELARE

Hälavdelaren placeras i den posteriora slitsen på det delade hälpartiet på fotmodulen för att minska slitage och oljud mellan komposit-elementen.

Art.nr.	Beskrivning
CM140003	Häldelare

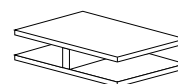


LOCTITE 410 SVART

Art.nr.	Beskrivning
CM160016	Loctite 410 Svart

VARI-FLEX®

KIT – UNITY


VARI-FLEX UNITY

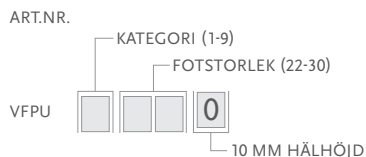

Innehåller:




- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Unity pumpmodul*

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventsats ingår ej, beställs separat.

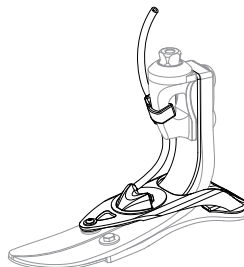

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UTT0001	Unity TT hylsventsats	Alla
2.	UTF0001	Unity TF hylsventsats	Alla
3.	UTF0006	Unity TF slangsats	Alla
4.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
6.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
6.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
7.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

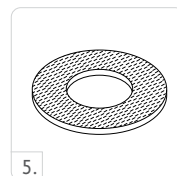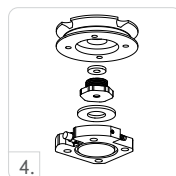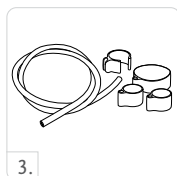


UNITY - RESERVDLAR

Art.nr.	Beskrivning
UVF00021	Unity VF Komponenter, 22-24
UVF00022	Unity VF Komponenter, 25-30

Innehåller:

- Membran
- Kontrollventiler
- Täckhuv
- Slang
- Slangklämma
- Hälkudde

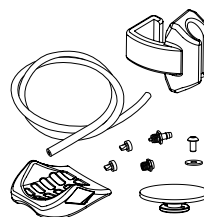


VARI-FLEX®

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

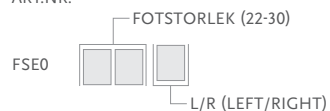

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock
- Fästplatta/ring

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



FLEX-FOOT SOCK


Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knyts fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FSEL60001	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FSEL60002	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FSEL60001-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FSEL60002-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



VARI-FLEX®

SPRÄNGSKISS

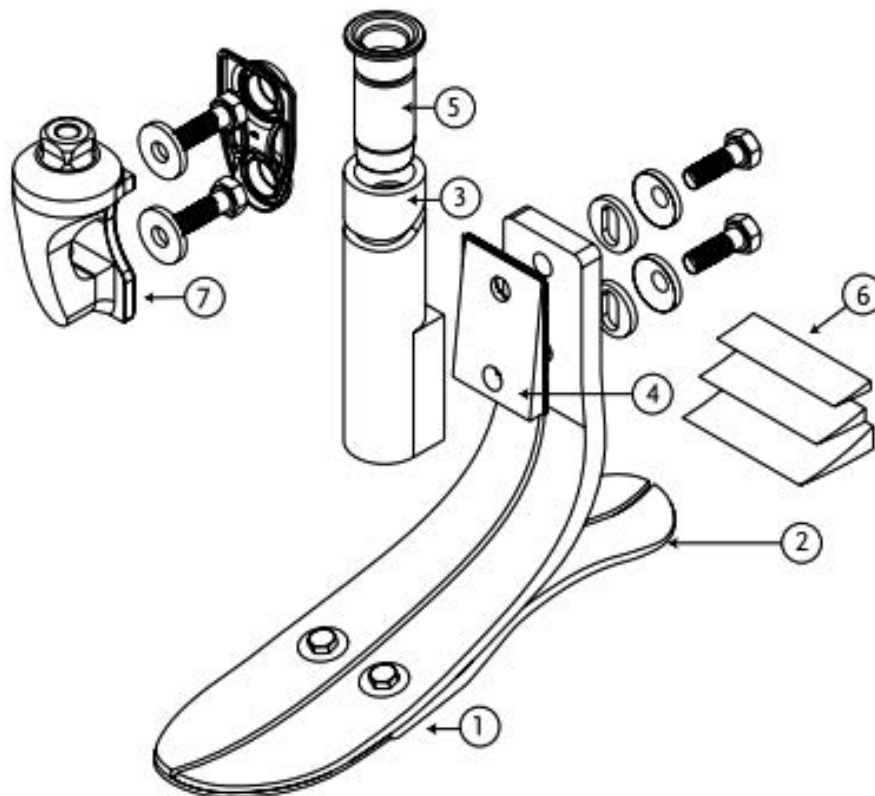

	Beskrivning
1.	Fotmodul
2.	Häl
3.	30 mm kolfiberrör med anslutningsplatta
4.	Kilar för inriktning av röret
5.	Stödhylsa
6.	Hälkil
7.	Hanpyramidadapter

LP VARI-FLEX®



UNITY
COMPATIBLE

Passar bra till låg- och högaktiva protesanvändare med lång stump som önskar bra fotdynamik. Ett bra val då bygghöjden är begränsad.

Unity-kompatibel. Vid beställning av LP Vari-Flex Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



FULL LENGTH
TOE LEVER



SPLIT TOE



WEATHERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	Stl. 22-24, kat. 1-5 / Stl. 25-30, kat. 1-9
Storlek:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	574 g inkl. pyramid och fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	68 mm inkl. pyramid och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Hanpyramidadapter eller lamineringsadapter

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-16inHg till -20inHg
Ökad systemvikt:	130 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


LP VARI-FLEX®

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG


FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
INKL. HANPYRAMIDADAPTER



FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
EXKL. ADAPTER

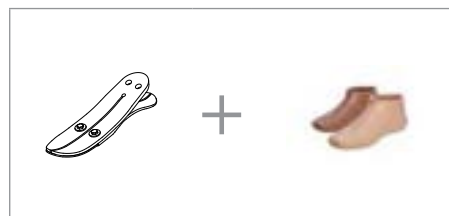

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

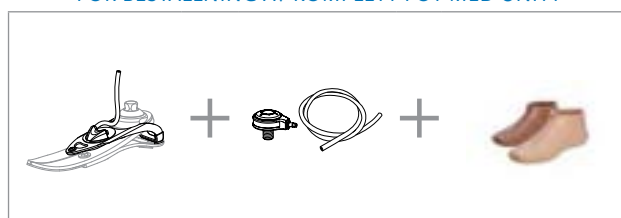

Unity kan beställas tillsammans med LP Vari-Flex (10 mm hälhöjd) när pyramidadapter används. Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001

Övriga valbara kit:

- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*


*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan ej eftermonteras på befintlig LP Vari-Flex.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

BYGGHÖJD

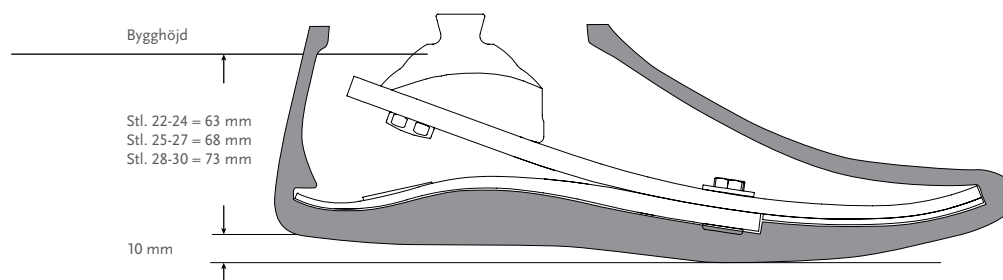


LP Vari-Flex Unity har samma bygghöjd som LP Vari-Flex.

Obs! Lägg till 20 mm på bygghöjden vid användning av LP Vari-Flex med direktlamineringsadapter.


LP VARI-FLEX®

KIT

LP VARI-FLEX INKL. ADAPTER

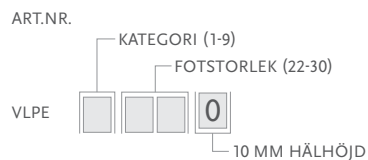

LP VARI-FLEX EXKL. ADAPTER

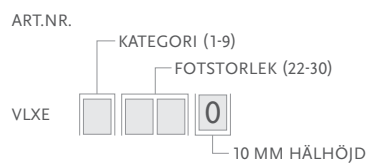

Obs! 19 mm häl höjd är beställningsvara. Kontakta Kundsupport!

DIREKTLAMINERINGSADAPTER – KIT

Art.nr.	Kategori	Storlek
VLX00001	1-5	22-24
VLX00002	1-6	25-30
VLX00003	7-9	25-30

Innehåller:

- Adapter i aluminium för inlamining
- Fästbultar
- Isoleringsband
- Loctite

KOMPONENTER

HÄLKIL KIT

För justeringen av hårdheten på hälen och fotens rollover-egenskaper.

Art.nr.	Fotstorlek
CM150011	22-30

Innehåller:

- 3 kilar
- Lim





HÄLDELARE

Häldelaren placeras i den posteriora slitsen på det delade hälpåret på fotmodulen för att minska slitage och oljud mellan komposit-elementen.

Art.nr.	Beskrivning
CM140003	Häldelare

LOCTITE 410 SVART


Art.nr.	Beskrivning
CM160016	Loctite 410 Svart

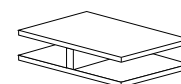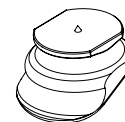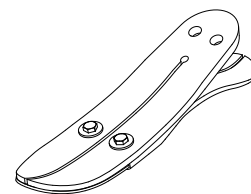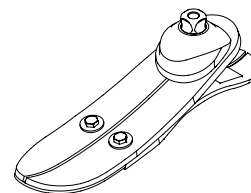

LP VARI-FLEX®

KIT – UNITY


LP VARI-FLEX UNITY

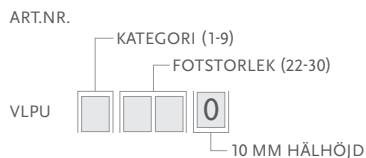

Innehåller:




- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Unity pumpmodul

Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.

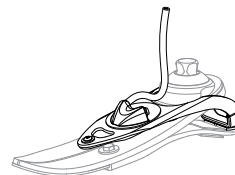

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
2.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
3.	UTF0006	Unity TF slangsats	Alla
4.	L-544611	Icelock 544 Kit Unity	Alla
5.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
6.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
7.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

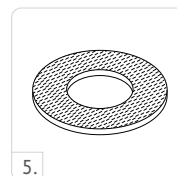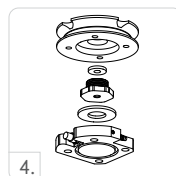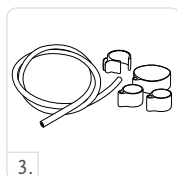

UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
UVL00021	Unity VL Komponenter, 22-24
UVL00022	Unity VL Komponenter, 25-30

Innehåller:


- Membran
- Kontrollventiler
- Täckhuv
- Slang
- Slangklämma
- Hållkudde

LP VARI-FLEX®

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

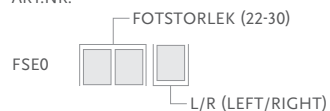

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock
- Fästplatta/ring

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT SOCK


Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knyts fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FSEL60001	Flex-Foot Sock Small 1 st	22-25	Svart
FSEL60002	Flex-Foot Sock Large 1 st	26-30	Svart
FSEL60001-15	Flex-Foot Sock Small 15 st	22-25	Svart
FSEL60002-15	Flex-Foot Sock Large 15 st	26-30	Svart



LP VARI-FLEX®

SPRÄNGSKISS

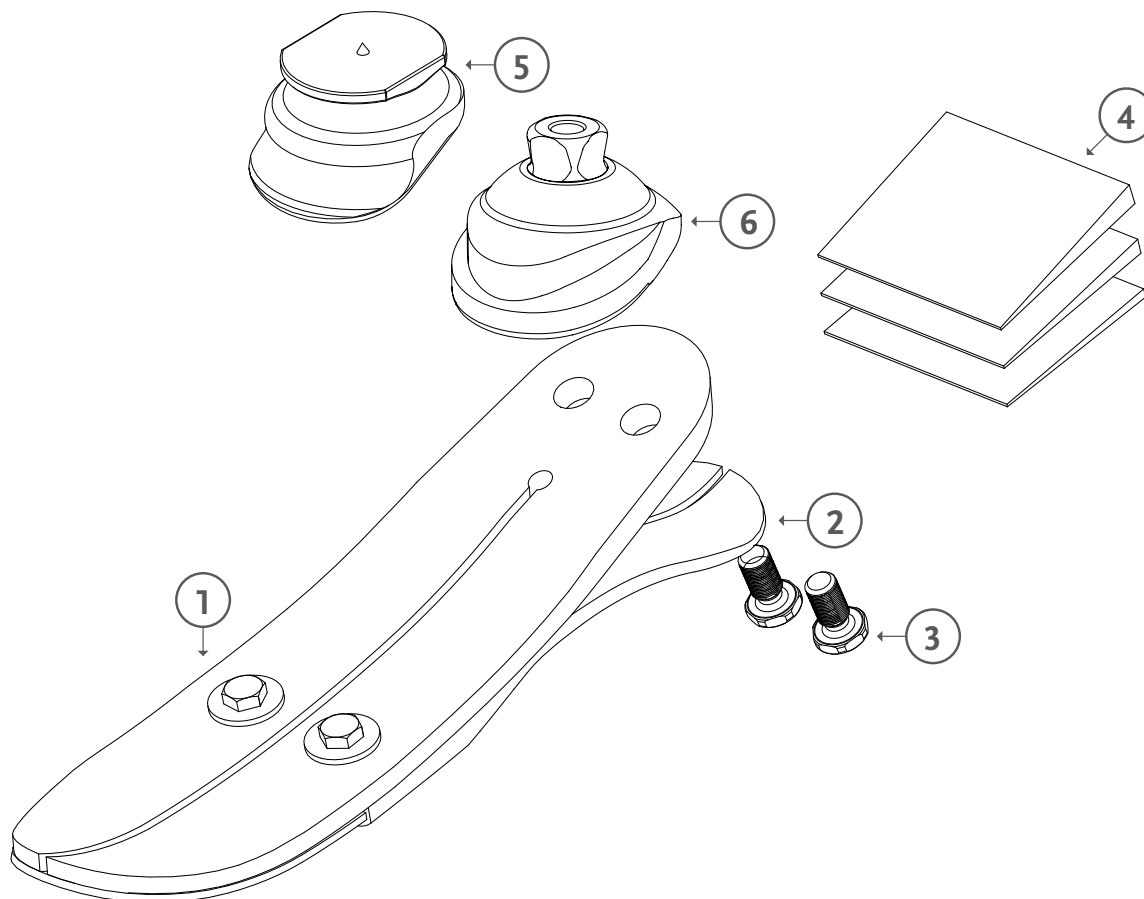

	Beskrivning
1.	Fotmodul
2.	Häl
3.	Skruvar
4.	Hälkil
5.	Lamineringsadapter
6.	Hanpyramidadapter

RE-FLEX ROTATE™

UNITY
COMPATIBLE



En bekväm, robust och högpresterande protesfot som ger protesanvändaren friheten att jobba och/eller njuta av sin fritid fullt ut. Svarar på de aktiva protesanvändarnas tuffa krav på stötdämpning, dynamisk energiåtergivning och komfort.

En fullängdsfot med anpassat kolfiberupplägg och en underhållsfri konstruktion vilket gör Re-Flex Rotate till ett bra val för aktiva protesanvändare som behöver en högpresterande protesfot för alla förhållanden.

Torsionscellen reducerar skadliga krafter på stumpen samtidigt som den möjliggör en mer naturlig vridrörelse. En integrerad titanfjäder ger stötdämpning och minskar belastningen på övriga delar av kroppen.

Finns i 2 utföranden: standardprofil och hög profil.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Re-Flex Rotate Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar inte protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	147 kg



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



VERTICAL
SHOCK PYLON



ROTATION



WEATHERPROOF



FULL LENGTH
TOE LEVER



SPLIT TOE

Produktinformation	
Kategori:	1-8
Storlekar:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	1105 g inkl. pyramid och fotkosmetik
Bygghöjd Standard: (Stl. 27)	216-265 mm inkl. hanpyramid-adaptar och fotkosmetik
Bygghöjd Hög: (Stl. 27)	267 - 319 mm inkl. hanpyramid-adaptar och fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm eller 19 mm*
Adapter:	Han- eller honpyramidadaptar


*Standardprofil kan specialbeställas med 19 mm hälhöjd i stl. 25-30.

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-16inHg till -20inHg
Ökad systemvikt:	130 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats


RE-FLEX ROTATE™

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
INKL. HANPYRAMIDADAPTER*

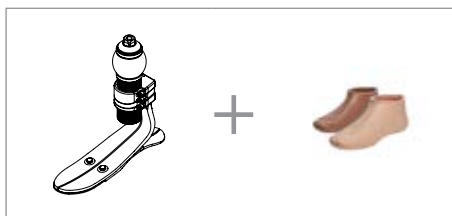


FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
INKL. HONPYRAMIDADAPTER*

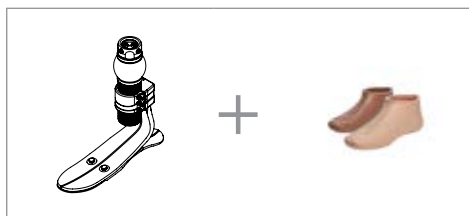

*Re-Flex Rotate med han- resp. honpyramidadapter finns i två olika utföranden: Standard och hög.

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

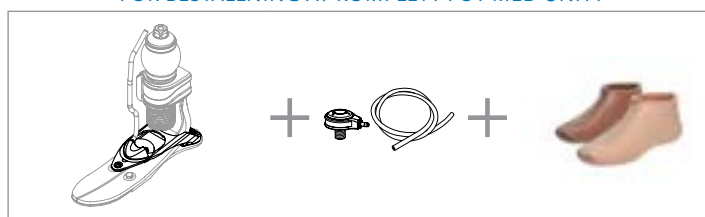

Re-Flex Rotate i standardutförande med han- resp. honpyramidadapter kan fås med Unity. Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan ej eftermonteras på befintlig Pro-Flex Rotate.


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg									
Storlek 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Storlek 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8
Impact: Medel									
Storlek 22-24	1	2	3	4	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	N/A
Storlek 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	N/A
Impact: Hög									
Storlek 22-24	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Storlek 25-27	2	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A
Storlek 28-30	3	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A

RE-FLEX ROTATE™


BYGGHÖJD

RE-FLEX ROTATE – STANDARD

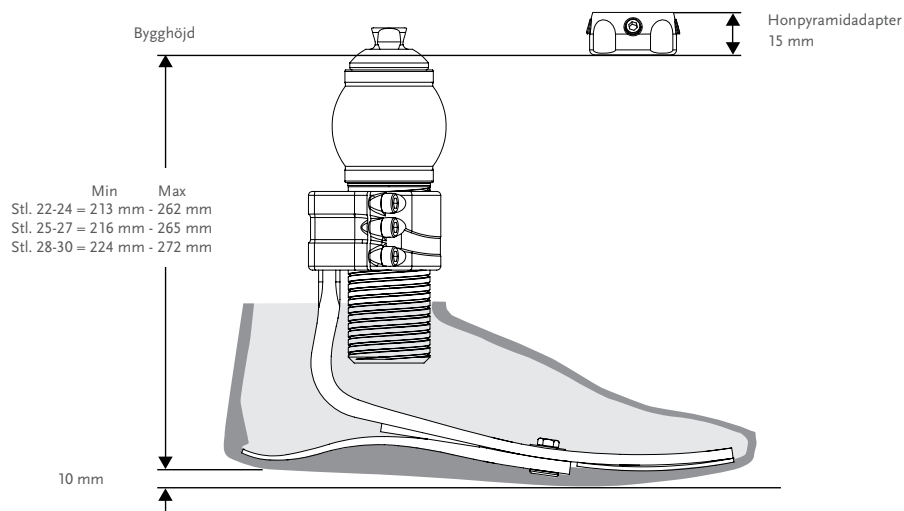

Re-Flex Rotate Unity Standard har samma bygghöjd som Re-Flex Rotate Standard.

RE-FLEX ROTATE – HÖG

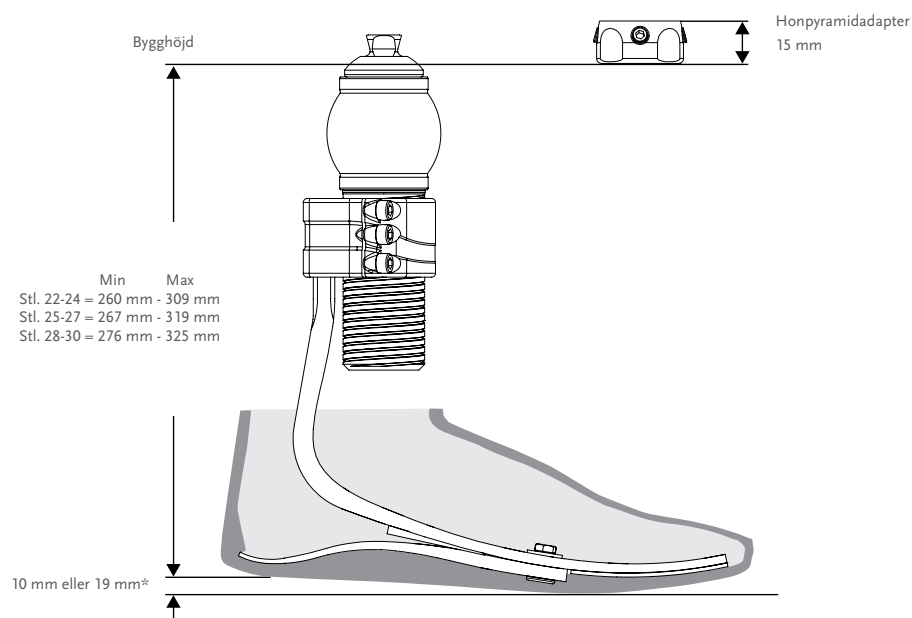

*19 mm = beställningsvara.



Obs! Re-Flex Rotate i hög profil kan ej fås med Unity.

RE-FLEX ROTATE™



KIT

RE-FLEX ROTATE STANDARD

INKL. **HANPYRAMID**, EXKL. FOTKOSMETIK

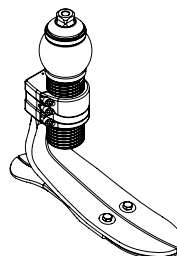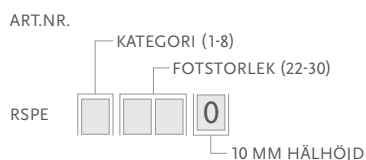




INKL. **HONPYRAMID**, EXKL. FOTKOSMETIK

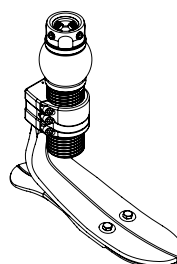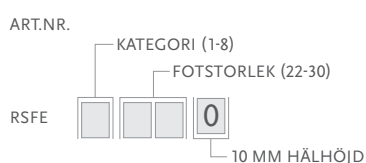

Rotations-/stötdämparenhet ingår. **Fotkosmetik** beställs separat.

RE-FLEX ROTATE HÖG




INKL. **HANPYRAMID**, EXKL. FOTKOSMETIK

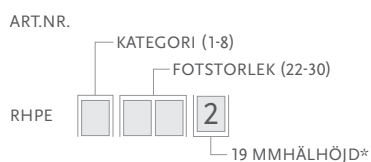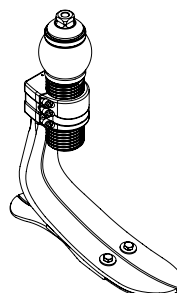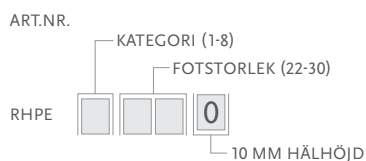

Rotations-/stötdämparenhet ingår. **Fotkosmetik** beställs separat.

*19 mm hälhöjd = beställningsvara. Kontakta Kundsupport!
Fotmodulen kan fås med hel tå = beställningsvara. Kontakta Kundsupport!

INKL. **HONPYRAMID**, EXKL. FOTKOSMETIK

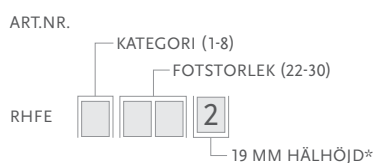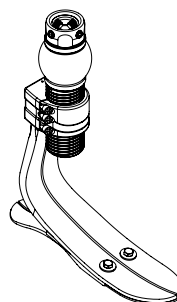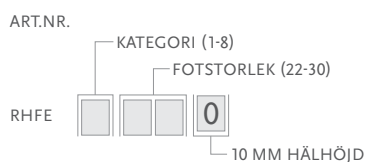


Rotations-/stötdämparenhet ingår. **Fotkosmetik** beställs separat.

*19 mm hälhöjd = beställningsvara. Kontakta Kundsupport!
Fotmodulen kan fås med hel tå = beställningsvara. Kontakta Kundsupport!


RE-FLEX ROTATE™

KIT


STANDARD-PROFIL – FOTMODUL UTAN ROTATIONS-/STÖTDÄMPARENHET

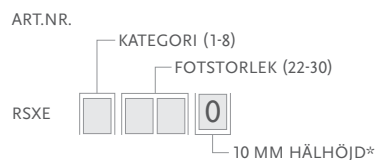


* Standardprofil kan specialbeställas med 19 mm hälhöjd i stl. 25-30. Kontakta Kundsupport!

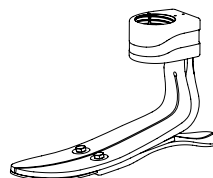

HÖG PROFIL – FOTMODUL UTAN ROTATIONS-/STÖTDÄMPARENHET


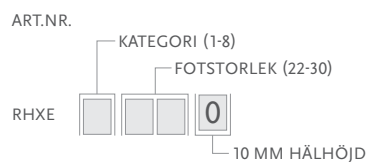


**Obs! 19 mm hälhöjd = beställningsvara. Kontakta Kundsupport!
Fotmodulen finns även med hel tå = beställningsvara. Kontakta Kundsupport!


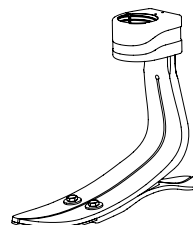


ROTATIONS-/STÖTDÄMPARENHET – KIT

ENHET MED HANPYRAMID

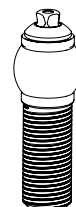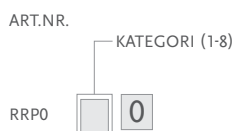

ENHET MED HONPYRAMID

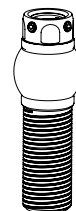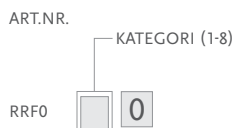

RE-FLEX ROTATE™

KOMPONENTER

HÄLKILAR TILL RE-FLEX ROTATE STANDARD OCH HÖG

Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
CM150011	22-30	Alla

Innehåller:

- 3 kilar
- Lim

Art.nr.	Beskrivning
CM160025	Loctite 243



M6 16 MM - SKRUV TILL FÄSTKLÄMMA

Art.nr.	Beskrivning
CM130140	M6 16 mm - skruv till fästklämma

VERKTYG

TORQUE MOMENTNYCKEL

Art.nr.	Beskrivning
FFC7980001	Torque Momentnyckel 3Nm Preset




KIT – UNITY

RE-FLEX ROTATE™ UNITY – STANDARD*

INKL. HANPYRAMID, EXKL. FOTKOSMETIK

ART.NR.

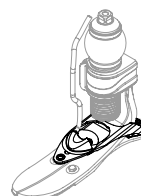

INKL. HONPYRAMID, EXKL. FOTKOSMETIK

ART.NR.






*Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.

OBS! Se till så att inte Rotate-enheten kommer i kontakt med Unity-modulen.

RE-FLEX ROTATE™

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
2.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
3.	UTF0006	Unity TF slangsat	Alla
4.	L-544611	Icelock 544 Kit	Alla
5.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
6.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
7.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

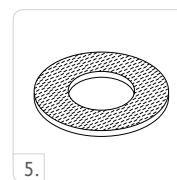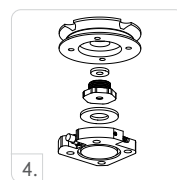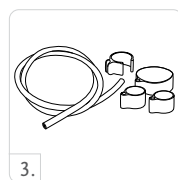


UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
URS00021	Unity RS Komponenter, 22-24
URS00022	Unity RS Komponenter, 25-30

Innehåller:


- Membran
- Kontrollventiler
- Täckhuv
- Slang
- Slangklämma
- Hälkudde

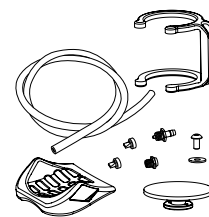

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

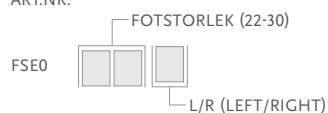

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock
- Fästplatta/ring

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

RE-FLEX ROTATE™

TILLBEHÖR


FLEX-FOOT SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FSEL60001	Flex-Foot Sock Small 1 st	22-25	Svart
FSEL60002	Flex-Foot Sock Large 1 st	26-30	Svart
FSEL60001-15	Flex-Foot Sock Small 15 st	22-25	Svart
FSEL60002-15	Flex-Foot Sock Large 15 st	26-30	Svart



SPRÄNGSKISS

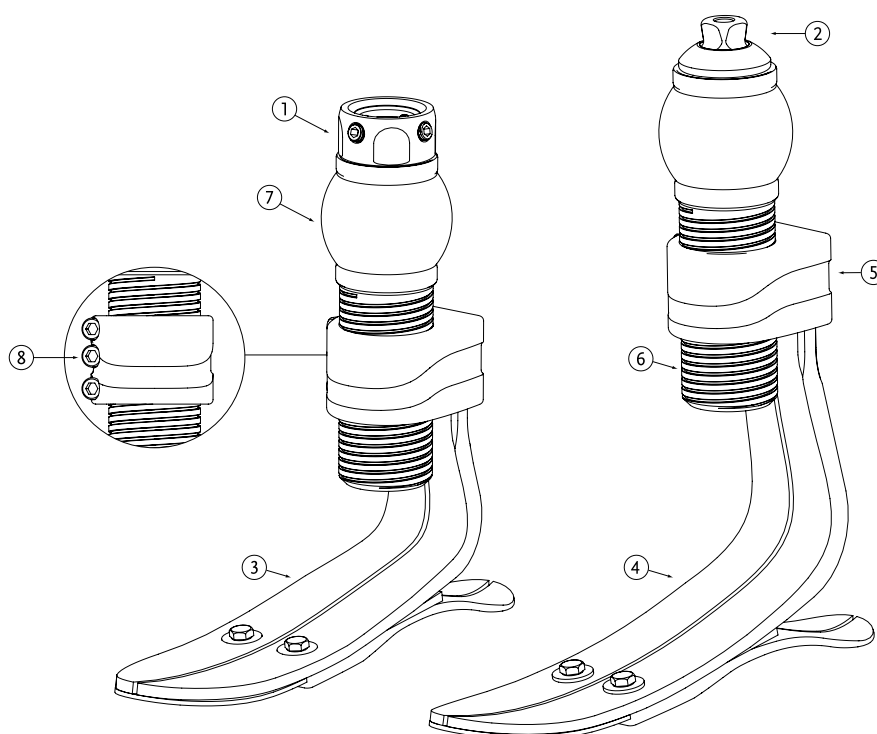

	Beskrivning
1.	Honpyramidadapter
2.	Hanpyramidadapter
3.	Fotmodul - standard
4.	Fotmodul - hög
5.	Fäste för stötdämparmodul
6.	Gångat yterrör
7.	Torsionscell
8.	Låsskruvar

RE-FLEX SHOCK™



UNITY
COMPATIBLE

Dynamisk och komfortabel protesfot med extra stötdämpning. Re-Flex Shock passar bra till både tuffa aktiviteter och sport på mer krävande nivåer men även till vardags.

Kompositfjädern ger protesanvändaren extra stötdämpning för att skona stumpen och resten av kroppen.

Finns i 2 utföranden: standardprofil och hög profil.

Unity-kompatibel. Vid beställning av Re-Flex Shock Unity, kommer Unity förmonterat. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar inte protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att, i kombination med Iceross Seal-In®-teknologi, ge säker vakuumsuspension utan sleeve, stabilisera volymfluktuationer och bibehålla en bekväm passform i proteshylsan under hela dagen.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



FULL LENGTH
TOE LEVER



WEATHERPROOF



SPLIT TOE



VERTICAL
SHOCK PYLON

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlekar:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	1076 g inkl. fotkosmetik och socka
Bygghöjd Standard: (Stl. 27)	210-238 mm inkl. fotkosmetik och hanpyramidadapter
Bygghöjd Hög: (Stl. 27)	255-288 mm inkl. fotkosmetik och hanpyramidadapter
Hälhöjd:	10 mm eller 19 mm*
Adapter:	Hanpyramidadapter

*Standardprofil kan specialbeställas med 19 mm hälhöjd i stl. 25-30.

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	23inHg (600 mmHg)
Normalt arbetstryck:	-16inHg till -20inHg
Ökad systemvikt:	130 g inkl. Unity pumpmodul och hylsventilsats

RE-FLEX SHOCK™


BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT*



*Re-Flex Shock finns i två olika utföranden/profiler: Standard och Hög.

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT MED UNITY

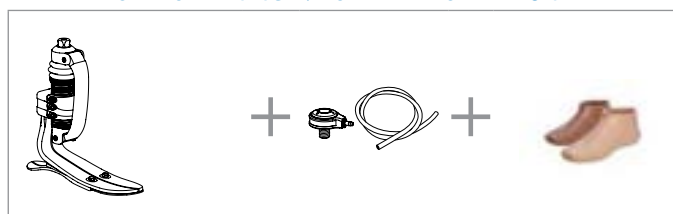

Re-Flex Shock i standardutförande kan fås med Unity. Unity kommer förmonterat på foten. Unity hylsventilsats ingår ej (beställs separat och efter amputationsnivå):

- Unity TT hylsventilsats #UTT0001
- Unity TF hylsventilsats #UTF0001
- Icelock 544 för Unity kit #L-544611
- Icelock 562 Hybrid för Unity kit #L-562000*
- Icelock 562 Hybrid Unity för DS #L-562400*

Övriga valbara kit:

*Används endast tillsammans med Iceross Seal-In X Locking Liner

EFTERMONTERING: Unity kan ej eftermonteras på befintlig Pro-Flex Shock.

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148 - 166
----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	-----------

Impact: Låg

Stl. 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Stl. 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stl. 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9

Impact: Medel

Stl. 22-24	1	2	3	4	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Stl. 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Stl. 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A


Impact: Hög

Stl. 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Stl. 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Stl. 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

RE-FLEX SHOCK™


BYGGHÖJD

RE-FLEX SHOCK STANDARD

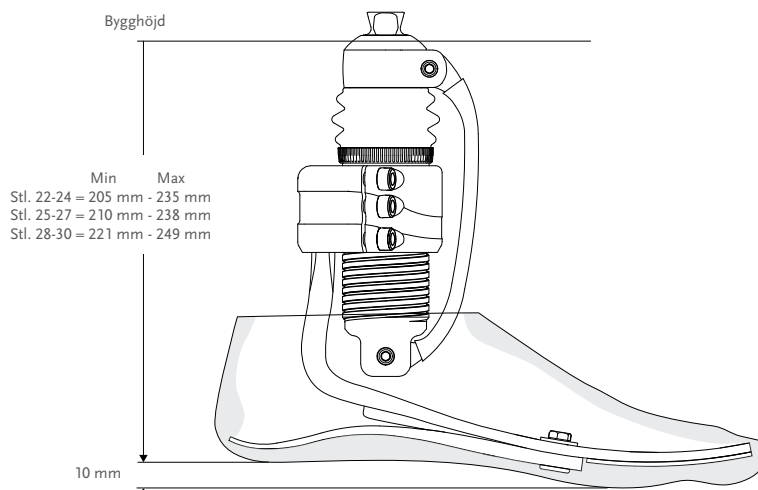

Re-Flex Shock Unity Standard har samma bygghöjd som Re-Flex Shock Standard.

RE-FLEX SHOCK HÖG

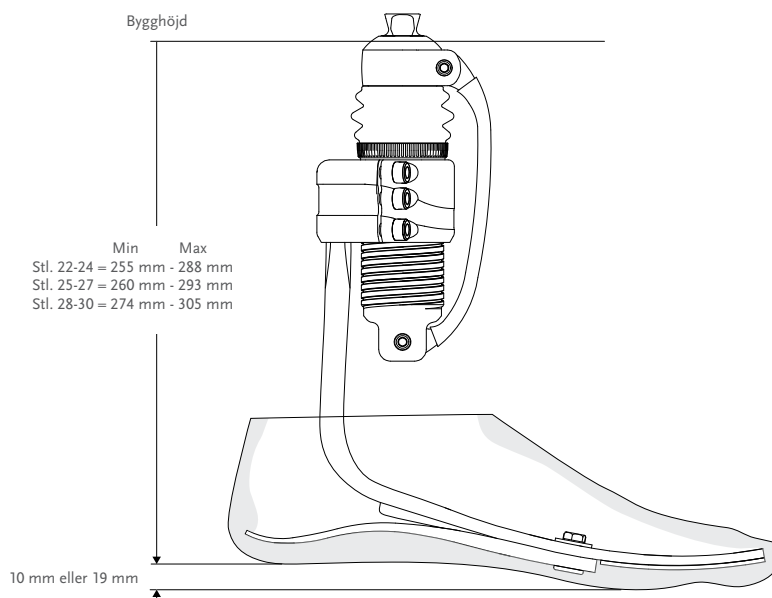

Obs! Re-Flex Shock i hög profil kan ej fås med Unity.



RE-FLEX SHOCK™

KIT

RE-FLEX SHOCK STANDARD

INKL. **HANPYRAMID**, EXKL. FOTKOSMETIK



ART.NR.

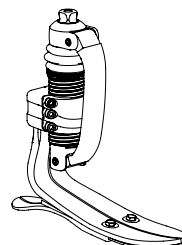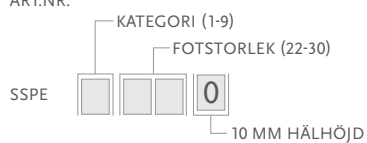

RE-FLEX SHOCK HÖG

INKL. **HANPYRAMID**, EXKL. FOTKOSMETIK

ART.NR.

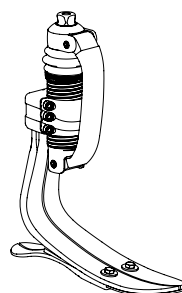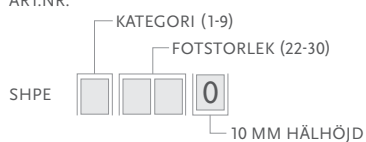

ART.NR.




*19 mm hälhöjd = beställningsvara.

Fotmodulen kan fås med hel tå = beställningsvara. Kontakta Kundsupport!


RE-FLEX SHOCK™

KOMPONENTER / TILLBEHÖR



FOTMODUL - STANDARD UTAN STÖTDÄMPARENHET

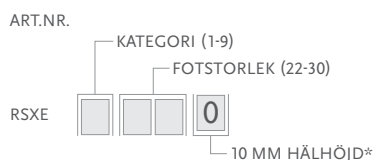

Re-Flex Shock Standard kan specialbeställas med 19 mm hälhöjd i stl. 25-30. Kontakta Kundsupport!

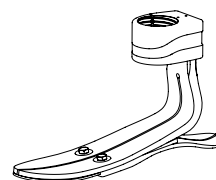


FOTMODUL - HÖG UTAN STÖTDÄMPARENHET

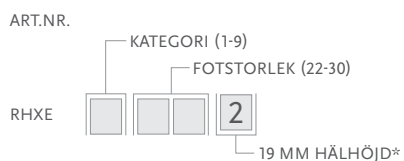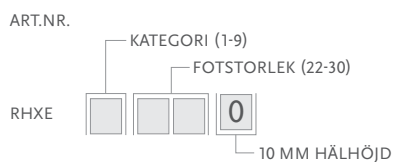


*19 mm = specialbeställning. Kontakta Kundsupport!

Re-Flex Shock Hög kan specialbeställas med solid tå. Kontakta Kundsupport!

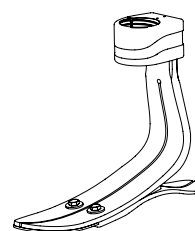

ROTATIONS-/STÖTDÄMPARENHET - KIT

ENHET MED HANPYRAMID

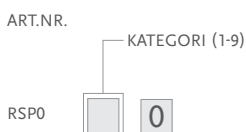

HÄLKILAR TILL RE-FLEX SHOCK STANDARD OCH HÖG – KIT

Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
CM150011	22-30	Alla

Innehåller:

- 3 kilar
- Lim

Art.nr.	Beskrivning
CM160025	Loctite 243



RE-FLEX SHOCK™


KOMPONENTER

FRAMFJÄDER TILL RE-FLEX SHOCK

Art.nr.	Kategori
RSS44001	1
RSS44002	2
RSS44003	3
RSS44004	4
RSS44005	5
RSS44006	6
RSS44007	7
RSS44008	8

Innehåller:

- Framfjäder
- 2 stift

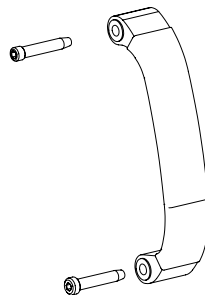


BUSSNINGSKIT

Art.nr.	Beskrivning
RSS00001	Bussningskit

Innehåller:

- 4 bussningar
- 4 brickor
- 2 stift

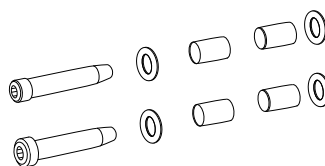

NEDRE RING - RE-FLEX SHOCK

Art.nr.	Beskrivning
RSS40011	Nedre ring - Re-Flex Shock Bälge
RSS40012	Nedre ring - Re-Flex Shock Kragen

VERKTYG

TORQUE WRENCH

Art.nr.	Beskrivning
FFC7980001	Torque Wrench 3Nm Preset



RE-FLEX SHOCK™

KIT – UNITY

RE-FLEX SHOCK™ UNITY - STANDARD


INKL. HANPYRAMID, EXKL. FOTKOSMETIK

ART.NR.

KATEGORI (1-9)

FOTSTORLEK (22-30)

SSPU


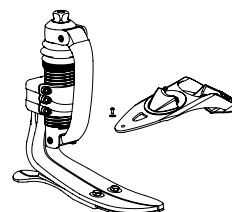


Unity pumpmodul kommer förmonterad på foten. Unity hylsventilsats ingår ej, beställs separat.

Obs! På grund av begränsat utrymme med Re-Flex Shock modulen och Unity, kan stötdämparenheten endast justeras ner 2 hela varv från dess högsta nivå. Ett helt varv ändrar höjden med 8 mm.

UNITY

	Art.nr.	Beskrivning	Anpassat för:
1.	UTT0001	Unity TT hylsventilsats	Alla
2.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats	Alla
3.	UTF0006	Unity TF slangsets	Alla
4.	L-544611	Icelock 544 Kit	Alla
5.	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)	Alla
6.	L-562000	Icelock 562 Hybrid för Unity	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.
7.	L-562400	Icelock 562 Unity för Direct Socket	Alla. Används endast med Iceross Seal-In X Locking Liner.

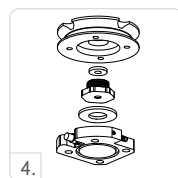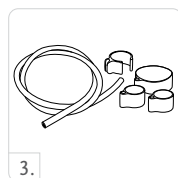


UNITY - RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
URS00021	Unity RS Komponenter, 22-24
URS00022	Unity RS Komponenter, 25-30

Innehåller:

- Membran
- Kontrollventiler
- Täckhuv
- Slang
- Slangklämma
- Hälkudde

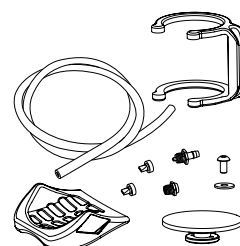


RE-FLEX SHOCK™

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

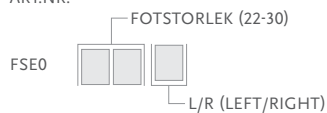

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock
- Fästplatta/ring

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT SOCK


Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FSEL60001	Flex-Foot Sock Small 1 st	22-25	Svart
FSEL60002	Flex-Foot Sock Large 1 st	26-30	Svart
FSEL60001-15	Flex-Foot Sock Small 15 st	22-25	Svart
FSEL60002-15	Flex-Foot Sock Large 15 st	26-30	Svart




RE-FLEX SHOCK™

SPRÄNGSKISS

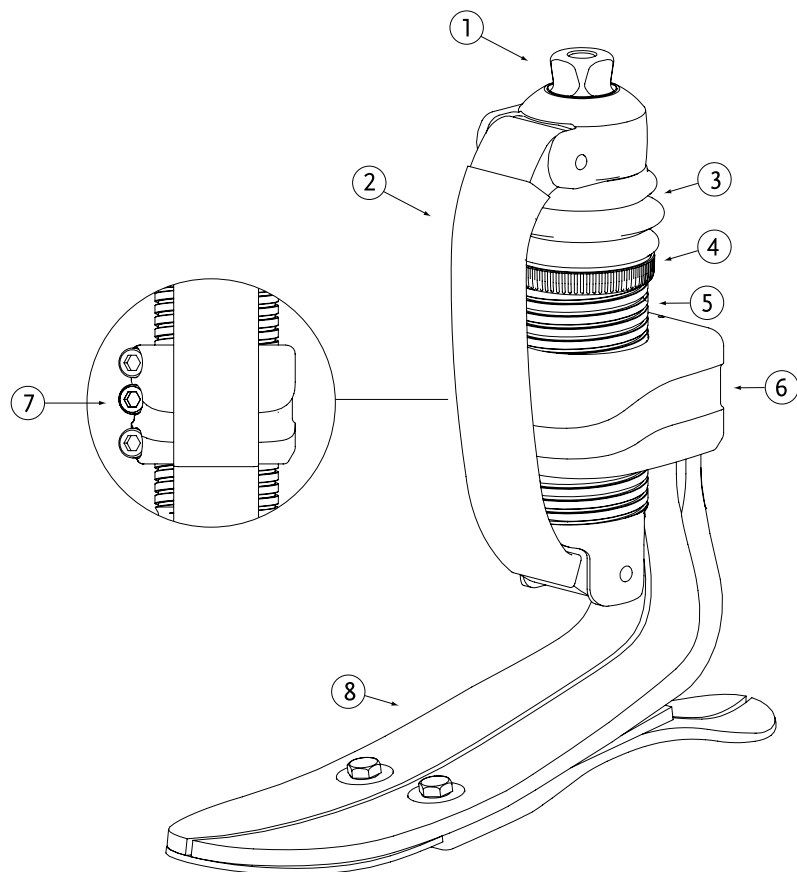

	Beskrivning
1.	Hanpyramidadapter
2.	Kompressionsfjäder
3.	Bälg
4.	Krage
5.	Gängat ytterrör
6.	Fästklämma
7.	Skurvar till fästklämma
8.	Fotmodul

CHEETAH® XPLORE

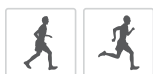

Cheetah Xplore är en unik s.k. "crossover-protesfot" som inspirerats av den ursprungliga Cheetah-designen. Protesfoten är främst tänkt att användas till vardags men passar även de protesanvändare som vill ägna sig åt olika typer av motionsidrott och mer intensiva vardagsaktiviteter.

Genom att kombinera god energiåtergivning och dynamiskt frånskjut med en bra balans och stabilitet, ger protesen ett bra stöd i vardagen till de protesanvändare som lever ett aktivt liv.



Video: Cheetah Xplore
Product video
2 min 54 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Medel till extrem
Max. patientvikt:	147 kg



FULL LENGTH
TOE LEVER



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



WATERPROOF



SPLIT TOE


Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlekar:	En storlek per kategori
Vikt: (Kat. 5)	646 g
Bygghöjd:	Maximal höjd upp till den bakre kanten på proteshylsan: 521 mm Minsta höjd upp till den bakre kanten på proteshylsan: 348 mm Minsta avstånd mellan proteshylsa och fot: 32 mm
Adapter:	Anslutningsplatta för laminering

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Medel	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Hög	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A

CHEETAH® XPLORE

BYGGHÖJD MED ANSLUTNINGPLATTA

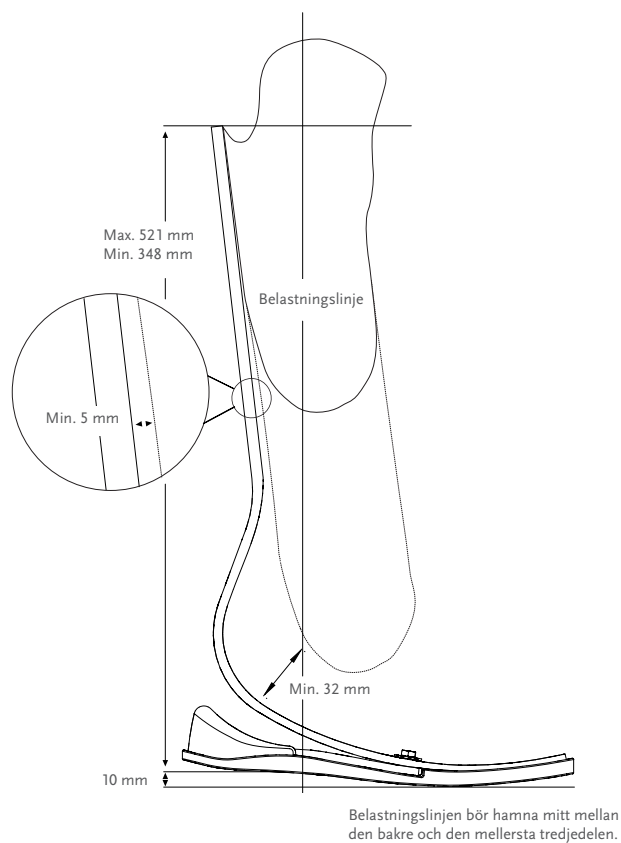

KIT

CHEETAH XPLORE KIT

ART.NR.

KATEGORI (1-9)

FSX009



Innehåller:

- Fotmodul
- Hälkudde i skumgummi
- Sula i skumgummi
- +PluSerien lim 215 ml - komposit 1 minut

Cheetah Xplore levereras med +PluSerien komposit 1 minut lim. +PluSerien lim dispenser #FSX80016 måste dock beställas separat.

Anslutningsplatta för laminering #FSX50009 beställs separat.



CHEETAH® XPLORE


KIT

ANSLUTNINGSPLATTA FÖR LAMINERING

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FSX50009	Anslutningsplatta för laminering	1-9


Innehåller:

- Anslutningsplatta
- Inriktningsskilar (2°, 4°, 6°, 8°)
- Fästskruvar

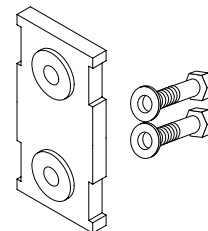

SKRUVSATS FÖR ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Kategori
CM130218	Fästskruvar till anslutningsplatta	5/16"-24 x 1 1/2"	1-6
CM130213	Fästskruvar till anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/4"	7-9

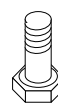


SKRUVSATS FÖR T-STYCKE

Art.nr.	Längd	Vikt	Storlek	Kategori
CM100054	8 mm	108 g	x 2-1/2"	1-6
CM100055	10 mm	144 g	x 2-1/2"	7-9


Innehåller:

- Skruvar
- Muttrar
- Sfäriska brickor
- Planbricka

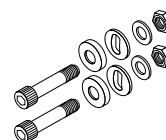

KILAR FÖR INRIKTNING

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM140502	Inriktningsskilar 2°	Alla
CM140505	Inriktningsskilar 4°	Alla
CM140508	Inriktningsskilar 6°	Alla
CM140511	Inriktningsskilar 8°	Alla

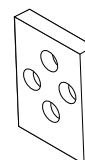

HÄLKILAR

För justering av hårdheten på hälen och rollover-egenskaperna.

Art.nr.	Fotstorlek
CM150011	22-30

Innehåller:

- 3 kilar
- Lim



CHEETAH® XPLORE

VERKTYG

+PLUSERIEN DISPENSER

Art.nr.	Beskrivning
FSX80016	+PluSerien 215 ml Dispenser



+PLUSERIEN LIM


Art.nr.	Beskrivning
FSX80015	+PluSerien lim 215 ml - Komposit 1 minut
FSX80017	+PluSerien blandningsmunstycken. Innehåller: 6 blandningsmunstycken



KOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

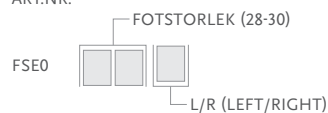

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock
- Fästplatta/ring

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knyts fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FSEL60002	Flex-Foot Sock Large 1 st	26-30	Svart
FSEL60002-15	Flex-Foot Sock Large 15 st	26-30	Svart




HÄLKUDDE OCH SULA I SKUMGUMMI

Art.nr.	Beskrivning
FSX60001	Hälkudde i skumgummi

Innehåller:

- Hälkudde i skumgummi
- Sula i skumgummi

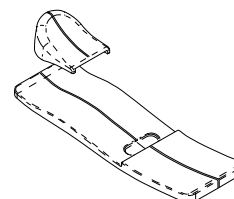

FLEX-SYMES™



God prestanda och låg bygghöjd.

Fotmodulen är tillverkad i kolfiber och foten har en s.k. Carbon-X® Active Heel. Protesfotens hylsadapter ger upp till 6 graders vinkeljustering och 5 mm justering i AP/ML-plan.

Flex-Symes är specifikt framtagen för de som genomgått en Syme- eller Pirogoff-amputation och för de med långa transtibiala stumpar.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Fotledsexartikulation (Syme´s)
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	166 kg



FULL LENGTH
TOE LEVER



SPLIT TOE




WEATHERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	Stl. 22-24, kat. 1-6 / Stl. 27-30, kat. 1-9
Storlekar:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	528 g inkl. fotkosmetik
Bygghöjd: (Stl. 27)	60 mm inkl. fotkosmetik
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Direktlamineringsadapter

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
INKL. HYLSADAPTER

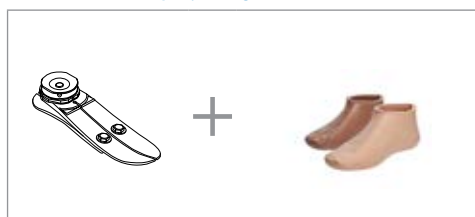

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT
EXKL. ADAPTER




VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Impact: Låg	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Impact: Medel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Impact: Hög	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

FLEX-SYMES™

BYGGHÖJD

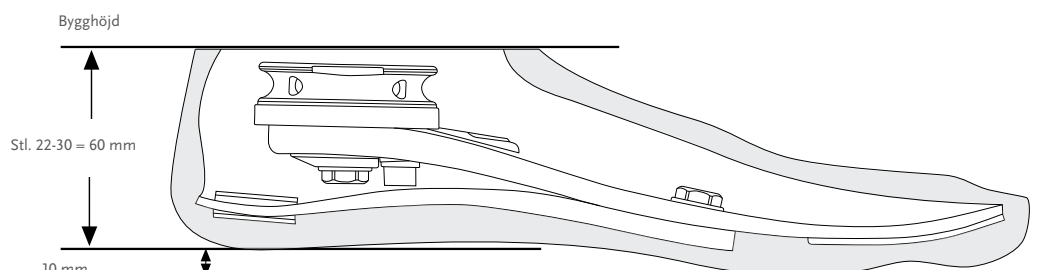

KIT

FLEX-SYMES INKL. HYLSADAPTER

ART.NR.

KATEGORI (1-9)


FOTSTORLEK (22-30)

SLP0

10 MM HÄLHÖJD

Innehåller:

- Fotmodul i kolfiber
- 2 cirkulära inriktningsskilar
- 2 inriktningssstift
- 1 antirotationsbult
- Bricka
- Loctite 410
- Epoxy-pasta
- Hylsadapter

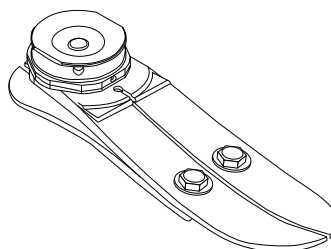

FLEX-SYMES EXKL. ADAPTER

ART.NR.

KATEGORI (1-9)


FOTSTORLEK (22-30)

SLX0

10 MM HÄLHÖJD

Innehåller:

- Fotmodul i kolfiber

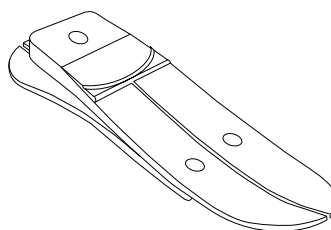

KOMPONENTER

HÄLMODUL


ART.NR.

KATEGORI (1-9)

FOTSTORLEK (22-30)

SLX2

10 MM HÄLHÖJD

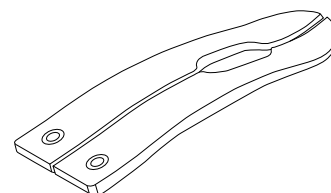


FLEX-SYMES™

KOMPONENTER

INRIKTNINGSKIT

Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
SLP30001	22-24	1-6
SLP30002	25-27	1-6
SLP30003	28-30	1-6
SLP30004	25-27	7-9
SLP30005	28-30	7-9

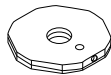

Innehåller:

- 2 cirkulära inriktningsskilar
- 2 inriktningssstift
- 1 antirotationsbult
- Bricka
- Loctite 410

LAMINERINGSKIT


Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
SLP30011	22-24	1-6
SLP30012	25-27	1-6
SLP30013	28-30	1-6
SLP30014	25-27	7-9
SLP30015	28-30	7-9

Innehåller:

- Hylsadapter
- Epoxy-pasta

HYLSADAPTER

Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
SLX50001	22-24	1-6
SLX50002	25-27	1-6
SLX50003	28-30	1-6
SLX50004	25-27	7-9
SLX50005	28-30	7-9

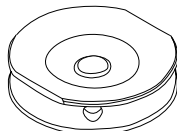


HÄLBULTAR

Art.nr.	Längd	Storlek	Kategori
CM150004	18 mm	6 mm	1-6
CM150005	18 mm	8 mm	7-9


Innehåller:

- Bult
- Bricka

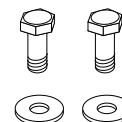

MITTBULT

Art.nr.	Fotstorlek	Skruv	Kategori
SLX30021	22-27	M12	1-6
SLX30022	25-27	M14	7-9
SLX30022	28-30	M14	1-6
SLX30023	28-30	M16	7-9

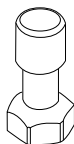


ANTIROTATIONSBULT

Art.nr.	Fotstorlek	Skruv
SLX30005	22-27	M6
SLX30007	28-30	M8

Innehåller:

- Bult
- Bricka

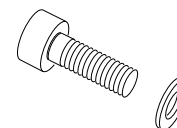

HÄLKILAR – KIT



Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
CM150011	22-30	1-9

Innehåller:

- 3 kilar
- Lim



	Art.nr.	Beskrivning
1.	SLX30006	Inriktningssstift
2.	CM140003	Häldelare
	CM160009	Epoxy-pasta

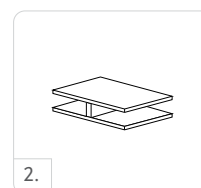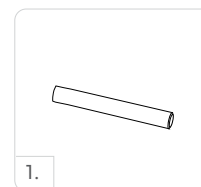


FLEX-SYMES™

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

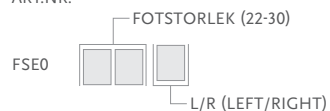

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/Ring
- Flex-Foot Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.


FLEX-FOOT SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FSEL60001	Flex-Foot Sock Small 1 st	22-25	Svart
FSEL60002	Flex-Foot Sock Large 1 st	26-30	Svart
FSEL60001-15	Flex-Foot Sock Small 15 st	22-25	Svart
FSEL60002-15	Flex-Foot Sock Large 15 st	26-30	Svart



SPRÄNGSKISS

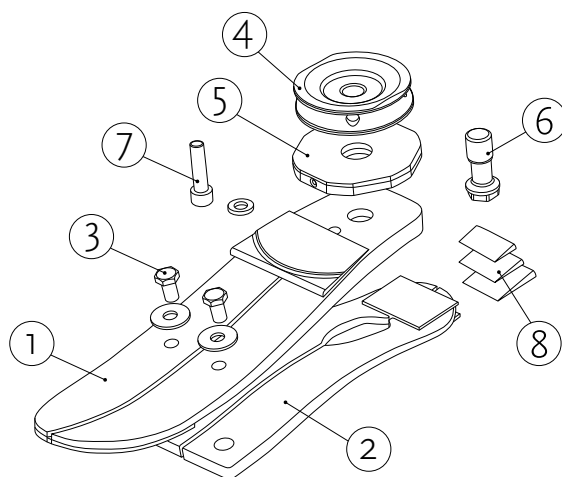

	Beskrivning		Beskrivning
1.	Fotmodul	5.	Inriktningsskit
2.	Häl	6.	Mittbult
3.	Hälbultar	7.	Antirotationsbult
4.	Hylsadapter	8.	Hälskilar - kit

CHOPART



Chopart är tillverkad i 100 % kolfiber och speciellt framtagen för framfotsamputerade som söker funktion och slitstyrka. Levereras med material för anslutning till proteshylsan (väv och epoxy).



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibialt amputerade Lisfranc, Pirogoff, Boyd och delfotsamputerade
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	147 kg

Produktinformation	
Kategori:	1-8
Storlekar:	22-30
Vikt: (Stl. 27)	94 g
Bygghöjd: (Stl. 27)	6 mm




FULL LENGTH
TOE LEVER



WATERPROOF

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR BESTÄLLNING AV KOMPLETT FOT

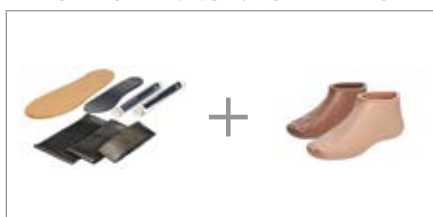

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Impact: Medel	1	2	3	4	5	6	7	8	Special
Impact: Hög	2	3	4	5	6	7	8	Special	Special

Chopart finns i följande storlekar/kategorier:

Stl. 22-24 i kategori 1-5


Stl. 25-26 i kategori 2-6

Stl. 27-28 i kategori 3-7

Stl. 29-30 i kategori 4-8

CHOPART

BYGGHÖJD

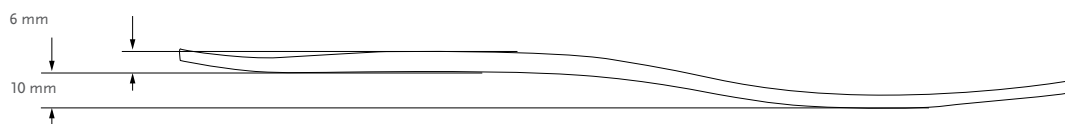

KIT

CHOPART EXKL. FOTKOSMETIK




Innehåller:

- Fotplatta i kolfiber
- Kolfiberväv
- Epoxy
- Gummisula



FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

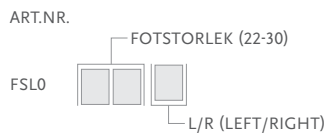

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK

Dras över fotmodulen innan kosmetiken monteras för att skydda kosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knytas fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 st	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 st	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 st	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 st	26-30	Svart



TILLBEHÖR – KOSMETIK

SKOHORN

Specifikt framtaget för Flex-Foot/Pro-Flex protesfötter. Används för att underlätta av- och påtagning samt för att inte skada protesfoten eller kosmetiken vid monteringen/demonteringen.



Art.nr.	Beskrivning
CM100068	Shoe Horn

DUAL DENSITY SHIN FAIRING

Kosmetik med flexibel distal del. Kosmetiken möjliggör full ankelrörlighet utan att påverka fotens funktion.

Fungerar tillsammans med alla Pro-Flex/Flex-Foot protesfötter. Medger rörelse i ankelleden med bibehållen form. Kosmetiken levereras i en storlek. Begränsad bearbetning för höger-/vänsteranpassning. Flamskyddad.

Art.nr.	Storlek
FCX0002	En storlek



SINGLE DENSITY SHIN FAIRING BLOCK – KOSMETIKBLOCK

Art.nr.	Storlek
C-860977	En storlek



- Tillverkat i polyetenskumplast med slutna celler (25 g)
- Flamskyddad

UNDERBENSKOSMETIK Ø 150 X 500 MM VIT

Art.nr.	Beskrivning
20050	För system med ø 30 mm rör. Färdigborrat.
20060	Kosmetikblock. Ej färdigborrat.

Tillverkad i lågviktspolyeten.


CONTINUOUS COSMETIC FOAM – HEL SLANGKOSMETIK

Art.nr.	Förborrat centrumhål
C-880877	ø 50 mm - ø 25 mm
C-880878	ø 60 mm - ø 25 mm
C-880879	ø 80 mm - ø 25 mm


- Universell - passar både höger och vänster
- Tillverkad i polyetenskumplast med öppna celler (60 g)
- Flamskyddad

VADKOSMETIK


Art.nr.	Beskrivning
CM163063	Block 46 cm x 51 cm x 4,5 cm

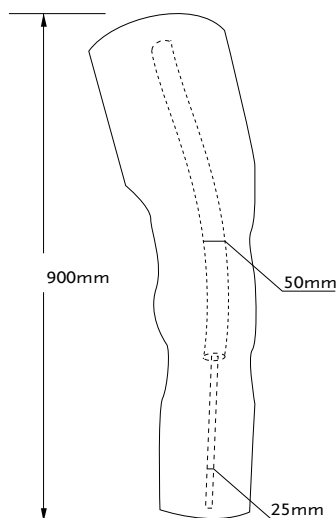

Art.nr. C-880877

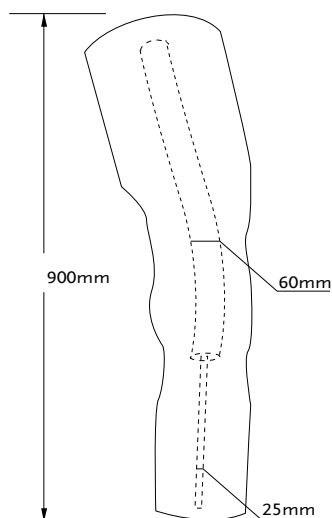

Art.nr. C-880878

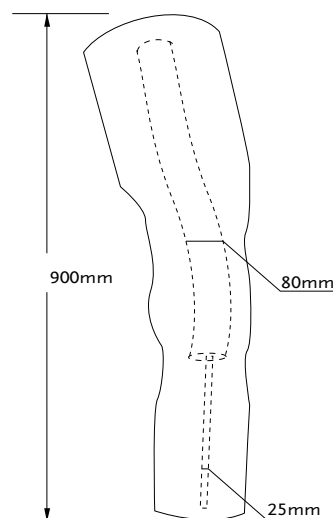


Art.nr. C-880879

TILLBEHÖR – UNITY® RESERVDELAR

RESERVDELAR

	Art.nr.	Beskrivning
1	UTT0005	Unity TT Unity ventil
2	UTF0006	Unity slangsets till TF
3	UTT0001	Unity TT hylsventilsats
4	UTF0001	Unity TF hylsventilsats
5	UTT1103	Unity Ventil Luftfilter fp (10 st)

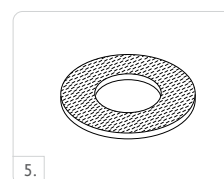

ÖSSUR SPORT SOLUTIONS



CHEETAH® KNEE



CHEETAH® XCEED



FLEX-RUN™



CHEETAH® XCEL



CHEETAH® XTREME



CHEETAH® XTEND



CHEETAH® XPANSE



FLEX-FOOT CHEETAH®



Video: Team Össur
Cheetah Running Feet
3 min 30 sec

CHEETAH® KNEE



UNITY[®]
COMPATIBLE

Cheetah Knee är ett mycket lätt, snabbt och pålitligt polycentriskt löparknä där hydrauliken optimerats för snabb flexion/extension vid joggning och löpning. Den polycentriska designen ger bra stabilitet i stödfasen och smidig övergång från gång till löpning.

- Polycentrisk, 4-axlad, protesknäled, utformad för höga aktivitetsnivåer, till exempel joggning och löpning.
- Hydraulisk svingkontroll stödjer snabb flexion och extension.
- Mjuk extensionsdämpare.
- Låg proximal bygghöjd från knäledsaxeln gör den praktisk till de med långa transfemorala stumpar eller de som genomgått en knäexartikulation.
- Låg bygghöjd.
- Hanpyramid distalt för enklare inriktning.



Brukarinformation

Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Medel till extrem
Max. patientvikt:	100 kg

Produktinformation

Bygghöjd:	108 mm
Vikt:	0.62 kg
Flexion:	110°



MULTI AXIS



HYDRAULIC
CONTROL




MULTI SPEED



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

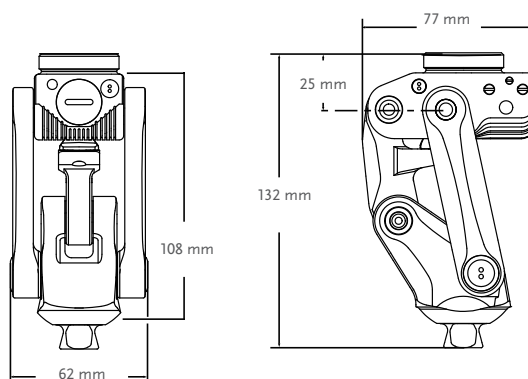

KIT

Art.nr.	Beskrivning
CKN10000	Cheetah Knee

CHEETAH® KNEE

KOMPONENTER / ADAPTRAR TILL CHEETAH KNEE OCH TOTAL KNEE

HYLSADAPTER, 4-ARMAD, GÄNGAD

	Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
1.	A-114040	Rostfritt stål	166 kg	8 mm	8 mm	158 g



Åtdragningsmoment klämbult: 10 Nm

ADAPTER 4-HÅLS. SKRUVAS DIREKT PÅ GÄNGAN PÅ KNÄLEDEN.

	Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
2.	A-122300	Aluminium	125 kg	11 mm	11 mm	70 g



HANPYRAMIDADAPTER

	Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
3.	A-834300	Rostfritt stål	100 kg	-	18 mm*	111 g



*18 mm = när adaptorn är fullt iskruvad i gängorna. Åtdragningsmoment klämbult: 10 Nm.

HANPYRAMIDADAPTER

	Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
3.	A-835300	Titan	166 kg	-	18 mm*	80 g



*18 mm = när adaptorn är fullt iskruvad i gängorna. Åtdragningsmoment klämbult: 10 Nm.

HONPYRAMIDADAPTER

	Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
4.	A-845300	Titan	166 kg	-	26 mm	85 g



Åtdragningsmoment klämbult: 10 Nm. Inställningsskruvar: 15 Nm.



CHEETAH® XPANSE



Cheetah Xpanse är en protesfot med ett stort kolfiberblad utformat för att stå emot de krafter som frigörs under tuffa, explosiva idrottsgrenar såsom t.ex. längdhopp. Den dynamiska formen gör att foten kan böja sig mer aggressivt för att på så sätt skapa en mer kraftfull energiåtergivning. Det långa, platta tåpartiet ger längre markkontaktid före push-off och den böjda designen på foten driver rörelsen framåt.

Nike Spike Pad är spiksulor som har designats exklusivt för Össurs Cheetah-fötter för att ge protesfoten ett bra grepp.



Video: Cheetah Xpanse
Product video
25 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Extrem
Max. patientvikt:	116 kg




WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-7
Storlekar:	Två storlekar per kategori
Vikt:	Storlek Large - 1250 g Storlek small - 830 g
Max. bygghöjd:	Storlek Large - 576 mm Storlek small - 466 mm
Min. bygghöjd:	Storlek Large - 481 mm Storlek small - 379 mm
Adapter:	Anslutningsplatta för laminering

Obs! Bygghöjden är angiven från fotsulan till anslutningsplattans övre kant.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XPANSE

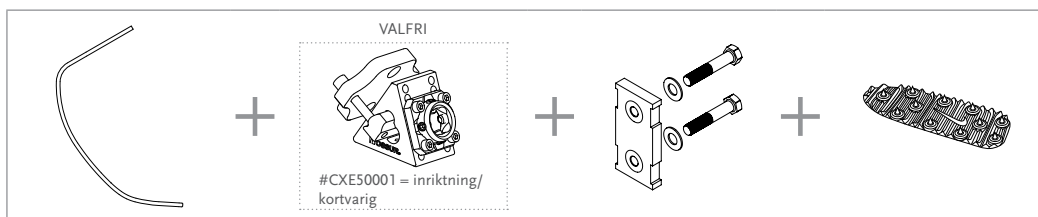


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116
Impact: Extrem	1	2	3	4	5	6	7

CHEETAH® XPANSE

BYGGHÖJD

MED ANSLUTNINGSPLATTA

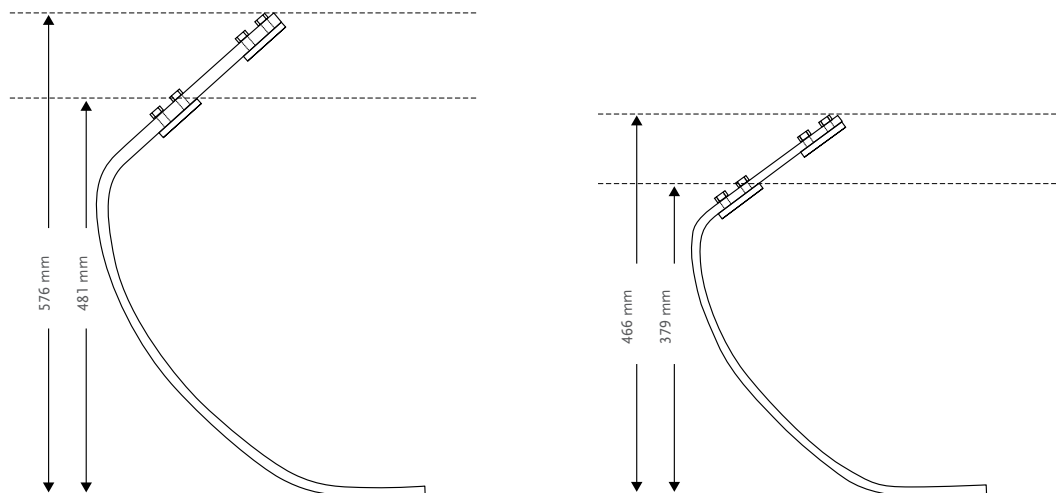

Obs! För Nike Spike Pad 2.0, lägg till 5 mm.

Kompressionen av fjädern är 38 mm vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen (gäller för både Cheetah Xpanse Large och Small).



Video: Cheetah Alignment Setup
2 min 03 sec

KIT

CHEETAH XPANSE KIT

ART.NR.

KATEGORI (1-7)

LARGE:
CXE004

SMALL:
CXE002



Innehåller:

- Cheetah Xpanse fotmodul

OBS! Nike Spike Pad 2.0 #NSS50021 och anslutningsplatta för laminering #FSX50009 ingår ej. Beställs separat.

Cheetah Xpanse ingår ej i trial-programmet.



NIKE SPIKE PAD KIT

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
NSS50021	Nike Spike Pad 2.0*	1-9

*Innehåller:

- 7 mm pyramidspikar
- Skiftnyckel

OBS! Nike Spike Pad har samma spikar som Nikes tränings- och löparskor. Extra spikar kan köpas från Nike. Ett lim måste användas för att binda sulan till foten.



CHEETAH® XPANSE


KOMPONENTER

ANSLUTNINGSPLATTA FÖR LAMINERING

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FSX50009	Anslutningsplatta	1-9

Innehåller:

- Anslutningsplatta
- Inriktningsskilar (2°, 4°, 6°, 8°)
- Fästskruvar
- Lamineringskit

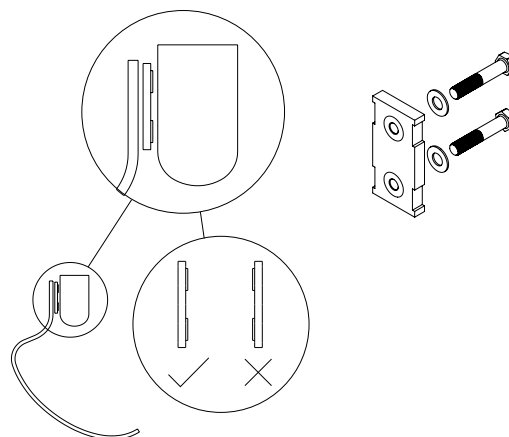


INRIKTNINGSADAPTER XPANSE KIT

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CXE50001	Inriktningsadapter Xpanse Kit	1-6


OBS! Inriktningsadaptern Xpanse ska inte användas för hopp. Strukturellt fel kan uppstå. Välj istället att direkt laminera.

Max. patientvikt: 100 kg. Adaptern är avsedd att underlätta inriktningen av Cheetah Xpanse. Den kan användas tillfälligt för att justera inriktningen till enskilda patienter innan sportfoten fästs mer permanent i hylsan.

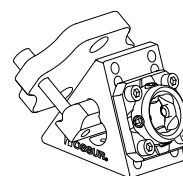


INRIKTNINGSKILAR

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM140515	Inriktningsskilar 2°	Alla
CM140516	Inriktningsskilar 4°	Alla
CM140517	Inriktningsskilar 6°	Alla
CM140518	Inriktningsskilar 8°	Alla

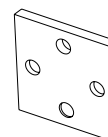

SKRUVSATS FÖR ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Kategori
CM130211	Skrivsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 1/2"	1-9
CM130213	Skrivsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/4"	1-9
CM130214	Skrivsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/8"	1-9
CM130251	Skrivsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1.1"	1-9
CM130252	Skrivsats för anslutningsplatta	3/8 - "24 x 1.2"	1-9

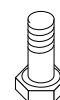

CHEETAH® XCEL



Cheetah Xcel är nästa generations sprintfot från Össur som är speciellt designad för explosiv kortdistanslöpning.

Kolfiberbladet har en mer extrem krökning och den dynamiska formen tillåter foten att flexa och ger en kraftfull energiåtergivning. Ett långt, platt tåparti gör för längre mark-kontaktstid och den plantarflekterade pylonen driver rörelsen framåt.

Nike Spike Pad är spiksulor som har designats exklusivt för Össurs Cheetah-fötter för att ge protesfoten ett bra grepp.



Video: Cheetah Xcel
Product video
30 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Extrem, hög
Max. patientvikt:	45 kg - 147 kg




WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlekar:	Två storlekar per kategori
Vikt:	Stl. Large - 980 g Stl. Small - 820 g
Max. bygghöjd:	Stl. Large - 569 mm Stl. Small - 538 mm
Min. bygghöjd:	Stl. Large - 513 mm Stl. Small - 443 mm
Adapter:	Anslutningsplatta


Obs! Bygghöjden är angiven från fotsulan till anslutningsplattans övre kant.

BESTÄLLNINGSGRUPP

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XCEL MED DYNAMIC 10° KIT

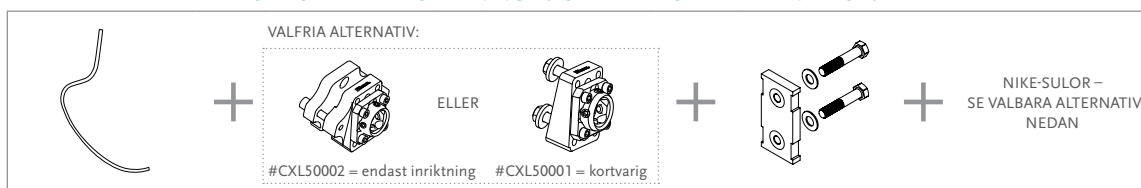

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XCEL MED L-ADAPTER 13° KIT

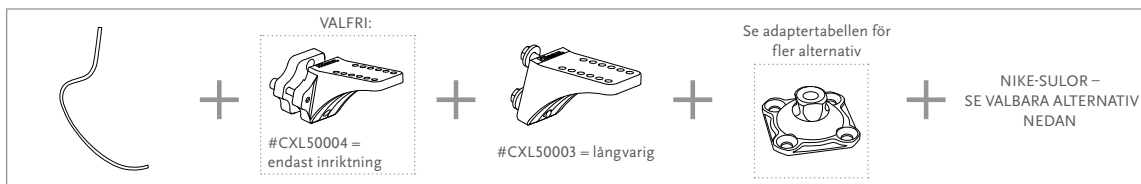

NIKE-SULOR – VALBARA ALTERNATIV





CHEETAH® XCEL

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Extrem	1	2	3	4	5	6	7	8	9

BYGGHÖJD

MED ANSLUTNINGSPLATTA

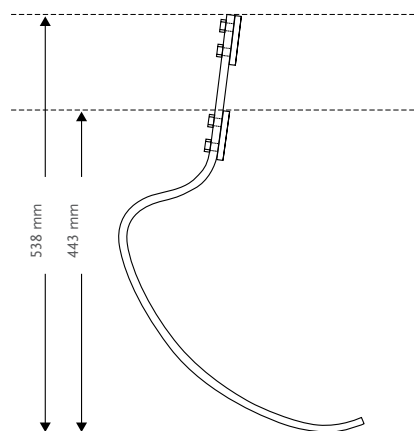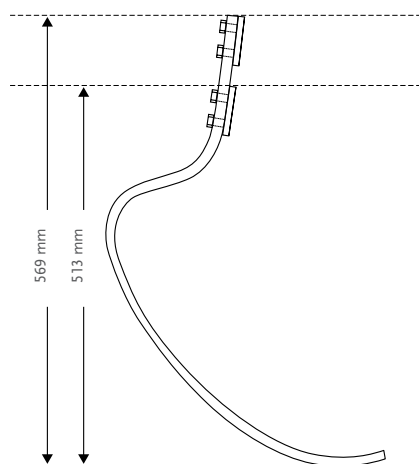

Obs! För Nike Spike Pad 2.0, **lägg till 5 mm**. För Nike Spike SoleX och Nike Traction SoleX, **lägg till 16 mm**.
Kompressionen av fjädern är 38 mm vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen (gäller för både Cheetah Xcel Large och Small).



Video: Cheetah Alignment Setup
2 min 03 sec

KIT

CHEETAH XCEL

ART.NR.

KATEGORI (1-9)

LARGE:
CXL004

SMALL:
CXL002



Innehåller:

- Cheetah Xcel fotmodul

Obs! Nike-sulor och +PluSerien ingår ej. Beställs separat.

Cheetah Xcel ingår ej i trial-programmet.



CHEETAH® XCEL

KOMPONENTER

NIKE-SULOR

	Art.nr.	Beskrivning	Kat.
1.	NSS50021	Nike Spike Pad 2.0*	1-9
2.	NSS50012	Nike Spike SoleX*	1-9
2.	NSS50041	Nike Traction SoleX	1-9
3.	NSS50031	Nike SoleX Attachment kit**	1-9

*Innehåller:

- 7 mm pyramidspikar
- Skiftnyckel

**+PluSerien (+PluSerien lim, blandningsmunstycken och dispenser) måste beställas separat.

OBS! Nike Spike Pad har samma spikar som Nikes tränings- och löparskor.
Extra spikar kan köpas från Nike.



1.



2.




3.




INRIKTNINGSADAPTRAR – CHEETAH

	Art.nr.	Beskrivning	Avsedd användning	Patientaktivitet	Kat.
1.	CXL50002	Dynamic - Adapter 10° kit	Endast inriktning	Gå, jogga	1-6
2.	CXL50001	Bolted - Adapter 10° kit	Kortvarig	Hög aktivitet (inte hopp)	1-6
3.	CXL50004	Dynamic L-Adapter 13° kit	Endast inriktning	Gå, jogga	1-6
4.	CXL50003	Bolted L-Adapter 13° kit	Långvarig	Hög aktivitet	1-6

Max. patientvikt: 100 kg. Adapterarna är avsedda att underlätta inriktningen av Össur sportfötter. De kan användas tillfälligt för att justera inriktningen till enskilda patienter innan sportfoten fästs mer permanent i hylsan. Bolted L-Adapter 13° #CLX50003 kan användas långvarigt. Enhetens livslängd kan inte fastställas eftersom belastningen varierar beroende på sport och patientens aktivitetsnivå.

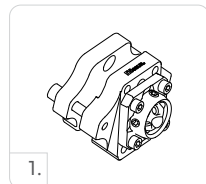

1.

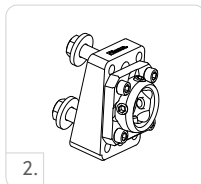


2.



3.



4.

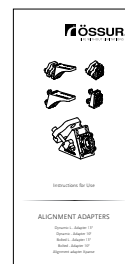

FÄSTVINKEL (L-BRACKET)

	Art.nr.	Beskrivning	Kat.
5.	FSX50005	5° L-Bracket kit	1-6
6.	FSX50006	20° L-Bracket kit	1-6

Innehåller:

- Fästvinkel (5° eller 20°)
- Skruvsats till pyramid
- Kilar för inriktning
- Skruvar för inriktning



5.



6.



ANSLUTNINGSPLATTA FÖR LAMINERING

Art.nr.	Beskrivning	Kat.
FSX50009	Komplett kit inkl. kilar och skruvsats	1-9

Anslutningsplattan måste lamineras direkt på hylsans bakre vägg.
Se till att orientera anslutningsplattan på rätt sätt (se bild till höger).

Innehåller:

- Anslutningsplatta
- Kilar (2°, 4°, 6°, 8°)
- Fästskruvar
- Lamineringskit

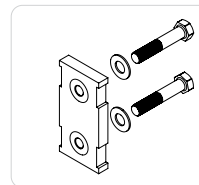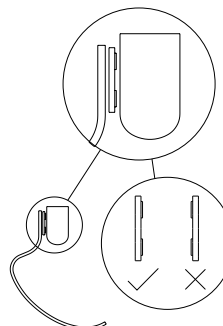

CHEETAH® XCEL


KOMPONENTER

SKRUVSATS FÖR T-STYCKEN

Art.nr.	Längd	Vikt	Storlek	Kategori
CM100055	10 mm	144 g	x 2-1/2"	1-9

Innehåller:

- Skruvar
- Sfäriska brickor
- Muttrar
- Planbricka

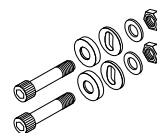


SKRUVSATS FÖR ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Kategori
CM130211	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 1/2"	1-9
CM130213	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/4"	1-9
CM130214	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/8"	1-9
CM130251	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1.1"	1-9
CM130252	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8 - "24 x 1.2"	1-9



INRIKTNINGSKILAR

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM140515	Inriktningsskilar 2°	Alla
CM140516	Inriktningsskilar 4°	Alla
CM140517	Inriktningsskilar 6°	Alla
CM140518	Inriktningsskilar 8°	Alla

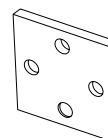

ADAPTRAR

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235100	Titan	23 mm	8.5 mm	54 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235300	Titan	25 mm	10.5 mm	72 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID OCH 8 MM OFFSET

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235400	Titan	23 mm	8.5 mm	65 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245100	Titan	15.5 mm	15.5 mm	64 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245300	Titan	17.5 mm	17.5 mm	76 g



CHEETAH® XCEL

VERKTYG/TILLBEHÖR

+PLUSERIEN DISPENSER

Art.nr.	Beskrivning
FSX80016	+PluSerien 215 ml Dispenser




+PLUSERIEN LIM

Art.nr.	Beskrivning
FSX80015	+PluSerien lim 215 ml - komposit 1 minut
FSX80017	+PluSerien blandningsmunstycken. Innehåller: 6 st munstycken



CHEETAH® XCEED

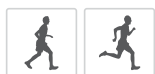

Cheetah Xceed är designad för att överföra funktionaliteten i Össurs högpresterande fotblad till motionsidrottarens behov. En längre tåhävare ger ökad energilagring och energiåtergivning.

Cheetah Xceed är lämplig för transtibialt och transfemoralt amputerade protesanvändare som utövar aktiviteter med hög belastning, till exempel jogging, trail-löpning, långdistanslöpning och triathlon.

Nike Spike Pad är spiksulor som har designats exklusivt för Össurs Cheetah-fötter för att ge protesfoten ett bra grepp.



Video: Cheetah Xceed
Product video
30 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Hög till extrem
Max. patientvikt:	147 kg



WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlekar:	En storlek per kategori
Vikt (Kategori 5):	1000 g
Bygghöjd:	345 mm inkl. Nike Traction SoleX, exkl. pyramid
Adapter:	4-hålsadapter med han-/honpyramid Se adaptertabell för pyramidalternativ.


BESTÄLLNINGSPERMANENSINFORMATION

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XCEED*



*Nike Traction SoleX ingår.

NIKE-SULOR - VALFRIA ALTERNATIV

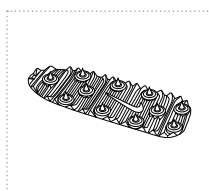

Nike Spike Pad 2.0




Nike Spike SoleX

CHEETAH® XCEED

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Hög till extrem	1	2	3	4	5	6	7	8	9

BYGGHÖJD

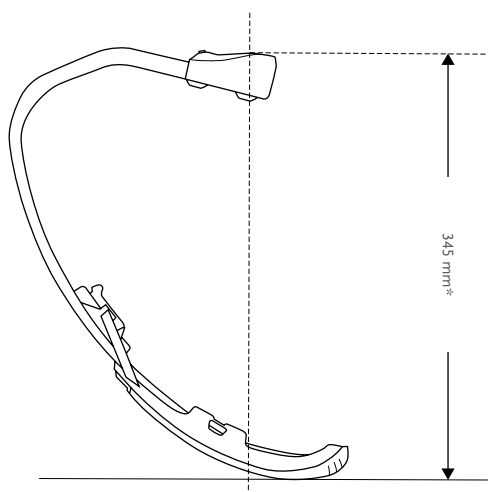

*Bygghöjd inkl. Nike Traction SoleX. Obs! Lägg till bygghöjden för 4-hålsadaptorn får att få den totala bygghöjden.
Kompressionen av fjädern är 30- 40 mm vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen.

KIT

CHEETAH XCEED KIT

ART.NR.	KATEGORI (1-9)
CXD002	

Innehåller:

- Cheetah Xceed fotmodul
- Nike Traction SoleX och Nike SoleX Attachment kit

Cheetah Xceed ingår ej i trial-programmet.



NIKE-SULOR

	Art.nr.	Beskrivning	Kat.
1.	NSS50021	Nike Spike Pad 2.0*	1-9
2.	NSS50012	Nike Spike SoleX*	1-9
2.	NSS50041	Nike Traction SoleX	1-9
3.	NSS50031	Nike SoleX Attachment kit**	1-9

*Innehåller:

- 7 mm pyramidspikar
- Skiftnyckel

**+PluSerien måste beställas separat

OBS! Nike Spike Pad har samma spikar som Nikes tränings- och löparskor. Extra spikar kan köpas från Nike.



CHEETAH® XCEED

ADAPTRAR

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235100	Titan	23 mm	8.5 mm	54 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235300	Titan	25 mm	10.5 mm	72 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID OCH 8 MM OFFSET

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235400	Titan	23 mm	8.5 mm	65 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245100	Titan	15.5 mm	15.5 mm	64 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245300	Titan	17.5 mm	17.5 mm	76 g



VERKTYG/TILLBEHÖR

+PLUSERIEN DISPENSER

Art.nr.	Beskrivning
FSX80016	+PluSerien 215 ml Dispenser




+PLUSERIEN LIM

Art.nr.	Beskrivning
FSX80015	+PluSerien lim 215 ml - komposit 1 minut
FSX80017	+PluSerien blandningsmunstycken. Innehåller: 6 st munstycken



FLEX-RUN™

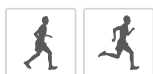

Flex-Run med Nike-sula är konstruerad för att ge hög prestanda till protesanvändare. Össur och Nike har samarbetat för att designa en löparfot från grunden där de dragit nytta av Össur expertis och Nikes erkända kompetens inom sulteknik.

Flex-Run med Nike-sula har ett längre tåparti och ger en effektiv energiåtergivning. Sulans utmärkta grepp ger löparen möjlighet att förbättra sina resultat.

Flex-Run är avsedd för transfemoralt eller transtibialt amputerade protesanvändare som ägnar sig åt krävande aktiviteter såsom jogging, terräng- /långdistanslöpning eller triathlon.

Protesfoten finns i Standard- och LP-utförande (Junior).

Kan fås med han- eller honpyramid. Beställs separat.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Hög till extrem
Max. patientvikt:	130 kg




WATERPROOF


Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlekar:	En storlek per kategori
Vikt (Kategori 5):	400 g 694 g inkl. hanpyramidadapter och Nike-sula
Bygghöjd:	261 mm exkl. Nike-sula 277 mm inkl. Nike-sula
Adapter:	Han-/honpyramidadapter

BESTÄLLNINGSGRUPP

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV FLEX-RUN MED HANPYRAMIDADAPTER

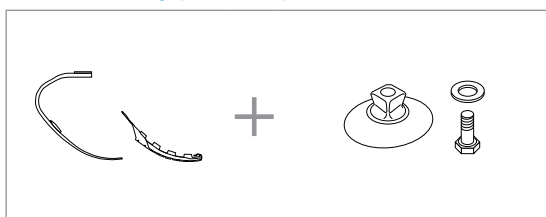

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV FLEX-RUN MED HONPYRAMIDADAPTER

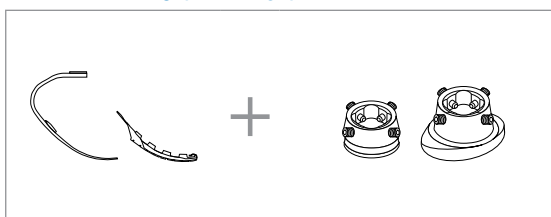


FLEX-RUN™

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	37-44	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130
Impact: Hög till extrem	1	2	3	4	5	6	7	8	9

BYGGHÖJD

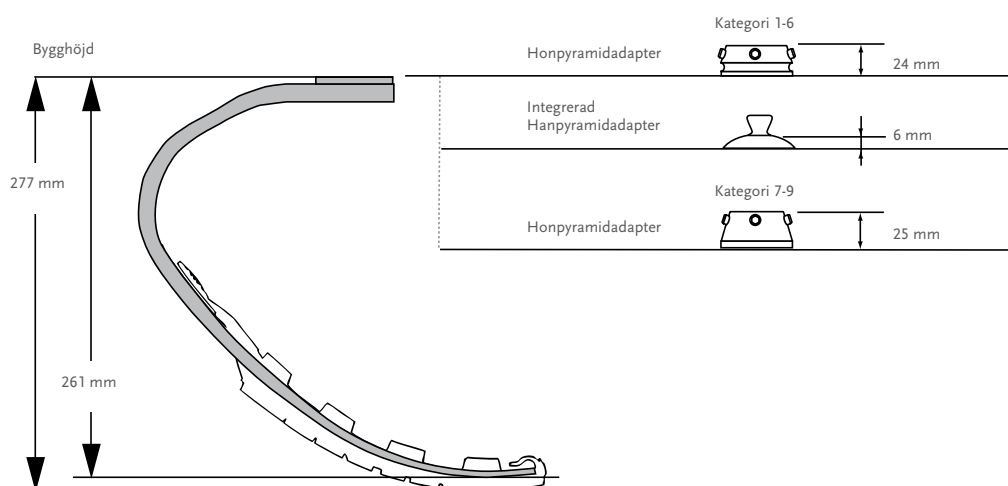

Kompressionen av fjädern är 30-40 mm vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen.

KIT

FLEX-RUN

ART.NR.

KATEGORI (1-9)

FSX008



HI/LO (HIGH/LÅG)


För LP Flex-Run, se Flex-Run Junior.

Innehåller:

- Fotmodul
- Monteringsplatta #FWX4000x (kan levereras monterad/fastlimmad om så önskas)
- Nike-sula
- Bag för Nike-sula

OBS! Adapter ingår ej. Hanpyramid #FWX00030 alternativt honpyramid #CM150161/#CM150162 beställs separat.

OBS! Flex-Run ingår ej i trial-programmet.

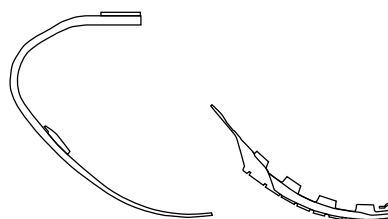

FLEX-RUN™


KOMPONENTER

NIKE-SULA - KOMPLETT KIT

Art.nr.	Storlek	Kategori
CM150163	En storlek	1-9


Innehåller:

- Nike-sula
- Fäste (medaljong)
- Loctite
- Bag till Nike-sula

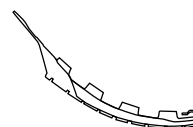

FOTADAPTRAR - KIT

	Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Bultstorlek	Kategori
1.	FWX00030	Hanpyramid	75 g	M10 x 40 mm	1-6
2.	CM150161	Honpyramid	100 g	M10 x 35 mm	1-6
2.	CM150162	Honpyramid	186 g	M12 x 50 mm	7-9

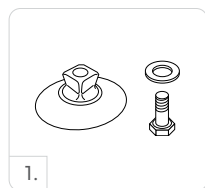

ERSÄTTNINGSBULT TILL #FWX00030

Art.nr.	Storlek	Kategori
CM130221	M10 x 40	1-6

MONTERINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FWX40001	Monteringsplatta	1-6
FWX40002	Monteringsplatta	7-9

FLEX-FOOT CHEETAH®



Cheetah var den första sprintfoten av sitt slag när den lanserades 1996. Allt sedan dess har Cheetah varit förstahandsvalet för professionella idrottare världen över.

Cheetah rekommenderas för långdistanslöpning för transtibialt amputerade som inte har tillräckligt med plats för Flex-Run med Nike-sula. För sprintersträckor rekommenderas Team Össurs favoriter Cheetah Xtreme och Cheetah Xtend.

Beställningsvara. Kontakta oss gärna för rådgivning.




Video: Cheetah Alignment Setup
2 min 03 sec

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Extrem
Max. patientvikt:	147 kg

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlekar:	En storlek per kategori
Vikt:	512 g
Bygghöjd:	411 mm
Adapter:	Anslutningsplatta för laminering eller för T-stycke

BESTÄLLNINGSPERMANENTINFORMATION

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV
FLEX-FOOT CHEETAH

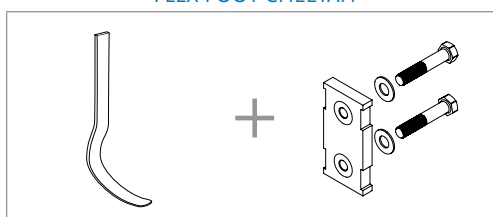


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Extrem	1	2	3	4	5	6	7	8	9

FLEX-FOOT CHEETAH®

CLEARANCE

MED ANSLUTNINGSPLATTA

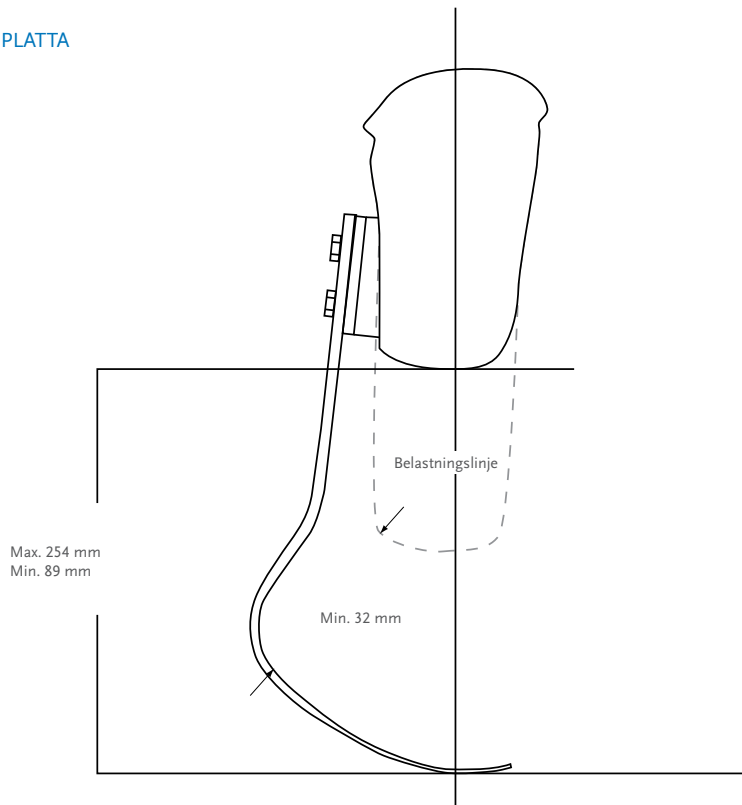

Kompressionen av fjädern är 25 mm vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen

KIT

FLEX-FOOT CHEETAH

ART.NR.

KATEGORI (1-9)

FSX004



Innehåller:

- Flex-foot Cheetah fotmodul

Obs! Flex-Foot Cheetah specialbeställs och ingår ej i trial-programmet.

Anslutningsplatta för laminering #FSX50009 ingår ej. Beställs separat.





ANSLUTNINGSPLATTA FÖR LAMINERING

Art.nr.	Beskrivning	Kat.
FSX50009	Komplett kit inkl. kilar och skruvsats	1-9

Anslutningsplattan måste lamineras direkt på hylsans bakre vägg. Se till att orientera anslutningsplattan på rätt sätt (se bild till höger).

Innehåller:



- Anslutningsplatta
- Kilar (2°, 4°, 6°, 8°)
- Fästskruvar
- Lamineringskit

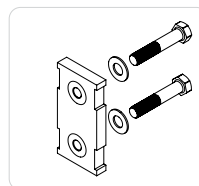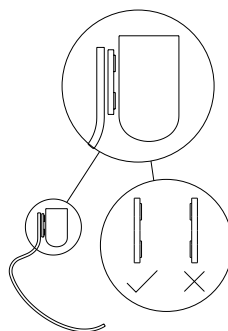

FLEX-FOOT CHEETAH®


KOMPONENTER

	Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Kategori
1.	CM130218	Fästskruvar för anslutningsplatta	5/16"-24 x 1 1/2"	1-6
	CM130213	Fästskruvar för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/4"	7-9
2.	CM130305	Fästskruvar till T-stycke	5/16"-24 x 1 1/2"	1-6
	CM130304	Fästskruvar till T-stycke	3/8"-24 x 1 3/4"	7-9

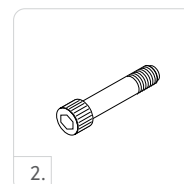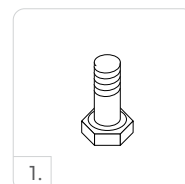

FÄSTVINKEL UTAN BUSSNINGAR

	Art.nr.	Beskrivning	Kategori
1.	FSX40003	5° L-Bracket utan bussningar	1-6
2.	FSX40001	20° L-Bracket utan bussningar	1-6

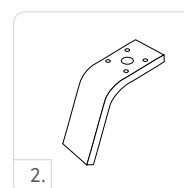

FÄSTVINKEL – KIT


	Art.nr.	Beskrivning	Kategori
1.	FSX50005	5° L-Bracket Kit	1-6
2.	FSX50006	20° L-Bracket Kit	1-6

Innehåller:

- Fästvinkel utan bussningar
- Skruvsats till pyramid
- Inriktningsskilar
- Skruvar för inriktning

SKRUVSATS FÖR T-STYCKEN

Art.nr.	Längd	Vikt	Storlek	Kategori
CM100054	8 mm	108 g	x 2-1/2"	1-6
CM100055	10 mm	144 g	x 2-1/2"	7-9

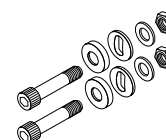


Innehåller:

- Skruvar
- Muttrar
- Sfäriska brickor
- Planbricka


INRIKTNINGSKILAR

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM140502	Inriktningsskilar 2°	Alla
CM140505	Inriktningsskilar 4°	Alla
CM140508	Inriktningsskilar 6°	Alla
CM140511	Inriktningsskilar 8°	Alla

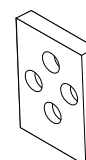

INRIKTNINGSADAPTER

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FSX50007	Alignment Adapter	Alla

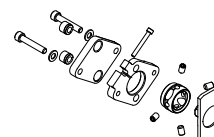

CHEETAH® XTREME



Mästarnas sprinterfot.

Cheetah Xtreme är den optimala sprinterfoten för korta sträckor och en mångfaldig världsrekordhållare. Protesfoten har utvecklats speciellt för snabba, korta sprintersträckor och har ett kolfiberblad som är kraftigare böjt än hos övriga Cheetah-protesfötter. Designen möjliggör explosivitet och bäddar för bästa möjliga "forward dynamic progression".

Nike Spike Pad har utvecklats exklusivt för Cheetah-fötterna och ger ett särskilt bra grepp som optimerats för bladet.

För Cheetah kan man nu få en ny inriktningsadapter med vilken det går snabbare och lättare att justera kolfiberbladets riktning.

Beställningsvara.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Extrem
Max. patientvikt:	147 kg



WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlekar:	En storlek per kategori
Vikt:	918 g
Max. bygghöjd:	530 mm
Min. bygghöjd:	375 mm
Adapter:	Anslutningsplatta för laminering


Obs! Bygghöjd är från fotsulan till mitten av lamineringsplattans nedre skruvhål.

BESTÄLLNINGSGRUPP

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XTREME MED DYNAMIC 10° KIT



FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XTREME MED L-ADAPTER 13° KIT

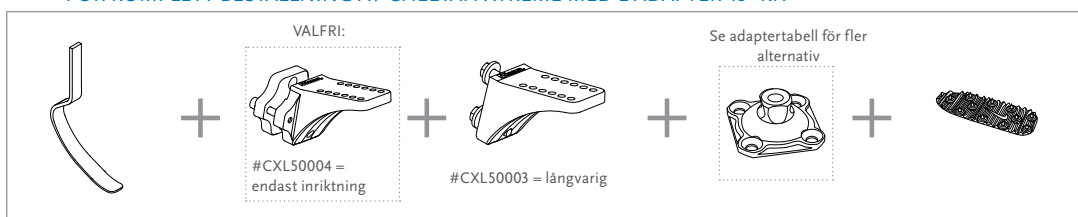


CHEETAH® XTREME

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Extrem	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CLEARANCE

MED ANSLUTNINGSPLATTA

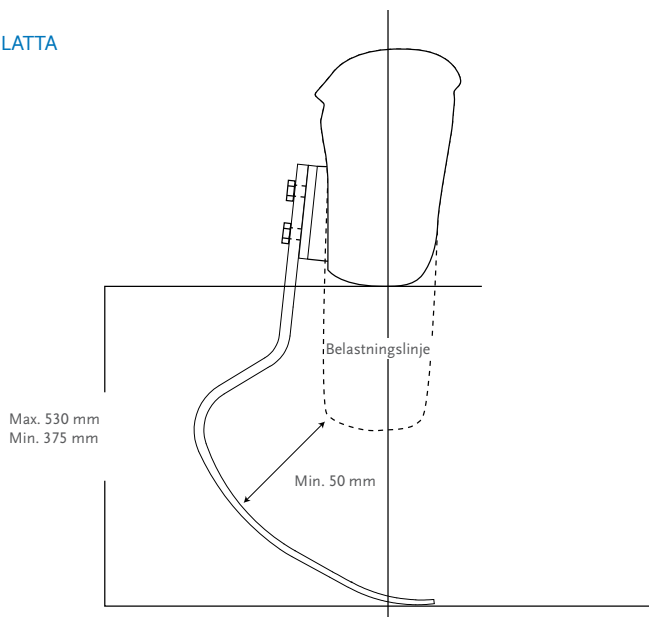

Video: Cheetah Alignment Setup
2 min 03 sec

Obs! För Nike Spike Pad 2.0, lägg till 5 mm.

Kompressionen av fjädern är 38 mm vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen

KIT

CHEETAH XTREME

ART.NR.

KATEGORI (1-9)

FSX003



Innehåller:

- Cheetah Xtreme fotmodul

OBS! Nike Spike Pad Kit 2.0 #NSS50021 och anslutningsplatta för laminering #FSX50009 ingår ej. Beställs separat.

OBS! Cheetah Xtreme ingår ej i trial-programmet.

NIKE SPIKE PAD KIT 2.0

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
NSS50021	Nike Spike Pad Kit 2.0*	1-9



*Innehåller:

- Nike Spike Pad 2.0
- 7 mm pyramidspikar
- Skiftnyckel

OBS! Nike Spike Pad 2.0 har samma spikar som Nikes tränings- och löparskor. Extra spikar kan köpas från Nike.





CHEETAH® XTREME

KOMPONENTER

INRIKTNINGSADAPTRAR – CHEETAH

	Art.nr.	Beskrivning	Avsedd användning	Patientaktivitet	Kat.
1.	CXL50004	Dynamic L-Adapter 13° kit	Endast inriktning	Gå, jogga	1-6
2.	CXL50003	Bolted L-Adapter 13° kit	Långvarig	Hög aktivitet	1-6
3.	CXL50002	Dynamic - Adapter 10° kit	Endast inriktning	Gå, jogga	1-6
4.	CXL50001	Bolted - Adapter 10° kit	Kortvarig	Hög aktivitet (inte hopp)	1-6

Max. patientvikt: 100 kg. Adapterna är avsedda att underlätta inriktningen av Össur sportfötter. De kan användas tillfälligt för att justera inriktningen till enskilda patienter innan sportfoten fästs mer permanent i hylsan. Bolted L-Adapter 13° #CLX50003 kan användas långvarigt. Enhetens livslängd kan inte fastställas eftersom belastningen varierar beroende på sport och patientens aktivitetsnivå.

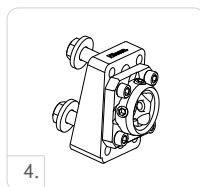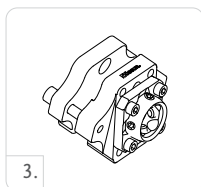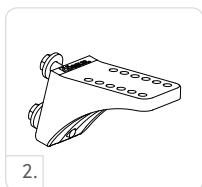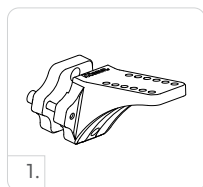

FÄSTVINKEL – KIT

	Art.nr.	Beskrivning	Kategori
1.	FSX50005	5° L-Bracket Kit	1-6
2.	FSX50006	20° L-Bracket Kit	1-6

Innehåller:

- Fästvinkel utan bussningar
- Skruvsats till pyramid
- Inriktningsskilar
- Skruvar för inriktning





ANSLUTNINGSPLATTA FÖR LAMINERING

Art.nr.	Beskrivning	Kat.
FSX50009	Komplett kit inkl. kilar och skruvsats	1-9

Anslutningsplattan måste lamineras direkt på hylsans bakre vägg. Se till att orientera anslutningsplattan på rätt sätt (se bild till höger).

Innehåller:

- Anslutningsplatta
- Kilar (2°, 4°, 6°, 8°)
- Fästskruvar
- Lamineringskit

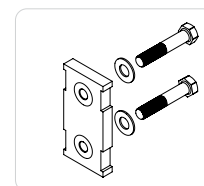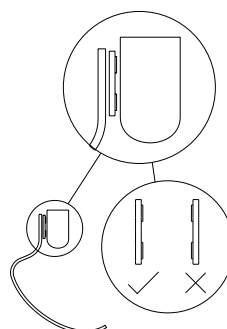


SKRUVSATS FÖR T-STYCKEN

Art.nr.	Längd	Vikt	Storlek	Kategori
CM100055	10 mm	144 g	x 2-1/2"	1-9

Innehåller:

- Skruvar
- Muttrar
- Sfäriska brickor
- Planbricka

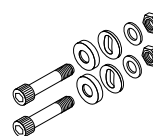


CHEETAH® XTREME

KOMPONENTER


INRIKTNINGSKILAR

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM140515	Inriktningsskilar 2°	Alla
CM140516	Inriktningsskilar 4°	Alla
CM140517	Inriktningsskilar 6°	Alla
CM140518	Inriktningsskilar 8°	Alla

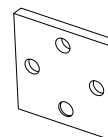

INRIKTNINGSADAPTER

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FSX50007	Alignment Adapter	Alla

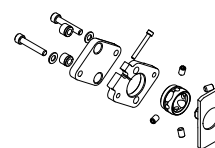

SKRUVSATS FÖR ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Kategori
CM130211	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 1/2"	1-9
CM130213	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/4"	1-9
CM130214	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/8"	1-9
CM130251	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 1/10"	1-9
CM130252	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8 - "24 x 1 1/5"	1-9



ADAPTRAR

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235100	Titan	23 mm	8.5 mm	54 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235300	Titan	25 mm	10.5 mm	72 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID OCH 8 MM OFFSET

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235400	Titan	23 mm	8.5 mm	65 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245100	Titan	15.5 mm	15.5 mm	64 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245300	Titan	17.5 mm	17.5 mm	76 g



CHEETAH® XTEND



Lägg i en hög växel och du får ett responsivt och bekvämt lopp från början till slut.

Cheetah Xtend är perfekt för längre sprintsträckor och medeldistanslöpning (400-5000 m). Högeffektivt kolfiberblad med kontinuerlig kurva mot tån för jämn löpning/gång. Längre, plattare tåparti ger förbättrad stegavveckling medan den plantarflexade pylonen ger bättre framåtprogression.

Nike Spike Pad har utvecklats exklusivt för Cheetah-fötterna och ger ett särskilt bra grepp som optimerats för bladet.

För Cheetah kan man nu få en ny inriktningsadapter med vilken det går snabbare och lättare att justera bladets riktning.

Beställningsvara.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Impact:	Extrem
Max. patientvikt:	147 kg



WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlek:	En storlek per kategori
Vikt:	750 g
Max. bygghöjd:	451 mm
Min. Bygghöjd:	330 mm
Adapter:	Anslutningsplatta

Obs! Bygghöjden är från fotsulan till mitten av lamineringsplattans lägre skruvhål.

BESTÄLLNINGSGRUPP

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XTEND MED DYNAMIC 10° KIT



FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV CHEETAH XTEND MED L-ADAPTER 13° KIT




CHEETAH® XTEND

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Extrem	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CLEARANCE

MED ANSLUTNINGSPLATTA

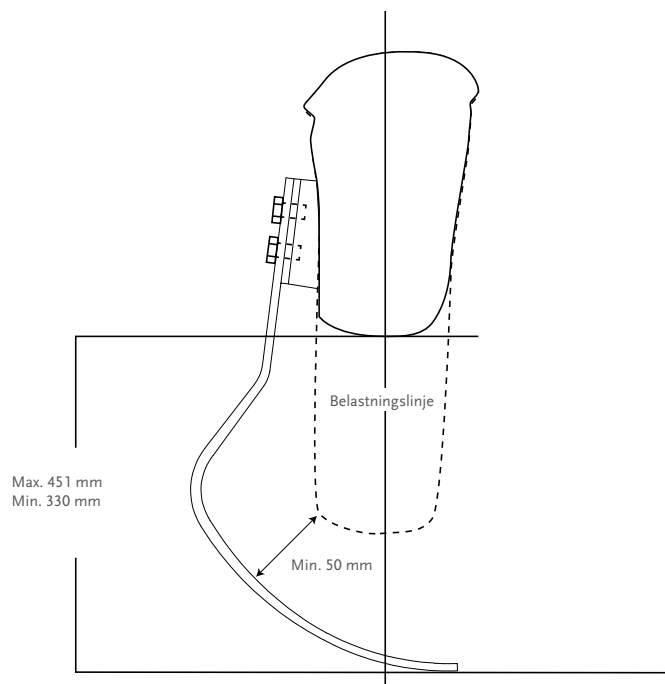

Obs! För Nike Spike Pad 2.0, **lägg till 5 mm.**

Kompressionen av fjädern är **38 mm** vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen.

KIT

CHEETAH XTEND KIT

ART.NR.

KATEGORI (1-9)

FSX006




Innehåller:

- Cheetah Xtend fotmodul

OBS! Nike Spike Pad Kit 2.0 och anslutningsplatta för laminering #FSX50009 ingår ej. Beställs separat.

OBS! Cheetah Xtend ingår ej i trial-programmet.

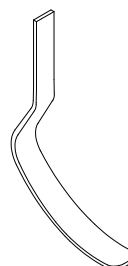

NIKE SPIKE PAD KIT 2.0

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
NSS50021	Nike Spike Pad Kit 2.0*	1-9

*Innehåller:

- Nike Spike Pad 2.0
- 7 mm pyramidspikar
- Skiftnyckel

OBS! Nike Spike Pad 2.0 har samma spikar som Nikes tränings- och löparskor. Extra spikar kan köpas från Nike.



CHEETAH® XTEND


KIT

ANSLUTNINGSPLATTA FÖR LAMINERING

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FSX50009	Anslutningsplatta	1-9

Innehåller:






- Anslutningsplatta
- Inriktningsskilar (2°, 4°, 6°, 8°)
- Fästskruvar
- Lamineringskit

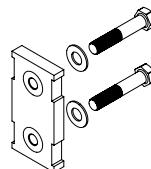

INRIKTNINGSADAPTRAR – CHEETAH

	Art.nr.	Beskrivning	Avsedd användning	Patientaktivitet	Kat.
1.	CXL50004	Dynamic L-Adapter 13° kit	Endast inriktning	Gå, jogga	1-6
2.	CXL50003	Bolted L-Adapter 13° kit	Långvarig	Hög aktivitet	1-6
3.	CXL50002	Dynamic - Adapter 10° kit	Endast inriktning	Gå, jogga	1-6
4.	CXL50001	Bolted - Adapter 10° kit	Kortvarig	Hög aktivitet (inte hopp)	1-6

Max. patientvikt: 100 kg. Adapterna är avsedda att underlätta inriktningen av Össur sportfötter. De kan användas tillfälligt för att justera inriktningen till enskilda patienter innan sportfoten fästs mer permanent i hylsan. Bolted L-Adapter 13° #CLX50003 kan användas långvarigt. Enhetens livslängd kan inte fastställas eftersom belastningen varierar beroende på sport och patientens aktivitetsnivå.

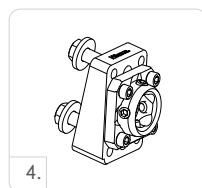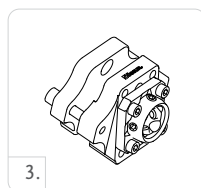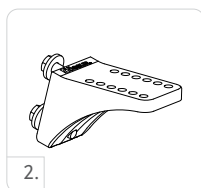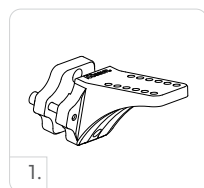
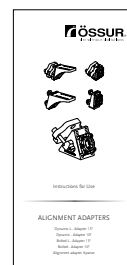


FÄSTVINKEL – KIT

	Art.nr.	Beskrivning	Kategori
5.	FSX50005	5° L-Bracket Kit	1-6
6.	FSX50006	20° L-Bracket Kit	1-6

Innehåller:

- Fästvinkel utan bussningar
- Skruvsats till pyramid
- Inriktningsskilar
- Skruvar för inriktning

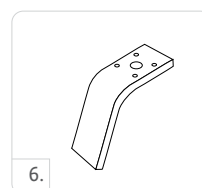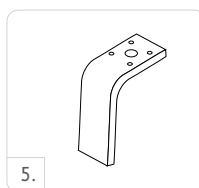


SKRUVSATS FÖR T-STYCKEN

Art.nr.	Längd	Vikt	Storlek	Kategori
CM100055	10 mm	144 g	x 2-1/2"	1-9

Innehåller:

- Skruvar
- Muttrar
- Sfäriska brickor
- Planbricka

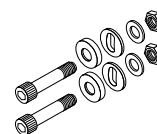


CHEETAH® XTEND

KIT


INRIKTNINGSKILAR

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM140515	Inriktningskilar 2°	Alla
CM140516	Inriktningskilar 4°	Alla
CM140517	Inriktningskilar 6°	Alla
CM140518	Inriktningskilar 8°	Alla

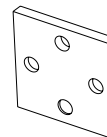

INRIKTNINGSADAPTER

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FSX50007	Alignment Adapter	Alla

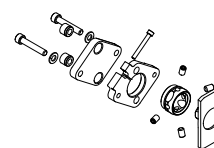

SKRUVSATS FÖR ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Kategori
CM130211	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 1/2"	1-9
CM130213	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/4"	1-9
CM130214	Skrufsats för anslutningsplatta	3/8"-24 x 1 3/8"	1-9



ÖSSUR JUNIOR SOLUTIONS



ICEROS[®] JUNIOR



TOTAL KNEE[®] JUNIOR



VARI-FLEX[®] JUNIOR



FLEX-FOOT[®] JUNIOR



CHEETAH[®] JUNIOR



CHEETAH[®]
XPLORE JUNIOR



FLEX-RUN[™] JUNIOR



JUNIOR ADAPTRAR

ÖSSUR JUNIOR SOLUTIONS

INTRODUKTION

Barnens säkerhet och välbefinnande är av högsta prioritet. Alla produkter i Junior Solution-serien har designats för att hantera barns karaktäristiska rörelsemönster och för att passa just deras specifika förutsättningar.

Össur Junior Solution erbjuder en avancerad och komplett uppsättning av proteskomponenter för aktiva barn och ungdomar som är transfemoralt och transtibialt amputerade.


Den första produktlinjen är specifikt designad för barn i åldrarna 5-12 år och innehåller väl beprövad silikon- och komposit-teknologi för att kunna erbjuda bästa möjliga prestanda.

ICEROSS STABILO® JUNIOR LOCKING WAVE

Iceross Stabilo Junior Locking-liner med Wave är specifikt designad för att ge barn en bekväm och stabil liner.

Linern ger barnen den stabilitet och komfort som behövs för att kunna delta i dagliga aktiviteter med hög belastning. Active Skin Care-ingredienser är integrerade i silikonmaterialet.

Össur rekommenderar att Iceross Stabilo Junior Locking Wave används tillsammans med Icelock® 700.

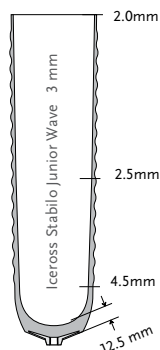

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Linerinformation	
Storlekar:	12, 14, 16, 18.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



WAVE

ICEROSS STABILO JUNIOR LOCKING WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-8301XX	3 mm	Locking	10 cm


XX = storlek

ICEROSS DERMO® JUNIOR LOCKING WAVE

Iceross Dermo Junior Locking-liner med Wave ger barn med känslig hud den komfort och det skydd mot belastningar som behövs för att kunna delta i medelhöga, dagliga aktiviteter.

Active Skin Care-ingredienser är integrerade i silikonmaterialet.

Össur rekommenderar att Iceross Dermo Junior Locking Wave används tillsammans med Icelock® 700.

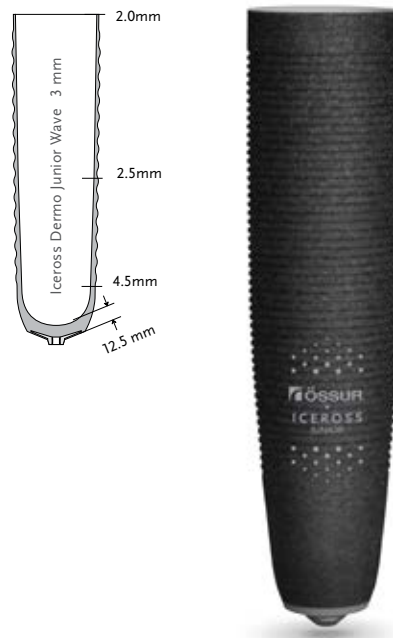

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Linerinformation	
Storlekar:	12, 14, 16, 18.
Profil:	3 mm
Matrix:	10 cm

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN
CARE



SILKEN INNER
SURFACE



WAVE

ICEROSS DERMO JUNIOR LOCKING WAVE

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-8302XX	3 mm	Locking	10 cm

XX = storlek

VARI-FLEX® JUNIOR

Vari-Flex Junior är designad för barn och tonåringar och ger komfort, dynamik och god energiåtergivning.

Vari-Flex Junior väger lite, är enkel att montera och har en diskret profil som enkelt kan försees med kosmetik.

OBS! Vari-Flex Junior i kategori 4 använder ø 30 mm:s anslutning.



Video: Prosthetic feet for children
4 min 11 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Max. patientvikt:	55 kg



FULL LENGTH TOE
LEVER



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



SANDAL TOE



WEATHERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-4
Storlekar:	16-24
Vikt: (Storlek 18)	350 g inkl. socka och fotkosmetik
Bygghöjd: (Storlek 18)	120 mm
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Integrerad hanpyramidadapter För kat. 1-3; använd Junior-pyramider; För kat. 4; använd pyramider för vuxna


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	15-24	25-34	35-45	46-55
16	1	N/A	N/A	N/A
17	1	N/A	N/A	N/A
18	1	2	N/A	N/A
19	1	2	3	N/A
20	N/A	2	3	4
21	N/A	2	3	4
22	N/A	2	3	4
23	N/A	2	3	4
24	N/A	N/A	3	4

Kategorierna ovan gäller endast Vari-Flex Junior. För hög impact/sportaktiviteter, överväg andra junior-fötter såsom Cheetah Xplore Junior, Flex-Run Junior och Cheetah Junior.

VARI-FLEX® JUNIOR

BYGGHÖJD

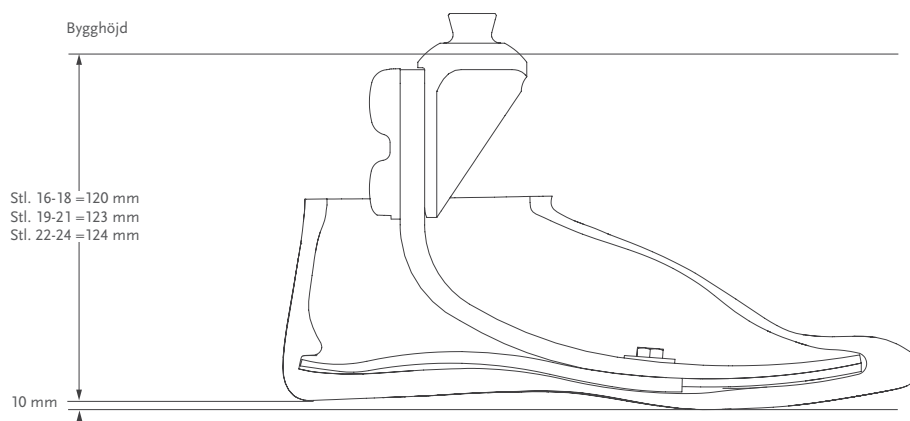

KIT

VARI-FLEX JUNIOR INKL. HANPYRAMID, EXKL. FOTKOSMETIK



Innehåller:

- Fotmodul inkl. hanpyramidadapter
- Hälkil


KOMPONENTER

JUNIOR HÄLKIL – KIT

Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
CM150017	16-24	Alla

Innehåller:

- 1 kil
- lim

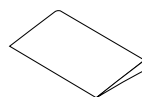


VARI-FLEX® JUNIOR

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

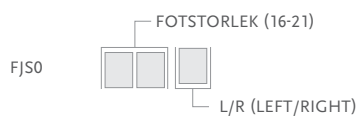


Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock

*För brun kosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FOTKOSMETIK, BEIGE OCH BRUN

ART.NR.

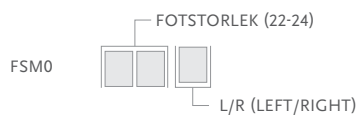

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock

*För brun kosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT SOCK

Art.nr.	Beskrivning	Storlek
FCX63008	Flex-Foot Sock	16-24



FLEX-FOOT® JUNIOR

Flex-Foot Junior ger den viktiga energiåtergivning som barn behöver. Carbon X® Active-hälen lagrar energi och absorberar stötar medan fullängdsfoten ger stabilitet och möjliggör jämn steglängd.

Foten är en fullängdsfot med låg profil och sandaltå, integrerad hanpyramid och energilagrande fotmodul. Genom fotens utformning erhålls progressiva egenskaper som gör att den anpassar sig till barns varierande aktiviteter och rörelsemönster.



Video: Prosthetic feet for children
4 min 11 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Max. patientvikt:	45 kg



FULL LENGTH TOE
LEVER



SANDAL TOE



WEATHERPROOF


Produktinformation	
Kategori:	1-3
Storlekar:	Stl. 16-17, kat. 1 Stl. 18-19, kat. 1-2 Stl. 20-21, kat. 2-3
Vikt: (Stl. 19)	288 g
Bygghöjd: (Stl. 19)	46 mm
Hälhöjd:	10 mm
Adapter:	Integrerad hanpyramidadapter

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	15-24	25-34	35-45
Stl. 16	1	N/A	N/A
Stl. 17	1	N/A	N/A
Stl. 18	1	2	N/A
Stl. 19	1	2	N/A
Stl. 20	N/A	2	3
Stl. 21	N/A	2	3

OBS! Kategorierna ovan gäller endast för Flex-Foot Junior.


BYGGHÖJD

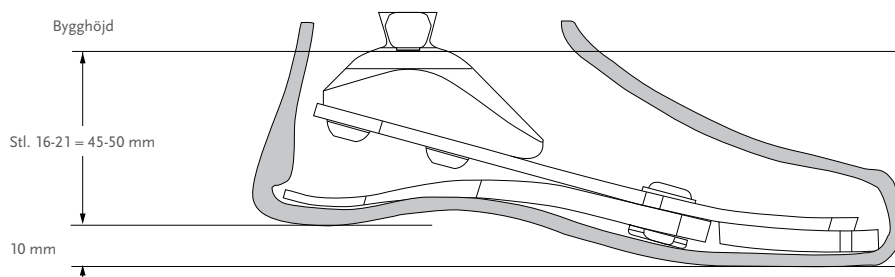

FLEX-FOOT® JUNIOR


KIT

FLEX-FOOT JUNIOR

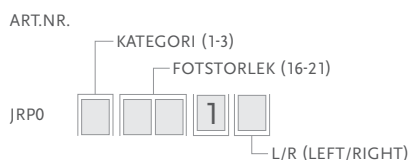

Innehåller:


- Tåkudde
- Fotmodul
- Hälmodul
- Hälbultar
- Hälkilar
- Hanpyramidadapter

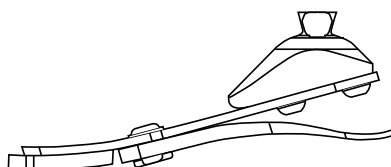

KOMPONENTER

JUNIOR HÄLKIL KIT


Art.nr.	Fotstorlek	Kategori
CM150017	16-21	Alla

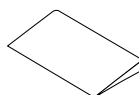

Innehåller:

- 1 kil
- lim

FOTKOSMETIK

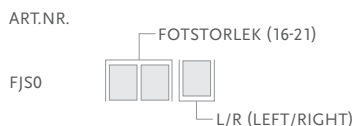

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Flex-Foot Sock

*För brun kosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT SOCK

Art.nr.	Beskrivning	Storlek
FCX63008	Flex-Foot Sock	16-21



CHEETAH® JUNIOR

Specialbyggd, högpresterande fot i kolfiber, primärt designad för idrottsaktiviteter. Avsedd för både transtibialt och transfemoralt amputerade. Den ansluter posterior till hylsan, vilket gör den till en följsam, stark och påvisat pålitlig fot för de barn som vill idrotta.

Nike-sulan är utformad för att ge stabilitet och en mjuk, naturlig roll-over.



Video: Prosthetic feet for children
4 min 11 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Max. patientvikt:	55 kg



WATERPROOF


Produktinformation	
Kategori:	1-4
Storlekar:	En storlek
Vikt:	232 g exkl. Nike-sula.
Vikt, Nike-sula:	114 g
Bygghöjd:	Max: 307 mm exkl. Nike-sula Min: 182 mm exkl. Nike-sula
Adapter:	Anslutningsplatta för laminering

VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	15-24	25-34	35-45	46-55
Kategori	1	2	3	4

CHEETAH® JUNIOR

BYGGHÖJD

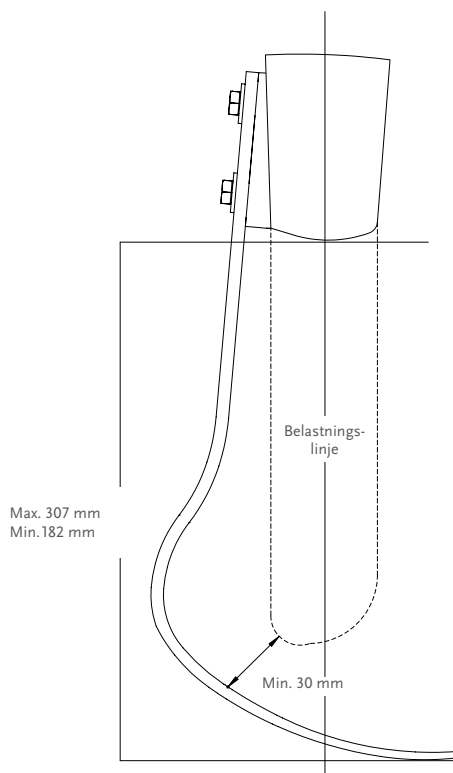

Obs! För Nike-sula, **lägg till 10 mm**. Kompressionen av fjädern är 15 mm vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen.

KIT


CHEETAH JUNIOR*

ART.NR.

KATEGORI (1-4)

CJX0

00

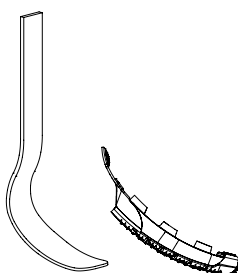


NIKE-SULA, JUNIOR

Art.nr.	Storlek	Kategori
CM150164	En storlek	1-4

Innehåller:

- Nike-sula
- Fäste (medaljong)
- Loctite
- Innersula
- Bag till Nike-sula

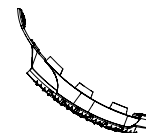


*Inkl. Nike-sula.

Anslutningsplatta - kit #CHX50001 ingår ej. Beställs separat.

KOMPONENTER

Art.nr.	Beskrivning
CHX50001	Anslutningsplatta - kit

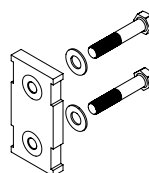

CHEETAH® XPLORE JUNIOR

En specialbyggd hybridkolfiberfot som är avsedd för barn och för både sport och vardag.

Cheetah Xplore Junior är utmärkt för de barn som behöver en protes som både ger extra flexibilitet vid gång och fungerar bra vid löpning. Cheetah Xplore förenar den beprövade funktionen från vår löparfot Cheetah med en häl för vardagsanvändning



[Video: Prosthetic feet for children](#)
4 min 11 sek



[Video: Cheetah Xplore Junior - Alignment Setup](#) (2 min 2 sek)

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Max. patientvikt:	55 kg
   FULL LENGTH TOE LEVER ACTIVE TIBIAL PROGRESSION WATERPROOF	

Produktinformation	
Kategori:	1-4
Storlekar:	En storlek
Vikt:	312 g
Bygghöjd:	Max: 311 mm Min: 185 mm
Adapter:	Anslutningsplatta för laminering


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	15-24	25-34	35-45	46-55
Kategori	1	2	3	4



CHEETAH® XPLORE JUNIOR

BYGGHÖJD

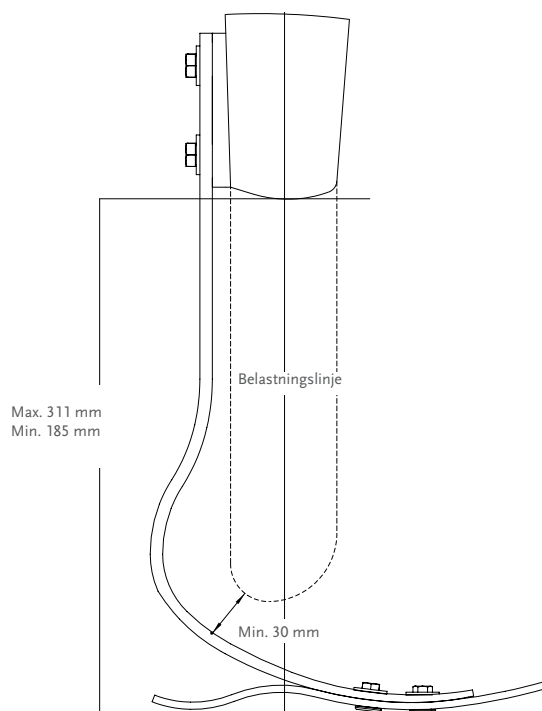

KIT

CHEETAH XPLORE JUNIOR


ART.NR.

KATEGORI (1-4)

CHX0



24

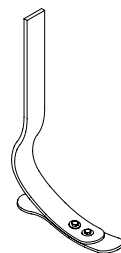


*Anslutningsplatta - kit #CHX50001 ingår ej. Beställs separat.

KOMPONENTER


ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning
CHX50001	Anslutningsplatta - kit

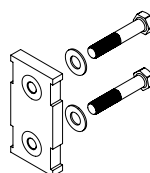

FOTPLATTA TILL CHEETAH XPLORE JUNIOR

Art.nr.	Beskrivning
CHX50002	Fotplatta till kat. 1 & 2
CHX50003	Fotplatta till kat. 3 & 4

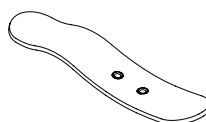

CHEETAH® XPLORE JUNIOR

FOTKOSMETIK

ART.NR.

FOTSTORLEK (18-24)

FSL0



L/R (LEFT/RIGHT)



Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta/ring
- Flex-Foot Sock

*För brun kosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT SOCK

Art.nr.	Beskrivning	Storlek
FCX63008	Flex-Foot Sock	18-24



FLEX-RUN™ JUNIOR

En specialdesignad lösning för barn. Följsamheten i vertikalled och den effektiva energiåtergivningen är "ett måste" för alla aktiva barn.

Flex-Run Junior är utformad för att vara en mycket flexibel protesfot med extremt god dämpning, vilket gör att den passar perfekt för olika lekar för både transfemoralt och transtibialt amputerade barn.

Nike-sulan är utformad för att ge en ökad stabilitet och en mjuk, naturlig rollover.

Kan fås med han- och honpyramid. Beställs separat.



Video: Prosthetic feet for children
4 min 11 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, transtibial
Max. patientvikt:	84 kg



WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-6
Storlekar:	En storlek
Vikt:	336 g
Bygghöjd:	Min: 200 mm
Adapter:	Han- eller honpyramid


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	15-24	25-34	35-45	46-55	57-67	68-84
Kategori	1	2	3	4	5	6

OBS! Alla Flex-Run JR-fötter levereras med ett förborrat 10,5 mm hål proximalt för adaptermontering. För fötter i kategori 1-3 med hanpyramid levereras en junior-pyramid som monteras med en M8-bult. Tillsammans med monteringsplattan, och genom att applicera rekommenderat moment om 28Nm, så säkerställs att adaptorn sitter på ett säkert sätt.

FLEX-RUN™ JUNIOR

BYGGHÖJD

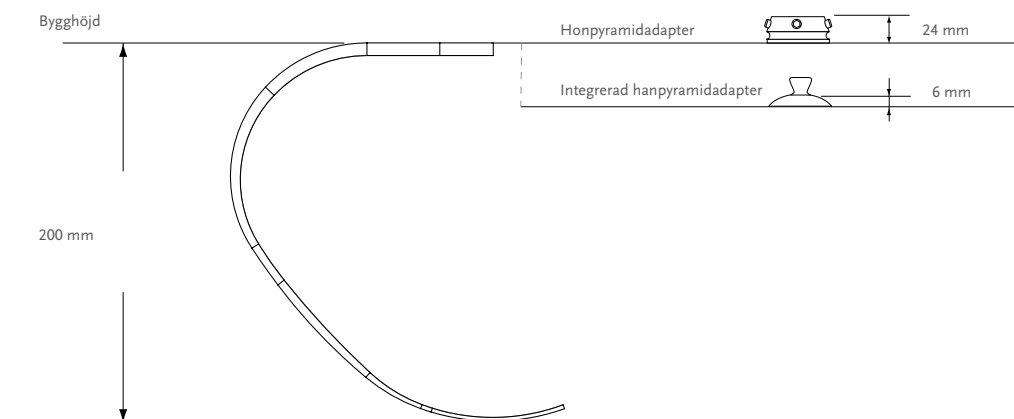

Obs! För Nike-sula, **lägg till 10 mm. Kompressionen av fjädern är 10-20 mm** vilket också bör tas hänsyn till vid tillverkningen.


KIT

FLEX-RUN

ART.NR.

KATEGORI (1-6)

FSX007

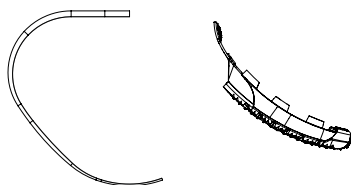


NIKE-SULA, JUNIOR

Art.nr.	Storlek	Kategori
CM150164	En storlek	1-6


Innehåller:

- Nike-sula
- Fäste (medaljong)
- Loctite
- Innersula
- Bag till Nike-sula

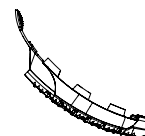

KOMPONENTER

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FWX40001	Monteringsplatta	1-6

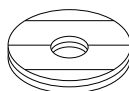



FOTADAPTRAR, SET

	Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Bultstorlek	Kategori
1.	FWX00031	Hanpyramid, Junior - fotadapterset	30 g	M8 x 30 mm	1-3
2.	FWX00030*	Hanpyramid för vuxna - fotadapterset	80 g	M10 x 40 mm	3-6 för barn (1-6 för vuxna)
3.	CM150161*	Honpyramid för vuxna - fotadapterset	100 g	M10 x 35 mm	3-6 för barn (1-6 för vuxna)

*Han- och honpyramid för vuxna används även till Flex-Run Junior

ERSÄTTNINGSBULT

Art.nr.		Storlek	Kategori
CM130221	Ersättningsbult till #FWX00030	M10 x 40 mm	1-6
CM130103	Ersättningsbult till #CM150161	M10 x 35 mm	1-6
CM130237	Ersättningsbult till #FWX00031	M8 x 30 mm	1-3

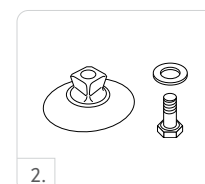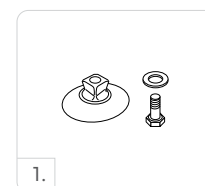

TOTAL KNEE® JUNIOR

Protesknäled för barn. Ger yngre protesanvändare trygghet och möjlighet att redan tidigt utveckla ett naturligt gångmönster. Total Knee Junior är enkel att förse med kosmetik och tillåter upptill 160° knäflexion.

Total Knee Junior efterliknar barns naturliga rörelsemönster och passar olika aktiviteter även på en hög nivå, såsom att gå, springa, sitta, sitta på huk och knäböja.

- Polycentrisk, 7-axlad protesknäled med ett geometriskt låssystem.
- Justerbar stance flexion.
- Justerbar extensionsförstärkare.
- Låg proximal bygghöjd från knäledsaxeln och möjlighet att använda olika typer av proximal anslutning
- $\varnothing$ 22 mm:s röranslutning

OBS! Vid inpassning av Total Knee 1100 till barn med höftleds-exartikulation skall extensionsfjäder art.nr. 1170 monteras.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Max. patientvikt:	45 kg

Produktinformation	
Bygghöjd:	156 mm
Vikt:	395 g
Flexion:	Stopp vid 160°



MULTI AXIS



INCREASED
GROUND
CLEARANCE



GEOMETRIC
LOCK



MECHANICAL
CONTROL



SINGLE SPEED



EXTENSION
ASSIST





ADJUSTABLE
STANCE
FLEXION



SOCKET
CONNECTOR
ADAPTATION

BYGGHÖJD

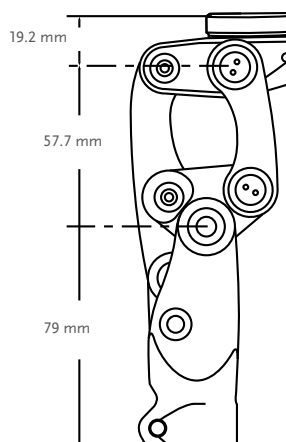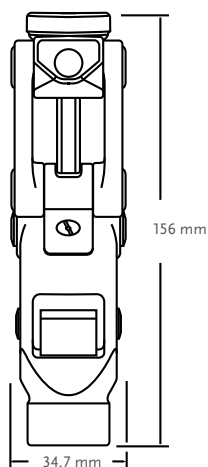

KIT

Art.nr.	Beskrivning
1100	Total Knee Junior

TOTAL KNEE® JUNIOR

KOMPONENTER

4-HÅLSADAPTER FÖR BARN - TESTAD FÖR 45 KG

Ett alternativ till barn som amputerats med knäexartikulation.

Art.nr.	Beskrivning	Material	Bygghöjd	Vikt	
AJ-122300	4-hålsadapter för barn	Aluminium	8.5 mm	36 g	



HANPYRAMIDADAPTER FÖR BARN - TESTAD FÖR 60 KG

Avsedd för de som behöver ytterligare inriktningsmöjligheter.

Art.nr.	Beskrivning	Material	Bygghöjd	Vikt	
AJ-835300	Hanpyramidadapter för barn	Titan	14 mm	35 g	



HYLSADAPTER, 4-ARMAD, FÖR BARN - TESTAD FÖR 60 KG

Art.nr.	Beskrivning	Material	Bygghöjd	Vikt	
AJ-114140	Hylsadapter, 4-armad, för barn	Rostfritt stål	10 mm	77 g	



JUNIOR STÖTDÄMPARE – KIT

Art.nr.	Beskrivning
1100-Kit	Ett komplett set med stötdämpare och shims

Innehåller:

- Stötdämpare x 4 (1 av varje typ)
- 0.38 mm Shim x 1
- 0.76 mm Shim x 1


TOTAL KNEE® JUNIOR

KOMPONENTER

EXTENSIONSFÖRSTÄRKARE

Extensionsförstärkaren begränsar hälluppkast vid snabbare gång och högre aktivitet.

Art.nr.	Beskrivning
1105-A	Begränsar hälluppkast och hjälper knät att gå i fullt utsträckt läge

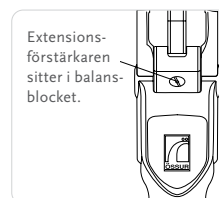

EXTENSIONSFJÄDER


Art.nr.	Beskrivning	Färg	Hårdhet
1170	Extensionsfjäder, komplett, med gul fjäder. Blå fjäder bifogas.	Gul	Normal
		Blå	Fast

Extra trygghet! I en period av träning och tillvänjning kan vi rekommendera en extensionsfjäder för att protesanvändaren ska känna extra trygghet. Extensionsfjädern monteras enkelt och kan sedan tas bort när protesanvändaren känner sig helt bekväm med sitt knä.



JUNIOR KOSMETIK

	Art.nr.	Beskrivning
1.	1145	Junior kosmetikkåpa för delad kosmetik - svart. Skyddar knäenheten och underlättar applicering av kosmetiköverdrag
2.	1150	Junior knäkåpa, liten - svart
3.	1151	Junior knäkåpa, stor - beige

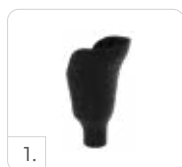

JUNIOR ADAPTRAR – VIKTBEGRÄNSNING 45 KG

4-HÅLSADAPTRAR

4-HÅLSADAPTER FÖR BARN

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-122300	Aluminum	8.5 mm	36 g



HYLSADAPTER MED 4-HÅLSFÄSTE

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-122100	Aluminium	14 mm	46g



S.A.C.H FOTADAPTER

S.A.C.H. FOTADAPTER Ø 8 MM

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-833100	Rostfritt stål/Aluminium	6 mm	54 g



RÖRADAPTRAR

RÖR - KORT, Ø 22 MM

Art.nr.	Material	Längd	Vikt
AJ-712020	Aluminum	250 mm	104 g



HEIGHT ADJUSTABLE PYLON - JUNIOR

Art.nr.	Material	Min. höjd	Min. bygghöjd	Justeringsmöjlighet	Vikt
AJ-542350	Aluminium	76 mm	76 mm	76-102 mm	145 g



JUNIOR ADAPTRAR – VIKTBEGRÄNSNING 60 KG

HYLSADAPTRAR

HYLSADAPTER, 4-ARMAD, JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-114140	Rostfritt stål	10 mm	77 g



HANPYRAMID MED UTV. GÄNGA, JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-135300	Titan	5 mm	27 g



Obs! Kan användas tillsammans med AJ-835300, A-122300 och AJ-114140

HONPYRAMID MED UTV. GÄNGA, JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-145300	Titan	12 mm	35 g



Obs! Kan användas tillsammans med AJ-835300, AJ-122300 och AJ-114140

PYRAMIDHONA MED UTV. GÄNGA (LP) JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-145310	Titan	3 mm	19 g



Obs! Kan användas tillsammans med AJ-835300, AJ-122300 och AJ-114140

JUNIOR ADAPTRAR – VIKTBEGRÄNSNING 60 KG

4-HÅLSADAPTRAR

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID, JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-235100	Titan	7 mm	42 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID, JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-245100	Titan	14 mm	50 g



RÖRADAPTER

RÖRADAPTER MED HONPYRAMID, JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-345100	Titan	15 mm	55 g



ENKELADAPTRAR

HONPYRAMID MED RÖR, JUNIOR

Art.nr.	Material	Längd	Vikt
AJ-445100	Titan	100 mm	71 g



HONPYRAMID MED RÖR, 5 MM OFFSET, JUNIOR

Art.nr.	Material	Längd	Vikt
AJ-445120	Titan	100 mm	79 g



PYRAMIDADAPTRAR

HANPYRAMIDADAPTER, JUNIOR

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-835300	Titan	14 mm	35 g



DUBBELADAPTRAR

DUBBELADAPTER - Ø 30 MM HANADAPTER TILL Ø 22 MM HONADAPTER

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
AJ-535200	Titan	14 mm	55 g



ÖSSUR POST-OP SOLUTIONS



ÖSSUR RIGID DRESSING



ICEROSS® POST-OP TT LINER



ICEROSS® POST-OP TF LINER

POST-OP THERAPY BY ÖSSUR

INTRODUKTION

Under det senaste decenniet har Iceross silikonliners använts med goda resultat vid tidig kompressionsbehandling av benamputerade. Kompressionsbehandling med Iceross Post-Op liner ger effektiv formning av stumpen, kontrollerad kompression och används för att understödja sårsläkning.

Bäst resultat uppnås om kompressionsbehandlingen inleds 5–7 dagar efter operationen, helst efter det att Össur Rigid Dressing (ORD) har applicerats på amputationsstumpen omedelbart efter amputationen och använts i 5–7 dagar.

Användning av Iceross Post-Op liner bör påbörjas i ett tidigt skede eftersom den största förändringen i amputationsstumpen uppträder under de första veckorna efter amputationen. Kompressionsbehandlingen är som mest effektiv under denna period. Linern introduceras gradvis, vilket säkerställer att patienten och amputationsstumpen vänjer sig vid kompressionen och den nya miljön. Kompressionsbehandlingen utförs tills det optimala målet för sårsläkning har uppnåtts och patienten är redo för nästa steg, dvs. rehabilitering med eller utan protes.


EGENSKAPER

POST-OP THERAPY BY ÖSSUR

Össur Rigid Dressing (ORD) och Iceross Post-Op liner säkerställer en högkvalitativ kompressionsbehandling av benamputerade för effektiv formning av stumpen. Möjliggör att stumpen mognar mer effektivt.




ÖSSUR RIGID DRESSING (ORD)

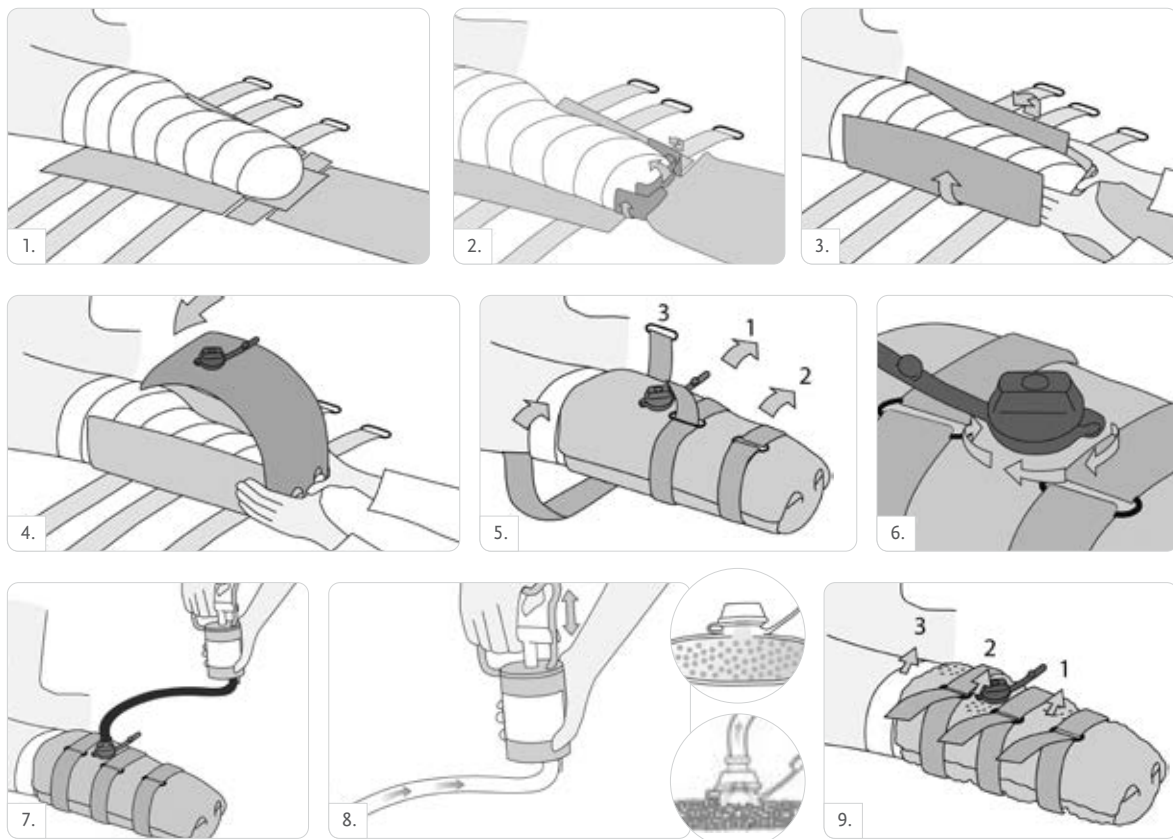

POST-OP THERAPY BY ÖSSUR

INTRODUKTION

ICEROSS POST-OP THERAPY

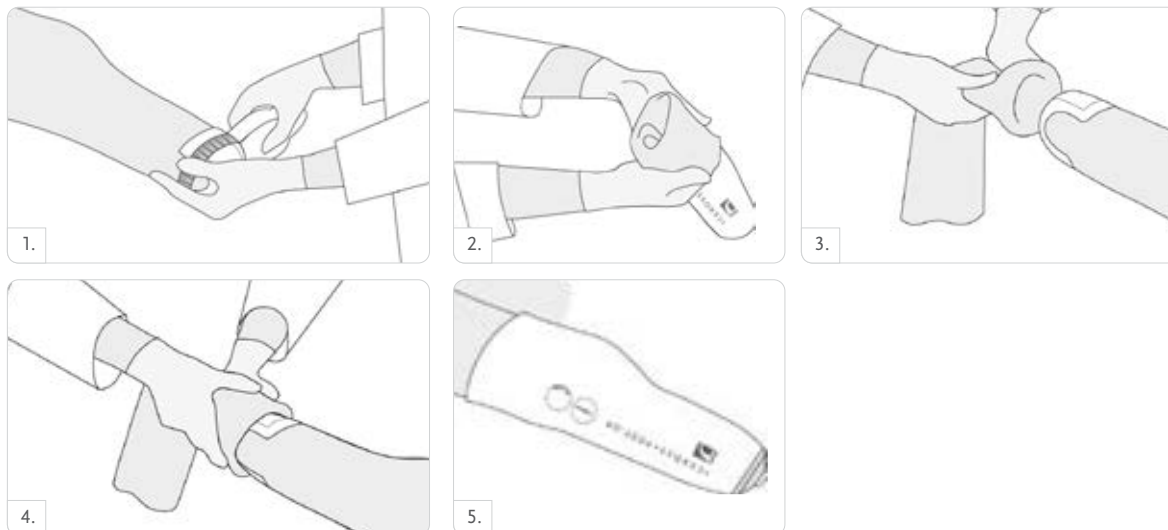

ÖSSUR RIGID DRESSING (ORD)



Össur Rigid Dressing (ORD) är ett vakuumbandage som används för att kontrollera ödem, förhindra knäkontraktur samt skydda stumpen den första tiden efter en transtibial amputation. ORD appliceras på några minuter direkt i operationssalen. Bandaget formas för hand och försluts med hjälp av vakuumpump.

Össur Rigid Dressing underlättar tidig mobilisering, förenklar patientomvårdnaden och säkerställer en kontinuerligt bra passform. Bandaget fungerar dessutom utmärkt som fallskydd nattetid de första veckorna.

Össur Rigid Dressing gör stumpen väl förberedd inför kompressionsbehandling med Iceross Post-Op Liner.



Video: Össur Rigid Dressing
6 min 26 sek

VAL AV STORLEK

Storlek	Stumpens omkrets 4 cm från distala änden	Stumpens omkrets 50 cm från distala änden
Small	Upp till 42 cm	Upp till 58 cm
Large	42-65 cm	58-70 cm


Obs! Alla omkretsmått ovan refererar till mått tagna över förbandet/sårbandaget.

ORD får inte användas på amputationsstumpar som är större än vad som anges ovan. ORD ska sträcka sig minst 15 cm ovanför knäet och avståndet från perineum till amputationsstumpens distala ände bör vara minst 50 cm

ÖSSUR RIGID DRESSING (ORD)

Art.nr.	Beskrivning	Storlek
K-239100	Össur Rigid Dressing	Small
K-239101	Össur Rigid Dressing	Large
K-239105	Vakuumpump till Rigid Dressing	

Art.nr.	Reservdelar
K-239104	Extra straps till Össur Rigid Dressing (3 st/fp)

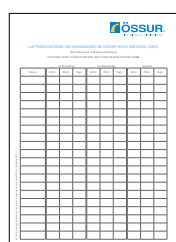

Luftningsschema vid användning
av Össur Rigid Dressing (ORD)



Össur Rigid Dressing - Riktlinjer
för användning av ORD - steg
för steg

ICEROSS® POST-OP TT




Iceross Post-Op-linér är specifikt framtagen för att användas vid tidig kompressionsbehandling av benamputerade för effektiv formning av stumpen, kontrollerad kompression och för att understödja sårhäkning. Linern är belagd med en yta - Easy Glide - för att underlätta av- och påtagning.

Bäst resultat uppnås om kompressionsbehandlingen inleds 5–7 dagar efter operationen, helst efter det att Össur Rigid Dressing (ORD) har applicerats på amputationsstumpen omedelbart efter amputationen.

Tidig kompressionsbehandling med Iceross Post-Op har visat sig påskynda rehabiliteringsprocessen och förkorta sårhäkningstiden. Därmed möjliggörs tidigare protesförsörjning.

Iceross Post-Op ger en graderad kompression som avtar i proximal riktning. Linern ger stumpen en gynnsam form för protesförsörjning, är återanvändningsbar, kan tvättas, steriliseras (i autoclav) och desinficeras.

- Förkortar sårhäkningstiden
- Understödjer ödemreduktion
- Samma graderade kompression uppnås oberoende av vem som applicerar linern
- Skyddar stumpen och underlättar tidig mobilisering/protesförsörjning

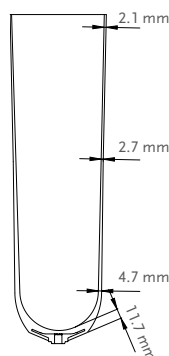


Video: Post Op Solutions
4 min 32 sek

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Nyamputerad
Linerinformation	
Storlekar:	22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45.
Profil:	2 mm
Matrix:	10 cm



Iceross Post-Op - Riktlinjer för kompressionsterapi med Iceross Post-Op Liner - steg för steg

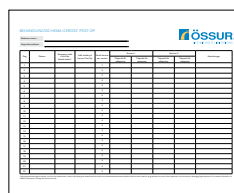

Behandlingsschema Iceross Post-Op

EGENSKAPER



STABILIZING
MATRIX



EASY GLIDE

ICEROSS POST-OP TT

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
I-PO12XX	2 mm	Locking	10 cm

XX = storlek

ICEROSS® POST-OP TF




Iceross Post-Op-linern är specifikt framtagen för att användas vid tidig kompressionsbehandling av benamputerade för effektiv formning av stumpen, kontrollerad kompression och för att understödja sårhäkning. Linern är belagd med en yta - Easy Glide - för att underlätta av- och påtagning.

Tidig kompressionsbehandling med Iceross Post-Op har visat sig påskynda rehabiliteringsprocessen och förkorta sårhäkningstiden. Därmed möjliggörs tidigare protesförsörjning.


Kompressionsterapi med Iceross Post-Op ger stumpen en gynnsam form för protesförsörjning. Linern är återanvändningsbar, kan tvättas, steriliseras (i autoclav) och desinficeras.

- Förkortar sårhäkningstiden
- Understödjer ödemreduktion
- Samma graderade kompression uppnås oberoende av vem som applicerar linern
- Skyddar stumpen och underlättar tidig mobilisering/protesförsörjning

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Nyamputerad
Linerinformation	
Storlekar:	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55.
Profil:	2 mm

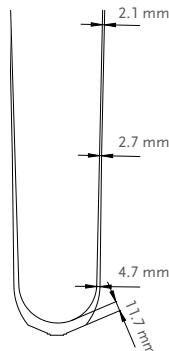

Video: Iceross Post-Op Liner Classroom Catch-up | Össur 2 min 34 sek

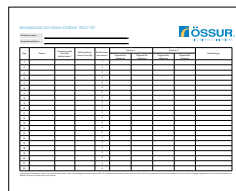

Behandlingsschema Iceross Post-Op

Vill du läsa mer om kompressionsbehandling? Gå in på:
www.vardhandboken.se/Texter/Benamputation-var-d-och-behandling/Oversikt/

EGENSKAPER



EASY GLIDE

ICEROSS POST-OP TF

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-PO22XX	2 mm	N/A

XX = storlek

ÖSSUR ICELOCK® SERIES



ICELOCK® 100 SERIEN



ICELOCK® 200 SERIEN




ICELOCK® 300 SERIEN



ICELOCK® 400 SERIEN



ICELOCK® 500 SERIEN

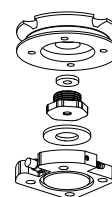

ICELOCK® 544 SERIEN



ICELOCK® 562 SERIEN



ICELOCK® 600 SERIEN



ICELOCK® 700 SERIEN



ICELOCK® 850 HYBRID

ÖSSUR ICELOCK® SERIES

ICELOCK EGENSKAPER

STEGAD SNABBKOPPLING

Används med Iceross® Locking Liner. För medel- till högaktiva protesanvändare med benign stump som föredrar att fästa protesen genom att trampa ner stumpen i hylsan och trycka ner låspinnen i låset. Den stegade snabbkopplingen avger ett klickande ljud vid låsningen, vilket uppskattas av många protesanvändare eftersom det tydligt talar om att protesen sitter fast.



STEGLÖS SNABBKOPPLING MED CLUTCH-MEKANISM

Används med Iceross® Locking Liner. För låg-, medel- till högaktiva protesanvändare med mjukdelsrik stump. Protesanvändare fäster och *skruvar ner* protesen i hylsan med hjälp av ett enkelt verktyg i stället för att trycka eller trampa ned protesen i hylsan.



STEGLÖS SNABBKOPPLING

Används med Iceross® Locking Liner. För medel- till högaktiva protesanvändare med benign stump och som föredrar att fästa protesen genom att trampa ner stumpen i hylsan och trycka ner låspinnen i låset. Låset är ljud- och steglöst, och ger säker suspension längs hela låspinnens längd.



LINKOPPLING

Används med Iceross® Locking Liner. För nyamputerade protesanvändare eller låg- till medelaktiva protesanvändare med mjukdelsrik stump som föredrar att ta på sig protesen genom att dra ner stumpen i hylsan med en lina. Med denna suspensionsmetod kan protesanvändare ta på protesen sittande.



DISTAL VENTIL

Används med Iceross® Cushion Liner. För protesanvändare på alla aktivitetsnivåer som föredrar vakuumsuspension framför en mekanisk låsanordning. Kombinerar med sleeve. Med denna suspensionsmetod kan protesanvändare ta på protesen sittande.



VAKUUMVENTIL

För användning med alla Iceross Seal-In® liners. Kan även användas med Cushion liner och sleeve.



WEATHERPROOF

En väderbeständig enhet tillåter användning i våt och/eller fuktig miljö. Den tillåter *inte* nedsänkning i vatten. Enheten klarar stänk av färskvatten (t.ex. regn) men ska torkas av noggrant efteråt. Färskvatten inkluderar kranvatten (sötvatten), exkluderar saltvatten eller klorerat vatten.

Obs! För att en protes skall anses som väderbeständig, måste övriga proteskomponenter också vara väderbeständiga.



WEATHERPROOF

WATERPROOF

Oavsett om komponenten utsätts för sötvatten, saltvatten eller klorerat vatten, ger Össurs vattentäta komponenter det skydd som behövs. Användning av förstklassigt tillverkningsmaterial ger ett permanent skydd mot skadligt intrång av vatten, även efter nedsänkning, och komponentdelarna fortsätter att ge den funktion som kan förväntas.



WATERPROOF

ICELOCK® 100 SERIEN



STEGAD SNABBKOPPLING MED INTEGRERAD PYRAMID

- Utbytbar
- Enkel att använda - standardlaminering
- Max.vikt: 120 kg
- Passar alla aktivitetsnivåer




Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
L-125000	Icelock 125 Stegad snabbkoppling, stålpyramid	120 kg	22 mm	115 g
Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
L-180001	Icelock 100 Tillverkningskit utan fläta	N/A	22 mm	99 g



KOMPONENTER TILL ICELOCK 100

Art.nr.	Beskrivning
L-192000	Stegad låspinne till Icelock 100/600, längd 52 mm, standard, 13 jack
L-192003	Stegad låspinne till Icelock 100/600, längd 34 mm, 7 jack
L-192005	Stegad låspinne till Icelock 100/600, längd 65 mm, 17 jack

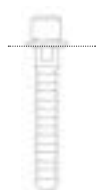

Längd på låspinne

ICELOCK® 200 SERIEN



SNABBKOPPLING MED CLUTCH-MEKANISM

Slitstarka clutch-kopplingar med demonterbar mekanism. Passar bra till transfemoralt amputerade och kan med fördel användas tillsammans med Iceross® Transfemoral Locking liner.




Videos: Icelock Tutorials
on YouTube – Playlist


- Låg bygghöjd och låg vikt
- Guide för låspinne i slitstarkt, rostfritt stål
- Säker kopplingsmekanism, testad upp till 300 kg:s drag
- Möjlighet finns att byta från linkoppling till snabbkoppling (clutch)
- Passar alla aktivitetsnivåer.

ÖVERSIKT

ICELOCK CLUTCH 211

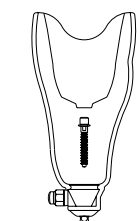

Med
pyramidadapter*

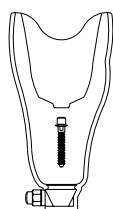

Utan
pyramidadapter
– för laminering i
två steg

*Pyramidadapter beställs separat.



Stegad låspinne - Clutch
Finns i 3 olika längder.




Icelock Clutch 211




Icelock Stålpjramid 273*
Icelock Titanpyramid 272*

*Specialanpassade
pyramidadapter till
Icelock Clutch 211.

ICELOCK CLUTCH 214

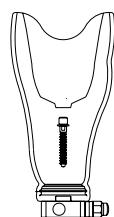

Med fäste för
4-hålsadapter

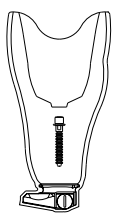

Med
AK Offset-adapter



Stegad låspinne, Clutch
Finns i 3 olika längder.




4-hålsplatta för
laminering eller
termoplast



Kopplingsmekanism och
kopplingshus, 4-håls

ICELOCK LANYARD 234

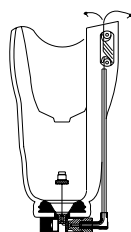


Med fäste för
4-hålsadapter



Linkoppling med
kopplingsskruv



4-hålsplatta för
laminering eller
termoplast (A120)

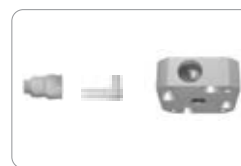

Linstyrning + styrning för
linstyrning och
kopplingshus 4-håls (A120)

ICELOCK® 200 SERIEN

ICELOCK CLUTCH 211

Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
L-211000	Icelock Clutch 211 (utan adapter)	N/A	21 mm	78 g
Art.nr.	Pyramidadapter till Icelock Clutch 211	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
L-272000	Icelock Titanpyramid 272	166 kg	9 mm	76 g
L-273000	Icelock Stålp pyramid 273	100 kg	8 mm	64 g



ICELOCK CLUTCH 214

Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
L-214000	Icelock Clutch 214 (Aluminium 4-hålsadapter)*	120 kg	25 mm	186 g
L-214100	Icelock Clutch 4H 214 till Direct Socket System	N/A	N/A	N/A

*För att konvertera från clutch till linlås, beställ # L-292050



#L-214000

#L-214100

ICELOCK CLUTCH 214 AK OFFSET*

	Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd
1.	L-214311	För vänster ben med tryckknapp placerad på mediala sidan	136 kg	18 mm
2.	L-214312	För vänster ben med tryckknapp placerad på laterala sidan	136 kg	18 mm
3.	L-214322	För höger ben med tryckknapp placerad på laterala sidan	136 kg	18 mm
4.	L-214321	För höger ben med tryckknapp placerad på mediala sidan	136 kg	18 mm



*30 mm posterior och 20 mm lateral offset. Max. vikt: 136 kg. Produktvikt: 314 g.

ICELOCK LANYARD 234

Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
L-234000	Icelock Linkoppling 234	120 kg	25 mm	168 g



För att konvertera från linlås till clutch, beställ #L-292020 (kitet innehåller kopplingsmekanism, tryckknapp och T-nyckel).

ADAPTRAR TILL ICELOCK 214 & 234

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-233100	Aluminium / Pyramid i rostfritt stål	100 kg	23.5 mm	9 mm	62 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-242100	Aluminium	100 kg	16 mm	16 mm	46 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235100	Titan	166 kg	23 mm	8.5 mm	54 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Max. vikt	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245100	Titan	166 kg	15.5 mm	15.5 mm	64 g




För fler 4-hålsadapter, se kapitlet "Adapterar"

ICELOCK® 200 SERIEN

KOMPONENTER TILL ICELOCK 211

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-292032	Pyramidbult, lång med o-ring #L-693127
2.	L-292121	Låspinne-dummy
3.	L-292015	Kopplingshus (utan tryckknappsdummy)
4.	L-292122	Tryckknappsdummy
5.	L-293045	Silikonring
6.	L-292126	Fixtur

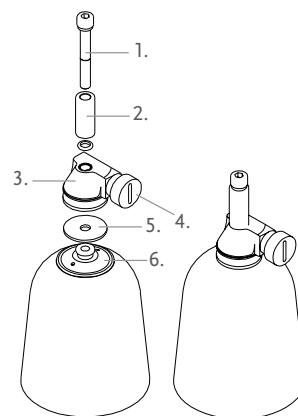


KOMPONENTER TILL ICELOCK 211 OCH 214

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-292000	Låspinne till Clutch-lås, längd 40 mm, standard, 12 jack
1.	L-292003	Låspinne till Clutch-lås, längd 25 mm, kort, 7 jack
1.	L-292005	Låspinne till Clutch-lås, längd 56 mm, lång, 17 jack
2.	L-292020	Kopplingsmekanism, tryckknapp och T-nyckel
	L-293060	T-nyckel
	L-292131	Tryckknapp, Delrin



KOMPONENTER TILL ICELOCK PYRAMIDADAPTRAR 272 OCH 273


	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-292032	Pyramidbult, lång, med o-ring (till pyramidadapter 272)
4.	L-293048	Silikondummy till pyramidadapter 272
4.	L-293049	Silikondummy till pyramidadapter 273

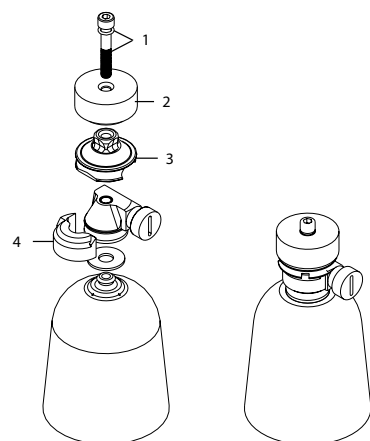

ICELOCK® 200 SERIEN

KOMPONENTER TILL ICELOCK 214

	Art.nr.	Beskrivning
5.	L-292011	Kopplingshus 4-håls (utan kopplingsmekanism)
	L-292040	Tillverkningskit (inkluderar de fem artiklarna listade nedan)
4.	L-292125	Adapter för laminering/termoplast
2.	L-292118	Fixtur
1.	L-292129	Plastskruv
	L-293042	Skruv M6 x 33
	L-293041	Skruv M6 x 20

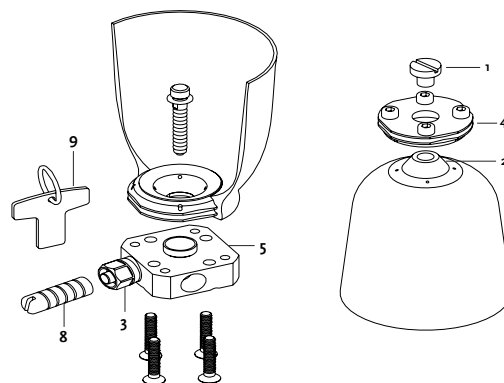


KOMPONENTER TILL ICELOCK 214 AK OFFSET

Art.nr.	Beskrivning
L-292007	Låspinne till Clutch Offset, Längd 39 mm, 12 jack

KOMPONENTER TILL ICELOCK 234

	Art.nr.	Beskrivning
	L-292127	Pivot
12.	L-292130	Bussning
11.	L-392117	Styrning
	L-392016	Dragverktyg
8.	L-392018	Lina med kopplingsskruv
14.	L-393012	Linstyrning, 40 cm
	L-292050	Konverteringssats för att ändra Icelock Clutch 214 till Icelock Linkoppling 234

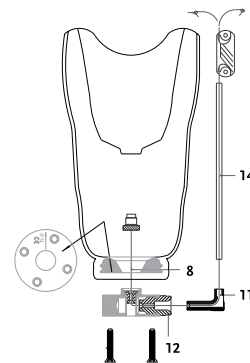

ICELOCK® 300 SERIEN




För låg- till medelaktiva nyamputerade med mjukdelsrik stump som föredrar att ta på sig protesen genom att dra ner stumpen i hylsan med en lina. Med denna suspensionsmetod kan brukaren ta på protesen sittande. Passar även bra för påromformade stumpar.

- Låg bygghöjd
- Mycket låg vikt
- Lämplig till hygienprotes
- Passar för låg- till medelaktiva protesanvändare




DIAGRAM

ICELOCK LINKOPPLING 331-L

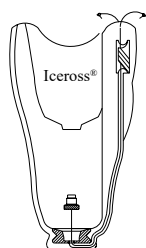

För laminerade hylsor

ICELOCK LINKOPPLING 331-T

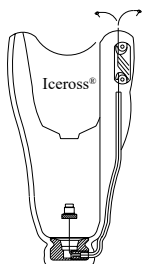

För termoplasthylsor

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-331001	Linkoppling 331-L (utan adapter)	12 mm	22 g



Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-331002	Linkoppling 331-T (utan adapter)	14 mm	42 g



KOMPONENTER TILL 331-L

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-392016	Dragverktyg
2.	L-392018	Kopplingsskruv med lina



KOMPONENTER TILL 331-T

	Art.nr.	Beskrivning
6.	L-393012	Linstyrning, 40 cm
7.	L-392016	Dragverktyg
8.	L-392112	Bottenstyrning, termoplast
10.	L-393018	Skruv 3.5 x 30 mm



ICELOCK® 400 SERIEN




STEGLÖS SNABBKOPPLING


- Steglös rörelse, därmed ljudlös och mindre slitage
- Avlägsnas från proteshylsans insida
- Mycket låg vikt
- Passar alla aktivitetsnivåer




DIAGRAM

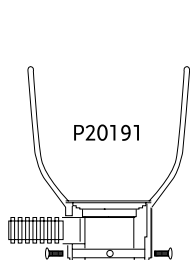

Monteringssats för laminerad hylsa med valfri ingjutningsadapter

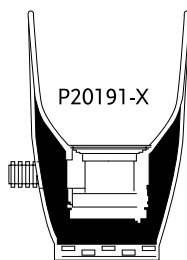

Monteringssats för laminerad hylsa som gjuts i 2 steg. Adapter ingår ej.

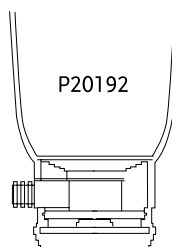

Monteringssats för ALP-systemet med laminerad hylsa

Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
P20191	Monteringssats för laminerad hylsa med valfri ingjutningsadapter	N/A	35 mm	97 g



För tillverkning av proteshylsa med P20191 behövs Fixtur art.nr. P20109 och Distansverktyg art.nr. P20151. Återanvändbara.

Art.nr.	Beskrivning	Max. vikt	Bygghöjd	Vikt
P20191-X	Monteringssats för laminerad hylsa som gjuts i 2 steg	N/A	37 mm	95 g



För tillverkning av proteshylsa med P20191-X behövs Fixtur art.nr. P20109 och Distansverktyg art.nr. P20151. Återanvändbara.

Art.nr.	Beskrivning	Max.vikt	Bygghöjd	Vikt
P20192	Monteringssats för ALP-systemet med laminerad hylsa	N/A	47 mm	110 g



För tillverkning av proteshylsa med P20192 behövs Fixtur art.nr. P20109 och Distansverktyg art.nr. P20152. Återanvändbara.

ICELOCK® 400 SERIEN

FIXTURES (KAN ÅTERANVÄNDAS)

Art.nr.	Beskrivning
P20109	Fixtur

DISTANSVERKTYG (KAN ÅTERANVÄNDAS)

Art.nr.	Beskrivning
P20151	Distansverktyg (dummy) till P20191 & P20191-X
P20152	Distansverktyg (dummy) till P20192

RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
P20141	Kopplingsplatta - passar till P20191
P20141-X	Kopplingsplatta - passar till P20191-X
P20142	Kopplingsplatta - passar till P20192
P20151	Distansverktyg till P20191 & P20191-X
P20161	Tratt - passar till P20191 & P20191-X
P20162	Tratt - passar till P20192
L-693506	Steglös låspinne, längd 43 mm - standard
L-693507	Steglös låspinne, längd 53 mm
L-693508	Steglös låspinne, längd 63 mm
L-693509	Steglös låspinne, längd 75 mm
P20177	Steglös snabbkoppling
L-693504	Skyddsrör till tryckknapp
L-693502	Tryckknapp, justerbar
P20251	Tryckknappsmarkör P20151
P20182	Justerbart tryckknapp till steglös snabbkoppling



#P20182

ICELOCK® 500 SERIEN



Icelock 551 och Icelock 552 vakuumventiler är avsedda för låg- till högaktiva protesanvändare och är utformade för att kunna användas tillsammans med alla vakuumsuspensionssystem, med eller utan sleeve (Seal-In).

Ventilerna sitter i ett ventilhus som håller tätt mot proteshylsans insida nära den distala änden. Ventilerna släpper ut luft under positivt tryck när stumpan förs ner i hylsan. Tryckknappen måste tryckas in för att släppa in luft i proteshylsan när proteserna ska tas av.

ICELOCK VAKUUMVENTIL 551

Primärt avsedd för **transtibialt** amputerade men kan även användas för transfemoralt amputerade. Ventilen har ett lock som skruvas av vid rengöring. Gängad hylsinsats (M10) för ingjutning eller termoplasthylsa. 2-vägsventil - släpper ut luft utan knapptryckning.

Art.nr.	Beskrivning
L-551002	Icelock Vakuumventil 551
L-551206	Reservmembran till Icelock 551



ICELOCK VAKUUMVENTIL 552

Avsedd för **transfemoralt** amputerade. 2-vägsventil - släpper ut luft utan knapptryckning. Ventilhuset kan avlägsnas vid protespåtagning med hjälp av dragstrumpa.

Art.nr.	Beskrivning
L-552000	Icelock Vakuumventil 552
L-552206	Reservmembran till Icelock 552



VACU VALVE

Vacu Valve är en vakuumventil som används för att skapa vakuumsuspension i termoplasthylsor eller laminerade hylsor med hjälp av en sleeve.

Avsedd för låg- till högaktiva **transtibialt** amputerade.

Art.nr.	Beskrivning
1810723	Vacu Vavle



ICELOCK® 544 SERIEN



Icelock 544 -serien består av färdiga komponentsatser för vakuumsuspension. De olika komponentsatserna väljs utifrån vilken vakuumsuspensionslösning som önskas: Seal-In, Unity eller Cushion/Sleeve.

Oavsett val av vakuumsuspension är tillverkningsprocessen med Icelock 544 den samma (enstegslaminering).

Med Icelock 544 finns möjlighet att, i en och samma proteshylsa, välja/växla vakuumsuspensionsmetod efter det att proteshylsan färdigställts. Möjligheten att välja/växla vakuumsuspensionsmetod efter färdigställningen bygger på en korrekt placering och användning av Icelock 544 -seriens inlamineringsadapter.

FÖRDELAR:

- Modular och flexibel design - utbytbara ventilhus även efter det att proteshylsan färdigställts.
- In-line solution, dvs. inga komponenter som sticker ut på protesens utsida.
- Minimal risk för vakuumläckage och tätningsproblem om korrekt tillverkad proteshylsa.
- Tidsbesparande/snabb tillverkning (enstegslaminering) och förutsägbart och repeterbart resultat.



Produktinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial, transfemoral
Max. patientvikt:	136 kg*

* Gäller endast för komponenterna. Lamineringstekniken måste också beaktas.



ÖVERSIKT ICELOCK 544 SERIEN

L-544620 ICELOCK 544 – CUSHION/SLEEVE – endast för användning ihop med Cushion/Sleeve. Inkl. inlamineringsadapter L-544400.	L-544611 ICELOCK 544 – UNITY – endast för användning ihop med Unity Inkl. inlamineringsadapter L-544400.	L-544621 ICELOCK 544 – SEAL-IN LINERS – endast för användning ihop med Seal-In Liners. Inkl. inlamineringsadapter L-544400.
L-544520 ICELOCK 544 – CUSHION/SLEEVE – endast för användning ihop med Cushion/Sleeve. Exkl. inlamineringsadapter L-544400.	L-544511 ICELOCK 544 – UNITY – endast för användning ihop med Unity Exkl. inlamineringsadapter L-544400.	L-544521 ICELOCK 544 – SEAL-IN LINERS – endast för användning ihop med Seal-In Liners. Exkl. inlamineringsadapter L-544400.


ICELOCK® 544 SERIEN

ICELOCK® 544 INLAMINERINGSADAPTER - KIT


Icelock 544 inlamineringsadapter är basen i Icelock 544 -serien och gör det möjligt att, i en och samma proteshylsa, välja/växla vakuum-supensionsmetod *efter* det att proteshylsan färdigställts.

SATSEN INNEHÅLLER:

- Inlamineringsadapter #L-544400 (lamineras in direkt i proteshylsan)
- Lamineringsdummy inkl. nyckel

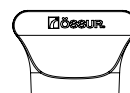

Icelock 544 nyckel

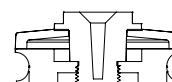

Adapter med tillverkningskomponenter

Art.nr.	Beskrivning	Max. patientvikt	Vikt	Bygghöjd
L-544400	Icelock 544 inlamineringsadapter	136 kg	98 g	16 mm

ICELOCK VAKUUMVENTIL 544 – FÖR CUSHION/SLEEVE

Endast för användning i kombination med Cushion/Sleeve.

#L-544620 innehåller:

- Inlamineringsadapter #L-544400 (lamineras in direkt i proteshylsan)
- Inloppsplugg med filter (housing)
- Lamineringsdummy
- Icelock 544 nyckel



L-544620



L-544520

Art.nr.	Beskrivning	Max. patientvikt	Vikt	Bygghöjd
L-544620	Sats <u>inkl.</u> inlamineringsadapter #L-544400 – för Cushion/Sleeve	136 kg	104 g	16 mm
L-544520	Sats <u>exkl.</u> inlamineringsadapter #L-544400 – för Cushion/Sleeve	-	6 g	0 mm

ICELOCK VAKUUMVENTIL 544 – FÖR UNITY

Endast för användning i kombination med Unity.

#L-544611 innehåller:

- Inlamineringsadapter #L-544400 (lamineras in direkt i proteshylsan)
- Liten tätningssring i gummi
- Inloppsplugg med filter (housing)
- Stor tätningssring i gummi
- Ventilhus för Unity, #L-544511 (grå)
- Lamineringsdummy för inloppsplugg
- Lamineringsdummy för ventilhus
- Icelock 544 nyckel
- M6 x 25 mm skruvar
- Unity slang, 80 cm



L-544611



L-544511

Art.nr.	Beskrivning	Max. patientvikt	Vikt	Bygghöjd
L-544611*	Sats <u>inkl.</u> inlamineringsadapter #L-544400 – för Unity	136 kg	216 g	25.5 mm
L-544511	Sats <u>exkl.</u> inlamineringsadapter #L-544400 – för Unity	-	118 g	9.5 mm



*väderbeständig komponent

ICELOCK® 544 SERIEN

ICELOCK VAKUUMVENTIL 544 – FÖR SEAL-IN LINERS

Endast för användning i kombination med Seal-In Liners

#L-544621 innehåller:

- Inlamineringsadapter #L-544400 (lamineras in direkt i protesylsan)
- Liten tättningsring i gummi
- Inloppsplugg med filter (housing)
- Stor tättningsring i gummi
- Ventilhus #L-544 521 (orange)
- Lamineringsdummy för inloppsplugg
- Lamineringsdummy för ventilhus
- Icelock 544 nyckel
- M6x25 mm skruvar



Art.nr.	Beskrivning	Max. patientvikt	Vikt	Bygghöjd
L-544621	Sats inkl. inlamineringsadapter #L-544400 – för Seal-In Liners	136 kg	216 g	25.5 mm
L-544521	Sats exkl. inlamineringsadapter #L-544400 – för Seal-In Liners	-	118 g	9.5 mm

RESERVDELAR – ICELOCK 544

Art.nr.	Beskrivning
L-544010	Icelock 544 – Reservdelskit

Innehåller:

- 4 små backventiler
- 2 stora backventiler
- 2 små tättningsringar
- 2 stora tättningsringar
- Unity-slang
- O-ringar
- M6 x 25mm skruvar

TILLBEHÖR – ICELOCK 544

Art.nr.	Beskrivning
UTF0006	Unity TF slangsat



+PLUSERIEN DISPENSER

Art.nr.	Beskrivning
FSX80016	+PluSerien 215 ml Dispenser



+PLUSERIEN LIM

Art.nr.	Beskrivning
FSX80015	+PluSerien lim 215 ml - komposit 1 minut



ICELOCK® 562 HYBRID



Icelock 562 Hybrid är ett lås avsett för transtibialt amputerade på alla aktivitetsnivåer. Det ger överlägsen funktion genom att fördelarna med locking-suspension kombineras med fördelarna med vakuum-suspension.


Användaren upplever minskade pumpprörelser och förbättrad rotationskontroll från Seal-In, samtidigt som man behåller den mekaniska anslutningen som man är van vid med dess uppfattningsrespons.

EGENSKAPER

- Möjlighet att enkelt byta mellan endast locking-suspension eller endast Seal-In, eller att kombinera dessa två suspensionsmetoder.
- Kompatibel med Unity.
- Kompatibel med Direct Socket.
- Väderbeständig

Låset skall användas med Iceross Seal-In X Locking-liner, flyttbara tättningsringar och en lufttät hylsa.

Kombinera Seal-In-tekniken med Unity-vakuumsystemet för stabilisering av fluktuerande volym och för att säkerställa en bekväm passform av hylsan under hela dagen.

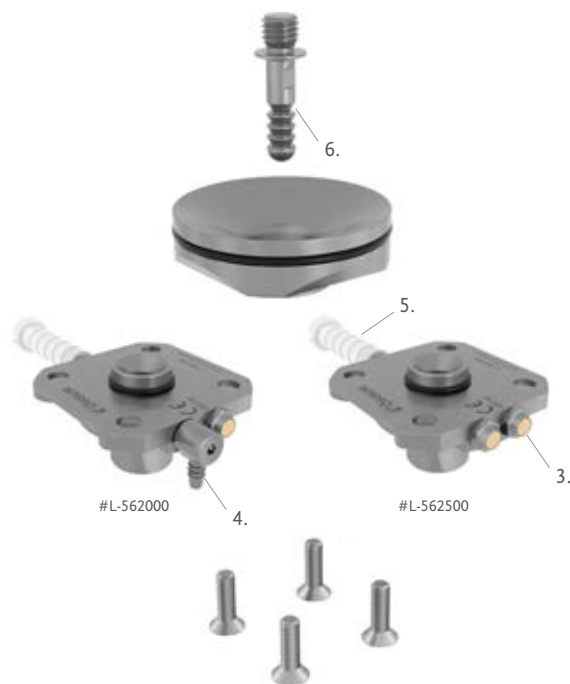

Videos: Icelock tutorials on YouTube – [Playlist]

	Art.nr.	För Direct Socket	Max. patientvikt	Bygghöjd	Vikt
	L-562000	Icelock 562 Hybrid till Unity	166 kg	12 mm	164 g
	L-562500	Icelock 562 Hybrid Passivt vakuum	166 kg	12 mm	164 g



1.

	Art.nr.	För Direct Socket	Max. patientvikt	Bygghöjd	Vikt
1.	L-562400	Icelock 562 Unity till Direct Socket	166 kg	12 mm	164 g
2.	L-562410	Icelock 562 Passivt vakuum till Direct Socket	166 kg	12 mm	164 g



2.

Art.nr.	För laminerade hylsor och termoplasthylsor
L-562100	Innehåller: 1 distal koppling, 1 fixeringsdummy, 1 tillverkningsdummy 1 & 2, 1 centrumskruv, 4 skruvar, 4 distanser, 4 spikar, 1 aluminiumdummy, 1 stor fyrkantig ring, 1 stor O-ring, 1 liten fyrkantig ring. Låskit väljs separat beroende på val av vakuum - Unity (aktivt) #L-562200 eller passivt #L-562210 - se nedan.
L-562200	Låskit för Unity (1 låshus inkl. tryckknapp & 90° Unity-anslutning, 1 låspinne, 1 utlopps-ventil, 4 skruvar)
L-562210	Låskit för passivt vakuum (1 låshus inkl. tryckknapp, 1 låspinne, 2 utloppsventil, 4 skruvar)

Art.nr.	Reservdelar
L-562300	Reservdelskit (4 vakuumventiler, 4 bronsfilter, 2 stora "square"-ringar, 2 små "square"-ringar, 2 stora O-ringar, 2 små O-ringar)
3.	L-562013 Utloppsventil (avsedd för passivt vacuum)
4.	L-562014 90° Unity-anslutning
5.	L-562015 Tryckknapp
6.	L-562016 Icelock 562 låspinne

ICELOCK® 600 SERIEN



Icelock 600 består av starka, slittåliga låsmoduler av extremt låg vikt och med låg bygghöjd avsedda för alla aktivitetsnivåer. Tillverkningsverktyget ger en effektiv tillverkningsprocess. Lås-/ventilmodulerna är sinsemellan utbytbara vilket innebär att man kan välja suspensionsmetod efter det att proteshylsan har tillverkats.


ICELOCK 600 består av:

1. Icelock Tillverkningsverktyg 680 för effektiv tillverkningsprocess.
2. Fyra olika låsmoduler/alternativ:
 - Icelock 621 – Stegad snabbkoppling
 - Icelock 631 – Linkoppling
 - Icelock 641 – Ventil (används med sleeve)
 - Icelock 651 – Steglös snabbkoppling
3. Fyra stycken för serien specialdesignade moduladapterar:
 - Icelock 672 – Titanpyramid
 - Icelock 673 – Aluminiumpyramid
 - Icelock 674 – 4-hålsadapter
 - Icelock 675 – 4-hålsadapter




Videos: Icelock
tutorials on YouTube
– [Playlist]


ÖVERSIKT LÅSMODULER

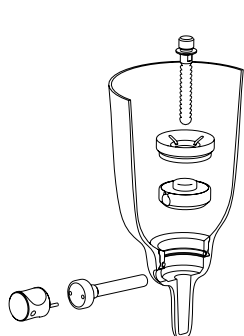


Icelock 621
Stegad snabbkoppling

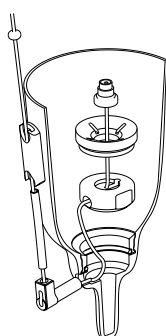

Icelock 631
Linkoppling

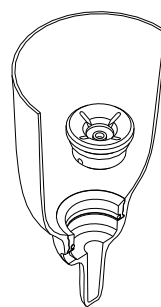

Icelock 641
Ventil

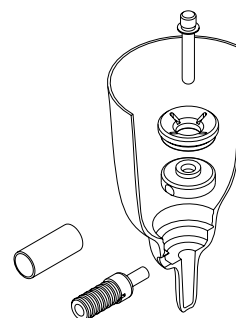

Icelock 651
Steglös snabbkoppling



Laminering i 2 steg
Valfri adapter



Standardlaminering
Icelock Titanpyramid 672
Icelock Aluminiumpyramid 673



Standardlaminering
Icelock Aluminium 4-håls 674
Icelock Titan 4-håls 675

ICELOCK 600 SERIEN

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-621000	Icelock 621 Stegad snabbkoppling (exkl. adapter)	15 mm	59 g

Levereras utan distal adapter. Klassificeras ej efter patientens kroppsvikt. Viktbegränsningen bestäms av den distala adaptern.

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-631000	Icelock 631 Linkoppling (exkl. adapter)	15 mm	49 g

Levereras utan distal adapter. Klassificeras ej efter patientens kroppsvikt. Viktbegränsningen bestäms av den distala adaptern.



ICELOCK® 600 SERIEN

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-641000	Icelock 641 Ventil (exkl. adapter)	15 mm	40 g



Levereras utan distal adapter. Klassificeras ej efter patientens kroppsvikt. Viktbegränsningen bestäms av den distala adaptern.

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-651000	Icelock 651 Steglös snabbkoppling (exkl. adapter)	15 mm	68 g



Levereras utan distal adapter. Klassificeras ej efter patientens kroppsvikt. Viktbegränsningen bestäms av den distala adaptern.

Art.nr.	Beskrivning
L-680000	Icelock 680 Tillverkningsverktyg (kan återanvändas)

ICELOCK 600 LÅSMODULER (UTBYTESKIT)

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-621100	Icelock Stegad snabbkoppling 621 låsmodul*
2.	L-631100	Icelock Linkoppling 631 låsmodul*
3.	L-641100	Icelock Ventil 641 låsmodul*
4.	L-651100	Icelock Steglös snabbkoppling 651 låsmodul*



*Används vid utbyte av låsfunktion på befintlig proteshylsa (ingjutningsring och tratt saknas)

ICELOCK 600 LÅSMODULER AVSEDDA FÖR DIRECT SOCKET SYSTEM

	Art.nr.	Beskrivning
5.	L-661000	600 Modular Distansadapter för Icelock 600 Serien*
6.	L-621100	Icelock Stegad Snabbkoppling 621 Adaptation Kit
7.	L-631100	Icelock Linkoppling 631 Adaptation Kit
4.	L-651100	Icelock Steglös Snabbkoppling 651 Adaptation Kit

*Måste användas tillsammans med Icelock® 600 Serien.

SPECIALANPASSADE PYRAMIDADAPTRAR TILL ICELOCK 600

Art.nr.	Beskrivning	Max.vikt
L-672000	Icelock 672 Titanpyramid	166 kg



Art.nr.	Beskrivning	Max.vikt
L-673000	Icelock 673 Pyramid i aluminium/rostfritt stål	100 kg



Art.nr.	Beskrivning	Max.vikt
L-674000	Icelock 674 Aluminium 4-håls	100 kg



Art.nr.	Beskrivning	Max.vikt
L-675000	Icelock 675 Titan 4-håls	166 kg



VERKTYG FÖR DEMONTERING AV TRYCKKNAPP

Art.nr.	Beskrivning
L-692016	Verktøy för åtdragning/demontering av tryckknapp.

Obs! Ingår ej i satserna.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.




ICELOCK® 600 SERIEN

ICELOCK 621 – RESERVDELAR

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-692022	Ingjutningsring inkl. o-ring och silikontätning*
	L-693125	O-ring 35 x 2.5 till ingjutningsringen/tillverkningsringen
2.	L-692110	Tratt
3.	L-692027	Tryckknapp/Frigöringsenhet (lång)
4.	L-192000	Stegad låspinne, standard, 52 mm**, 13 steg
4.	L-192003	Stegad låspinne, 34 mm**, 7 steg
4.	L-192005	Stegad låspinne, 65 mm**, 17 steg
5.	L-692016	Verktøy för demontering av tryckknapp


*Används även till Icelock 400 (The Pin)

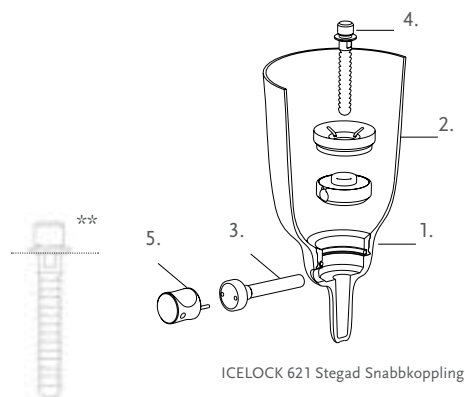

ICELOCK 631 – RESERVDELAR


	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-692022	Ingjutningsring med o-ring och silikontätning*
	L-693125	O-ring 35 x 2.5 till ingjutningsringen/tillverkningsringen
2.	L-692025	Distalt fäste, linkoppling
3.	L-692110	Tratt
4.	L-392018	Lina med kopplingsskruv
5.	L-393012	Linstyrning 40 cm
	L-392016	Dragverktyg
6.	L-392117	Styrning, Linkoppling

*Används även till Icelock 400 (The Pin)

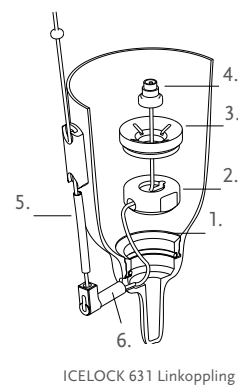

ICELOCK 641 – RESERVDELAR

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-692022	Ingjutningsring
	L-693125	O-ring 35 x 2.5 till ingjutningsringen/tillverkningsringen
2.	L-641100	Icelock Ventil 641 låsmodul

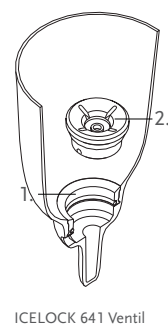


ICELOCK® 600 SERIEN

ICELOCK 651 – RESERVDELAR

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-692022	Ingutningsring*
2.	L-692110	Tratt
3.	L-693506	Steglös låspinne, 43 mm
3.	L-693507	Steglös låspinne, standard 53 mm
3.	L-693508	Steglös låspinne, 63 mm
3.	L-693509	Steglös låspinne, 75 mm
4.	L-692505	Steglös snabbkoppling / låskropp
5.	L-693504	Skyddsrör till tryckknappen
6.	L-692501	Tryckknapp/frigöringsenhet
7.	L-693502	Tryckknappsdel (endast den grå delen)
8.	L-693503	Propp/dammskydd

*Används även till Icelock 400 (The Pin)

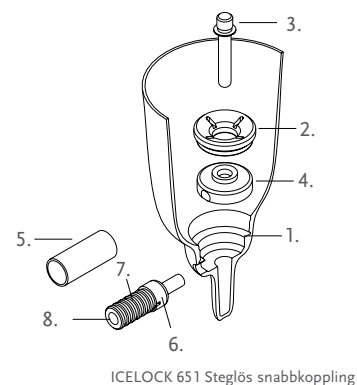

ICELOCK 651 Steglös snabbkoppling

ICELOCK 675 TITAN 4-HÅLSADAPTER – RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning
L-693120	Skruv M6 x 20 mm, plus

ICELOCK TILLVERKNINGSVERKTYG 680 – RESERVDELAR (ALLT I HÄRDAT STÅL)

	Art.nr.	Beskrivning
5.	L-692010	Dummy för kopplingshus med o-ring
7.	L-692119	Fixtur
8a.	L-692120	Dummy för tryckknapp, standard
8b.	L-692125	Dummy för tryckknapp, lång
1a.	L-692130	Dummy för låspinne, standard
1b.	L-692133	Dummy för låspinne, kort
2.	L-693110	Skruv för låspinne-dummy
10.	L-692015	Insex, bit
11.	L-692017	Monteringsverktyg
	L-693126	O-ring 4 x 2 till bits - insex och stjärna



ICELOCK® 700 SERIEN




Icelock 721 är en stegad snabbkoppling avsedd att användas i kombination med Iceross Junior och Iceross Upper-X.

- Låg bygghöjd och kompakt design
- Lätt vikt, väger endast 20 gram.
- Max. patientvikt för komponenterna är 45 kg.
- Låset kan demonteras från insidan av hylsan för service eller byte.
- Passar alla aktivitetsnivåer.



ÖVERSIKT - ICELOCK 700

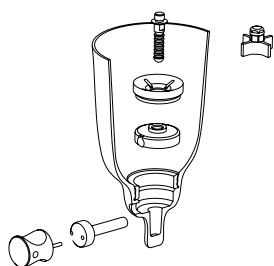

Laminering i 2 steg
Icelock 721
Stegad snabbkoppling



Standardlaminering
Icelock 772
Hanpyramid (aluminium/stål)



Standardlaminering
Icelock 774
4-hålsadapter (aluminium)

ICELOCK 721 STEGAD SNABBKOPPLING

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-721000	Icelock 721 Stegad snabbkoppling inkl. stegad låspinne med M6-gänga	13 mm	20 g



Levereras utan adapter. Vid tillverkning av protesylsa med Icelock 721 behövs Icelock 780 tillverkningsverktyg (se nedan).

ICELOCK 780 TILLVERKNINGSVERKTYG

Art.nr.	Beskrivning
L-780000	Icelock 780 tillverkningsverktyg

Alla verktyg för tillverkningsprocessen är återanvändningsbara och enkla att hantera.



SPECIALANPASSADE DISTALA ADAPTRAR TILL ICELOCK 700

Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. patientvikt
L-772000	Icelock 772 Hanpyramid	Aluminium/stål	45 kg
Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. patientvikt
L-774000	Icelock 774 4-hålsadapter	Aluminium	45 kg



TRYCKKNAPPSVERKTYG


Art.nr.	Beskrivning
L-792016	Tryckknappsverktyg för enklare demontering av tryckknappen (beställs separat)



ICELOCK® 700 SERIEN

ICELOCK 721 – RESERVDLAR

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-792150	Ingjutningsring, liten
2.	L-792020	Snabbkoppling
3.	L-792110	Tratt, liten
4.	L-792027	Tryckknapp, liten
5.	L-792000	Stegad låspinne, 32 mm
5.	L-792005	Stegad låspinne, 56 mm
	L-793112	Silikontätning
6.	L-792016	Verktyg för enklare demontering av tryckknapp
	L-792031	Pin Adapter (M10/M6)*

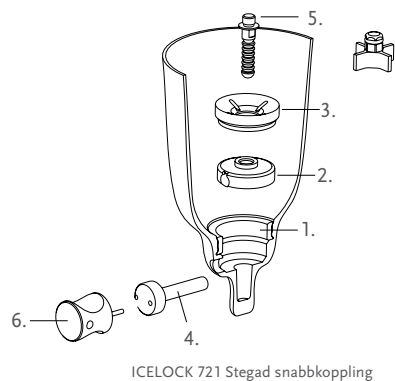

*Används i de fall när Icelock 721 skall användas ihop med en annan liner än Iceross Upper-X eller Iceross Junior-liners.

ICELOCK 780 TILLVERKNINGSVERKTYG – RESERVDLAR (I HÄRDAT STÅL)

Art.nr.	Beskrivning
L-792119	Fixtur, liten
L-792120	Dummy för tryckknapp, liten
L-792130	Dummy för låspinne, liten
L-692015	Insex, bit
L-792017	Monteringsverktyg

ICELOCK® 850 HYBRID



Icelock 850 Hybrid är ett lås för personer med amputerade nedre extremiteter på alla aktivitetsnivåer. Det ger överlägsen funktion genom att fördelarna med locking-suspension kombineras med fördelarna med vakuumsuspension. Användaren upplever minskade pumpprörelser och förbättrad rotationskontroll från Seal-In samtidigt som man behåller den mekaniska anslutningen som man är van vid med dess uppfattningsrespons.

EGENSKAPER:

- Möjlighet att enkelt växla mellan enbart locking-suspension, enbart Seal-In eller kombinera dessa suspensionsmekanismer samtidigt.
- Enkel frigöring från liner med Quick Connect
- Vattentät*
- Kompatibel med Unity
- Kompatibel med Direct Socket, laminerade hylsor med 4-hålsfäste och laminerade hylsor

Låset används med Iceross Seal-In X Locking TF-liner, flyttbara tättningsringar och en lufttät hylsa. Kombinera Seal-In-teknik och Unity-vakuumsystemet för att stabilisera volymfluktuationer och för att hylsan ska sitta bekvämt hela dagen.

Quick Connect-funktionen är utformad för att vara enkel och bekväm och gör det möjligt för användarna att ta på proteshylsan medan de sitter och lossa den från linern med en enkel knapptryckning.

* Låsen är helt vattentäta, men Direct Socket är klassat som väderbeständigt så kombinationen kommer att vara väderbeständig.



Videos: Icelock tutorials on YouTube – [Playlist]

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

ICELOCK 850 HYBRID

Art.nr.	Beskrivning	Max. patientvikt?	Bygghöjd	Vikt
L-850001	Icelock 850 Hybrid för Direct Socket	166 kg	19 mm	151 g
L-850002	Icelock 850 Hybrid för hylsor med 4-hålsfäste	166 kg	19 mm	151 g
L-850003	Icelock 850 Hybrid för laminerade hylsor	N/A	N/A*	77 g



* Bygghöjden varierar beroende på hylsans tillverkningsmetod och den inbyggda förskjutningen i hylsan.

ICELOCK® 850 HYBRID

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

ICELOCK 850 HYBRID – RESERVDELAR

	Art.nr.	Beskrivning
1.	L-850106	Reservdel till klicklåset. Inkluderande 1 låsknapp med inkl. skruv
2.	L-850107	Reservdel till dragbandet för L-850001 och L-850003 (inkl. 1 förmonterad Quick Connect med dragband, 1 bandstyrning, 1 lås)
2.	L-850108	Reservdel till dragbandet för L-850002 (inkl. 1 förmonterad Quick Connect med dragband, 1 bandstyrning, 1 lås)
3.	L-850313	Icelock 850 Låspinne

VAKUUMVENTILER

	Art.nr.	Beskrivning
4.	L-551002	Icelock Vakuumventil 551
5.	L-552000	Icelock Vakuumventil 552
6.	UTF0001	Unity TF hylsventilsats



OBS: Vakuumventiler måste beställas separat



VERKTYG

CROSS DRIVER MED O-RING

Art.nr.	Beskrivning
L-692017	Cross driver med o-ring

+PLUSERIEN DISPENSER

Art.nr.	Beskrivning
FSX80016	+PluSerien 215 ml Dispenser



+PLUSERIEN LIM

Art.nr.	Beskrivning
FSX80015	+PluSerien lim 215 ml - komposit 1 minut
FSX80017	+Pluseries blandningsmunstycken. Innehåller: 6 blandningsmunstycken




ÖSSUR ADAPTERS

TESTADE ENLIGT ISO 10328

4-HÅLSADAPTRAR



A-122100
hylsadapter med
4-hålsfäste,
aluminium – 100 kg

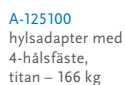


A-125100
hylsadapter med
4-hålsfäste,
titan – 166 kg



A-135100
hylsadapter med
hanpyramid,
titan – 166 kg



A-233100
4-hålsadapter med
hanpyramid,
aluminium – 100 kg

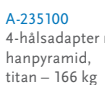


A-235100
4-hålsadapter med
hanpyramid,
titan – 166 kg



A-235300
4-hålsadapter med
hanpyramid + rotation,
titan – 166 kg



A-242100
4-hålsadapter med
hanpyramid,
aluminium – 100 kg

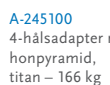

A-245100
4-hålsadapter med
hanpyramid,
titan – 166 kg



A-245300
4-hålsadapter med
hanpyramid + rotation,
titan – 166 kg



A-122300
4-hålsadapter
aluminium – 125 kg



A-243320
4-hålsadapter med
hanpyramid + rotation,
Rostfritt stål – 136 kg



1651014
4-håls anslutningsplatta
aluminium – 136 kg



A-244320
4-hålsadapter med
hanpyramid + rotation,
Rostfritt stål – 136 kg



A-342430
Röradapter med honpyramid,
14 mm Offset – aluminium
– 100 kg



A-645210
Förskjutningsadapter –
titan – 166 kg




A-235400
hanpyramid, 4-håls med
8 mm offset
titan – 166 kg

PYRAMIDADAPTRAR



A-134300
hanpyramid med utv.
36 mm gänga,
rostfritt stål – 100 kg

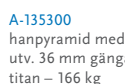


A-135300
hanpyramid med
utv. 36 mm gänga,
titan – 166 kg



A-835300
hanpyramid med
inv. 36 mm gänga
titan – 166 kg



A-144300
honpyramid med
utv. 36 mm gänga,
stål – 100 kg

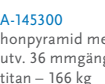

A-145300
honpyramid med
utv. 36 mm gänga,
titan – 166 kg



A-845300
honpyramid med
inv. 36 mm gänga
titan – 166 kg



A-145310
honpyramid med
utv. 36 mm gänga
titan – 166 kg



1970862
loop adapter alu/rost-
fritt stål – 136 kg



1970863
pyramidadapter
alu/rostfritt stål – 136 kg



1633121
36 mm gänga för användning
med 3- och 4-armad adapter - 136 kg



M631100
IKF-adapter
alu/rostfritt stål – 136 kg



A-242500
honpyramid, 4-håls med
20/20 offset –125 kg



A-242510
honpyramid, 4-håls med
20/20 offset 10° höger
–125 kg



A-242520
honpyramid, 4-håls med
20/20 offset 10° vänster
–125 kg

KNÄLEDSADAPTRAR

HYLSADAPTRAR



A-114030
hylsadapter, 3-armad
stål (36 mm gänga)
– 166 kg



A-114040
hylsadapter, 4-armad,
gängad, stål
(36 mm gänga) – 166 kg



A-554700
dubbel han-/honpyramid-
adapter
8 mm offset plus 10° vinkel
Rostfritt stål – 125 kg

RÖRADAPTRAR



A-333100
röradapter med
hanpyramid,
aluminium – 100 kg



A-335100
röradapter med
hanpyramid,
titan – 166 kg



A-342100
röradapter med
honpyramid,
aluminium – 100 kg



A-345100
röradapter med
honpyramid,
titan – 166 kg



A-322100
röradapter,
4-hålsfäste,
aluminium – 100 kg



A-325100
röradapter med
4-hålsfäste,
titan – 166 kg

S.A.C.H. FOTADAPTER



A-833100
S.A.C.H. fotadapter,
aluminium – 100 kg



A-835100
S.A.C.H. fotadapter,
titan – 166 kg

A-282440
4-håls med 20° rot. (+/-10°), 36 mm gänga
45 mm offset / 10° flexion, alu. – 136 kg

A-282460
4-håls med 20° rot. (+/-10°), 36 mm gänga
60 mm offset / 10° flexion, alu. – 136 kg

A-282470
4-håls med 20° rot. (+/-10°), 36 mm gänga
75 mm offset / 15° flexion, alu. – 136 kg

ÖSSUR ADAPTERS

TESTADE ENLIGT ISO 10328

ENKELADAPTRAR



A-433110
hanpyramid m rör,
kort 35.5 mm,
aluminium – 100 kg

A-435110
hanpyramid m rör,
kort 36 mm,
titan – 166 kg



A-433120
hanpyramid m rör,
lång 63 mm,
aluminium – 100 kg

A-435120
hanpyramid m rör,
lång 63 mm,
titan – 166 kg



A-442100
honpyramid m rör,
100 mm,
aluminium – 100 kg

A-445100
honpyramid m rör,
100 mm,
titan – 166 kg



A-442110
honpyramid m rör,
200 mm,
aluminium – 100 kg

HEIGHT ADJUSTABLE PYLON



A-542350
justeringsmöjlighet
77-95 mm
aluminium – 100 kg



A-542360
justeringsmöjlighet
94-128 mm
aluminium – 100 kg

DUBBELADAPTRAR



A-533100
dubbel hanpyramid-
adapter,
aluminium – 100 kg

A-535100
dubbel hanpyramid-
adapter,
titan – 166 kg



A-542110
dubbel honpyramid-
adapter, 32 mm,
aluminium – 100 kg

A-545110
dubbel honpyramid-
adapter, 32 mm,
titan – 166 kg



A-542120
dubbel honpyramid-
adapter, 45 mm,
aluminium – 100 kg

A-545120
dubbel honpyramid-
adapter, 45 mm,
titan – 166 kg



A-542130
dubbel honpyramid-
adapter, 60 mm,
aluminium – 100 kg

A-545130
dubbel honpyramid-
adapter, 60 mm,
titan – 166 kg



A-542140
dubbel honpyramid-
adapter, 75 mm,
aluminium – 100 kg

A-545140
dubbel honpyramid-
adapter, 75 mm,
titan – 166 kg

RÖR & RÖR MED ADAPTER



A-712010
rör – kort 250 mm
aluminium – 100 kg

A-712020
rör – långt 400 mm
aluminium – 100 kg



A-742010
rör m honpyramid – kort 250 mm
aluminium – 100 kg

A-742020
rör m honpyramid – långt 400 mm
aluminium – 100 kg



A-748010
rör m honpyramid – kort 250 mm
titan / aluminium – 100 kg

A-748020
rör m honpyramid – långt 400 mm
titan / aluminium – 100 kg



A-748030
rör m honpyramid, WP – kort 250 mm
titan – 166 kg

A-748040
rör m honpyramid, WP – långt 400 mm
titan – 166 kg



A-762111
Female pylon kit – kort 250 mm
aluminium – 100 kg

A-762121
Female pylon kit – långt 400 mm
aluminium – 100 kg



A-764111
Female pylon kit, WP - kort 250 mm
titan – 166 kg

A-764121
Female pylon kit, WP – långt 400 mm
titan – 166 kg

ÖSSUR ADAPTERS

EGENSKAPER

WEATHERPROOF

En väderbeständig enhet tillåter användning i våt och/eller fuktig miljö. Den tillåter *inte* nedsänkning i vatten. Enheten klarar stänk av färskvatten (t.ex. regn) men ska torkas av noggrant efteråt. Färskvatten inkluderar kranvatten (sötvatten), exkluderar saltvatten eller klorerat vatten.

Obs! För att en protes skall anses som väderbeständig, måste övriga proteskomponenter också vara väderbeständiga.



WEATHERPROOF

WATERPROOF

Oavsett om komponenten utsätts för sötvatten, saltvatten eller klorerat vatten, ger Össurs vattentäta komponenter det skydd som behövs. Användning av förstklassigt tillverkningsmaterial ger ett permanent skydd mot skadligt intrång av vatten, även efter nedsänkning, och komponentdelarna fortsätter att ge den funktion som kan förväntas.



WATERPROOF

ÖSSUR ADAPTERS

KIT WITH LONG SET SCREWS FOR EXTREME ALIGNMENT*

Art.nr.	Material	Längd	Antal	
A-960800	Rostfritt stål	16 mm	10 stk/fp	



KIT WITH LONG SET SCREWS FOR EXTREME ALIGNMENT*

Art.nr.	Material	Längd	Antal	
A-960900	Stål	16 mm	10 stk/fp	

*De förlängda justerskruvarna (inställningsskruvarna) har tagits ut ur förpackningen för alla relevanta adapterar och köps numera separat (10 stk/fp)

VIKTBEGRÄNSNING 100 KG

HYLSADAPTRAR

HYLSADAPTER MED 4-HÅLSFÄSTE

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-122100	Aluminium	18.5 mm	18.5 mm	70 g	



HANPYRAMID MED UTVÄNDIG GÄNGA I ROSTFRITT STÅL

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-134300	Rostfritt stål	31 mm	7.5 mm	94 g	



HONPYRAMID MED UTVÄNDIG GÄNGA

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-144300	Rostfritt stål*	23 mm	14 mm	83 g	



*Används tillsammans med 4-armad hylsadapter #A-114040, 3-armad hylsadapter #A-114030 eller hylsadapter med 4-hålsfäste i aluminium #A-122100 eller titan #A-125100

4-HÅLSADAPTRAR, MED SKRUVAR

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-233100	Aluminium / Pyramid i rostfritt stål	23.5 mm	9 mm	62 g	



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-242100	Aluminium	16 mm	16 mm	46 g	



RÖRADAPTRAR

RÖRADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-333100	Aluminium / Pyramid i rostfritt stål	56 mm	41.5 mm	62 g	

Moment: Klämskruv 10Nm. För säker fastsättning, använd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet 2 ggr.



RÖRADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-342100	Aluminium	50 mm	16 mm	64 g	

Moment: Klämskruv 10Nm, Justerskruvar 15Nm. För säker fastsättning, använd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet 2 ggr.



RÖRADAPTER MED 4-HÅLSFÄSTE

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-322100	Aluminium	38 mm	4 mm	52 g	

Moment: Klämskruv 10Nm, Justerskruvar 10Nm. För säker fastsättning, använd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet 2 ggr.



VIKTBEGRÄNSNING 100 KG

ENKELADAPTRAR

HANPYRAMID MED RÖR - KORT

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-433110	Rör i aluminium / Pyramid i rostfritt stål	50 mm	35.5 mm	60 g	



HANPYRAMID MED RÖR - LÅNGT

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-433120	Rör i aluminium / Pyramid i rostfritt stål	77 mm	63 mm	86 g	



77 mm = total längd, kan kapas till 70 mm längd.

HONPYRAMID MED RÖR - KORT

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-442100	Aluminium	100 mm	100 mm	86 g	



100 mm = total längd, kan kapas till 60 mm längd.

HONPYRAMID MED RÖR - LÅNGT

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-442110	Aluminium	200 mm	200 mm	153 g	



200 mm = total längd, kan kapas till 60 mm längd.

DUBBELADAPTRAR

DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER- 32 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-542110	Aluminium	32 mm	32 mm	66 g	



DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER - 45 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-542120	Aluminium	45 mm	45 mm	76 g	



DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER - 60 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-542130	Aluminium	60 mm	60 mm	88 g	



DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER - 75 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-542140	Aluminium	75 mm	75 mm	100 g	



DUBBEL HANPYRAMIDADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-533100	Aluminium / Pyramid i rostfritt stål	41 mm	12 mm	84 g	



VIKTBEGRÄNSNING 100 KG

RÖR & RÖR MED ADAPTER

RÖR - KORT OCH LÅNGT

Art.nr.	Material	Längd
A-712010	Aluminium	250 mm
A-712020	Aluminium	400 mm



RÖR MED HONPYRAMID - KORT OCH LÅNGT

Art.nr.	Material	Längd
A-742010	Aluminium	250 mm
A-742020	Aluminium	400 mm



PROTES-KIT 1 - KORT OCH LÅNGT

Art.nr.	Material	Längd
A-762111	Aluminium*	250 mm
A-762121	Aluminium**	400 mm



*Innehåller: #A-742010 Rör med honpyramid - kort **Innehåller: #A-742020 Rör med honpyramid - långt
#A-342100 Röradapter med honpyramid #A-342100 Röradapter med honpyramid

RÖR MED HONPYRAMID - KORT & LÅNGT

Art.nr.	Material	Längd
A-748010	Female Pylon Short - Aluminium/Titan	250 mm
A-748020	Female Pylon Long - Aluminium/Titan	400 mm



HEIGHT ADJUSTABLE PYLON

Art.nr.	Material	Min. Höjd	Min. Bygghöjd	Justeringsmöjlighet	Vikt
A-542350	Aluminium	77 mm	77 mm	77-95 mm	190 g



HEIGHT ADJUSTABLE PYLON - LÅNG

Art.nr.	Material	Min. Höjd	Min. Bygghöjd	Justeringsmöjlighet	Vikt
A-542360	Aluminium	94 mm	94 mm	94-128 mm	220 g



Video:
Height Adjustable Pylons
Classroom Catch-up
1 min 55 sek

FOTADAPTER

S.A.C.H. FOTADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-833100	Aluminium / Pyramid i rostfritt stål	25 mm	9.5 mm	105 g



FÖRSKJUTNINGSADAPTER

RÖRADAPTER MED HONPYRAMID 14 MM OFFSET

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-342430	Aluminium	69 mm	35 mm	135 g



VIKTBEGRÄNSNING 125 KG

OFFSET-ADAPTRAR

4-HÅLSADAPTER - HONPYRAMID - MED 20/20 OFFSET

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-242500	Aluminium	22 mm	22 mm	118 g	



4-HÅLSADAPTER - HONPYRAMID - MED 20/20 OFFSET - 10° HÖGER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-242510	Aluminium	24 mm	24 mm	120 g	



4-HÅLSADAPTER - HONPYRAMID - MED 20/20 OFFSET - 10° VÄNSTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-242520	Aluminium	24 mm	24 mm	120 g	



DUBBEL HAN-/HONPYRAMIDADAPTER, 8 MM OFFSET PLUS 10° VINKEL

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-554700	Rostfritt stål	40 mm	24 mm	153 g	



4-HÅLSADAPTER

EURO 4-HÅLSADAPTER (TILL TOTAL KNEE)

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-122300	Aluminium	11 mm	11 mm	70 g	



VIKTBEGRÄNSNING 136 KG

4-HÅLSADAPTRAR, MED SKRUVAR

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-234320	Rostfritt stål	25 mm	10.5 mm	141 g	



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	
A-244320	Rostfritt stål	20 mm	20 mm	128 g	



VIKTBEGRÄNSNING 136 KG

HYLSADAPTRAR

4-HÅLS ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
1651014	Aluminium	9 mm	9 mm	60 g



36 MM GÄNGA FÖR ANVÄNDNING MED 3- ELLER 4-ARMAD ADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
1633121	Aluminium	12 mm	3 mm	64 g



LOOP-ADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
1970862	Aluminium / Rostfritt stål	15 mm	6 mm	99 g



PYRAMIDADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
1970863	Aluminium / Rostfritt stål	23 mm	7 mm	86 g



IKF-ADAPTER (INITIAL KNEE FLEXION)

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
M631100	Aluminium / Rostfritt stål	37 mm	23 mm	220 g



FLEXION PLATES

4-HÅLSADAPTER MED 20° ROTATION (+/-10°) OCH 36 MM GÄNGA

Art.nr.	Beskrivning	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-282440	45 mm offset / 10° flexion	Aluminum	12 mm	9 mm	129 g
A-282460	60 mm offset / 10° flexion	Aluminum	12 mm	3 mm	157 g
A-282470	75 mm offset / 15° flexion	Aluminum	12 mm	6 mm	193 g



SKRUVAR TILL FLEXION PLATES

SKRUVAR TILL FLEXION PLATES FÖR ANVÄNDNING MED DIRECT SOCKET OCH ICELOCK 600

Art.nr.	Material	Längd
A-964410	Rostfritt stål	24 mm

SKRUVAR TILL FLEXION PLATES FÖR ANVÄNDNING MED DIRECT SOCKET OCH ICELOCK 850

Art.nr.	Material	Längd
A-964420	Rostfritt stål	32 mm

VIKTBEGRÄNSNING 166 KG

HYLSADAPTRAR

HYLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-135100	Titan	23 mm	8.5 mm	58 g



HYLSADAPTER MED 4-HÅLSFÄSTE

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-125100	Titan	18.5 mm	18.5 mm	112 g



HYLSADAPTER, 4-ARMAD, GÄNGAD

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-114040	Rostfritt stål	8 mm	8 mm	158 g



För säker fastsättning, använd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet 2 ggr (klämskruv 10 Nm)

HYLSADAPTER, 3-ARMAD

Art.nr.	Material	Bygghöjd	Vikt
A-114030	Rostfritt stål	8 mm	124 g



För säker fastsättning, använd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet 2 ggr (klämskruv 10 Nm)

HANPYRAMID MED UTV. GÄNGA

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-135300	Titan	31 mm	7.5 mm	56 g



HONPYRAMID MED UTV. GÄNGA

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-145300	Titan	23 mm	14 mm	53 g



HONPYRAMID MED UTV. GÄNGA (LP)

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-145310	Titan	9 mm	9 mm	33 g



VIKTBEGRÄNSNING 166 KG

4-HÅLSADAPTRAR MED SKRUVAR

4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235100	Titan	23 mm	8.5 mm	54 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235300	Titan	25 mm	10.5 mm	72 g



4-HÅLSADAPTER MED HANPYRAMID OCH 8 MM OFFSET

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-235400	Titan	23 mm	8.5 mm	65 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245100	Titan	15.5 mm	15.5 mm	64 g



4-HÅLSADAPTER MED HONPYRAMID + ROTATION

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-245300	Titan	17.5 mm	17.5 mm	76 g



RÖRADAPTRAR

RÖRADAPTER MED HANPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-335100	Titan	56 mm	5.5 mm	82 g



RÖRADAPTER MED HONPYRAMID

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-345100	Titan	50 mm	14 mm	78 g



RÖRADAPTER MED 4-HÅLSFÄSTE

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-325100	Titan	38 mm	2 mm	68 g



VIKTBEGRÄNSNING 166 KG

ENKELADAPTRAR

HANPYRAMID MED RÖR - KORT

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-435110	Titan	50 mm	35.5 mm	80 g



HANPYRAMID MED RÖR - LÅNGT

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-435120	Titan	77 mm	63 mm	103 g



77 mm = total längd, kan kapas till 70 mm längd.

HONPYRAMID MED RÖR

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-445100	Titan	100 mm	100 mm	118 g



100 mm = total längd, kan kapas till 60 mm:s längd.

DUBBELADAPTRAR

DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER - 32 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-545110	Titan	32 mm	32 mm	90 g



DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER - 45 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-545120	Titan	45 mm	45 mm	102 g



DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER - 60 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-545130	Titan	60 mm	60 mm	119 g



DUBBEL HONPYRAMIDADAPTER - 75 MM

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-545140	Titan	75 mm	75 mm	135 g



DUBBEL HANPYRAMIDADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-535100	Titan	41 mm	12 mm	98 g



PYRAMIDADAPTRAR

HANPYRAMIDADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-835300	Titan	32.8 mm	18 mm	80 g



HONPYRAMIDADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-845300	Titan	26 mm	26 mm	85 g



VIKTBEGRÄNSNING 166 KG

RÖR & RÖR MED ADAPTER

RÖR MED HONPYRAMID, WP – LÅNGT & KORT

Art.nr.	Material	Längd
A-748030	Honpyramid i titan, rör i aluminium - kort	250 mm
A-748040	Honpyramid i titan, rör i aluminium - långt	400 mm



RÖR MED HONPYRAMID, WP, KIT – LÅNGT & KORT

Art.nr.	Material	Längd
A-764111	Aluminium / titan*	250 mm
A-764121	Aluminium / titan**	400 mm

*Innehåller: #A-748030 Honpyramid i titan, rör i aluminium - kort
#A-345100 Röradapter med honpyramid i titan

**Innehåller: #A-748040 Honpyramid i titan, rör i aluminium - långt
#A-345100 Röradapter med honpyramid i titan



S.A.C.H. FOTADAPTER

S.A.C.H. FOTADAPTER

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-835100	Titan	25 mm	9.5 mm	110 g



FÖRSKJUTNINGSADAPTER

FÖRSKJUTNINGSADAPTER - TITAN

Art.nr.	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt
A-645210	Titan	60 mm	60 mm	208 g



KNEE ROTATION ADAPTER



UNITY[®]
COMPATIBLE

Knee Rotation Adapter möjliggör rotation av underbenet med 360°. Avsedd för transfemoralt amputerade. Adaptern monteras direkt ovanför protesknäleden.

Låg vikt. 7° vinklingsmöjlighet i alla riktningar.

Designad för att användas tillsammans med Össurs mikroprocessorknäleder och mekaniska protesknäleder.



EGENSKAPER

- Möjliggör rotation av underbenet/protesen
- Enkel hantering: tryck på en frigöringsknapp för att starta rotation.
- Enheten låses automatiskt i neutralt läge.
- Aktiviteter i begränsade utrymmen är möjliga (t.ex. att köra bil).
- Underlättar dagliga aktiviteter som att ta på sig skorna
- Patienten kan inta komplexa ställningar som annars vore omöjliga (t.ex. sitta med korsade ben)
- Väderbeständig

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäexartikulation
Impact:	Låg till medel
Max. patientvikt:	125 kg

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

KNEE ROTATION ADAPTER

Art.nr.	Beskrivning	Material	Höjd	Bygghöjd	Vikt	Vinklingsmöjlighet
A-554300	Knee Rotation Adapter	Rostfritt stål	42 mm	27 mm	210 g	7° i alla riktningar



TORSION SHOCK ADAPTER



Torsion Shock Adapter är en modulär stöt- och rotationsadapter som ger stöt- och rotationsdämpning mellan proteshysan och stumpen vilket minskar de skadliga skjuv- och rotationskrafterna mot huden. Kan användas som en del av en protes under dagliga aktiviteter. 36 mm proximal gänganslutning.

Väderbeständig.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Amputation på nedre extremiteter
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	147 kg
Vikt:	415 g
Bygghöjd:	67-93 mm (beroende på anslutande adapter)

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

VAL AV ENHET

Vikt, kg	45-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg	TSA50001	TSA50001	TSA50001	TSA50002	TSA50003	TSA50003
Impact: Medel	TSA50001	TSA50001	TSA50002	TSA50003	TSA50003	N/A
Impact: Hög	TSA50001	TSA50002	TSA50003	TSA50003	N/A	N/A



KOMPONENTER

Össur rekommenderar att Torsion Shock Adapter används tillsammans med s.k. M36 adapterar från Össur, se kompatibla adapterar nedan.

KOMPATIBLA ADAPTERAR

Bild	Art.nr.	Beskrivning	Material	Max. vikt	Vikt
1.	A-114030	3- armad hylsadapter	Stål	166 kg	124 g
2.	A-114040	Hylsadapter, 4-armad, gängad	Stål	166 kg	158 g
3.	A-122300	Adapter 4-håls. Skruvas direkt på gängan på knäleden.	Aluminium	125 kg	70 g
4.	A-834300	Hanpyramidadapter	Stål	100 kg	111 g
4.	A-835300	Hanpyramidadapter	Titan	166 kg	80 g
5.	A-845300	Honpyramidadapter	Titan	166 kg	85 g



ÖSSUR UPPER LIMB

MECHANICAL

NAKED
PROSTHETICS



MCPDRIVER®



THUMBDRIVER®



PIPDRIIVER®



GRIPLOCK FINGER®

BIONIC



i-LIMB® QUANTUM



i-LIMB® ACCESS



i-DIGITS® QUANTUM



i-DIGITS® ACCESS

PASSIVE FUNCTIONAL



LIVINGSKIN®

NAKED PROSTHETICS®

MCPDriver®

En kroppsdriven protes som är avsedd för de med fingeramputation eller fingerdeformitet på grundfalangen på finger två till fem. MCPDriver återställer den ursprungliga fingerlängden och hjälper därmed till att imitera naturliga greppmönster.

MCPDriver återställer precision och kraft vid grepp (t.ex. pincett-grepp, skrivande och cylindriskt grepp) samt greppstyrka. Tack vare den hållbara metallramen och de robusta komponenterna kan användare återgå till en särskilt krävande livsstil utan att tveka. Den här protesen styrs av en intakt MCP-led och stödet ges av det återstående fingret, som måste vara tillräckligt långt för att kunna manövrera protesens ring.

- En silikondyna på handryggsplattan som ger mer komfort och skydd.
- Utbytbara silikonjusteringsinlägg kan användas för att kompensera för volymförändringar.
- Injusteringsbricka för injustering och optimering av inriktning.
- Ett alternativ med en konduktiv ledande fingertopp för användning av pekskärmar finns tillgängligt.
- För färg och strukturalternativ, se "Intake and Fitting Form"

Kontakta Customer Support för beställning och för komplett lista över reservdelar!

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0001	1 Digit w/Strap System
NPD1-0002	2 Digits w/Strap System
NPD1-0003	3 Digits w/Strap System
NPD1-0004	4 Digits w/Strap System



Naked Prosthetics:
Intake and Fitting Form



Video:
MCPDriver (Naked Prosthetics -
Technical Tips)
16 min 24 sek

UTÖKAD GARANTI

MCPDRIVER – UTÖKAD GARANTI

MCPDriver levereras med 2 års garanti som standard. Ett extra garantiår kan köpas till, vilket ger totalt 3 års garantitid.

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0074	Warranty-MCP 1DS-Add 1 Yr
NPD1-0076	Warranty-MCP 2DS-Add 1 Yr
NPD1-0078	Warranty-MCP 3DS-Add 1 Yr
NPD1-0080	Warranty-MCP 4DS-Add 1 Yr

ThumbDriver®

En kroppsdriven protes som är avsedd för de med fingeramputation eller fingerdeformitet på tummens grundfalang.

Med ThumbDriver kan man återställa 2- och 3-punktsgrepp, möjliggöra säkra greppmönster med mellanstor och stor diameter och förbättra de finmotoriska funktionerna och förmågorna.

Protesen styrs av en intakt MCP-led och följer CMC-ledens rörelser. Stödet ges av det återstående fingret, som måste vara tillräckligt långt för att kunna manövrera protesens ring. Användare med fingeramputation eller fingerdeformitet, som inte kan försörjas med ThumbDriver i standardutförande kan ändå dra nytta av protesen för att förbättra sitt funktionsomfång. Fråga oss om individuella lösningar.

Våra ingenjörer skräddarsyr protesen efter brukaren vilket ger en funktionell protes. Vårt inskrivningsformulär ger stegvis vägledning genom beställningen, som görs med hjälp av ett Naked Prosthetics-storlekskit, gipsavgiutning av handen och detaljerade bilder av båda händerna samt en video som visar rörelseomfånget.

- Den här designen erbjuder ett inställbart förflexionsalternativ, med vilket användare kan anpassa protesen enligt de krav som ställs av den uppgift som de ska utföra.
- Funktionella nyp- och greppmönster.
- Ett alternativ med konduktiv fingertopp finns som tillval för användning med peksskärm.
- För färg och strukturalternativ, se "Intake and Fitting Form"

Kontakta Customer Support för beställning och för komplett lista över reservdelar!



Naked Prosthetics:
Intake and Fitting Form



Video:
ThumbDriver (Naked Prosthetics -
Technical Tips)
16 min 14 sek

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0007	1 Digit w/Strap System (Standard)
NPD1-0008	1 Additional Digit w/Strap System
NPD1-0009	2 Additional Digits w/Strap System
NPD1-0010	3 Additional Digits w/Strap System
NPD1-0011	4 Additional Digits w/Strap System

UTÖKAD GARANTI

THUMBDRIVER – UTÖKAD GARANTI

ThumbDriver levereras med 2 års garanti som standard. Ett extra garantiår kan köpas till, vilket ger totalt 3 års garantitid.

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0082	Warranty-MCP TH 1DS-Add 1 Yr
NPD1-0084	Warranty-MCP TH 2DS-Add 1 Yr
NPD1-0086	Warranty-MCP TH 3DS-Add 1 Yr
NPD1-0088	Warranty-MCP TH 4DS-Add 1 Yr
NPD1-0090	Warranty-MCP TH 5DS-Add 1 Yr

PIPDriver®

PIPDriver är en kroppsdreven, måttillverkad fingerprotes avsedd för de med fingeramputation eller fingerdeformitet på mellanfalangen på finger två till fem. Den styrs av en intakt PIP-led med tillräckligt långt återstående finger som fingerprotesens hylsa kan fästas på.

De med finger- eller delhandsamputation som inte uppfyller de typiska kraven för PIPDriver kan dock fortfarande dra funktionell nytta av en PIPDriver.

Våra ingenjörer skräddarsyr protesen efter brukaren vilket ger en funktionell protes. Vårt inskrivningsformulär ger stegvis vägledning genom beställningen, som görs med hjälp av ett Naked Prosthetics-storlekskit, detaljerade bilder av båda händerna samt en video som visar rörelseomfånget.

- Individuellt anpassad design för bekväm passform och förbättrad funktion för vardagsaktiviteter.
- Tillverkad av stark och hållbar medicinsktekniskt klassad nylon 12.
- En hylsliknande struktur skyddar stumpen.
- Slank och smidig design gör det möjligt att använda flera NP-proteser samtidigt.
- Lätta fästskruvar av titan
- Ett alternativ med konduktiv fingertopp finns som tillval för användning med pekskärm.
- För färg och strukturalternativ, se "Intake and Fitting Form"

Kontakta Customer Support för beställning och för komplett lista över reservdelar!

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0005	Standard PIPDriver
NPD1-0006	Capacitive PIPDriver



Naked Prosthetics:
Intake and Fitting Form



Video:
PIPDriver (Naked Prosthetics -
Technical Tips)
5 min 59 sek

UTÖKAD GARANTI

PIPDIVER – UTÖKAD GARANTI

PIPDiver levereras med 2 års garanti som standard. Ett extra garantiår kan köpas till, vilket ger totalt 3 års garantitid.

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0072	Warranty-CAP PIP-Add 1 Yr
NPD1-0068	Warranty-PIP-Add 1 Yr

GripLock Finger®

GripLock Finger är avsedd för de med fingeramputation eller fingerdeformitet på pek-, mitt-, ring- och/eller lillfingrets knogled eller proximalt därom, och används tillsammans med en måttillverkad hylsa som anpassas av ortopedingenjören.

Med GripLock Finger, som är ett passivt protesfinger, kan användaren själv kan ställa in fingret i olika förinställda lägen med hjälp av den andra handen eller genom att trycka fingret mot en hård yta. Fingret kan sedan låsas upp och sträckas ut helt genom att användaren trycker på spaken på baksidan eller flekterar fingret maximalt förbi den sista låsningspositionen.

- Hölje som kan bytas på plats
- Fingertoppsyta av silikon
- Bearbetat aluminium
- Sätthärdat rostfrittstål
- Designen har optimerats för bärande av tunga laster.
- Finns i fingerlängderna: 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm och 90 mm.
- GripLock Finger® kan användas tillsammans med MCPDriver®, PIPDriver® och/eller ThumbDriver®, och erbjuds i samma färger.
- För färg och strukturalternativ, se "Intake and Fitting Form".

Kontakta Customer Support för beställning och för komplett lista över reservdelar!



Naked Prosthetics:
Intake and Fitting Form



Video:
GripLock Finger Naked Prosthetics
4 min 21 sek

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0012	GripLock Finger, inkl. ingjutningsankare.

UTÖKAD GARANTI

GRIPLOCK FINGER – UTÖKAD GARANTI

GripLock Finger levereras med 2 års garanti som standard. Ett extra garantiår kan köpas till, vilket ger totalt 3 års garantitid.

Art.nr.	Beskrivning
NPD1-0070	Warranty-GLF-Add 1 Yr

ÖSSUR UPPER LIMB

EGENSKAPER

GESTURE CONTROL

Fyra förinställda grepp uppnås genom en rörelse av protesen i en av fyra riktningar (framåt, bakåt, vänster eller höger). Greppen som programmeras för varje riktning, anpassas till användarens krav med hjälp av My i-Limb-appen. Gesture Control är möjligt tack vare i-Mo Technology.



GESTURE CONTROL

APP CONTROL

Quick Grips ger omedelbar tillgång till olika förprogrammerade och anpassade s.k. My Grips, vilket ger protesanvändaren stor variationsmöjlighet och flexibilitet när det gäller att anpassa protes handen till en mängd olika dagliga aktiviteter. Quick Grips kan användas med ett antal mobila Apple-enheter inklusive Apple Watch.



APP CONTROL

MUSCLE CONTROL

“Triggers” är specifika muskelsignaler som används för att aktivera ett specifikt grepp i protesanvändarens i-Limb- eller i-Digits-protes.



MUSCLE CONTROL

PROXIMITY CONTROL

Grip Chips är små Bluetooth-enheter som används för att aktivera ett förprogrammerat grepp i i-Limb Quantum-handen. Greppet aktiveras när protes handen kommer nära det objekt där Grip Chip:et har placerats. OBS! i-Limb-handen ska *inte* vara ansluten till My i-Limb-appen när Grip Chips används.



PROXIMITY CONTROL

i-LIMB® – ÖVERSIKT



i-Limb® Quantum



i-Limb® Access

Följsamma grepp med proportionell styrning	Följsamma grepp med proportionell styrning
Motoriserad tumme med manuell överstyrning	Manuellt positionerbar tumme
Gesture Control i-Mo™ Technology	
App-styrning Quick Grips™	App-styrning Quick Grips™
Muskelstyrning Triggers	Muskelstyrning Triggers
Proximity Control Grip Chips™	
24 förprogrammerade grepp	12 förprogrammerade grepp
12 individuellt anpassningsbara grepp - My Grips™	
Speed & strength boost	Speed & strength boost
Vari-Grip	
Naturligt handläge	
Auto-Grasp	Auto-Grasp
Koll av protesens hälsostatus via Biosim/My i-Limb app	Koll av protesens hälsostatus via Biosim/My i-Limb app
XS, S, M, L	XS, S, M, L

i-LIMB® QUANTUM

i-Limb Quantum är en multiartikulerad, myoelektrisk hand från Össur, med titanfingar* som standard för 50 % ökad bärformåga jämfört med tidigare version och upp till 30 % större greppkraft och 30 % högre hastighet för att förbättra de naturliga rörelserna, styrkan och funktionaliteten.

*Gäller för i-Limb Quantum i storlek S, M och L.

I i-Limb Quantum används geststyrning och det är den enda myoelektriska handen som kan ändra grepp med en gest. Gesture Control aktiveras genom att i-Limb Quantum flyttas i någon av fyra riktningar för att få önskat grepp.

Den har fem enskilt motoriserade fingrar och eldriven tumrotation, med manuell överstyrning, så att den fingerfärdighet, koordination och finess som behövs erhålls för att utföra en lång rad dagliga aktiviteter.

- Den elektroniskt vridbara tummen, med manuell överstyrning, växlar automatiskt mellan laterala och oppositionella greppmönster för optimalt grepp
- Välj mellan upp till 36 olika grepp, både förprogrammerade och anpassningsbara efter användarens dagliga aktiviteter
- Vari-Grip funktionen ger ytterligare greppstyrka när den tillämpas
- Auto-Grasp - funktion för att undvika att du tappar föremål
- Touch Care® paket som erbjuder garantisupport i upp till 5 år
- Apparna Biosim®* och My i-Limb®** för konfigurering och anpassning av grepp och funktioner
- Finns i 4 storlekar – extra small, small, medium och large.
OBS! Fingar i storlek XS är inte titanförstärkta.
- Flera varianter av proteshandskar finns att välja mellan.
- Valbara färger på handryggsplattan: standard black, white, titanium och carbon black.



Standard Black



White

Titanium

Carbon Black



Video: Myoelectric training videos for end users - playlist



Training modules, fitting process & clinical accreditation material

KONTROLLMETODER



i-MO
GESTURE CONTROL



TRIGGERS
MUSCLE CONTROL



QUICK GRIPS
APP CONTROL



GRIP CHIPS
PROXIMITY CONTROL

Enhetens vikt			
	Extra Small	Small	Medium/Large
QWD	472 g	542 g	558 g
WD	432 g	502 g	518 g
Flektionshanded	572 g	642 g	658 g
Friktionshanded	467 g	537 g	553 g

*Biosim® gör det möjligt för ortopedingenjören att individuellt optimera i-Limb® -handen för protesanvändaren

**My i-Limb® tillåter protesanvändarna att interagera med sin i-Limb®-hand för att fortsätta sin träning och anpassa inställningarna till deras dagliga behov.

Teknisk information	
Spänning	7.4 V (nominell)
Max. ström	5 A
Batteri-kapacitet	Laddningsbart litiumpolymer-batteri; 7.4 V (nominell); 2000 mAh kapacitet; 1300 mAh kapacitet
Max. statisk belastning för handen	40 kg (Extra Small) 90 kg (Small/Medium/Large)
Max. statisk belastning för MCP/PIP-led	20 kg (Extra Small) 48 kg (Small/Medium/Large)
Stängningstid - från helt öppen till helt stängd hand.	0.8 sek

i-LIMB® QUANTUM

KIT

Paket-nummer:	3	4	5	6
i-Limb Quantum Titanium - paketkoder	TBX 50142	TBX 50143	TBX 50144	TBX 50145
QWD/WD/ Friktionshanded	•		•	
Flektionshanded		•		•
Hylskomponenter	•	•	•	•
Elektroder	•	•	•	•
Grip Chips	•	•	•	•
Standardpaket för handskar	•	•		
Pluspaket för handskar			•	•

I samtliga paket ingår:

- Batteri och magnetisk laddningsport
- Nätaggregat (Laddkabel)

Standardpaket för handskar: fritt val av 6 handskar av typen:

i-Limb Skin Active, Active TS, Contour, Contour TS och Natural Covers. **OBS! Max 4 Natural-handskar kan väljas.**

Pluspaket för handskar; innehåller 2 i-Limb Skin Match-handskar* och 4 valfria handskar av typen i-Limb Skin Active, Active TS, Contour, Contour TS, Natural.

*För korrekt matchning av custom-handshen, kontakta Kundsupport för Livingskin image taking kit samt vidare instruktion.

Valbara färger på handryggsplattan – Dorsal Fairings.			
Standard Black (Default)	White	Titanium	Carbon Black
			

GARANTIER

Art.nr.	Beskrivning
TBX50173	Garanti i-Limb / i-Digits 3 år
TBX50174	Garanti i-Limb / i-Digits 4 år
TBX50175	Garanti i-Limb / i-Digits 5 år



Biosim & My i-Limb
Video tutorials



My i-Limb
Connection Guide



<https://www.ossur.com/sv-se/professionella/bestallningsinformation>

i-LIMB® ACCESS

i-Limb Access är en multiartikulerad, myoelektrisk hand från Össur, med titanfingrar* som standard för 50 % ökad bärförmåga jämfört med tidigare version och upp till 30 % större greppkraft och 30 % högre hastighet för att förbättra de naturliga rörelserna, styrkan och funktionaliteten.

*Gäller för i-Limb Access i storlek S, M och L.

- Individuellt motordrivna fingrar med följsamt grepp och låsningsfunktion.
- Manuellt positionerbar tumme som kan flyttas för optimerad positionering utifrån valt grepp.
- Med vår speed boost-funktion kan fingerhastigheten ökas med upp till 30 %.
- Appstyrning ger direktåtkomst till Quick Grips® genom att man i appen väljer önskat grepp.
- Vid muskelstyrning används specifika muskelsignaler (co-contraction, dubbelimpuls, trippelimpuls) som kallas "triggers" för att instruera handen att aktivera ett visst grepp.
- Det finns 12 alternativ av förprogrammerade grepp.
- Appen Biosim®* för inställning och optimering utifrån brukarens individuella förutsättningar. Appen My i-Limb®** för konfigurerings och anpassning av grepp och funktioner.
- Finns i 4 storlekar – extra small, small, medium och large. **OBS! Fingrar i storlek XS är inte titanförstärkta.**
- Flera varianter av proteshandskar finns att välja mellan.
- Valbara färger på handryggsplattan: standard black, white, titanium och carbon black.



Training modules, fitting process
& clinical accreditation material

KONTROLLMETODER



TRIGGERS
MUSCLE CONTROL



QUICK GRIPS
APP CONTROL

Enhetens vikt			
	Extra Small	Small	Medium/Large
QWD	432 g	468 g	478 g
WD	392 g	428 g	438 g
Flektionshandled	532 g	568 g	578 g
Friktionshandled	427 g	463 g	473 g

*Biosim® gör det möjligt för ortopedingenjören att individuellt optimera i-Limb®-handen för protesanvändaren

**My i-Limb® tillåter protesanvändarna att interagera med sin i-Limb®-hand för att fortsätta sin träning och anpassa inställningarna till deras dagliga behov.

Teknisk information	
Spänning	7.4 V (nominell)
Max. ström	5 A
Batteri-kapacitet	Laddningsbart litiumpolymer-batteri; 7.4 V (nominell); 2000 mAh kapacitet; 1300 mAh kapacitet
Max. statisk belastning för handen	40 kg (Extra Small) 90 kg (Small/Medium/Large)
Max. statisk belastning för MCP/PIP-led	20 kg (Extra Small) 32 kg (Small/Medium/Large)
Stängningstid - från helt öppen till helt stängd hand.	0.8 sek

i-LIMB® ACCESS

KIT

Paketnummer:	1	2
i-Limb Access med titanförstärkta fingrar stl. S-L- paketkoder:	TBX 50484	TBX 50485
i-Limb Access – ej titanförstärkta fingrar stl. XS - paketkoder:	TBX 50042	TBX 50043
QWD/WD/Friktionshanded	•	
Flektionshanded		•
Hylskomponenter	•	•
Elektroder	•	•
Standardpaket för handskar	•	•

I samtliga paket ingår:

- Batteri och magnetisk laddningsport
- Nätaggregat (Laddkabel)
- Standardpaket för handskar: fritt val av 6 handskar av typen:
i-Limb Skin Active, Active TS, Contour, Contour TS och Natural Covers.

OBS! Max 4 Natural-handskar kan väljas.

Valbara färger på handryggsplattan – Dorsal Fairings.

Standard Black (Default)	White	Titanium	Carbon Black

GARANTIER


Art.nr.	Beskrivning
TBX50173	Garanti i-Limb / i-Digits 3 år
TBX50174	Garanti i-Limb / i-Digits 4 år
TBX50175	Garanti i-Limb / i-Digits 5 år



Biosim & My i-Limb
Video tutorials



My i-Limb
Connection Guide

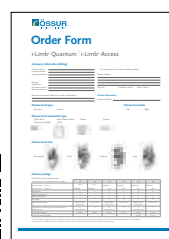


<https://www.ossur.com/sv-se/professionella/bestallningsinformation>

i-LIMB®


DIMENSIONER

Mått i mm.


Extra Small

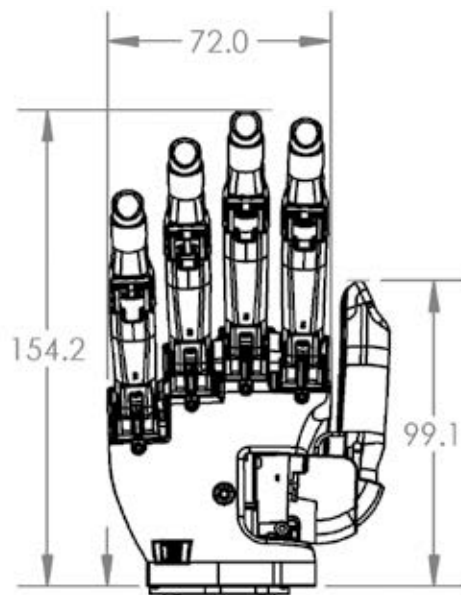


Small

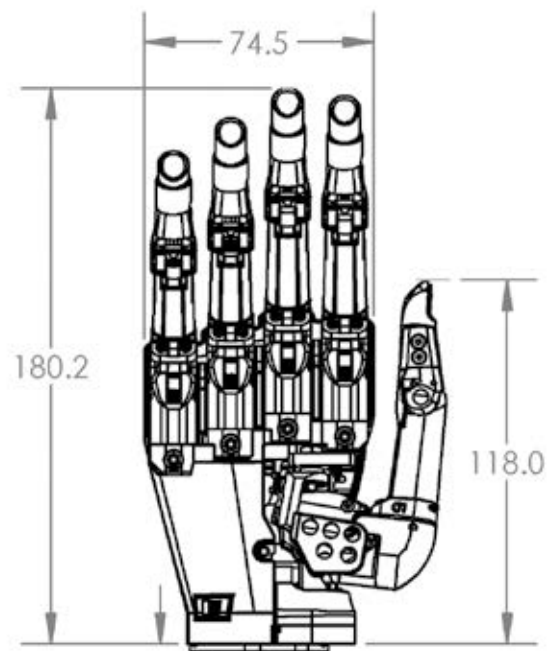

Medium

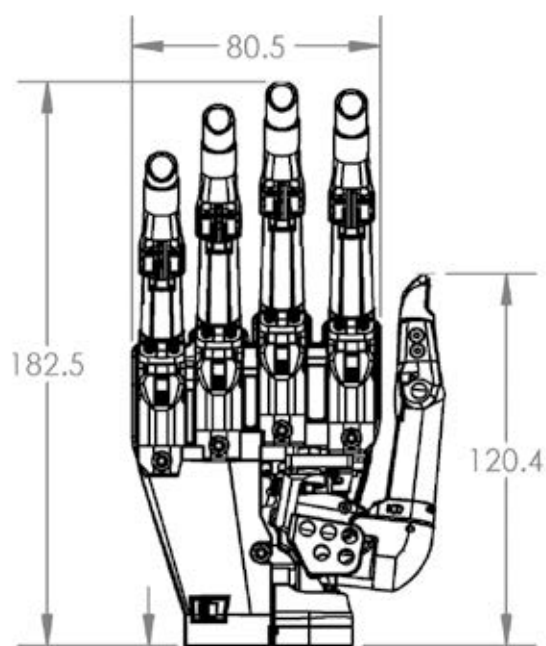

Large

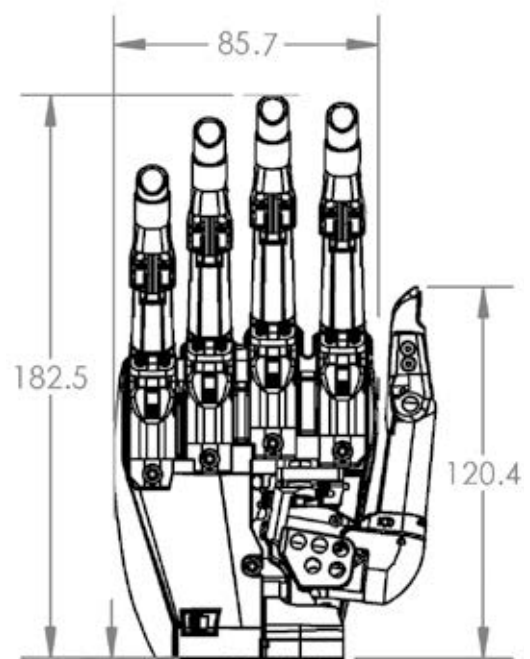

i-LIMB®


VALBARA HANDLEDER

i-Limb handproteser kan beställas med olika handledsalternativ:

Flektionshandled

Flektionshandleden erbjuder passiv handledsflektion och handleds-extension med möjlighet till låsning i 5 positioner: +40° +20° 0° -20° -40°. Handleden stängs/öppnas med ett enkelt magnetlås. Protesanvändaren kan själv lätt både sätta dit och avlägsna handen från proteshylsan.


Vikt: 161 g

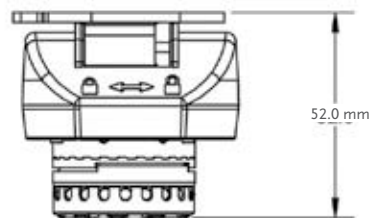

Quick Wrist Disconnect

Quick Wrist Disconnect (QWD) erbjuder manuell handledsrotation. Protesanvändaren kan själv lätt både sätta dit och avlägsna handen från proteshylsan.

Vikt: 54 g

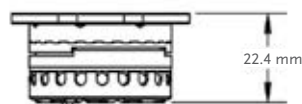

Friktionshandled

Friktionshandleden erbjuder manuell handledsrotation och passar bra för de som har en lång amputationsstump. Protesanvändaren kan inte själv avlägsna handen från protesen.

Vikt: 49 g




Wrist Disarticulation

Wrist disarticulation (WD) har lägst bygghöjd och gör att den passar mycket bra till de med lång amputationsstump.

Ett inlamineringsfäste integreras i proteshylsan där handen skall sättas fast. Ingen rotation av handen är möjlig och protesanvändaren kan inte själv avlägsna handen från protesen.

Vikt: 17 g

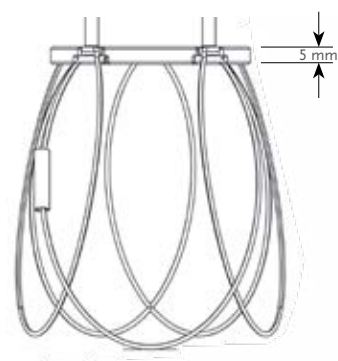


ELEKTRODER

REMOTE ELECTRODES

- För användning med alla i-Limb® -händer
- Guldpläterade för optimerade EMG-signaler
- 50 Hz
- 23 mm x 17.4 mm x 5.6 mm
- 10 mm diameter på elektrodhuvudet
- Optimerat avstånd mellan elektroderna är 8-10 mm
- Graderad signalförstärkning, 1-7
- Signalförstärkning och tröskelvärde kan även finjusteras i Biosim™

Art.nr.	Beskrivning
PL069466B	50 Hz single site remote Electrode Kit, 300 mm cable
PL069468B	50 Hz single site remote Electrode Kit, 600 mm cable

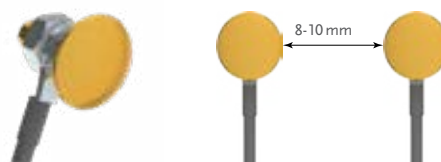

EMG amplituden förbättras med över 20 % när man använder guldpläterade elektroder jämfört med elektroder av kompaktmodell.

ELEKTRODER

COMPACT ELECTRODES


Compact elektroder med en traditionell design.

- För användning med samtliga i-Limb® -händer
- Elektrodkontakter av medicinskt godkänt rostfritt stål
- 50 Hz
- Skydd mot damm och väta enligt IP64
- 26.8 mm x 18.4 mm x 9.7 mm
- Graderad signalförstärkning 1-7
- Signalförstärkning och tröskelvärde kan även finjusteras i Biosim™

Innehåller:

- Dummy för både laminering och termoplast
- Elektrod kabel (finns i antingen 300 mm eller 600 mm) med tillhörande isolerad kontakt
- Verktyg för justering av signalstyrka
- Ankarskruvar för fastmontering i proteshylsa

Art.nr.	Beskrivning
PL091050A	Compact Electrode Kit, 50 Hz (300 mm cable)
PL091127A	Compact Electrode Kit 50 Hz (600 mm cable)
PL091029A	3-way cable 300 mm
PL091030A	3-way cable 600 mm

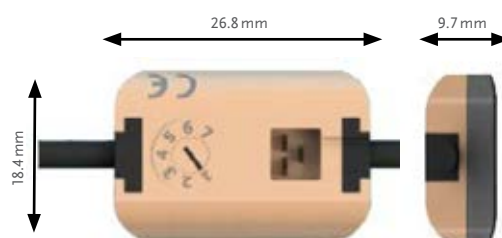

LADDARE & BATTERIER

MAGNETLADDARE

- Tryckkänslig knapp för på/av.
- LED batteriindikator med varning för låg batterinivå
- Felsäkert system – batterireserven förhindrar att handen låser sig i stängt läge

Össur Touch Solutions batterier krävs för användning av i-Limb® händer.

Art.nr.	Beskrivning
PL000290A	Magnetic Charge Port, inklusive kabeladapter*
PL000335A	2000 mAh batteri (internt)
PL000336A	1300 mAh batteri (internt)

*För komplett kit, beställ förutom #PL000290A även:

#PL000291A Laddenhet

#000313A Strömkabel med EU-kontakt



Video: i-Limb Magnetic charger (55 sec)

		i-Limb 1300 mAh batteri	i-Limb 2000 mAh batteri
Kapacitet		1300 mAh	2000 mAh
Batteri - Dimensioner	Längd	70 mm	80 mm
	Bredd	35 mm	44 mm
	Höjd	6 mm	7.5 mm
Användningsområde		Måttlig användning	Hög användning

LADDARE

Endast av Össur godkända laddare får användas med produkter från Össur Touch Solutions.

	Art.nr.	Beskrivning
1.	PL000291A	Laddenhet (beställ även strömkabeln #00313A)
	000313A	Strömkabel med EU-kontakt
2.	PL000292A	Billaddare



RESERVDELAR

RESERVDELAR TILL i-LIMB®

GRIP CHIPS®

Kan användas för att lagra grepp eller favoriter till i-Limb® Quantum och i-Digits® Quantum.

Art.nr.	Beskrivning
PL238300A	Grip Chips Starter Kit & App Activation

VERKTYGSKIT

Behövs för underhåll av i-Limb® hand.

Art.nr.	Beskrivning
PL177001A	Repair Tool Kit T10
PL177002A	Repair Tool Kit T6
PL177003A	Repair Tool Kit T8
PL177004A	Repair Tool Kit T6 med torque driver

COUPLING PIECE & COAXIAL PLUG

För QWD-koppling.

	Art.nr.	Beskrivning
1.	PL091032B	Coupling piece
2.	PL091036A	4-way Coaxial Plug

LAMINATION RING

För laminering av protes med QWD-koppling.

	Art.nr.	Beskrivning
3.	089003A	Lamineringsring 50 mm
	091037A	Lamineringsring 45 mm

QWD VERKTYG

Behövs för ihopmontering av QWD

	Art.nr.	Beskrivning
4.	MP091084A	Quick Wrist Disconnect (QWD) tool

WD LAMINERINGSPLATTA MED KORG

För laminering av protes med WD-koppling

	Art.nr.	Beskrivning
5	SA149003B	WD Lamination Plate/Basket Assembly

KIT

Art.nr.	Beskrivning
PL091067B	Single Site Socket Component Kit, including one Electrode Kit
PL091068B	Dual Site Socket Component Kit,, including two Electrode Kits



1.



2.



3.



4.



5.

PROTESHANDSKAR

i-LIMB SKIN® ACTIVE OCH TS HANDSKAR

i-Limb Skin Active är en proteshandske som är specifikt designad för i-Limb-händer och som helt täcker proteshanden. Handflatan och insidan av proteshandsken ger viss friktion för ett lättare och säkrare grepp. Handryggen har en slät och glatt yta för att minimera mostånd när handen förs genom ärmen på ett klädesplagg.

i-Limb Skin Active TS tillåter brukaren att använda en touchscreen på t.ex en smartphone tillsammans med en kompatibel i-Limb.

OBS! För i-Limb händer i storlek large, beställ en handske i storlek medium.

Transparent handske är specifikt framtagen för att framhäva färgen på handryggsplattan.



i-Limb Skin Active

Art.nr.	Beskrivning
PL353002A	i-Limb Skin Active RH extra small, clear
PL353003A	i-Limb Skin Active LH extra small, clear
PL353000A	i-Limb Skin Active RH extra small, svart
PL353001A	i-Limb Skin Active LH extra small, svart
092025A	i-Limb Skin Active RH small, clear
092026A	i-Limb Skin Active LH small, clear
092029A	i-Limb Skin Active RH small, svart
092030A	i-Limb Skin Active LH small, svart
092023A	i-Limb Skin Active RH medium, clear
092024A	i-Limb Skin Active LH medium, clear
092027A	i-Limb Skin Active RH medium, svart
092028A	i-Limb Skin Active LH medium, svart
TBX50045	i-Limb Skin Active (svart eller clear) x 4
ILH000-3724	i-Limb Skin Active RH extra small, transparent
ILH000-3725	i-Limb Skin Active LH extra small, transparent
ILH000-3726	i-Limb Skin Active RH small, transparent
ILH000-3727	i-Limb Skin Active LH small, transparent
ILH000-3728	i-Limb Skin Active RH medium, transparent
ILH000-3729	i-Limb Skin Active LH medium, transparent

i-Limb Skin Active TS

Art.nr.	Beskrivning
PL380002A	i-Limb Skin Active RH extra small, clear TS
PL380003A	i-Limb Skin Active LH extra small, clear TS
PL380000A	i-Limb Skin Active RH extra small, svart TS
PL380001A	i-Limb Skin Active LH extra small, svart TS
MP092025B	i-Limb Skin Active RH small, clear TS
MP092026B	i-Limb Skin Active LH small, clear TS
MP092029B	i-Limb Skin Active RH small, svart TS
MP092030B	i-Limb Skin Active LH small, svart TS
MP092023B	i-Limb Skin Active RH medium, clear TS
MP092024B	i-Limb Skin Active LH medium, clear TS
MP092027B	i-Limb Skin Active RH medium, svart TS
MP092028B	i-Limb Skin Active LH medium, svart TS
TBX50047	i-Limb Skin Active TS (svart eller clear) x 4

PROTESHANDSKAR

i-LIMB SKIN® CONTOUR OCH TS COVERS

i-Limb Skin Contour proteshandske är en anatomiskt formad handske i mjukt silikon med ytbehandlad insida för lättare på-/avtagning.

De tjockare fingerspetsarna och den lösare passformen bidrar till ökad hållbarhet.

i-Limb Skin Contour proteshandske finns tillgänglig i tre färger: clear, vit och svart. Finns även tillgänglig Touch Screen (TS).

OBS! För i-Limb händer i storlek large, beställ en handske i storlek medium.



i-Limb Skin Contour

Art.nr.	Beskrivning
PL353004A	i-Limb Skin Contour RH extra small Clear
PL353005A	i-Limb Skin Contour LH extra small Clear
PL353014A	i-Limb Skin Contour RH extra small Black
PL353015A	i-Limb Skin Contour LH extra small Black
ILH000-3577	i-Limb Skin Contour RH extra small White
ILH000-3578	i-Limb Skin Contour LH extra small White
PL354004A	i-Limb Skin Contour RH small Clear
PL354005A	i-Limb Skin Contour LH small Clear
PL354014A	i-Limb Skin Contour RH small Black
PL354015A	i-Limb Skin Contour LH small Black
ILH000-3575	i-Limb Skin Contour RH small White
ILH000-3576	i-Limb Skin Contour LH small White
PL355004A	i-Limb Skin Contour RH medium Clear
PL355005A	i-Limb Skin Contour LH medium Clear
PL355014A	i-Limb Skin Contour RH medium Black
PL355015A	i-Limb Skin Contour LH medium Black
ILH000-3573	i-Limb Skin Contour RH medium White
ILH000-3574	i-Limb Skin Contour LH medium White
TBX50053	i-Limb Skin Contour x 4

i-Limb Skin Contour TS

Art.nr.	Beskrivning
PL380004A	i-Limb Skin Contour RH extra small Clear TS
PL380005A	i-Limb Skin Contour LH extra small Clear TS
PL380012A	i-Limb Skin Contour RH extra small Black TS
PL380013A	i-Limb Skin Contour LH extra small Black TS
PL381004A	i-Limb Skin Contour RH small Clear TS
PL381005A	i-Limb Skin Contour LH small Clear TS
PL381012A	i-Limb Skin Contour RH small Black TS
PL381013A	i-Limb Skin Contour LH small Black TS
PL382004A	i-Limb Skin Contour RH medium Clear TS
PL382005A	i-Limb Skin Contour LH medium Clear TS
PL382012A	i-Limb Skin Contour RH medium Black TS
PL382013A	i-Limb Skin Contour LH medium Black TS
TBX50054	i-Limb Skin Contour TS x 4

PROTESHANDSKAR

i-LIMB SKIN® NATURAL HANDSKAR

i-Limb Skin Natural Covers är en kosmetisk proteshandske för i-Limb-händerna. En färgkarta används för att välja bäst matchande hudton mellan brukarens hudfärg och färgen på i-Limb Skin Natural handsken. i-Limb Skin Natural handsken finns i 18 olika hudtoner.

i-Limb Skin Natural handskens längd går strax proximalt om nivån för handleden. För en kosmetisk lösning för hela underarmen så finns sleeve för underarmen i motsvarande hudton.

OBS! För i-Limb-händer i storlek large, beställ en handske i storlek medium.



i-Limb Skin Natural


	Extra small		Small		Medium	
Färg	Vänster	Höger	Vänster	Höger	Vänster	Höger
1	066582A	066564A	066509B	066491B	066473B	066455B
2	066583A	066565A	066510B	066492B	066474B	066456B
3	066584A	066566A	066511B	066493B	066475B	066457B
4	066585A	066567A	066512B	066494B	066476B	066458B
5	066586A	066568A	066513B	066495B	066477B	066459B
6	066587A	066569A	066514B	066496B	066478B	066460B
7	066588A	066570A	066515B	066497B	066479B	066461B
8	066589A	066571A	066516B	066498B	066480B	066462B
9	066590A	066572A	066517B	066499B	066481B	066463B
10	066591A	066573A	066518B	066500B	066482B	066464B
11	066592A	066574A	066519B	066501B	066483B	066465B
12	066593A	066575A	066520B	066502B	066484B	066466B
13	066594A	066576A	066521B	066503B	066485B	066467B
14	066595A	066577A	066522B	066504B	066486B	066468B
15	066596A	066578A	066523B	066505B	066487B	066469B
16	066597A	066579A	066524B	066506B	066488B	066470B
17	066598A	066580A	066525B	066507B	066489B	066471B
18	066599A	066581A	066526B	066508B	066490B	066472B

PROTESHANDSKAR

i-LIMB SKIN® NATURAL SLEEVE FÖR UNDERARM

i-Limb Skin Natural Sleeve för underarm möjliggör en kosmetisk lösning för underarmen i samma hudton som i-Limb Skin Natural proteshandske. Finns tillgänglig i 4 storlekar (low profile, small, medium, large) och i 18 olika hudtoner.

Längden på sleeve för underarm är 35 cm.

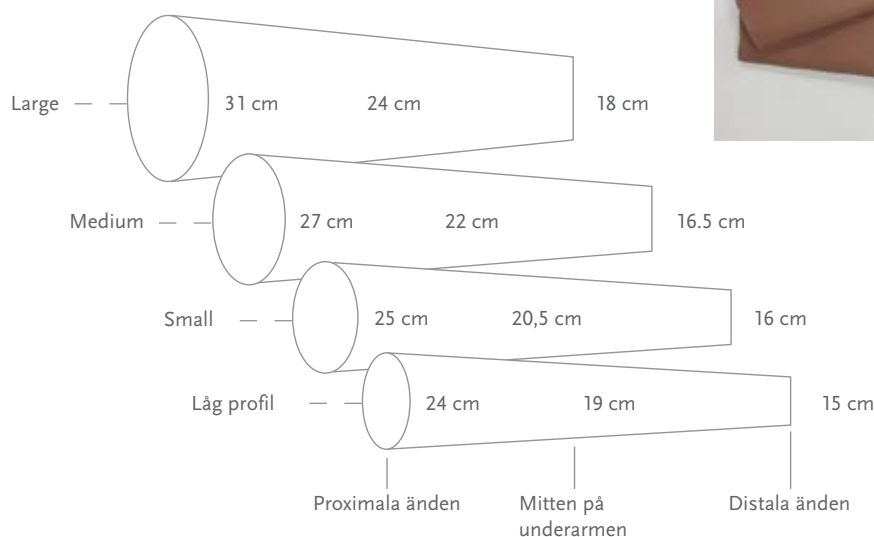

Färg	Låg Profil	Small	Medium	Large
1	066629A	066628A	066627A	066626A
2	066633A	066632A	066631A	066630A
3	066637A	066636A	066635A	066634A
4	066641A	066640A	066639A	066638A
5	066645A	066644A	066643A	066642A
6	066649A	066648A	066647A	066646A
7	066653A	066652A	066651A	066650A
8	066657A	066656A	066655A	066654A
9	066661A	066660A	066659A	066658A
10	066665A	066664A	066663A	066662A
11	066669A	066668A	066667A	066666A
12	066673A	066672A	066671A	066670A
13	066677A	066676A	066675A	066674A
14	066681A	066680A	066679A	066678A
15	066685A	066684A	066683A	066682A
16	066689A	066688A	066687A	066686A
17	066693A	066692A	066691A	066690A
18	0666700A	066696A	066695A	066694A

PROTESHANDSKAR

i-LIMB SKIN® MATCH HANDSKAR

i-Limb Skin Match Cover är en helt individuellt tillverkad proteshandske som realistiskt motsvarar brukarens hudton och utseende.

i-Limb Skin Match handsken längd går strax proximalt om nivån för handleden. För en kosmetisk lösning för hela underarmen så finns i-Limb Skin Match Forearm Cover för underarmen där denna tillverkas för att realistiskt motsvara brukarens hudton och utseende.


Art.nr.	Beskrivning
066006A	i-Limb Skin Match Hand Cover
066448A	i-Limb Skin Match Forearm Sleeve
066449A	i-Limb Skin Match Hand Covering including Custom Forearm Sleeve



COVER LINERS

Cover Liners är avsedda att bäras under i-Limb Skin Active, i-Limb Skin Contour eller i-Limb Skin Natural handskar. Används som ett interface mellan proteshand och handske för att öka livslängden av handsken/skydda utsatta områden från slitage

Art.nr.	Beskrivning
092050	Cover Liner - Vänster Small
092051	Cover Liner - Höger Small
092052	Cover Liner - Vänster, Medium
092053	Cover Liner - Höger, Medium
092054	Cover Liner - Vänster, Large
092055	Cover Liner - Höger, Large
MA01331	Cover Liner Instruktioner

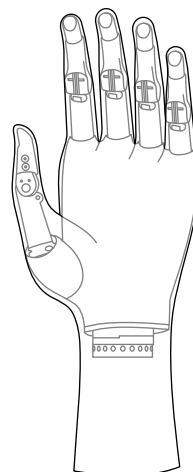

i-DIGITS® QUANTUM

i-Digits Quantum är en myoelektrisk, multiartikulerad protesenheter för personer med partiellt förlorad eller saknad hand.

Lämpliga kandidater är de som saknar 1 till 5 fingrar distalt om handleden och proximalt om MCP-leden.

i-Digits Quantum omfattas av i-Mo technology. Fyra förinställda grepp uppnås genom en rörelse av protesen i en av fyra riktningar (framåt, bakåt, vänster eller höger). Greppen som programmeras för varje riktning anpassas till användarens krav med hjälp av Biosim® eller My i-Limb®-appen.

- En individuellt anpassad delhandprotes för personer med partiellt förlorad eller saknad hand.
- Upp till 32 grepp är tillgängliga.
- Fristående armband med integrerade batterier och mikroprocessor.
- Fingrarna kan röra sig individuellt och fungerar tillsammans med de kvarvarande fingrarna.
- Vari-Grip -funktion för ökad greppstyrka.
- Auto Grasp - en säkerhetsfunktion för att förhindra att du tappar föremål.
- Speed boost-funktion - ökar hastigheten med upp till 30 % med My i-Limb®-appen.
- Manuellt positionerbar tumme möjlig om så behövs

Gesture Control aktiveras genom att i-Digits Quantum flyttas i någon av fyra riktningar för att få önskat grepp.



Training modules, fitting process & clinical accreditation material



i-Digit Assessment-kit

Ett testkit finns att låna från Össur för att utvärdera om din patient är en lämplig kandidat för i-Digits.

Kontakta Kundsupport för mer information!

KONTROLLMETODER



i-MO™
GESTURE CONTROL



TRIGGERS
MUSCLE CONTROL



QUICK GRIPS™
APP CONTROL



GRIP CHIPS™
PROXIMITY CONTROL


Art.nr.	Beskrivning
TBX50008	1 digit i-Digits Quantum
TBX50016	2 digit i-Digits Quantum
TBX50024	3 digit i-Digits Quantum
TBX50032	4 digit i-Digits Quantum
TBX50040	5 digit i-Digits Quantum

I samtliga paket ingår:

- i-Digits Quantum Armband
- Laddkabel
- 2 monteringsplattor
- Elektroder eller FSRs
- Finger och knoginfästning (kvantitet och storlek enligt beställt paket)
- 3 fingertutor per finger
- 2 Grip Chips

GARANTIER

Art.nr.	Beskrivning
TBX50173	Garanti i-Limb / i-Digits 3 år
TBX50174	Garanti i-Limb / i-Digits 4 år
TBX50175	Garanti i-Limb / i-Digits 5 år

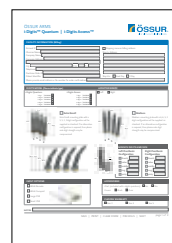

<https://www.ossur.com/sv-se/professionella/bestallningsinformation>

i-DIGITS® ACCESS

i-Digits Access är en myoelektrisk, multiartikulerad protesenheter för personer med partiellt förlorad eller saknad hand.

Lämpliga kandidater är de som saknar 1 till 5 fingrar distalt om handleden och proximalt om MCP-leden.

- En individuellt anpassad delhandprotes för personer med partiellt förlorad eller saknad hand.
- Upp till 12 grepp är tillgängliga
- Fristående armband med integrerade batterier och mikroprocessor.
- Fingrarna kan röra sig individuellt och fungerar tillsammans med de kvarvarande fingrarna.
- Manuellt positionerbar tumme möjlig när så behövs

KONTROLLMETODER



TRIGGERS
MUSCLE CONTROL



QUICK GRIPS
APP CONTROL

Art.nr.	Beskrivning
TBX50006	1 digit i-Digits Access
TBX50014	2 digit i-Digits Access
TBX50022	3 digit i-Digits Access
TBX50030	4 digit i-Digits Access
TBX50038	5 digit i-Digits Access

I samtliga paket ingår:

- i-Digits Access armband
- Laddkabel
- 2 monteringsplattor
- Elektroder eller FSRs (enligt beställt kit)
- Finger och knoginfästning (kvantitet och storlek enligt beställt paket)
- 3 fingertutor per finger

GARANTIER

Art.nr.	Beskrivning
TBX50173	Garanti i-Limb / i-Digits 3 år
TBX50174	Garanti i-Limb / i-Digits 4 år
TBX50175	Garanti i-Limb / i-Digits 5 år




Training modules, fitting process
& clinical accreditation material



i-Digit Assessment-kit

Ett testkit finns att låna från Össur för att utvärdera om din patient är en lämplig kandidat för i-Digits.

Kontakta Kundsupport för mer information!

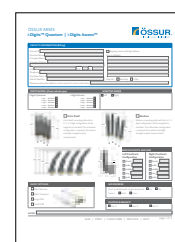

<https://www.ossur.com/sv-se/professionella/bestallningsinformation>

i-DIGITS®

DIMENSIONER

i-Digits kan fås i extra small och medium.

Monteringsplattan för extra small är 67 mm bred, med en rak inriktninglinje av fingrarna.

Monteringsplattan för medium är 73 mm bred, med en inriktninglinje där fingrarna spretar något (se bilder till höger).

	Tumme	Pekfinger	Långfinger	Ringfinger	Lillfinger
Extra Small	5	5	5	3	2
Medium	5	6	6	5	3



Ovanstående konfiguration ger en optimerad funktionalitet.

SIGNALÖVERFÖRING

En variation av alternativ för signalöverföring finns för i-Digits finns för att optimera funktionen utifrån brukarens förutsättning.

LP REMOTE ELECTRODES

En förankringsplatta integreras vid tillverkningen av innerhylsan i silikon. Detta ger dels en överlägsen suspension av elektroden samt en låg bygghöjd. Två elektroder placeras tillsammans för 'dual site' kontroll och en enkel elektrod som jord.

	Art.nr.	Beskrivning
1.	PL441012B	Remote Electrode Kit
	SA441080A	Check Socket Remote Electrode
1a.	441019A	Silicone Suspension Piece Double*
1b.	441018A	Silicone Suspension Piece Single*

*Extra tillbehör för användning i de fall där proteshylsan behöver göras om.



FSR (FORCE SENSING RESISTOR)

En tunn tryckplatta som fungerar genom att brukaren fysiskt applicerar tryck på plattan med kontralateral sida.

	Art.nr.	Beskrivning
	SA441092B	FSR for i-Digits (small)
2.	SA441093B	FSR for i-Digits (large)



COMPACT ELECTRODES

Traditionell elektrod för användning med i-Digits.

	Art.nr.	Beskrivning
3.	PL441029A	Compact Electrode kit i-Digits




i-DIGITS®

RESERVDELAR


Batteries and Chargers

Picture	Code	Description
1.	SA069313C	800 mAh battery
2.	PL069653	i-Digits Battery Charger base unit
3.	069654	i-Digits Power Supply Unit

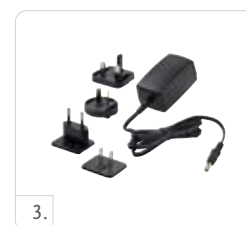

TILLBEHÖR FÖR TILLVERKNING

	Art.nr.	Beskrivning
	SA441036A	i-Digits RH mounting knuckle plate assembly - extra small
4.	SA440003A	i-Digits LH mounting knuckle plate assembly - extra small
	SA069406B	i-Digits RH mounting knuckle plate assembly - medium
	SA069405B	i-Digits LH mounting knuckle plate assembly - medium
5.	PL441052C	Thumb pivot assembly
	069227B	Thumb angled mounting plate
	PL441056A	Single wired knuckle assembly
	SA400074A	Ratchet Strap + Screws + Shoulder Insert Assembly
	PL177004A	Repair tool kit T6 with torque driver

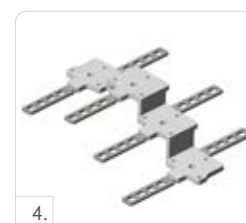

BÄLG FÖR HANDELDSENHET (KOMPLETT)

Art.nr.	Beskrivning
SA441040D	i-Digits Electrode Bellows Assembly 50 Hz
SA441078C	FSR Bellows Assembly for i-Digits

FINGERTUTOR

Art.nr.	Beskrivning
441031A	i-Digits Cover stl. 2 svart
441082A	i-Digits Cover stl. 2 transparent
441032A	i-Digits Cover stl. 3 svart
441083A	i-Digits Cover stl. 3 transparent
441033A	i-Digits Cover stl. 5 svart
441084A	i-Digits Cover stl. 5 transparent
441034A	i-Digits Cover stl. TS 5 svart

Art.nr.	Beskrivning
441085A	i-Digits Cover stl. TS 5 transparent
441035A	i-Digits Thumb Cover svart
441088A	i-Digits Thumb Cover transparent
441076A	i-Digits Cover stl. 6 svart
441086A	i-Digits Cover stl. 6 transparent
441077A	i-Digits Cover Stl TS 6 svart
441087A	i-Digits Cover Stl TS 6 transparent

VIRTU-LIMB

Virtu-Limb är en trådlös enhet för demonstration och för att utvärdera och träna myo-elektriska signaler.

Virtu-Limb kan användas för olika syften:

- För att mäta protesanvändarens myo-elektriska signaler när beslut om positionering av elektroder i protesen ska tas
- För att visa hur man kan kontrollera sina muskelsignaler
- För att träna och förbättra styrkan på muskelsignaler
- För att visa hur man kan använda förprogrammerade grepp
- Ansluts till Biosim® programvara
- Muskelsignaler används för att kontrollera en virtuell hand via programvaran
- En i-Limb-hand kan anslutas för att demonstrera i-Limb-handen till kunder/protesanvändare

Art.nr.	Beskrivning
PL189002E	Virtu-Limb Kit - EU
SA188010	Virtu-Limb FSR Touchpad
PL189001A	Virtu-Limb Compact Electrode Kit (50 Hz) - 2 supplied



Virtu-Limb för att mäta myo-elektriska signaler

DEMO-LIMB

Demo-Limb är en portabel enhet för demonstration och brukarträning tillsammans med en i-Limb. Alla i-Limb händer med en QWD kan kopplas ihop med DemoLimb och kontrolleras genom FSR (Force Sensing Resistor) eller elektroder.

FSR är framför allt användbart för demonstration av funktionen hos en i-Limb, så som Gesture Control och muskelsignaler.

Elektrodena ger en potentiell brukare möjlighet att prova på att styra i-Limb handen med muskelsignaler. i-Limb handen kan kopplas upp mot Biosim™ eller my i-Limb för programmering, användning av Quick Grips eller utvärdering av signalstyrka.

Demo-Limb™ är särskilt användbar tillsammans med en i-Limb Quantum hand för demonstration och träning med Gesture Control.

Demo-Limb ger möjlighet att:

- Genom två stycken FSR's simulera öppning/stängning samt simulera byte av grepp genom ko-kontraktion, dubbel- och trippelimpuls
- Möjlighet att koppla in elektroder
- Möjlighet att demonstrera Gesture Control, muskelsignaler, kontroll genom app och Grip Chips
- QWD koppling
- Utbytbara batterier

Art.nr.	Beskrivning
PL071000	Demo-Limb

Demo-Limb fungerar tillsammans med Virtu-Limb-elektroder och Power Pack 800 mAh batterier.



LIVINGSKIN®

ÖVERSIKT

Handgjord från högupplöst silikon som omsorgsfullt handmålats för att realistiskt motsvara brukarens hudton och hudens utseende. Personliga detaljer som fräcknar och kroppshår kan integreras i protesen.

Livingskin är passiva, funktionella proteser. Samtidigt som Livingskin ger en högklassig kosmetisk lösning, ger den även ett funktionellt stöd vid drag eller som ett motstånd mot ett föremål.

För beställning av Livingskin, kontakta Kundsupport för Livingskin Image Taking Kit samt vidare instruktion.



Livingskin fingrar

Art.nr.	Beskrivning
066026A	1 finger
066029A	2 fingrar
066039A	3 fingrar
066040A	4 fingrar
TBX50486	5 fingrar
066135A	Nagelband

Livingskin händer

Art.nr.	Beskrivning
066014A	Delhand
066015A	Helhand

Livingskin armar

Art.nr.	Beskrivning
066703-DCM	Wrist Disarticulation Passive
066016A	Transradial Passive to Elbow
066017A	Transhumeral Passive to Axilla
066454-DCM	Shoulder Disarticulation Passive




LIVINGSKIN®

TILLBEHÖR

Bild	Art.nr.	Beskrivning
	092039A	Extra silikonmaterial - 0,45 kg burk
1.	TBX50181	Orthotic Device (inkl. Thumb Stabilizer) För delhandsamputerad tumme. Krävs ett intakt pek- eller långfinger för att få ut optimal funktion.
	TBX50135	Pronation/Supination Wrist Component (Rotationsenhet för rotation av handleden)
	TBX50070	Flexion/Extension Wrist Component (Flexions-/extensionsenhet för handleden)
	TBX50166	Slipcoat - ytbehandling för att lättare kunna föra armen genom klädesplagg

Art.nr.	Beskrivning
066443A	Dermahair - Finger
066065A	Dermahair - Hand
TBX50059	Dermahair - Arm

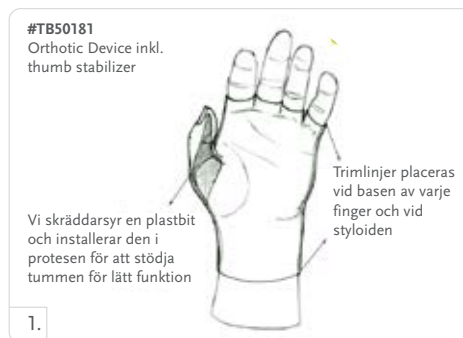

ÖSSUR SERVICES

FÖRETAGSINFORMATION

POSTADRESS

Össur Nordic
Box 7080
SE-164 07 Kista

BESÖKSADRESS

Kistagången 12, 2 tr
SE-164 40 Kista

tel: +46 (0) 18 18 22 00
e-mail: info@ossur.com

ÖSSUR NORDIC STÅR FÖR FRAKTEN VID FÖLJANDE RETURER:

- Reklamationsärenden inom garantin
- Reparationer inom garantin
- Service inom garantin

RETURER

VAROR KREDITERAS ENLIGT FÖLJANDE:

- Äldre än 365 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
OBS! För Bionic-produkter gäller 30 dagar från produktens inköpsdatum.
- Custom Made-produkter återtages ej.
- Produkter i osäljbart skick återtages ej.

Vid retur till Össur behöver du ha ett RA-nummer (Return Authorization number). Detta nummer får du genom att kontakta Össur Nordics Kundsupport via mail info@ossur.com eller telefon +46 (0) 18 18 22 00.

För bästa och snabbaste service vill vi att du, innan kontakten, har tagit fram följande uppgifter:

- Kundnamn/Kundnummer
- Artikelnummer
- Ev. LOT eller Serienummer
- Fakturanummer
- Anledning till retur

Össur återkommer med ett RA-nummer. Detta RA-nummer ska skrivas tydligt utanpå godset.

ÖNSKAR NI ATT SKÖTA RETUREN SJÄLV, SÅ SKICKAS DEN TILL:

UPS SCS Sweden AB
To: Össur
Stensåtravägen 5-7
127 39 Skärholmen
SWEDEN

alternativt till:

Össur Europe B.V.
Receiving Department
De Schakel 70
Eindhoven
5651 GH
NETHERLANDS

OBS! Returer utan RA-nummer återtages ej.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

LEVERANSVILLKOR: Fritt vårt lager

BETALNINGSVILLKOR: 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Össurs registrerade varumärken är registrerade i USA och utvalda länder.

GARANTIER

Alla Össurs produkter har garanti mot material- eller tillverkningsfel, från och med dagen för köpet. Varje produkt som konstaterats vara defekt under normal och korrekt användning ersätts utan kostnad med samma vara. Om en vara behöver ersättas när garantin gäller, skickas den ersättande varan så snabbt som möjligt och hela återförsäljningspriset faktureras. När garantiartikeln mottagits, sker återbetalning enligt gällande villkor.

BIONIC TECHNOLOGY BY ÖSSUR

	BEGRÄNSAD GARANTI
NAVII	36 mån/72 mån*
RHEO KNEE	36 mån/72 mån*
RHEO KNEE XC	36 mån/72 mån*
POWER KNEE EMEA	36 mån/72 mån*
POWER KNEE Batteries	12 mån
PROPRIO FOOT	36 mån/72 mån*

LINERS OCH SLEEVES

BEGRÄNSAD GARANTI
Full återbetalning för liners och sleeves som returnerats inom 30 dagar om den "förseglade" påsen inte har öppnats. Ingen komponent som har tagits ut ur denna påse godkänns för återbetalning utan sänds tillbaka till kunden på kundens bekostnad.

Iceross Seal-In X-Classic	6 mån
Iceross Seal-In X-Grip	6 mån
Iceross Seal-In X-Volume	6 mån
Iceross Seal-In Transfemoral	6 mån
Iceross Transfemoral Locking	6 mån
Iceross Upper-X Locking	6 mån
Iceross Seal-In X TT/TF	6 mån
Iceross Seal-In X Locking TT/TF	6 mån
Iceross Seal-In X5 TT/TF	6 mån
Iceross Seal-In V	6 mån
Iceross Dermo Locking/Cushion/Seal-In	6 mån
Iceross Dermo Uniform Locking/Cushion	6 mån
Iceross Synergy Locking/Cushion	9 mån
Iceross Comfort Locking/Cushion	6 mån
Iceross Original Locking	6 mån
Iceross Sport Locking	9 mån
Iceross Activa	9 mån
Iceross Post-Op	6 mån
Iceross Curvemaster	12 mån
Össur Rigid Dressing (ORD)	2 mån
Iceross Junior Locking	6 mån
Distal Cup	12 mån
Iceross Sleeve	3 mån
Iceform Locking/Cushion	6 mån
Iceform Sleeve	3 mån
Relax Locking/Cushion	6 mån
AKOS	6 mån
Relax TF	6 mån
4Seal Classic	6 mån
Genu Sleeve	3 mån
Relax Night Care Socks	3 mån
Volume Compensation Socks	3 mån
Comfort SCS	3 mån

UNITY VACUUM SUSPENSION SYSTEM

	BEGRÄNSAD GARANTI
Unity-pump och membran till fötterna i Pro-Flex-familjen,	
Proprio Foot och Balance Foot S/Balance Foot S Torsion:	36 mån**
Unity Expulsion Valve Kit	6 mån
Övriga Unity pumpmoduler	24 mån
Övriga Unity-membran	12 mån

PROTESFÖTTER

BEGRÄNSAD GARANTI
Össur ger en 30-dagars provanvändning för varje protesfot. Om den amputerade inte är nöjd med protesfoten av någon orsak, kan ortoped-ingenjören skicka tillbaka den till Össur för en full återbetalning inom 30 dagar från fakturans datum. För en detaljerad beskrivning av hur man returnerar produkter se Försäljningsvillkor.

Re-Flex Shock	36 mån
Re-Flex Rotate	36 mån
Vari-Flex	36 mån
Pro-Flex Terra	36 mån
Pro-Flex Pivot	36 mån
Pro-Flex ST	36 mån
Pro-Flex Modular	36 mån
Pro-Flex XC	36 mån
Pro-Flex LP	36 mån
Pro-Flex XC Torsion	36 mån
Pro-Flex LP Torsion	36 mån
Pro-Flex LP Align	36 mån
LP Vari-Flex	36 mån
Flex-Foot Assure	36 mån
Balance Foot S	36 mån
Balance Foot S Torsion	36 mån
Balance Foot J	24 mån
Flex-Foot Balance	12 mån
Flex-Foot Balance med DP-Flexion	12 mån
Flex-Symes	36 mån
Chopart	24 mån
Cheetah Xpanse	12 mån
Cheetah Xcel	12 mån
Cheetah Xceed	12 mån
Flex-Run	12 mån
Cheetah Xplore	36 mån
Cheetah Xtreme	12 mån
Cheetah Xtend	12 mån
Flex-Foot Cheetah	12 mån
Vari-Flex Junior	18 mån
Flex-Foot Junior	18 mån
Cheetah Junior	18 mån
Cheetah Xplore Junior	18 mån
Flex Run Junior	18 mån
Torsion Shock Adapter	36 mån
Fotkosmetik	6 mån
Nike Sole	2 mån
Nike Spike Pad	2 mån
Hälkudde i skumgummi och sulor	6 mån

* Bionic-enheterna köps med antingen 3 års eller 6 års garanti (POWER KNEE batterierna exkluderade). Maximal total garantitid är 6 års. Kontakta Kundsupport vid frågor.

** Membranet är inte utbytbar. Garanti för membranet motsvarar garantin för Unity pump-modul

GARANTIER

PROTESKNÄLEDER	BEGRÄNSAD GARANTI	MECHANICAL UPPER LIMB	LIMITED WARRANTY
Össur protesknäleder ingår inte i trial-upplägget. När en förpackning väl har öppnats, kan produkten inte returneras. För att testa en protesknäled, kontakta din lokala säljrepresentant för vidare diskussion.		PIPDriver	24 mån*
		MCPDriver	24 mån*
		ThumbDriver	24 mån*
		GripLock Finger	24 mån*
Mauch Knee EMEA	24 mån		
Mauch Knee Plus EMEA	24 mån	BIONIC UPPER LIMB	LIMITED WARRANTY
		i-Limb Access	24 mån**
CHEETAH KNEE	BEGRÄNSAD GARANTI	i-Limb Quantum	24 mån**
Cheetah Knee	18 mån	i-Digits Access	24 mån**
		i-Digits Quantum	24 mån**
TOTAL KNEE	BEGRÄNSAD GARANTI		
Total Knee 1900	24 mån	UPPER LIMB TILLBEHÖR	BEGRÄNSAD GARANTI
Total Knee 2000	24 mån	i-Limb Skin Proteshandskar	3 mån
Total Knee 2100	24 mån	Hand - tillbehör	12 mån***
Total Knee Junior	24 mån	Demo-Limb	12 mån
		Virtu-Limb	12 mån
OP4 Knee	24 mån		
OP5 Knee	24 mån	PASSIVA FUNKTIONELLA	BEGRÄNSAD GARANTI
OHP3 Knee	24 mån	PROTESHÄNDER	
Paso Knee	24 mån	LivingSkin	12 mån
BALANCE KNEE	BEGRÄNSAD GARANTI		
Balance Knee OFM1	24 mån		
Balance Knee OFM2	24 mån		
LOCKING KNEE	BEGRÄNSAD GARANTI		
Locking Knee	12 mån		
ICELOCK	BEGRÄNSAD GARANTI		
Icelock 100 Serien	12 mån		
Icelock 200 Serien	12 mån		
Icelock 300 Serien	12 mån		
Icelock 400 Serien	12 mån		
Icelock 500 Serien	6 mån		
Icelock 544 Serien	6 mån		
Icelock 562 Hybrid	12 mån		
Icelock 600 Serien	12 mån		
Icelock 700 Serien	12 mån		
Icelock 850 Serien	12 mån		
STANDARDADAPTRAR	BEGRÄNSAD GARANTI		
Össur Standardadaptar	24 mån		
Össur Junior-adaptar	24 mån		
Össur Flexion Plates	24 mån		
Fixed Offset-adapters	12 mån		
Knee Rotation Adapter	12 mån		
HYLSSYSTEM	BEGRÄNSAD GARANTI		
Icecast Anatomy	12 mån		
Connect TF	24 mån		

* Ytterligare 1 års utökad garanti kan läggas till vid köptillfället

**Som längst kan 5 års garanti erhållas för respektive Touch-enhet. Garantin kan förlängas så länge enheten är under garanti. Kontakta Kundsupport för mer information.

***För tillbehör inkluderade i ett i-Limb eller i-Digit kit, gäller samma garantitid som för enheten själv. Vid frågor, kontakta Kundsupport.

NOTERINGAR

NOTERINGAR

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



WWW.OSSUR.SE

Össur Nordic
Box 7080
SE-164 07 Kista
Sverige

TEL + 46 18 18 22 00
EMAIL info@ossur.com

