

## BALANCE™ FOOT S

Faible activité.  
Haute technologie.

Découvrez le pied **Balance Foot S**. Il combine un talon souple amortissant les chocs, une forme unique en C, une lame plantaire large et fendue ainsi qu'une unité de torsion optionnelle. Il offre la stabilité, la sécurité et l'assurance que requièrent les utilisateurs faiblement actifs, en les accompagnant vers une expérience de marche d'un nouveau niveau.



Balance™ Foot S



Balance™ Foot S Torsion

- ① **Une forme en C**  
Destinée à augmenter l'amplitude de mouvement de la cheville pour une transition aisée de la position assise à debout et une marche plus fluide et naturelle.
- ② **Talon amortissant les chocs**  
Le talon amortissant en mousse de composite stable se comprime et se rigidifie progressivement pour un passage du pas et un retour d'énergie fluides.
- ③ **Une lame de pied large**  
Conçue pour des vitesses de marche faibles à normales.
- ④ **Une lame fendue**  
Elle offre une stabilité multiaxiale sur les différents types de terrain foulés au quotidien.
- ⑤ **Une unité de torsion en option**  
Elle contribue à restorer les capacités rotationnelles perdues, à réduire les forces de cisaillement et à absorber les chocs verticaux.
- ⑥ **La suspension à vide élevé Unity en option**  
Elle aide à réduire les fluctuations de volume et les forces de cisaillement dans l'emboîture.

# CARACTÉRISTIQUES BALANCE™ FOOT S & BALANCE™ FOOT S TORSION



SEMELLE DE LONGUEUR INTEGRALE



CONFORMITÉ AU SOL MULTI-AXIALE



LAME FENDUE



ORTEIL SÉPARÉ




ÉTANCHE sans Unity




RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES avec Unity

## BALANCE FOOT S

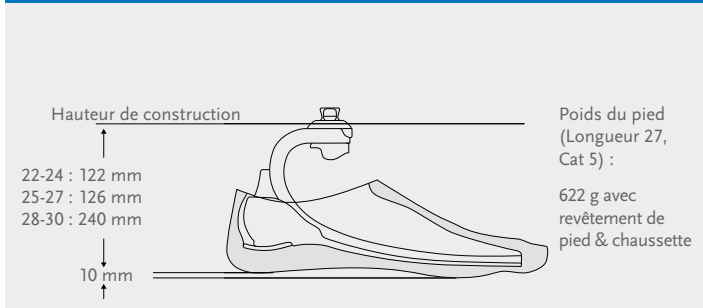

## BALANCE FOOT S TORSION

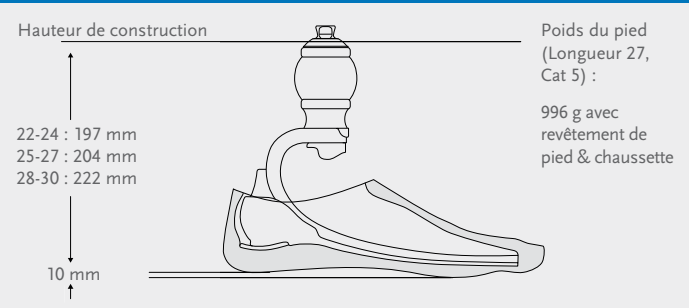

## INDICATIONS

- Transfémoral et Transtibial
- Niveau d'activité : Faible
- Limite de poids : 147kg

## OPTIONS

- Disponible en longueurs 22-30, catégories 1-8
- Unity est disponible en longueurs 22-30

Informations remboursement	
Balance Foot S	LPPR : Pied classe I code 2790093
Balance Foot S Torsion	LPPR : Pied classe I code 2790093 et amortisseur de chocs code 2709406

## CHAUSSETTES FLEX-FOOT

Réf.	Désignation	Tailles	Couleur
FCX63022	Chaussette noire à l'unité S	22-25	Noir
FCX63025	Chaussette noire à l'unité L	26-30	Noir
FCX63022-15	Lot de 15 chaussettes noires S	22-25	Noir
FCX63026-15	Lot de 15 chaussettes noires L	26-30	Noir

## KITS

- BSPOXYZ Balance Foot S avec revêtement de pied
  - BSPUXYZ Balance Foot S avec Unity et revêtement de pied
  - BSTOXYZ Balance Foot S Torsion avec revêtement de pied
  - BSTUXYZ Balance Foot S Torsion avec Unity et revêtement de pied
- X: catégorie 1-8, YY: longueur (22-30),  
Z: côté (L=Gauche / R=Droit)
- Ajouter le suffixe BR pour un revêtement brun

## FINITION ESTHÉTIQUE

- FSTOYYZ - FST - Kit de revêtement de pied
- YY: longueur (22-30), Z: côté (L=Gauche / R=Droit)
- Comprend : revêtement de pied, connecteur de revêtement, chaussette noire "Spectra"
- Ajouter le suffixe BR pour un revêtement brun

## GARANTIE

- 36 mois pour le Balance Foot S
- 36 mois pour le Balance Foot S Torsion
- 24 mois pour le module de pompe Unity
- 12 mois pour la valve Unity et la membrane

## GUIDE DE SÉLECTION DE CATÉGORIE

Poids kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact faible									
Longueur 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Longueur 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8

Retour des produits :  
Össur Europe  
De Schakel 70  
5651 GH Eindhoven  
Pays-Bas

Siège Social France :  
Össur France  
21 Chemin de la Sauvegarde  
69130 Ecully  
France

TEL +31 499 462 840  
00800 35 39 36 68 (NUMÉRO VERT)  
FAX +31 499 462 841  
00800 35 39 32 99  
orders.france@ossur.com

WWW.OSSUR.FR

