

## BALANCE™ FOOT S

Balance Foot S es un pie ligero e impermeable, que se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los usuarios de niveles K1 y K2, poco activos. Para estos usuarios, la espuma de amortiguación del talón con rigidez gradual y la quilla de suela ancha mejora la percepción de la estabilidad, una fuerza de despegue moderada y la percepción de una progresión plantar suave.

La funda anatómica del pie cuenta con una suela de adherencia estable y un dedo para sandalia con sistema de sujeción, que ofrece una mayor estabilidad del usuario descalzo sobre superficies mojadas o resbaladizas y la posibilidad de usar diferentes tipos de calzado.

Össur recomienda el uso de Balance Foot S junto con Unity, el sistema de suspensión de vacío sin rodillera. Este sistema añade un peso mínimo, no requiere mayor altura de montaje y no interfiere con la dinámica del Balance Foot S. Unity está diseñado para proporcionar una suspensión segura en combinación con la tecnología de Iceross Seal-In®, al tiempo que estabiliza las fluctuaciones de volumen y mantiene un ajuste cómodo del encaje durante todo el día.



Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial y transfemoral
Nivel de impacto:	Bajo
Peso máximo del paciente:	147kg
Información del sistema Unity	
Vacío máximo:	24inHg (609mmHg)
Presión normal de funcionamiento:	-15-23 inHg
Peso añadido al sistema:	130g con bomba, tubo y válvula de encaje

Información del pie	
Categorías::	1-8
Tamaño::	22-30
Peso del pie: (Tamaño 27, Cat. 5)	622 g incl. funda cosmética y calceta
Altura de montaje: (Tamaño 27)	126mm con pirámide macho y funda cosmética
Altura del talón:	10mm
Opciones de adaptador:	Pirámide macho



LONGITUD DE QUILLA COMPLETA



FLEXIBILIDAD MULTIAXIAL AL TERRENO



QUILLA SEPARADA



DEDO SEPARADO PARA SANDALIAS



RESISTENTE AL AGUA DULCE




RESISTENTE A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS\*

\* Resistente a condiciones climáticas adversas (solo salpicaduras, no inmersión) si se usa en combinación con Unity.

Nota: Los iconos que se muestran están relacionados con el nivel de impacto (prueba interna) y no con el nivel de actividad.

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

### PIE COMPLETO:

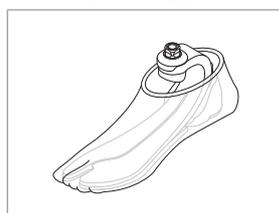


## BALANCE™ FOOT S

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Seleccione el kit de pie con Unity adecuado cuando realice el pedido y el sistema Unity con la bomba correspondiente se entregará preinstalado en el pie. Para mayor comodidad y compatibilidad del sistema, se recomiendan encarecidamente los kits de válvula de Unity como medio de conexión al encaje. Para los cuadros de selección y números de referencia de liner, consulte la página de Iceross Seal-In correspondiente.


#### PIE COMPLETO CON UNITY:

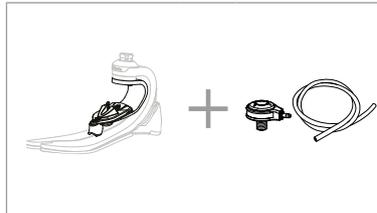

### GUÍA DE SELECCIÓN DE CATEGORÍA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Nivel de impacto bajo									
Tamaño 22-24	1	1	2	3	4	5	N/D	N/D	N/D
Tamaño 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Tamaño 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8

### DIMENSIONES

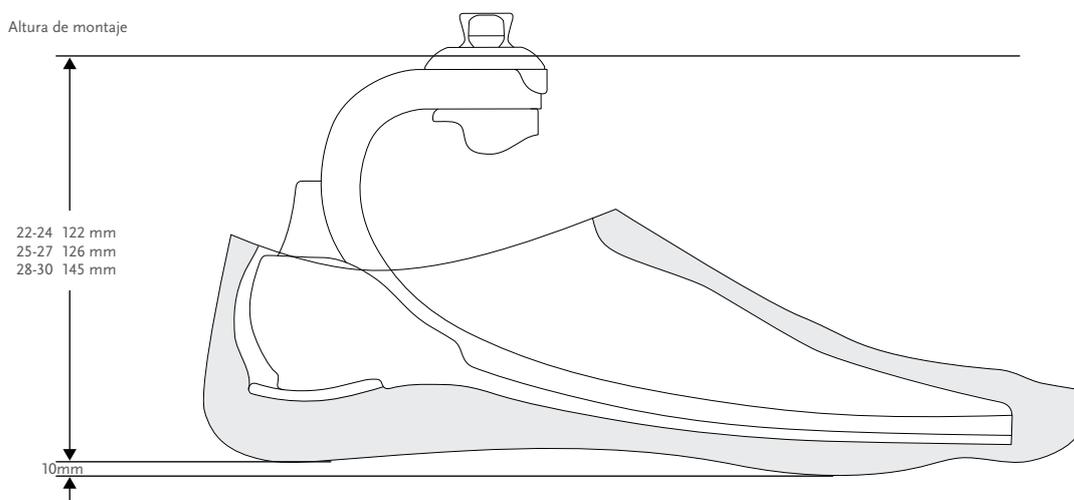

# BALANCE™ FOOT S

## KITS


### BALANCE FOOT S CON PIRÁMIDE MACHO




Incluye:

- Módulo de pie con pirámide macho
- Kit de funda cosmética\* con calcetín Spectra negro

\*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo "BR" a la referencia.

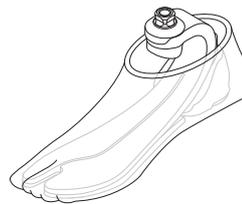


### BALANCE FOOT S CON PIRÁMIDE MACHO Y BOMBA UNITY

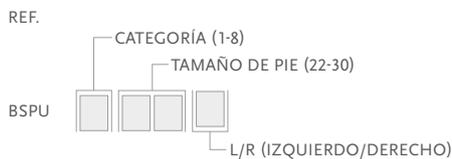

Incluye:




- Módulo de pie
- Funda cosmética extraíble\* con calcetín Spectra negro
- Bomba Unity

\*Note: Seleccione el kit de módulo de bomba Unity adecuado en función del tamaño del módulo de pie cuando realice su pedido y Unity se le entregará preinstalado en el pie. Para mayor comodidad y compatibilidad del sistema, se recomiendan los kits de válvula Unity para la conexión del encaje.

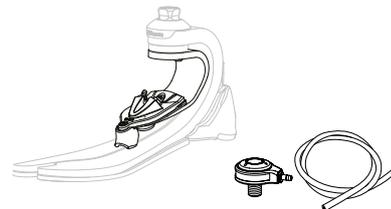

## UNITY KITS

Foto	Ref.	Descripción	Kits de pie compatibles
1	UBS0024	Módulo de bomba Unity	Balance Foot S y Balance Foot S Torsion Tamaño 22-24
1	UBS0027	Módulo de bomba Unity	Balance Foot S y Balance Foot S Torsion Tamaño 25-27
1	UBS0030	Módulo de bomba Unity	Balance Foot S y Balance Foot S Torsion Tamaño 28-30
2	UTT0001	Kit de válvula TT Unity	Todos
3	UTF0001	Kit de válvula TF Unity	Todos
4	UTF0006	Kit de tubo TF Unity	Todos
5	L-544611	Kit de Icelock 544	Todos
6	UTT1103	Paquete de filtro de aire de válvula Unity (10 uds.)	Todos

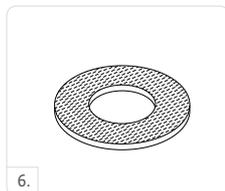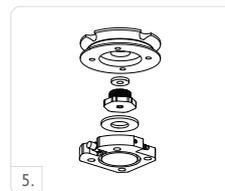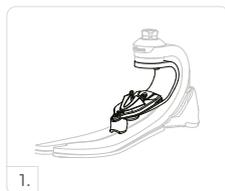

## BALANCE™ FOOT S

### COMPONENTES DE REPUESTO DE UNITY

Ref.	Descripción
UBS00021	Componentes de Unity 22-30

Incluye:

- Puerto de salida de Unity
- Puerto de entrada de Unity
- Válvula de pico de pato
- Tubo
- Abrazadera de tubo
- Loctite

### ACABADO COSMÉTICO

#### KIT DE FUNDA COSMÉTICA, BEIGE O MARRÓN\*

REF.



Incluye:

- Kit de funda cosmética.\*
- Fijación para la funda cosmética
- Calcetín Spectra negro

\*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo "BR" a la referencia.

#### CALCETINES SPECTRA

Se utilizan para proteger el módulo de pie y eliminar el ruido que se provoca por el contacto del pie con la funda cosmética.

N.º de ref.	Descripción	Tamaño
FCX63022	Calcetín Spectra pequeño Negro (S) 1 und.	22-25
FCX63025	Calcetín Spectra grande Negro (L) 1 und.	26-30
FCX63022-15	Calcetín Spectra pequeño Negro (S) 15 und.	22-25
FCX63026-15	Calcetín Spectra grande Negro (L) 15 und.	26-30

