

BALANCE™ FOOT J



UNITY
COMPATIBLE

Balance Foot J zaprojektowano z myślą o potrzebach osób poruszających się wolniej. Jest to produkt lekki, a pięta zapewnia stabilność i amortyzację uderzeń. Wraz z pełnej długości nakładką Balance J zapewnia doskonałą stabilność i podparcie.

Unity do Balance Foot J to bezrękawowy system zawieszenia podciśnieniowego zaprojektowany do stabilizacji zmian objętości i zachowania wygodnego dopasowania leja protezowego w ciągu dnia. Został on specjalnie zaprojektowany dla mniej aktywnych użytkowników, a w połączeniu z technologią Seal-In zapewnia bezpieczne zawieszenie i dostosowanie do objętości. Lekka stopa zapewnia stabilność i amortyzację uderzeń pięty, pełnej długości nakładka zapewnia doskonałą stabilność i dynamikę podparcia bez ograniczającego wpływu zewnętrznego rękawa zawieszenia. Unity zwiększa minimalnie ciężar, bez zwiększenia wysokości konstrukcji protezy i nie wpływa na dynamikę modułu stopy.



Informacje o użytkowniku

Poziom amputacji:	Amputacja uda i podudzia
Poziom dynamiki ruchu:	Niski
Limit wagowy pacjenta:	136 kg



REAKCJA
PROPORCJONALNA



DŹWIGNIA
PALCÓW O PEŁNEJ
DŁUGOŚCI



AKTYWNE
RUCHY
PISZCZELI



ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

Informacje o stopie

Kategorie:	1-5
Rozmiary:	22-30
Ciężar stopy: (rozmiar 27, kat. 2)	502 g z piramidą i pokryciem stopy
Wysokość konstrukcji: (rozmiar 27)	125 mm z piramidą męską i pokryciem stopy
Opcje adaptera:	Złącze piramidowe męskie

Informacje dotyczące systemu Unity


Maksymalne podciśnienie:	-23 in Hg (-600 mm Hg)
Normalne ciśnienie robocze:	-15-18 in Hg
Zwiększona waga systemu:	104 g z pompą, zaworem leja protezowego i rurką



BALANCE™ FOOT J

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

DO CAŁEJ STOPY

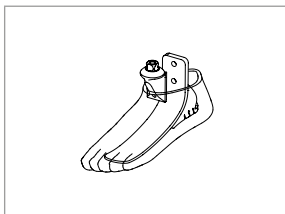

Przy zamawianiu należy wybrać moduł pompy Unity odpowiedni dla rozmiaru modułu stopy protezowej. System Unity zostanie dostarczony wstępnie zamontowany na stopie protezowej. Dla zapewnienia większej wygody i zgodności systemu zaleca się zamontowanie w leju protezowym zaworu Unity.

Tabele doboru lejów silikonowych i numery elementów można znaleźć, na odpowiedniej stronie dotyczącej Iceross Seal-In.

DO CAŁEJ STOPY Z UNITY

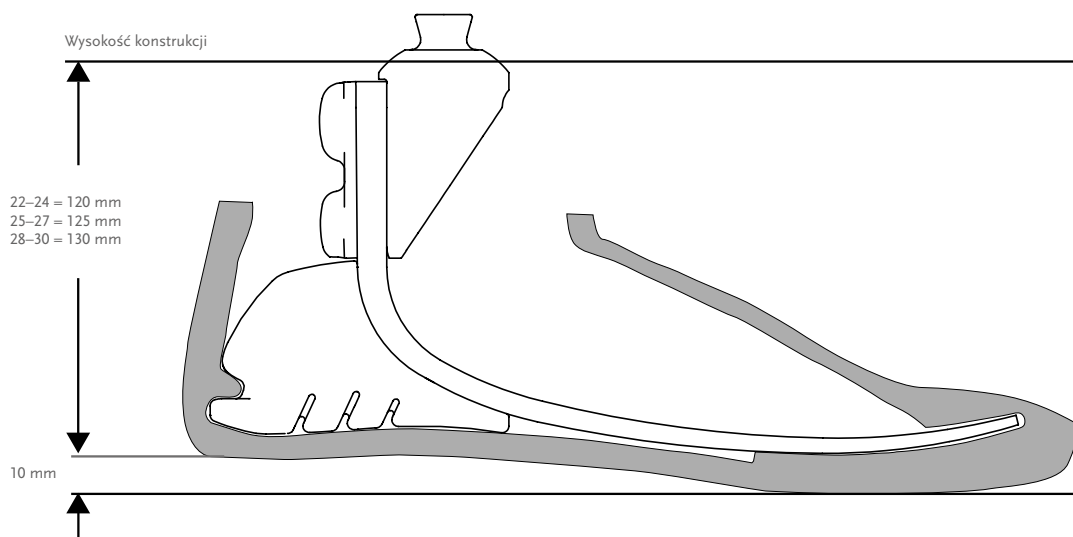


TABELA DOBORU KATEGORII

Waga w kg	45-61	62-80	81-97	98-114	115-136
Waga w funtach	99-135	136-176	177-214	215-251	252-300
22	1	2	bd.	bd.	bd.
23	1	2	3	4	bd.
24	1	2	3	4	bd.
25	1	2	3	4	5
26	1	2	3	4	5
27	1	2	3	4	5
28	bd.	2	3	4	5
29	bd.	bd.	3	4	5
30	bd.	bd.	bd.	4	5

BALANCE™ FOOT J


ODSTĘP



*Uwaga: Balance Foot J z Unity ma tę samą wysokość konstrukcji co Balance Foot J.

ZESTAWY


BALANCE FOOT J Z PIRAMIDĄ MĘSKĄ

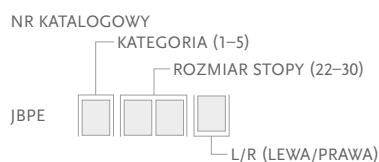

W zestawie:

- Moduł stopy z piramidą męską
- Zestaw pokrycia stopy*

*W przypadku Balance Foot J z brązowym pokryciem stopy należy dodać „BR” na końcu numeru katalogowego.

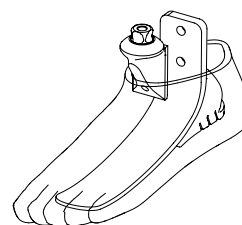

KOMPONENTY

ADAPTER PIRAMIDOWY MĘSKI ZE ŚRUBAMI

Nr katalogowy	Kat.	Waga
SFX00165	1-5	158 g





BALANCE™ FOOT J

UNITY


ZESTAWY UNITY

Rysunek	Nr katalogowy	Opis	Stosowane zestawy stóp protezowych
1	UFA0024	Pompa FAP-JBP Unity S22-24	Balance Foot J Rozmiar 22–24
1	UFA0027	Pompa FAP-JBP Unity S25-27	Balance Foot J Rozmiar 25–27
1	UFA0030	Pompa FAP-JBP Unity S28-30	Balance Foot J Rozmiar 28–30
2	UTT0001	Zestaw zaworów Unity TT	Wszystkie
3	UTF0001	Zestaw zaworu Unity TF	Wszystkie
4	UTF0006	Zestaw Unity TF Tube	Wszystkie
5	L-544611	Icelock 544 Kit	Wszystkie

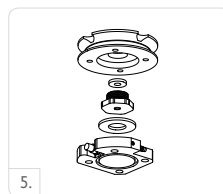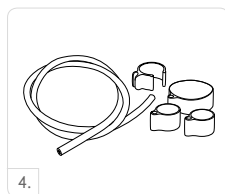

CZĘŚCI ZAMIENNE UNITY

Nr katalogowy	Opis
UFA00021	Komponenty Unity FAP-JBP 22-24
UFA00022	Komponenty Unity FAP-JBP 25-27
UFA00023	Komponenty Unity FAP-JBP 28-30

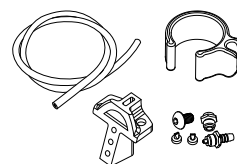


W zestawie:

- Łopátka pompy
- Membrana
- Mocowania ząbkowane
- Zawory zwrotne
- Śruba montażowa
- Rurka
- Loctite
- Zacisk rurki

BALANCE™ FOOT J

ZESTAWY STÓP Z UNITY

BALANCE FOOT J Z PIRAMIDĄ MĘSKĄ

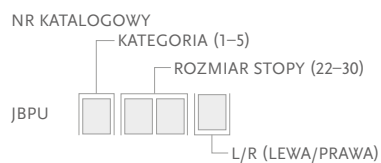

W zestawie:

- Moduł stopy z piramidą męską
- Zestaw pokrycia stopy*

*W przypadku Balance Foot J z brązowym pokryciem stopy należy dodać „BR” na końcu numeru katalogowego.