

CHEETAH® XPLORE



Cheetah Xplore är en unik s.k. "crossover-protesfot" som inspirerats av den ursprungliga Cheetah-designen. Protesfoten är främst tänkt att användas till vardags men passar även de protesanvändare som vill ägna sig åt olika typer av motionsidrott och mer intensiva vardagsaktiviteter.

Genom att kombinera god energiåtergivning och dynamiskt fränskjut med en bra balans och stabilitet, ger protesen ett bra stöd i vardagen till de protesanvändare som lever ett aktivt liv.



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial och transfemural
Impact:	Medel till hög
Max. patientvikt:	147 kg



PROPORTIONAL
RESPONSE



CARBON-X®
ACTIVE HEEL



FULL LENGTH TOE
LEVER



ACTIVE TIBIAL
PROGRESSION



WATERPROOF

Produktinformation	
Kategori:	1-9
Storlek:	En storlek per kategori
Fotens vikt (kat. 5):	646 g
Bygghöjd:	Maximal höjd upp till den bakre kanten på proteshylsan: 521 mm Minsta höjd upp till den bakre kanten på proteshylsan: 348 mm Minsta avstånd mellan proteshylsa och fot: 32 mm
Adapter:	Anslutningsplatta för laminering
Garanti:	36 mån

Obs! Protesen är vattentät när protesfoten är direktlaminerad på proteshylsan.

En vattentät enhet kan användas i våta och/eller fuktiga miljöer, samt tillfälligt sänkas ner i färskvatten (ner till 1 m djup i högst 30 min). Exponering för färskvatten under dessa omständigheter bör inte ha någon skadlig effekt på enheten. Torka noggrant av enheten efter kontakt med färskvatten. Färskvatten: Inkluderar kranvatten. Exkluderar salt och klorerat vatten. De komponenter som används med foten måste också vara vattentäta.

För instruktionsfilm läs in QR-koden eller gå in på www.ossur.com/CheetahXplore och gå in under foldern "Alignment".



VAL AV KATEGORI


Vikt, kg		45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact	Medel	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Extrem	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A

Gå in på YouTube och sök på "Cheetah Xplore – Behind the scenes with Greg Davidson." eller läs in QR-koden.



CHEETAH® XPLORE

BYGGHÖJD MED ANLSUTNINGSPLATTA

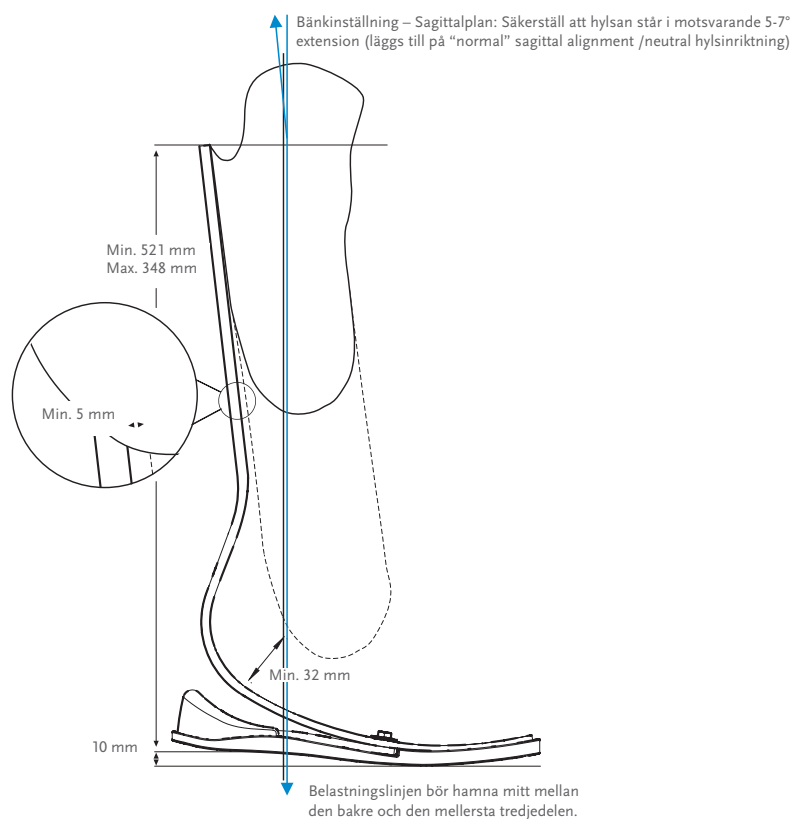

FLEX-FOOT®
UNITY®

KIT

CHEETAH XPLORE KIT

Art.nr.

KATEGORI (1-9)

FSX009



Innehåller:

- Cheetah Xplore fotblad
- Foam Heel Counter
- Foam Sole
- +Pluseries Adhesives 220 ml - Composite 1 Minute*

*Cheetah Xplore levereras med +Pluseries composite 1 minute adhesive.
+Pluseries adhesive dispenser måste dock beställas separat.

Anslutningsplatta för laminering (FSX50009) beställs separat.



Gå in på YouTube och sök på "Össur Cheetah Xplore: Making of - mit Markus Rehm" eller läs in QR-koden.



CHEETAH® XPLORE


KOMPONENTER

ANSLUTNINGSPLATTA FÖR LAMINERING

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
FSX50009	Anslutningsplatta för laminering	1-9

Innehåller:

- Anslutningsplatta
- Kilar (2°, 4°, 6°, 8°)
- Fästskruvar
- Lamineringskit

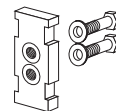


SKRUVSATS FÖR T-STYCKE

Art.nr.	Längd	Vikt	Storlek	Kategori
CM100054	8 mm	108 g	5/16" x 2 1/2"	1-6
CM100055	10 mm	144 g	3/8" x 2 1/2"	1-9


Innehåller:

- Skruvar
- Muttrar
- Sfäriska brickor
- Planbricka

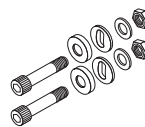


SKRUVSATS FÖR ANSLUTNINGSPLATTA

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM130218	5/16"-24 x 1 1/2"	1-6
CM130213	3/8"-24 x 1 3/4"	7-9

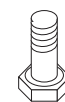

KILAR FÖR INRIKTNING

Art.nr.	Beskrivning	Kategori
CM140502	2°	Alla
CM140505	4°	Alla
CM140508	6°	Alla
CM140511	8°	Alla

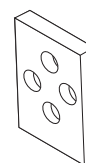

+PLUSERIES

Art.nr.	Beskrivning
FSX80016	+Pluseries 220 ml Dispenser
FSX80015	+Pluseries lim 220 ml - komposit 1 minut
FSX80017	+Pluseries Mixing munstycken. Innehåller: 6 Mixing munstycken



CHEETAH® XPLORE

KOMPONENTER

HÄLKILAR

Art.nr.	Storlek	Kategori
CM150011	22-30	Alla

Innehåller: 3 kilar och lim.




FLEX-FOOT®
UNITY®

HÄLKUDDE OCH SULA I SKUMGUMMI

Art.nr.
FSX60001

Innehåller:

- Hälkudde i skumgummi
- Sula i skumgummi

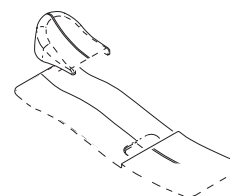

FOTKOSMETIK

FOTKOSMETIK

ART.NR.	FOTSTORLEK (28-30)
FSE0	L/R (LEFT/RIGHT)

Innehåller:

- Fotkosmetik
- Fästplatta/ring
- Svart Spectra Sock

För brun kosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.



SPECTRA SOCK – SVART

Dra Spectra Sock över kolfiberfoten för att skydda fot och kosmetik samt för att förhindra att damm och smuts kommer in mellan kolfiberbladen (risk för oljud).

Art.nr.	Storlek
FSEL60002	26-30 (Large) - 1 stk
FSEL60002-15	26-30 (Large) - 15 stk

