

ICEROSS SEAL-IN® X



La cuffia Iceross Seal-In X offre agli utenti la tecnologia avanzata Seal-In, un design senza ginocchiera caratterizzato da un anello di tenuta separato e mobile per un adattamento personalizzato alle singole forme dei monconi e alle fluttuazioni di volume. Facile da togliere e da indossare, anche per utenti meno attivi con problemi alle mani.

Lo speciale tessuto senza cuciture della cuffia Iceross Seal-In X ha la capacità di allungarsi con precisione e in modo confortevole alla rotula al fine di facilitare la flessione del ginocchio. La pelle potenzialmente fragile è protetta dalla miscela di silicone morbida ma resistente.


Gli anelli Seal-In hanno il rivestimento Easy Glide a basso attrito, che elimina la necessità di usare lo spray a base di alcool o altri lubrificanti per indossare l'invasatura.

Gli anelli Seal-In sono disponibili in tre diverse opzioni:

- X-Classic: il classico anello per l'utilizzo quotidiano
- X-Grip: per un buon controllo rotazionale
- X-Volume: consente una maggiore tolleranza nella riduzione di volume


I nuovi anelli Seal-In possono essere ordinati in base alle necessità e rinnovati senza bisogno di una nuova cuffia.

Combina la tecnologia Seal-In con il sistema di sospensione a vuoto attivo Unity per la stabilizzazione delle fluttuazioni di volume e una vestibilità dell'invasatura confortevole durante il giorno.

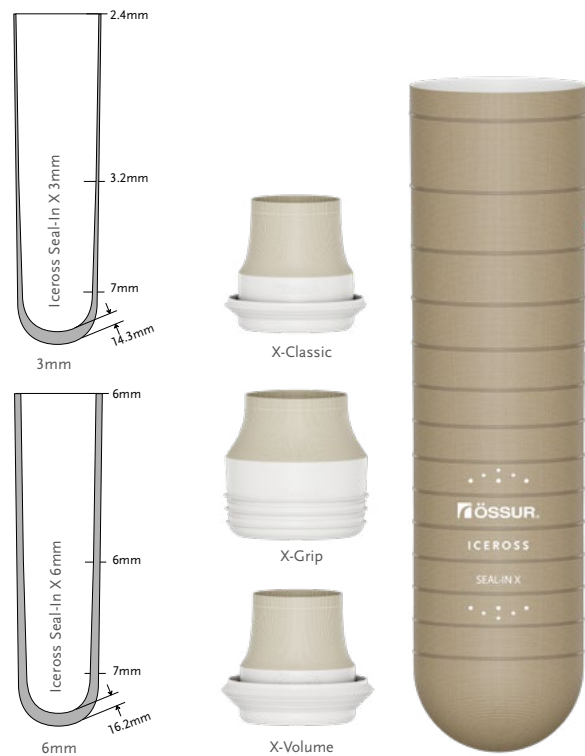

Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transtibiale
Livello di attività:	Basso - Moderato - Alto
Informazioni sul prodotto	
Misure:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*
Profilo:	3mm, 6mm
Misure anelli:	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65

*La misura 40 è solamente disponibile con il profilo da 3mm

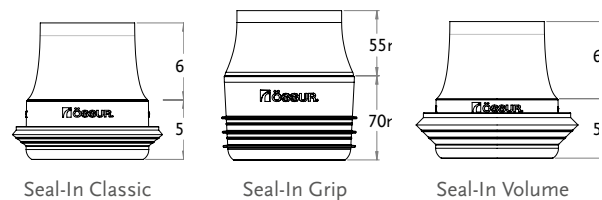

SISTEMA DI SOSPENSIONE



SEAL-IN X

CARATTERISTICHE



RIVESTIMENTO



SKIN CARE ATTIVO



SUPERFICIE INTERNA SETIFICATA




EASY GLIDE

ICEROSS SEAL-IN® X

SELEZIONE MISURA ANELLO SEAL-IN

1. Misurare la circonferenza del moncone (in cm) all'altezza desiderata, direttamente sulla pelle
2. Fare riferimento alla tabella misure per decidere la misura corretta del dispositivo
3. Leggenda della tabella misure: X-misura anello Seal-In, Y-Circonferenza (cm), A-Fissaggio aderente B-Fissaggio allentato

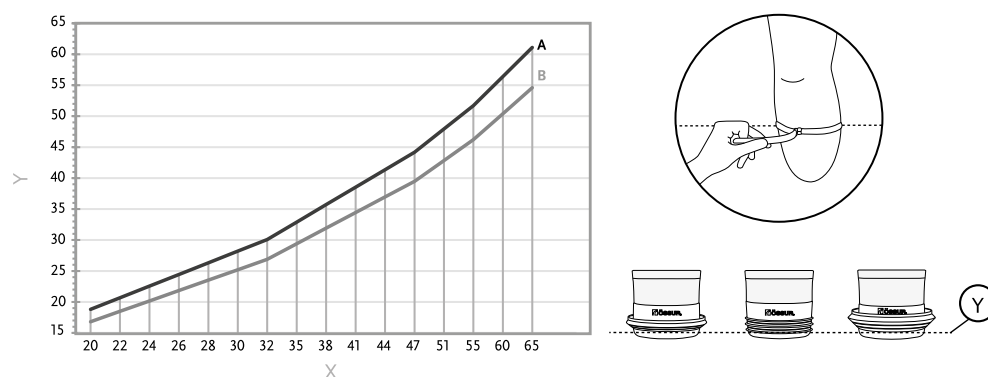

LUNGHEZZA MINIMA DEL MONCONE RACCOMANDATA

Misurare la lunghezza del moncone dal centro rotula all'estremità distale. Confrontare la misura con la tabella :

Misura cuffia	Lunghezza minima
16-23,5	11cm
25-30	12cm
32-36	13cm
40	14cm

INFORMAZIONI CODICI PRODOTTO - ICEROSS SEAL-IN X

Cod. prod.	Descrizione	Contenuto
I-4443XX	Iceross Seal-In X 3mm	Cuffia
I-4446XX	Iceross Seal-In X 6mm	Cuffia
I-SXC0XX	Anello Iceross Seal-In X-Classic	Anello Seal-In X-Classic
I-SXG0XX	Anello Iceross Seal-In X-Grip	Anello Seal-In X-Grip
I-SXV0XX	Anello Iceross Seal-In X-Volume	Anello Seal-In X-Volume
I-RXC001	Seal-In X-Classic Kit 26-51	10 anelli Seal-In X-Classic
I-RXC004	Seal-In X-Classic Kit 20-65	16 anelli Seal-In X-Classic
I-RXG001	Seal-In X-Grip Kit 26-51	10 anelli Seal-In X-Grip
I-RXG004	Seal-In X-Grip Kit 20-65	16 anelli Seal-In X-Grip
I-RXV001	Seal-In X-Volume Kit 26-51	10 anelli Seal-In X-Volume
I-RXV004	Seal-In X-Volume Kit 20-65	16 anelli Seal-In X-Volume