

ICEROSS SEAL-IN® X5 TRANSFEMORAL





För transfemoralt amputerade protesanvändare.

5 tättningsringar i silikon ger optimal suspension och mycket god rotationskontroll. Iceross Seal-In X5 TF har även en armering som sträcker sig över hela linerns längd för att stabilisera mjukdelarna.

OBS! Iceross Seal-In X5 TF är inte direkt utbytbar med Iceross Seal-In TF.

Kan med fördel användas tillsammans med Icelock 552 (Vakuumventil L-552000) eller komponenter ur Icelock 554-serien.

Mät stumpens omkrets ca 4 cm från distala änden och välj liner av rätt mått eller storleken under. Mät stumpens omkrets i nivå med perineum för att bedöma profil - standard eller konisk (se s. 61).

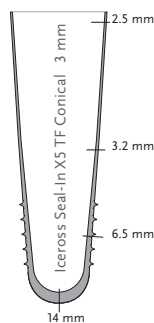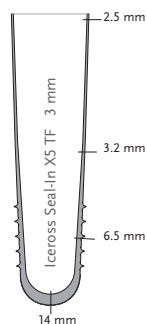

ÖSSUR LINERS

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55.
Storlekar Konisk:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
Profil:	3 mm
Material:	DermaSil® Silicone. Durometer: Firm 50.
Matrix:	Fullängd
Garanti:	6 mån

SUSPENSIONSMETOD



SEAL-IN X5

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER



ACTIVE SKIN CARE



SILKEN INNER SURFACE



CONICAL



MENTHOL

ICEROSS SEAL-IN X5 TRANSFEMORAL

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
I-TF673xx	Standard 3 mm	Seal-In X5
I-TF678xx	Konisk 3 mm	Seal-In X5

TILLBEHÖR

Art.nr.	Beskrivning
L-552000	Icelock vakuumventil 552
I-544611	Icelock vakuumventil 544 för Unity*
I-544621	Icelock vakuumventil 544 för Seal-In*
I-990100	Seal-In Spray Pen
TM0037	Technical Manual Iceross Seal-In X5 TF



*inlamineringsadapter L-544400 ingår i kitet. För mer information, se "Icelock 544".