

MAUCH® KNEE



UNITY
COMPATIBLE

Mauch Knee è stato progettato per resistere a condizioni imprevedibili. Dotato di un profilo sofisticato, blocco all'estensione, struttura leggera in alluminio e cuscinetti sferici migliorati, Mauch Knee è adatto agli utenti molto attivi.

- Ginocchio idraulico monoassiale con controllo della fase di oscillazione e di appoggio (SNS®).
- Progettato per la deambulazione a velocità variabili
- Resistente e sicuro durante tutti i movimenti
- Telaio in alluminio molto resistente
- Cuscinetti a rulli sui punti d'attacco dell'asse e del cilindro del ginocchio per un'azione scorrevole
- Controllo della fase di appoggio
- Possibilità di azionare le funzioni di bloccaggio manuale e di oscillazione libera
- Il profilo liscio aiuta la finitura cosmetica




Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transfemorale
Livello di attività:	Moderato - Alto, Sport
Limite peso:	136kg

Informazioni sul prodotto	
Altezza ginocchio:	248mm
Peso ginocchio (con cilindro):	1.14kg
Arresto di flessione:	a 115°



INGOMBRO

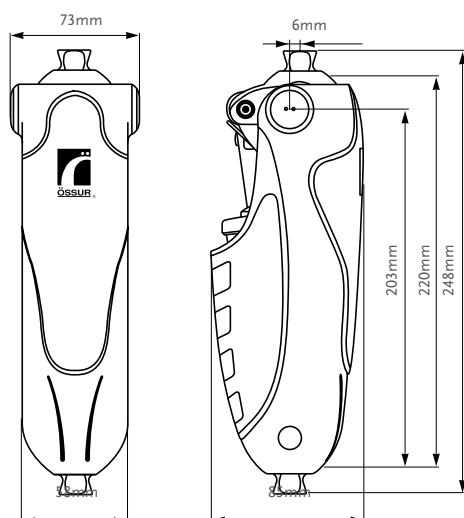

KITS

Cod. prod.	Descrizione
MKN01360	Mauch Knee Kit SNS - Resistenza regolare

COMPONENTI

Cod. prod.	Descrizione
MKA01361	Rivestimento ginocchio
MKA01362	Copertura anteriore
MKA01363	Copertura posteriore
MKA01364	Spina laterale

*Ordine speciale