

rössur[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Navii[®]

Amplia il tuo mondo



Scopri Navii®

L'evoluzione della tecnologia protesica a microprocessore.



Attuatore di nuova generazione

Forte stabilità, facile oscillazione



Controllo istantaneo fase di appoggio

Supporta gli utenti di tutti i livelli funzionali



Waterproof in ogni ambiente

Navii è IP68 + altro



Funzionalità per attività ad alta intensità

Transizione fluida dalla camminata alla corsa, andare in bicicletta e scendere le scale



Blocco manuale a posizione variabile

Il primo nel suo genere



Cover di protezione rimovibile


Progettata per forma e funzione



Össur Logic

Esercizi di allenamento e impostazioni avanzate



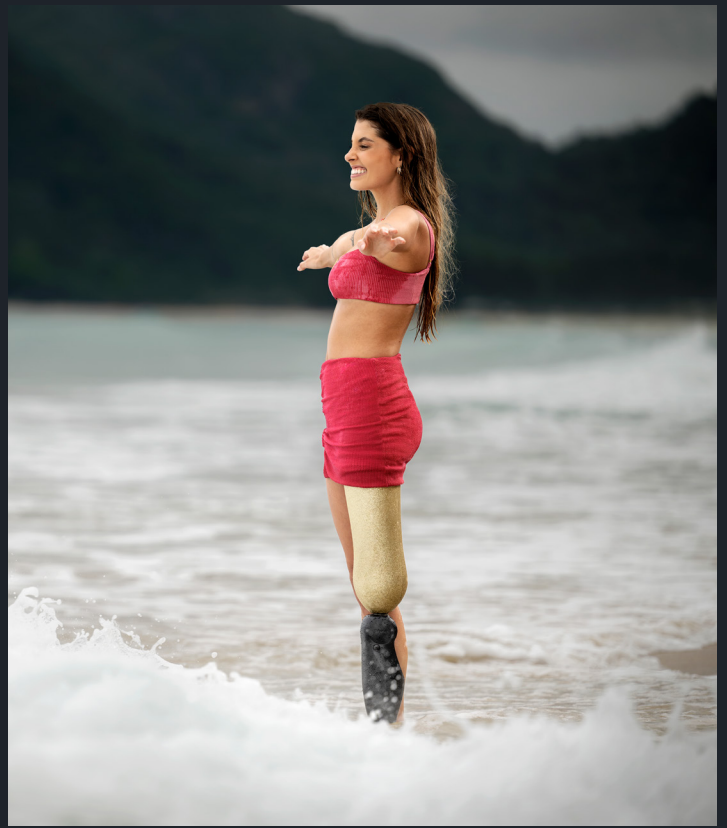

Un partner di fiducia

Fin dall'inizio, Navii è stato creato per consentire una vita senza limiti. Abbiamo progettato un dispositivo che continuasse a muoversi in qualsiasi ambiente e ampliasse i limiti di cosa è possibile per i nostri utenti.

Costruito per gli impatti

Sensori e attuatore robusti.

Portare l'impermeabilità a un nuovo livello

Resistente alla corrosione e facile drenaggio e pulizia.

Batteria ad alta capacità e lunga durata

Autonomia della batteria fino a 72 ore continue: la batteria può durare di più se viene spento quando non in uso.

Navii è IP68 + altro

6

6 Protezioni contro l'ingresso di particelle solide:

Antipolvere

8

8 Protezioni contro l'ingresso di acqua:

Immersione continua

+

altro

Navii è protetto in ogni ambiente:


acqua salata, clorata, sabbia e fango.

Basta sciacquare e ripetere!



La libertà di muoversi con fiducia

Navii infonde sicurezza a ogni passo. I suoi rivoluzionari algoritmi di attuatore e andatura promuovono la stabilità di appoggio, transizioni coerenti e una libertà di movimento senza precedenti.

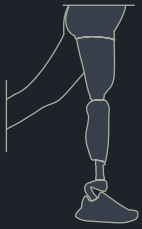

Stabilità di appoggio

L'elevata coppia di base offre una maggiore resistenza per supportare l'utente.

Ripresa in caso di inciampo

Se si inciampa, Navii consente all'utente di riprendersi, offrendo una forte resistenza istantanea.

Rinforzo nella discesa

Il nuovo controllo di rendimento consente un avvio più facile della flessione e una resistenza costante in tutti i gradi elevati di flessione.



Avvio dell'andatura

Un primo passo regolare è fondamentale per la sicurezza dell'utente. Navii permette di iniziare il movimento in modo più facile rispetto agli altri MPK's.

Oscillazione senza sforzo

Fase di oscillazione a basso attrito con ridotto costo metabolico della camminata¹.

Funzionalità per uno stile di vita fluido



Dalla camminata alla corsa



Rilevamento automatico della pedalata



Salire le scale passo dopo passo



Blocco manuale a posizione variabile

Migliora i risultati con Össur Logic

Grazie a Össur Logic, puoi vedere i progressi in movimento su qualsiasi dispositivo iOS. Dalla configurazione semplice a quella avanzata, i tecnici ortopedici possono personalizzare le impostazioni Navii per soddisfare le mutevoli esigenze di ogni persona.

Esercizi di allenamento biofeedback

Fornire a tecnici ortopedici, fisioterapisti e utenti uno strumento che supporta il miglioramento continuo.

L'installazione è una passeggiata


Navii impara a conoscere l'andatura dell'utente in pochi secondi.

Report sulle attività avanzate

Aiuta a monitorare i progressi e supporta il rimborso.

Controllo della stabilità migliorato

Funzionalità aggiuntive disponibili per supportare gli utenti K2 e la riabilitazione.

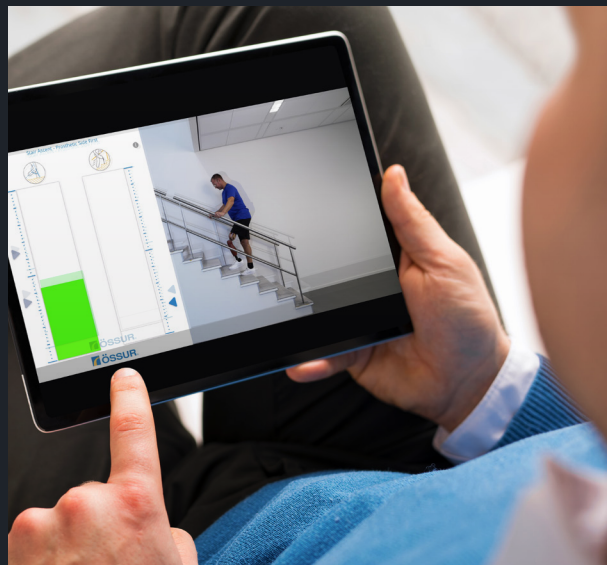

Cover protettive rimovibili per gli utenti



Adobe
Red

Luna
Grey

Mosi
Green

Wave
Blue

Onyx
Black

Onyx
Black

Onyx
Black

Standard Medio Lungo

Le cover protettive Navii, ispirate ai paesaggi islandesi aggiungono valore in funzione e forma.

- La forma anatomica e le finiture di alta qualità danno una sensazione e un look naturale.
- Aggiunge comfort e stabilità quando ci si inginocchia.
- Disponibile in 3 lunghezze.

Migliora l'esperienza Navii con la tecnologia dei piedi Össur

Abbinando Navii a una soluzione protesica Össur personalizzata si offrono dei vantaggi esclusivi a un'ampia gamma di utenti.

”

Navii insieme a Proprio Foot mi ha dato sicurezza, stabilità e capacità di adattamento in terreni irregolari. Posso finalmente camminare dovunque io voglia, senza più pianificare o cambiare strada.*

Chris Olivier

Capetown, South Africa



*Le dichiarazioni rilasciate rappresentano solo l'esperienza di una persona e non costituiscono una garanzia, una promessa o un riflesso dell'esperienza degli altri.



”

Quando pratico sport, testo i miei limiti e capisco se posso andare un po' oltre. Navii rende questo possibile, dandomi la flessibilità di cui ho bisogno. Posso fidarmi completamente.*

Marta Casado
Madrid, Spagna

”

Non importa quale sia la situazione o dove io sia, Navii è in grado di percepire cosa sta succedendo e mi impedisce di inciampare o cadere. Ho perso la mia gamba 62 anni fa e ora, all'improvviso la mia gamba si prende cura di me.*

Gil Moncrief
Idaho, Stati Uniti





Livello attività

Navii con Balance™ Foot S

Una soluzione stabile, confortevole e leggera che migliora la dinamica dell'andatura degli utenti K2.

Navii con Proprio Foot®

La funzione sincronizzata del ginocchio e della caviglia fornisce una sicurezza ulteriore e una migliore simmetria in vari terreni.

Navii con Pro-Flex® Terra

La soluzione transfemorale di Össur per utenti K3/K4 che conducono uno stile di vita attivo e ricercano la massima dinamica.

1. I kit protesici Össur includono una seconda cover a scelta dell'utente senza costi aggiuntivi.
2. I kit protesici Össur con Proprio Foot includono un kit di ricarica doppia per ricaricare in simultanea.
3. Navii è anche adatto a tutti i piedi della famiglia Pro-Flex.

Informazioni utente



Livello di amputazione	Transfemorale, disarticolazione del ginocchio, disarticolazione dell'anca	
Osteointegrazione	Sì	
Bilaterale	Sì	
Livello di impatto	Da basso a moderato	Alto
Peso massimo dell'utente	136 kg	110 kg



WWW.OSSUR.COM

Össur Europe B.V.
De Schakel 70
5651 GH Eindhoven
P.O. Box 120
5690 AC Son en Breugel
The Netherlands

TEL NL +39 051 6920852
orders.italy@ossur.com

