

## PRO-FLEX® PIVOT

UNITY®  
COMPATIBLE



Pro-Flex Pivot combina un increíble movimiento del tobillo de 27° con una potencia de tobillo significativamente mayor que un pie de fibra de carbono convencional. Desarrollado específicamente para mejorar la protección del lado sano, imita el movimiento biomecánico para ofrecer una reducción probada del 13% en la carga de la extremidad contralateral.

- Movimiento de tobillo de 27°
- Ayuda a reducir la carga en la extremidad contralateral en un 13%
- Excelente retorno de energía
- Innovador mecanismo de pivote
- Funda cosmética anatómica

Össur recomienda el uso de Pro-Flex Pivot junto con Unity, el sistema de suspensión de vacío sin rodillera. Este sistema añade un peso mínimo, no requiere mayor altura de montaje y no interfiere con la dinámica del Pro-Flex Pivot. Unity está diseñado para proporcionar una suspensión segura en combinación con la tecnología de Iceross Seal-In®, al tiempo que estabiliza las fluctuaciones de volumen y mantiene un ajuste cómodo del encaje durante todo el día.



Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral y Transtibial
Niveles de impacto:	Bajo a moderado
Peso máximo del usuario:	125 kg

Información del sistema Unity	
Vacío máximo:	23inHg (600mmHg)
Presión normal de funcionamiento:	-16-20 inHg
Peso añadido al sistema:	75 g con bomba, tubo y válvula de encaje

Información del pie	
Categoría:	1-7
Tamaños:	22-30
Peso del pie: (Tamaño 27, cat. 5)	920 g con funda cosmética
Altura de montaje: (Tamaño 27)	155 mm
Altura de talón:	10mm
Opciones de adaptador:	Pirámide macho



RESISTENTE A  
CONDICIONES  
CLIMÁTICAS  
ADVERSAS



PIE ANATÓMICO



DEDO  
SEPARADO  
PARA  
SANDALIAS



TECNOLOGÍA  
DE PIVOTE



QUILLA  
SEPARADA



POTENCIA DE  
TOBILLO


\* Heitzmann DW, Salami F, De Asha AR, Block J, Putz C, Wolf SI, Alimusaj M. Benefits of an increased prosthetic ankle range of motion for individuals OR users with transfemoral and transtibial amputation walking with a new prosthetic foot. Gait & posture. 2018 Jul 1;64:174-80.



## PRO-FL EX® PIVOT

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


PIE COMPLETO

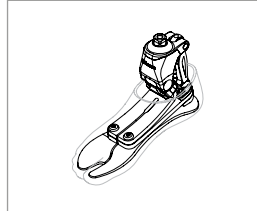

Seleccione el kit de pie con Unity adecuado cuando realice el pedido y el sistema Unity con la bomba correspondiente se entregará preinstalado en el pie. Para mayor comodidad y compatibilidad del sistema, se recomiendan los kits de válvula Unity para la conexión del encaje.

Puede consultar los cuadros de selección de liners y los números de artículos en las páginas correspondientes de Iceross Seal-In.

PIE COMPLETO CON UNITY

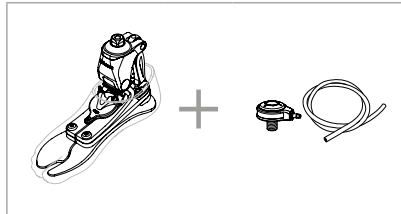


### CUADRO DE SELECCIÓN DE CATEGORÍA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
<b>Nivel de impacto bajo</b>								
Tamaños 22	1	1	2	3	4	N/D	N/D	N/D
Tamaños 23-24	1	1	2	3	4	5	N/D	N/D
Tamaños 25-26	2	2	2	3	4	5	6	7
Tamaños 27-28	N/D	N/D	N/D	3	4	5	6	7
Tamaños 29-30	N/D	N/D	N/D	N/D	4	5	6	7
<b>Nivel de impacto moderado</b>								
Tamaños 22	1	2	3	4	N/D	N/D	N/D	N/D
Tamaños 23-24	1	2	3	4	5	N/D	N/D	N/D
Tamaños 25-26	2	2	3	4	5	6	7	N/D
Tamaños 27-28	N/D	N/D	3	4	5	6	7	N/D
Tamaños 29-30	N/D	N/D	N/D	4	5	6	7	N/D

# PRO-FLEX® PIVOT



## DIMENSIONES

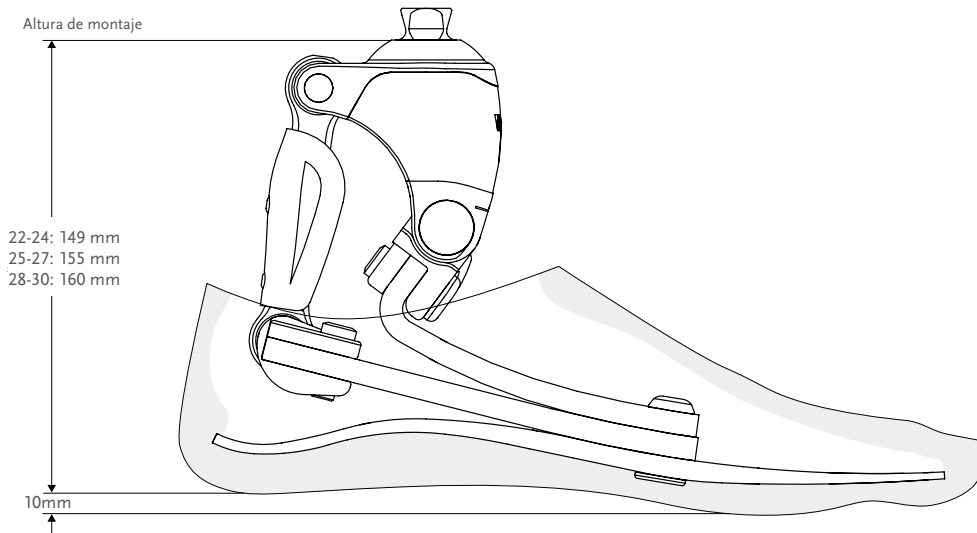

\*Nota: El Pro-Flex Pivot con Unity tiene la misma altura de montaje que el Pro-Flex Pivot solo.

## KITS

### PRO-FLEX PIVOT CON PIRÁMIDE MACHO Y FUNDA COSMÉTICA

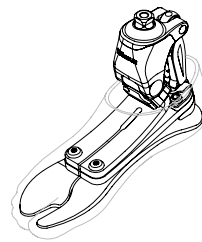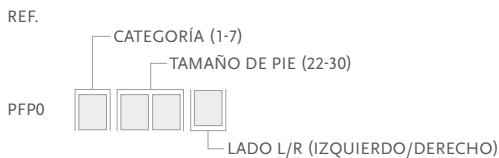

Incluye:



- Módulo de pie pirámide macho
- Funda cosmética extraíble\* con calcetín Spectra negro

\*Si desea el Pro-Flex Pivot con funda cosmética marrón, añade "BR" al número de referencia.

# PRO-FLEX® PIVOT

## KITS DE PIE CON UNITY

### PRO-FLEX CON PIRÁMIDE MACHO, BOMBA UNITY Y FUNDA COSMÉTICA

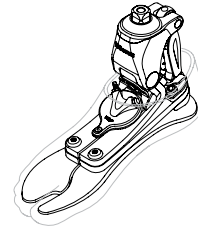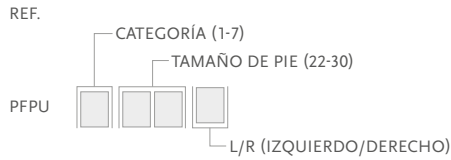

Incluye:

- Módulo de pie pirámide macho
- Funda cosmética extraíble\* con calcetín Spectra negro
- Bomba Unity




\*Si desea el Pro-Flex Pivot con funda cosmética marrón, añada "BR" al número de referencia.

Nota: Unity se entrega preinstalado en el pie. Los kits de tubo y válvula todavía tendrán que pedirse por separado.

## UNITY

### KITS UNITY

Foto	Ref.	Descripción	Kits de pie compatibles
1	UPF0001	Bomba Unity PFP, tamaño 22-30	Pro-Flex Pivot, tamaño 22-30
2	UTT0001	Kit de válvula Unity TT	Todos
3	UTF0001	Kit de válvula Unity TF	Todos
4	UTF0006	Kit de tubo TF Unity	Todos
5	L-5446XX	Kit de Icelock 544	Todos
6	UTT1103	Paquete de filtro de aire de válvula Unity (10 uds.)	Todos

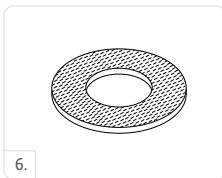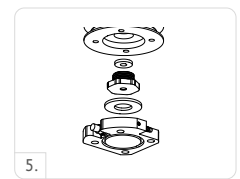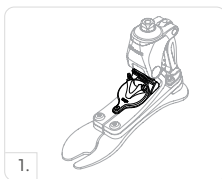

## PIEZAS DE REPUESTO DE UNITY

Ref.	Descripción
UPF00011	Piezas de Unity PFP, 22-30

Incluye:

- Tubo Unity
- Abrazadera de tubo Unity
- Válvulas de retención
- Puerto de salida de Unity
- Puerto de entrada de Unity
- Loctite 243


Nota: El tiempo de garantía de la bomba Unity y de la membrana se ha equiparado con el tiempo de garantía del pie. Para no perder la garantía, no cambie la membrana por favor.

# PRO-FLEX® PIVOT

## ACABADO COSMÉTICO

### KIT DE FUNDA COSMÉTICA, BEIGE O MARRÓN\*

REF.

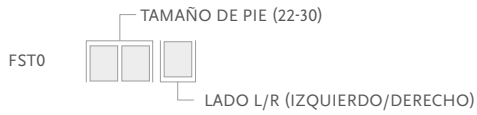

Incluye:

- Funda cosmética
- Fijación para funda cosmética
- Calcetín Spectra negro

\*Nota: Si desea una funda marrón, añada "BR" al final del número de referencia.

### CALCETINES SPECTRA

Se utilizan para proteger el modulo de pie y eliminar los ruidos provocados al contacto con la funda cosmética.

Ref.	Descripción	Tamaño	Color
FCX63022	1 x calcetín pequeño FF	22-25	Negro
FCX63025	1 x calcetín grande FF	26-30	Negro
FCX63022	15 x calcetín pequeño FF	22-25	Negro
FCX63026	15 x calcetín grande FF	26-30	Negro

