

## PRO-FLEX® ST

UNITY  
COMPATIBLE



Pro-Flex ST è stato progettato per utenti con un livello di attività da basso ad alto, che desiderano dinamicità e sicurezza per affrontare le attività della vita quotidiana. Questo piede protesico versatile a forma di J, offre un rollover fluido ed un controllato rilascio energetico (push off). Pro-Flex ST facilita la deambulazione su ogni tipologia di terreno grazie al suo design multifunzionale, che combina dinamicità e adattabilità al suolo.

Come tutti i piedi della famiglia Pro-Flex, presenta il nostro esclusivo design a tripla lamina con push off efficace e lamina sezionata anatomicamente (alluce separato). Pro-Flex ST contribuisce ad una progressione più fluida e naturale dall'appoggio del tallone allo stacco dell'avampiede, rispetto ad un piede in fibra di carbonio convenzionale.

Ha un profilo elegante, viene fornito con una cover anatomica esteticamente gradevole ed un giunto piramidale integrato. Pro-Flex ST è classificato come waterproof, a indicare una totale resistenza sia al cloro sia all'immersione in acqua salata.



### Informazioni utente

Livello di amputazione:	Transtibiale e Transfemorale
Livello di attività:	Basso ad Alto
Limite peso:	166kg



PROGRESSIONE  
TIBIALE ATTIVA



LAMINA DIVISA



COSMETICO  
INFRADITO



PIEDE  
ANATOMICO



RESISTENTE AL  
AGUA

### Informazioni piede

Categorie:	1-9
Misure:	22-30
Peso del piede: (Misura 27, cat 5)	756g con giunto piramidale maschio e cover piede
Altezza: (Misura 27)	160mm con giunto piramidale maschio e cover piede
Altezza tallone:	10mm
Opzioni adattatori:	Giunto piramidale maschio

### Informazioni sul sistema Unity

Depressione massima:	24inHg (610mmHg)
Normale pressione di esercizio:	-15inHg a -23inHg
Peso aggiuntivo al sistema:	145g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo

## PRO-FLEX® ST

### INFORMAZIONI ORDINE


#### PER UN PIEDE COMPLETO



Si prega di selezionare al momento dell'ordine il kit piede con Unity appropriato, l'unità verrà premontata sul piede. Per maggior comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per la guida alla scelta della categoria della cuffia ed i codici di prodotto si prega di consultare la pagina relativa ad Iceross Seal-In.

#### PER UN PIEDE COMPLETO CON UNITY

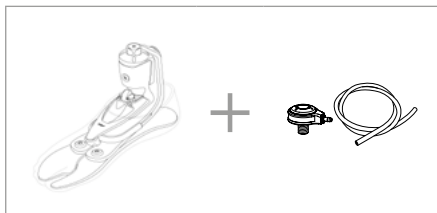


### GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
<b>Livello di attività basso</b>										
Misure 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misure 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
<b>Livello di attività moderato</b>										
Misure 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Misure 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
<b>Livello di attività alto</b>										
Misure 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Misure 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A


## PRO-FLEX® ST

### INGOMBRO

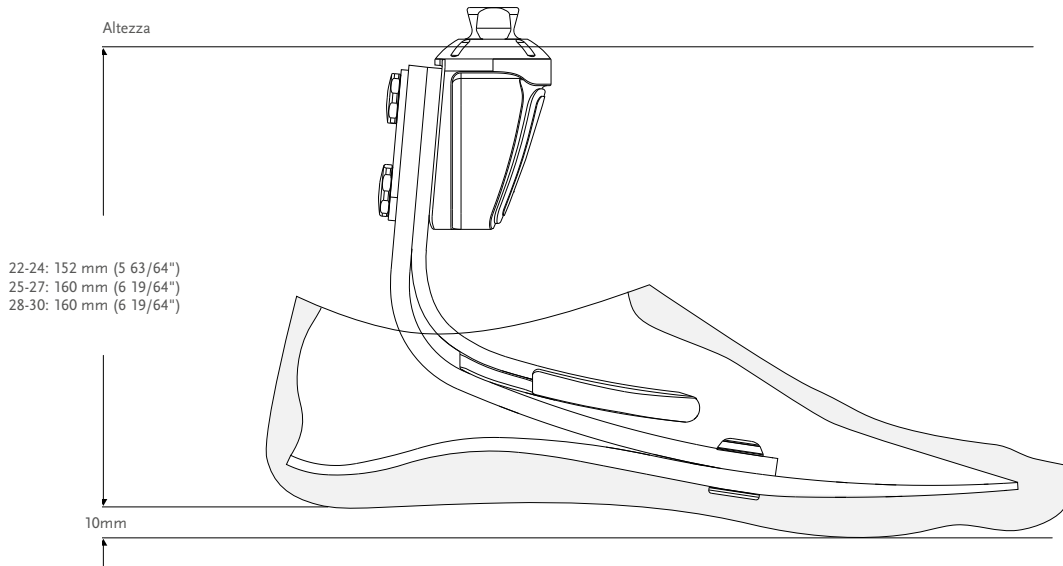

### KITS

#### PRO-FLEX ST CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO

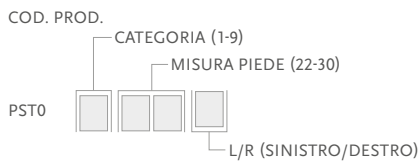

Include:


- Modulo piede
- Cover piede\* con calza Spectra nera

\*Per Pro-Flex ST con cover piede marrone aggiungere "BR" al codice prodotto



#### KIT PIEDI CON UNITY

#### PRO-FLEX ST CON POMPA UNITY CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO

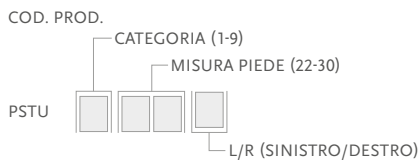

Include:

- Modulo piede con giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera\*
- Pompa Unity

\*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

\*Nota: Unity verrà premontato sul piede se ordinato con il codice PLPU. I kit valvola devono essere ordinati separatamente.






## PRO-FLEX® ST

### UNITY

#### KITS UNITY

Foto	Cod. prod.	Descrizione	Kit piedi per Unity
1	UPT0124	Modulo pompa Unity PST 22-24 / Cat 1.	Pro-Flex ST misura 22-24 / Cat. 1
1	UPT0024	Modulo pompa Unity PST 22-24 / Cat 2-6	Pro-Flex ST misura 22-24 / Cat. 2-6
1	UPT0427	Modulo pompa Unity PST 25-27 / Cat 1-4	Pro-Flex ST misura 25-27 / Cat. 1-4
1	UPT0027	Modulo pompa Unity PST 25-27 / Cat 5-9	Pro-Flex ST misure 25-27 / Cat 5-9
1	UPT0030	Modulo pompa Unity PST 28-30	Pro-Flex ST misure 28-30
2	UTT0001	Kit valvola Unity TT	Tutti
3	UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti
4	UTF0006	Kit tubo Unity TF	Tutti
5	L-5446XX	Kit Icelock 544	Tutti
6	UTT1103	Confezione di filtri dell'aria della valvola Unity (10 p.)	Tutti

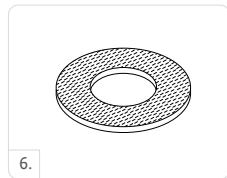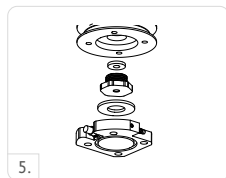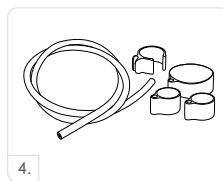

### COMPONENTI DI RICAMBIO

Cod. prod.	Descrizione
UPT00021	Componenti Unity PST

Include:

- Porta di uscita
- Porta d'ingresso
- Valvole di controllo
- Tubo Unity
- Morsetto per tubo Unity
- Loctite 243

## PRO-FLEX® ST

### RIVESTIMENTO COSMETICO

#### KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE\*

COD. PROD.



Include:

- Cover piede\*
- Piastra di collegamento
- Calza Spectra nera

\*Nota: Per ordinare il kit cover marrone, aggiunge "BR" alla fine del codice prodotto.



#### CALZA FLEX-FOOT SPECTRA NERA

Utilizzato per coprire il modulo piede in carbonio, per proteggerlo ed eliminare il rumore tra modulo piede e cover piede.

Cod. prod.	Descrizione	Misura	Colore
FCX63022	FF Calza Piccola 1 pezzo	22-25	Nera
FCX63025	FF Calza Grande 1 pezzo	26-30	Nera
FCX63022-15	FF Calze Piccole 15 pezzi	22-25	Nera
FCX63026-15	FF Calze Grandi 15 pezzi	26-30	Nera

