

PRO-FLEX® XC

UNITY
COMPATIBLE



Pro-Flex XC è stato sviluppato per supportare gli utenti relativamente attivi, a cui piace fare trekking e jogging, così come passeggiate su zone piane.

La leggera cover piede anatomica include una suola antiscivolo ed un alluce separato per un'ampia gamma di scarpe, incluse le infradito.

Pro-Flex XC è classificato Waterproof, il che significa che è completamente resistente sia al cloro che all'immersione in acqua salata.

Össur consiglia di utilizzare Pro-Flex XC in combinazione con il sistema di sospensione a vuoto attivo senza ginocchiera Unity®. Questo aggiunge solo un peso minimo, non altera l'altezza strutturale e non interferisce con la dinamicità di Pro-Flex XC.

Unity è progettato per fornire una sospensione sicura in combinazione con la tecnologia Icross Seal-In®, stabilizzando al contempo le fluttuazioni di volume e mantenendo una vestibilità dell'invasatura confortevole durante il giorno.



Informazioni utente

Livello di amputazione:	Transtibiale e Transfemorale
Livello di attività:	Basso ad Alto
Limite peso:	166kg



PROGRESSIONE
TIBIALE ATTIVA



LAMINA DIVISA



COSMETICO
INFRADITO



PIEDE
ANATOMICO



WATERPROOF

Informazioni piede

Categoria	1-9
Misure:	22-30
Peso del piede: (misura 27)	772g con cover piede e calza
Altezza: (misura 27)	155mm con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza tallone:	10mm
Opzioni adattatori:	Giunto piramidale maschio

Informazioni sul sistema Unity

Depressione massima:	24inHg (610mmHg)
Normale pressione di esercizio:	-15inHg a -23inHg
Peso aggiuntivo al sistema:	97g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo

PRO-FLEX® XC

INFORMAZIONI ORDINI


PER UN PIEDE COMPLETO



Si prega di selezionare al momento dell'ordine il kit piede con Unity appropriato, l'unità verrà premontata sul piede. Per maggior comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per le schede di selezione delle cuffie e per i codici prodotto, fare riferimento alle pagine di Icross Seal-In.

PER UN PIEDE COMPLETO CON UNITY

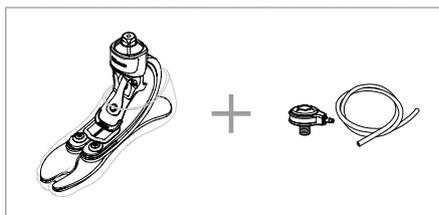


GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Livello di attività basso										
Misure 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misure 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Livello di attività moderato										
Misure 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Misure 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Livello di attività alto										
Misure 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Misure 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

PRO-FLEX® XC


INGOMBRO

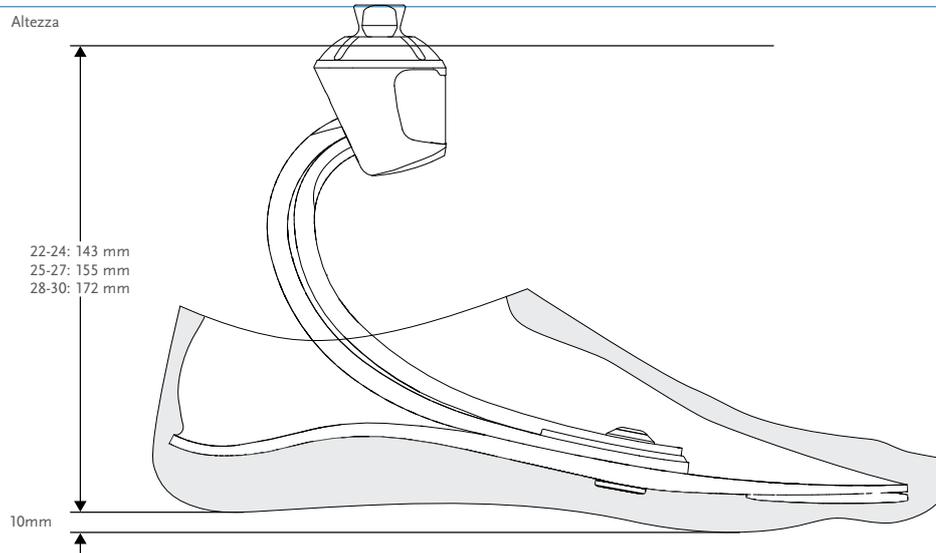

**Nota: Pro-Flex XC con Unity ha la stessa altezza.

KITS


PRO-FLEX XC CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO E KIT COVER PIEDE

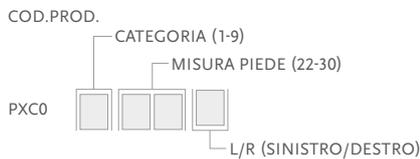

Include:


- Modulo piede
- Giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera

*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

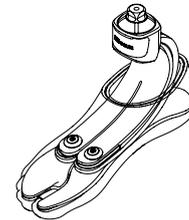

KIT PIEDI CON UNITY

PRO-FLEX XC CON POMPA UNITY E GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO E KIT COVER PIEDE

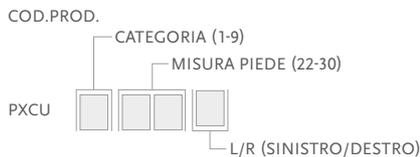


Include:

- Modulo piede con giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera*
- Pompa Unity

* Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere "BR" alla fine del codice prodotto.

*Nota: Unity verrà premontato sul piede se ordinato con il codice PXPU. I kit valvola devono essere ordinati separatamente.


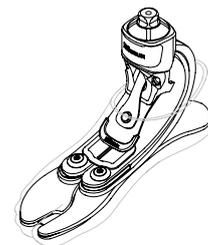


PRO-FLEX® XC

UNITY

KITS UNITY

Foto	Cod. prod.	Descrizione	Kit piede applicabile
1	UPC0024	Modulo pompa Unity PXC 22-24	Pro-Flex XC misura 22-24
1	UPC0027	Modulo pompa Unity PXC 25-27	Pro-Flex XC misura 25-27
1	UPC0030	Modulo pompa Unity PXC 28-30	Pro-Flex XC misura 28-30
2	UTT0001	Kit valvola Unity TT	Tutti
3	UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti
4	UTF0006	Kit tubo Unity TF	Tutti
5	L-544611	Kit Icelock 544	Tutti
6	UTT1103	Confezione di filtri dell'aria della valvola Unity (10 p.)	Tutti

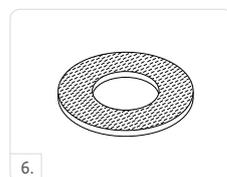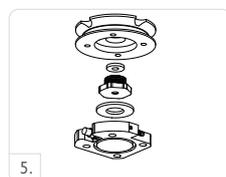

COMPONENTI DI RICAMBIO

Cod. prod.	Descrizione
UPC00021	Componenti UNITY PXC

Include:

- Porta di uscita
- Porta d'ingresso
- Valvole di controllo
- Tubo Unity
- Morsetto per tubo Unity
- Loctite 243

PRO-FLEX® XC

RIVESTIMENTO COSMETICO

KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*

COD.PROD.



Include:

- Cover piede
- Piastra di collegamento
- Calza Spectra nera

*Per ordinare il kit cover marrone, aggiungere "BR" alla fine del codice prodotto.

CALZA FLEX-FOOT SPECTRA NERA

Utilizzato per coprire il modulo piede in carbonio, per proteggerlo ed eliminare il rumore tra modulo piede e cover piede.

Cod. prod.	Descrizione	Misura
FCX63022	Calza Flex-Foot Spectra nera Small	22-25
FCX63025	Calza Flex-Foot Spectra nera Large	26-30
FCX63022-15	Calza Flex-Foot Spectra nera Small 15 calze	22-25
FCX63026-15	Calza Flex-Foot Spectra nera Large 15 calze	26-30

