

PRO-FLEX® XC TORSION



Pro-Flex XC Torsion är anpassad för aktiva användare som både gillar att vandra och jogga samt promenera på plan mark.

Pro-Flex XC Torsion kombinerar Pro-Flex XC-funktionerna för energiåtergivning och jämn gång med värdefull stötdämpning och rotationsförmåga. Fotbladet har en effektiv fullängdstå och ett bredare fotblad än vanligt.

Foten är lämplig för aktiva användare som vill använda samma enkla, lätta fot i vardagen som vid aktiviteter med högre effekt.

Mindre belastning och mer dynamik ger bättre komfort för en rad olika aktiviteter. Den lätta, anatomiska fotkosmetiken har en stabil greppsula för barfotastabilitet på våta eller hala ytor och en sandalanpassad tå för en rad olika skotyper, inklusive flipflops.

Unity-kompatibel. Össur rekommenderar att Pro-Flex XC Torsion används tillsammans med Unity för att skapa en aktiv vakuumsuspension utan sleeve. Unity ökar protesens vikt minimalt och påverkar varken bygghöjd eller protesfotens mekaniska egenskaper.

Unity är designat för att användas med Seal-In-teknologi och ger god förankring genom att stabilisera och kontrollera volymen utan sleeve.

UNITY
COMPATIBLE



Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoralt och transtibial
Impact:	Låg till hög
Max. patientvikt:	147 kg



ACTIVE TIBIAL PROGRESSION



VERTICAL SHOCK PYLON



ROTATION



SPLIT TOE



SANDAL TOE



WEATHERPROOF



ANATOMICAL FOOT


Produktinformation	
Kategori:	1-8
Storlek:	22-30
Vikt inkl. pyramid och kosmetik (stl. 27, kat. 5):	1035 g
Bygghöjd inkl. pyramid och kosmetik (stl. 27):	222 mm
Hälhöjd:	10mm (3/8")
Adapter:	Hanpyramid
Garanti:	36 mån (kosmetiken 6 mån)

Unity systeminformation	
Max. vakuum:	24inHg (610 mmHg)
Normalt arbetsstryck:	-15inHg till -23inHg
Ökad systemvikt:	91 g (Unity pumpmodulmodul och hylsventilsats)

PRO-FLEX® XC TORSION

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG


FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV PRO-FLEX XC TORSION

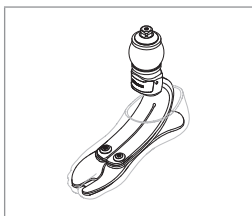

Välj lämplig Unity pumpmodul (beställs efter fotstorlek) och foten levereras med Unity förmonterad. För att ansluta systemet till en protesylsa rekommenderas Unity hylsventilsats.

För val av lämplig liner, se katalogsidorna för Iceross Seal-In.

FÖR KOMPLETT BESTÄLLNING AV PRO-FLEX XC TORSION

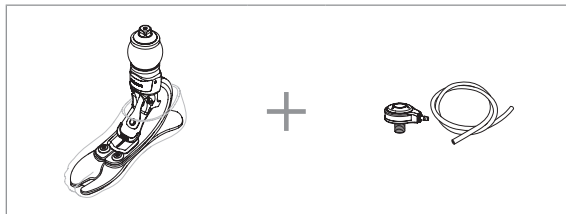


VAL AV KATEGORI

Vikt, kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Impact: Låg									
Stl. 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A
Stl. 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Stl. 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8
Impact: Medel									
Stl. 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Stl. 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	N/A
Stl. 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	N/A
Impact: Hög									
Stl. 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Stl. 25-27	2	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A
Stl. 28-30	3	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A

PRO-FLEX® XC TORSION

BYGGHÖJD

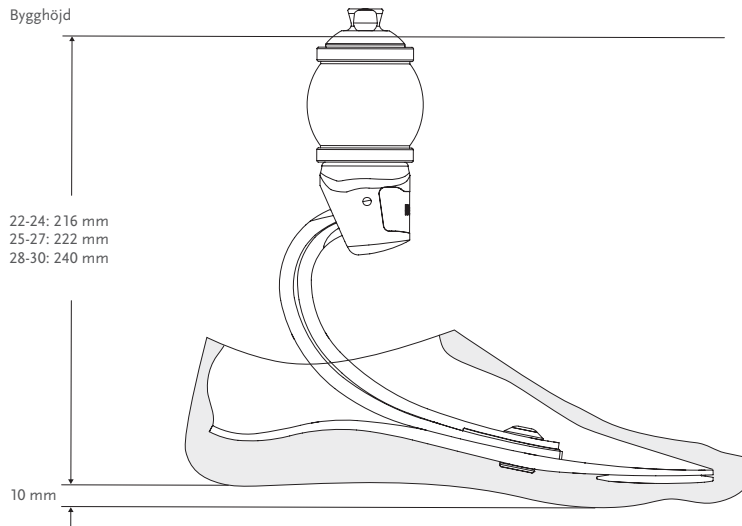

*Obs: Pro-Flex XC Torsion Unity har samma bygghöjd som Pro-Flex XC Torsion.


KIT

PRO-FLEX XC TORSION INKL. HANPYRAMID OCH FOTKOSMETIK



- Innehåller:
- Fotmodul
 - Borttagbar fotkosmetik* med svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

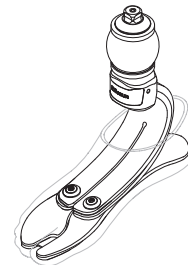

KIT – UNITY


PRO-FLEX XC TORSION UNITY INKL. HANPYRAMID OCH FOTKOSMETIK



- Innehåller:
- Fotmodul
 - Unity pumpmodul
 - Borttagbar fotkosmetik* med svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

Obs! Protesfoten levereras med Unity förmonterad. Unity hylsventil måste beställas separat.

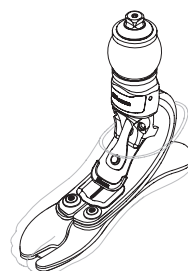



PRO-FLEX® XC TORSION

UNITY

UNITY KIT

Bild	Art.nr.	Beskrivning	Passar för:
1	UPC0024	PXC Unity pumpmodul S22-24	Pro-flex XC/ XC Torsion 22-24
1	UPC0027	PXC Unity pumpmodul S25-27	Pro-flex XC/ XC Torsion 25-27
1	UPC0030	PXC Unity pumpmodul S28-30	Pro-flex XC/ XC Torsion 28-30
2	UTT0001	Unity TT Hylsventilsats	Alla
3	UTF0001	Unity TF Hylsventilsats	Alla
4	UTF0006	Unity TF Slangsats	Alla
5	L-544611	Icelock 544 för Unity*	Alla
6	UTT1103	Unity Valve Air Filter Pack (10 st)	Alla

*inkl. inlamineringsadapter L-544400. För mer information om Icelock 544, se "Icelock 544"

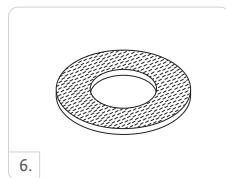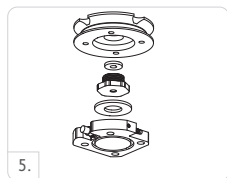

UNITY RESERVDLAR

Art.nr.	Beskrivning
UPC00021	Unity PXC-komponenter. Passar alla storlekar.

Innehåller:

- Utloppsport
- Inloppsport
- Kontrollventiler
- Unity slang
- Unity slangklämma
- Loctite 243




PRO-FLEX® XC TORSION

KOSMETIK

FOTKOSMETIK, BEIGE ELLER BRUN*

ART.NR.

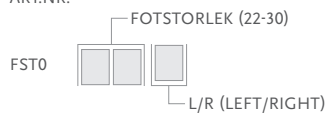

Innehåller:

- Fotkosmetik*
- Fästplatta / ring
- Svart Spectra Sock

*För brun fotkosmetik, lägg till "BR" efter artikelnumret.

FLEX-FOOT SOCK

Flex-Foot Sock dras över fotmodulen innan fotkosmetiken monteras för att skydda fotkosmetiken och för att undvika oljud. Strumpan skall sitta löst vid hälen och knyts fast med snöre proximalt.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Färg
FCX63022	FF Sock Small 1 stk	22-25	Svart
FCX63025	FF Sock Large 1 stk	26-30	Svart
FCX63022-15	FF Sock Small 15 stk	22-25	Svart
FCX63026-15	FF Sock Large 15 stk	26-30	Svart

