

NAVII®

UNITY
COMPATIBLE

INTRODUCTION

Navii est un genou contrôlé par microprocesseur durable et étanche conçu pour fonctionner dans n'importe quel environnement. L'actuateur puissant de Navii fournit une assistance dans la descente des rampes et d'escaliers. Que ce soit pour marcher, se tenir debout ou descendre, Navii offre sécurité et confort sur tous les types de terrains. La phase pendulaire fluide favorise la dynamique naturelle de la marche et la liberté de mouvement. Les 5 options de coque de protection colorées, inspirées de la nature, sont interchangeables grâce à un système à clipser rapide pour s'adapter à n'importe quel trajet, tenue, occasion ou humeur du jour. Avec son interface intuitive, l'application Össur Logic sert de centre de contrôle du genou Navii, permettant de personnaliser les réglages pour s'adapter à diverses activités tout en suivant les progrès. Sept exercices d'entraînement fonctionnel offrent un feedback en temps réel. L'entraînement fonctionnel peut être utilisé aussi bien en clinique qu'à domicile. Pour une expérience fluide, l'assistant d'installation est disponible pour guider tout au long du processus d'adaptation, minimisant le besoin de modifications manuelles grâce à un puissant système de réglage automatique. Le verrou mécanique à position variable peut être verrouillé sur trois positions et peut être enclenché en position assise, offrant ainsi un genou solidement verrouillé lorsque vous êtes debout pendant de longues périodes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Actuateur puissant avec technologie de contrôle innovante et dynamique de phase pendulaire fluide.
- Conception étanche (IP68, eau chlorée, eau salée, sable).
- Coques de protection amovibles disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
- Verrou mécanique à position variable verrouillable à 0°, 10° et 20°
- Centre de contrôle de l'application Össur Logic compatible avec tous les appareils bioniques Össur.
- Adaptation et installation faciles grâce à l'assistant d'installation et au réglage automatique puissant.
- Exercices d'entraînement fonctionnel étape par étape pour l'entraînement en clinique et à domicile par l'intermédiaire de l'application Össur Logic.
- Suivi des progrès grâce à des rapports d'activité imprimables.
- Fonctionnalités de haute activité (montée pas-à-pas, reconnaissance automatique du mode vélo, transition en douceur vers la course).



RECOMMANDÉ AVEC



Iceross Seal-In® X TF



Pro-Flex® Terra



Proprio Foot®



Pro-Flex® LP



Pro-Flex® XC

NAVII®




Informations utilisateur		
Niveau d'amputation :	Fémoral, désarticulation de genou, désarticulation de hanche	
Ostéo-intégration :	Compatible	
Bilatérale :	Compatible	
Niveau d'activité :	Faible à normal	Elevé
Limite de poids :	136 kg	110 kg


Informations produit	
Poids du genou :	1.8 kg sans la coque de protection 2.0 kg avec la coque de protection
Hauteur de construction :	236 mm
Flexion maximale du genou :	-2 à 120°
Waterproof :	IP68, eau salée, eau chlorée, sable, savon

ENCOMBREMENT

DIMENSIONS SANS LA COQUE DE PROTECTION

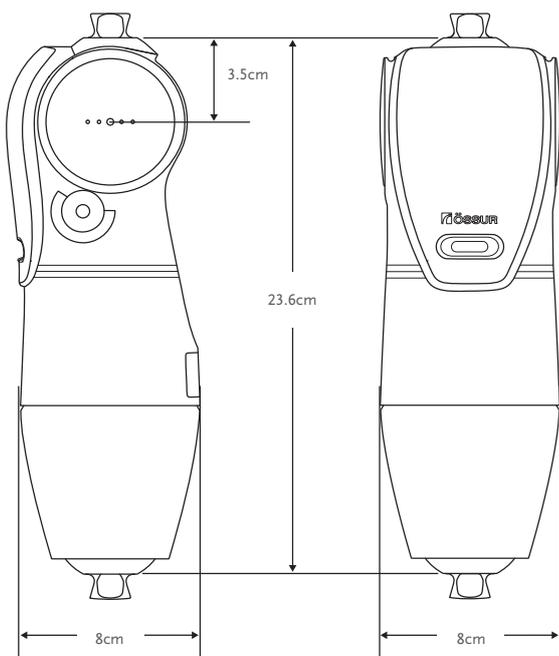

DIMENSIONS AVEC LA COQUE DE PROTECTION

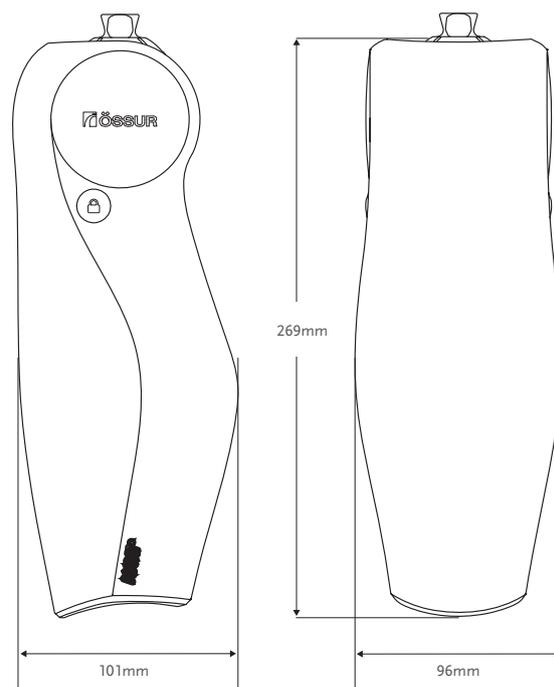

NAVII®

KITS

KIT NAVII

Réf.	Désignation
NAV01FR6	Navii (Garantie 6 ans incluse)

Comprend :

- Navii
- Coque de protection standard noire
- Chargeur
- Instructions d'utilisation



RÉVISIONS

Réf.	Désignation
NAV01SC20	Navii Révision 20 mois
NAV01SC40	Navii Révision 40 mois

Les services de révision peuvent être achetés séparément.

KIT NAVII AVEC ADAPTATEUR FILETÉ

Le kit Navii avec adaptateur fileté est la solution pour une amputation avec moignon long ou désarticulation de genou.

Pour obtenir un kit Navii avec adaptateur fileté, ajouter la pyramide femelle pour désarticulation de genou à votre commande.

Réf.	Désignation	Hauteur	Poids
A-145310	Pyramide femelle pour désarticulation de genou ou moignon long	9 mm	33 g



KIT NAVII AVEC ADAPTATEUR DE TRANSLATION

Le kit Navii avec adaptateur de translation est la solution pour effectuer des ajustements de flexion de l'emboîture dépassant les limites des vis de réglage.

Pour obtenir un kit Navii avec adaptateur de translation, ajouter l'adaptateur double mâle/femelle avec 8 mm de déport et 10° de flexion.

Réf.	Désignation	Matériau	Hauteur	Hauteur de construction	Poids
A-554700	Adaptateur Double Mâle/Femelle	Inox	40 mm	24 mm	153 g



NAVII®

PIÈCES DÉTACHÉES

COQUES DE PROTECTION NAVII

Réf.	Désignation
NAV01PC01S-BLK	Coque de protection Navii, Standard, Noire
NAV01PC01S-GRY	Coque de protection Navii, Standard, Grise
NAV01PC01S-BLU	Coque de protection Navii, Standard, Bleue
NAV01PC01S-GRN	Coque de protection Navii, Standard, Verte
NAV01PC01S-RED	Coque de protection Navii, Standard, Rouge

Les coques de protection sont garanties 6 mois.



UNITY

KIT UNITY

Réf.	Désignation	Kits de pied disponibles
UTF0001	Kit de valve Unity TF	Tous



COMPOSANTS

CHARGEUR DOUBLE

Le Chargeur Double est un kit optionnel qui permet la charge simultanée de Navii et du pied Proprio Foot.

Réf.	Désignation
CME10110	Kit d'alimentation chargeur et câble



CHARGEUR SIMPLE

Réf.	Désignation
CME50110	Kit d'alimentation chargeur

