

 **ÖSSUR** 奥索®
生活无局限

Navii®

领航™ 仿生磁控膝关节

纵享海阔天空



用户体验的变革

为用户提供出色的假肢解决方案以增强行动能力并提升生活品质，这是每一位专业假肢技师的目标。领航仿生磁控膝关节，使用假肢科技中的突破性创新技术，能让用户体验更强的稳定性，更大的自由度，以及更高水平的赋能——全部都来源于这款出色的膝关节。



突破性的稳定性和自信

领航仿生磁控膝关节可以让每一步都充满自信。领航仿生磁控膝关节提供更好的连贯性和可预测性，尤其是在下楼梯或坡道等具有挑战性的活动中。

无与伦比的自由和多样性

领航仿生磁控膝关节先进的防水设计让传统受限的假肢用户不再担忧防水问题。如今，用户能够完全投入到生活中，可以在海水中或泳池中游泳，享受在沙滩上的一天，也可以淋浴。领航仿生磁控膝关节让用户的生活突破局限，真正自由地体验他们所热爱的活动。



进阶的训练为你赋能

领航仿生磁控膝关节不仅仅是一个假肢膝关节，它更是一款赋能的工具。通过拓展的功能性训练，可以激励用户挖掘假肢的全部潜能。用户通过和假肢的积极交互，以掌控自己的行动能力，让每一步都走地更好、更满意。



为你提供流畅体验

奥索深刻清楚为技师和用户 提供流畅体验的重要性。从订购到保养领航仿生磁控膝关节，奥索在这个过程中的每一个环节都会帮助您，为您提供专业的临床支持，全面的训练计划，及时的客户服务团队。我们致力于为您提供所需的工具和资源，从而为用户提供尽可能优质的服务。



发现领航仿生磁控膝关节的独特之处

强劲的驱动器

领航仿生磁控膝关节强劲的驱动器具备卓越的支撑，尤其在屈曲角度很大的活动中。先进的屈曲阻尼控制为用户提供更好的连贯性和可预见性，尤其是在下楼梯

和坡道时。增强的稳定性提升了用户的安全感，保证了可靠的行动体验。



强劲的驱动器



防水设计



可拆卸保护罩&自然坐姿



手动锁位置可选择



Össur Logic应用程序康复训练
和高级设置



进阶的步态报告



更优的用户界面



高活动级别功能

防水设计

领航仿生磁控膝关节具有强大的防水结构设计(防水等级:IP68),适合想要体验水上活动的用户。无论是在泳池中度假,去海滩旅游,或者在沙滩上漫步,它都可以胜任。领航仿生磁控膝关节可以偶尔浸入淡水、盐水和氯化水中,只需在浸泡后使用淡水清洗即可保持膝关节在最佳状态。

可拆卸保护罩&自然坐姿

领航仿生磁控膝关节具备可拆卸的保护罩,并有定制化选项,将功能性和美学融为一体。有三种长度可选,标准、中号、长号。领航仿生磁控膝关节适用于不同的美学偏好,涵盖不同颜色和饰面。更符合仿生解剖学的结构和高质量的饰面呈现自然的外观和穿戴体验,坐姿状态下膝关节自然屈曲,没有多余的伸展,确保舒适的体验。领航仿生磁控膝关节是一款设计人性化,以用户为中心的假肢膝关节,不仅表现出色,也有优秀的外观和舒适的穿戴体验。

手动锁位置可选择

领航仿生磁控膝关节搭配创新的可选择位置的手动锁,以保证用户的安全和舒适。可在20°,10°锁定时屈曲站立,在0°锁定时完全伸展,为用户提供舒适稳定的支撑。

Össur Logic应用程序的康复训练和高级设置

领航仿生磁控膝关节配备Össur Logic应用程序的康复训练,包含八个功能性训练,以激励用户提升对假肢的使用。设置向导简化了装配的过程,强大的自适应功能减少了手动调整的需要,对于技师和用户来说都更加简便。行走,坐姿以及下坡都可按照用户的偏好和能力轻松定制,为用户提供更个性化的体验。

进阶的步态报告


领航仿生磁控膝关节含有进阶的步态报告功能,随时跟踪用户的进步,鼓励用户持续性的穿戴。通过自我监测,用户能够保持动力,并且看到自己付出的成果,从而形成正向反馈的良性循环,进一步提升自己的步态。

简便的用户界面


领航仿生磁控膝关节改善了用户界面,确保假肢技师和用户的轻松使用。统一的界面,和其他奥索产品的联动,提供清晰的运行状态和报错信息,通过Össur Logic应用程序的自适应功能以简化装配过程。另外,简便强大的充电系统和保护罩完美适配,增强了功能性和美观。

高活动级别功能

对于在日常生活中较为活跃的用户,领航仿生磁控膝关节有高活动级别功能以适应各种活动,包括交替上楼梯,自动识别骑行模式,跑步模式的无缝切换。这些功能使用户可以保持活跃的生活方式,参与周末锻炼,享受各种健身活动,让生活没有局限。

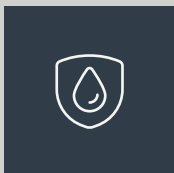

五种外观 尽显冰岛本色

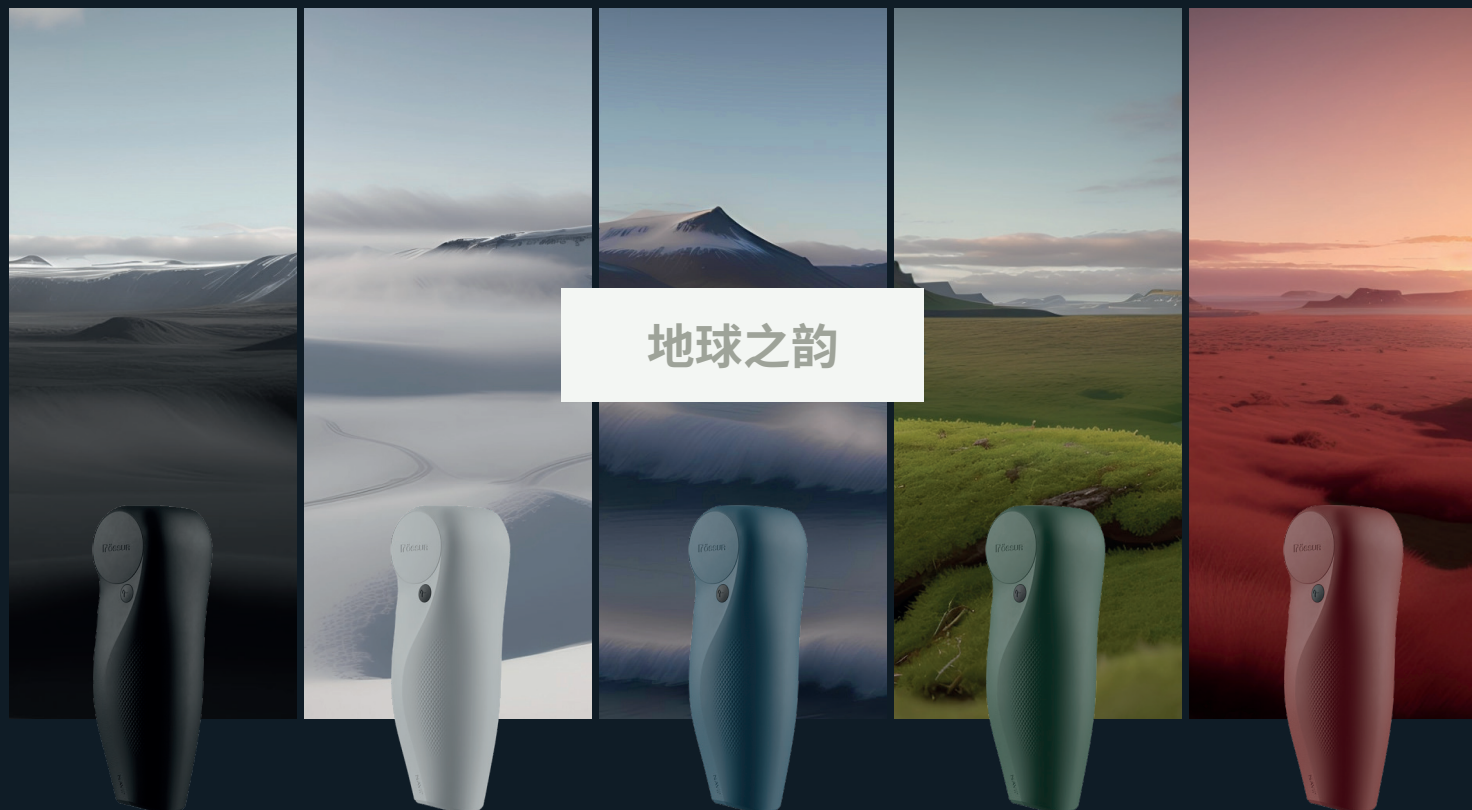

领航仿生磁控膝关节保护罩 来源于冰岛的自然之美

在奥索，冰岛的自然遗产融入了我们所创造的所有产品中。奥索总部设立在雷克雅未克，我们从冰岛迷人的自然风光和丰富的自然色系中获取灵感，制作性能出色且能够引发情感共鸣的产品。全新的领航仿生磁控膝关节保护罩，作为地球之韵系列的一部分，致敬这片美丽的土地，与冰岛宁静的自然、原始的风光和生动的色调相呼应。

冰岛因原始的美感而闻名，强大的自然之力塑造了震撼人心的风光，这片引人入胜的环境不仅吸引眼球，也象征纯洁和品质。将这些元素融入到领航仿生磁控膝关节保护罩中，我们希望能和产品缔造深厚的情感联结，让每一个选择都饱含美学魅力和卓越品质。

探索地球之韵



玛瑙黑

玛瑙黑保护罩的灵感来源于冰岛黑沙滩的气质和力量,呈现出永恒的深黑色调,适应任何风格。这一款多样化的保护罩适用于任何服装、场合、或氛围,兼具实用和美观。搭配磁吸搭扣,可以轻松快速地更换玛瑙黑保护罩,让每一趟旅途都优雅轻松,自在适应。3种长度可供选择。



波涛蓝

灵感来自于广阔的冰岛天空和海洋,波涛蓝保护罩的蓝色调有一种静谧祥和的感觉。这个保护罩体现了宁静和开放的本质,很适合喜欢自然气质的用户。可替换的磁吸搭扣设计可以轻松实现定制化,达到无缝更换以适配各种服装和场合。



苔原绿

苔原绿保护罩来源于冰岛苔原的清爽宁静,呈现活泼的绿色,象征新生和成长。这个保护罩为假肢增添了一抹生机和朝气,适合喜爱亲近自然的用户。搭配简易的磁吸搭扣,苔原绿保护罩可以轻松更换,体现日常生活的变化本质。



熔岩红

熔岩红保护罩来源于冰岛熔岩的原石,强大的美感,象征着力量与地球的紧密联系。丰富的赭石色散发出自信和激情,让人联想到冰岛火山炽烈的地形。这一款大胆的熔岩红保护罩很适合彰显个性。搭配磁吸搭扣,可以快速更换,从而适应各种氛围和场合。



月光灰

这款颜色呼应了冰岛地形的简洁和宁静,月光灰保护罩呈现浅灰色,作为平衡的背景色,烘托其他色调,并增添一抹低调的气质。这一款通用的保护罩适配任何场合,无论是正式的活动或者日常的外出。得益于磁吸搭扣的结构,月光灰保护罩确保每一次的更换都方便快捷,以适配用户的需求。



领航仿生磁控膝关节 搭配普欧仿生智能脚

同步的膝关节和踝关节功能,拥有主动背屈和地形自适应的能力,为用户提供额外的安全性和稳定性。

领航仿生磁控膝关节 搭配暴风飞毛腿大地

奥索首个专为K3/K4用户定制的大腿解决方案,让用户享有积极的生活方式,达到最佳活力。

规格

无保护罩

结构高度	23.6 cm
膝关节中心到顶部高度	3.5 cm
宽度	8.0 cm
重量	1.8 kg
膝屈曲角度	-2 - 120°

含保护罩

宽度	8.7 cm
重量	2.0 kg

奥索(上海)商贸有限公司
上海市虹梅路1801号
宏业大厦 W16B栋2楼
OSSURCN.COM

电话: 021 6127 1700
传真: 021 6127 1799
热线电话: 400 710 5588
asia@ossur.com



ÖSSUR 奥索®
生活无局限